

Phonak Naída™ L ●

Informations sur le produit

Phonak Naída Lumity est un portefeuille de BTE complet pour les pertes auditives légères à profondes.

Bénéficiant de la technologie Phonak SmartSpeech™, les aides auditives Naída L représentent la solution idéale pour les patients qui ont besoin de solutions puissantes sur notre plateforme la plus avancée, Phonak Lumity.



Description des produits



Naída L-UP
L90/L70/L50




Naída L-PR
L90/L70/L50

Taille de la pile		675	batterie rechargeable intégrée
Bobine d'induction		•	
Compatibilité avec CROS L			•
Bluetooth®		•	•
Revêtement hydrophobe		•	•
Indice de protection		IP68 ¹	IP68 ¹
Dimensions	L x l x P	42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34 po)	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33 po)
	Poids	4,60 g / 0,162 oz	3,68 g / 0,130 oz
Durées de charge ²	0 % à 100 %		3 h
	0 % à 80 %		1,5 h
	30 min d'appareillage		10 min


		HE11	HE11 680	HE11 680	Tube fin 4.0
Niveau de sortie max. (dB SPL)	Coupleur 2 cm ³	141	134	130	129
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm ³	84	78	68	69
Bande passante (Hz)		< 100 - > 4 700	< 100 - > 4 700	< 100 - > 5 700	< 100 - > 7 100
Courant de fonctionnement (mA)		3,3	2,8		

Plage d'application

- Tube fin 4.0
- HE11 680

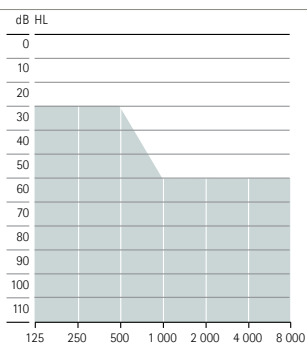

Perte auditive sévère à profonde,
toutes configurations
audiométriques

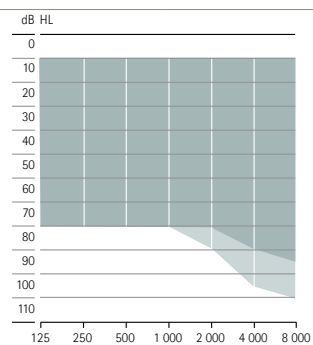

Pertes auditives légères à
moyennement sévères, toutes
configurations audiométriques

Couleurs des boîtiers



H0
Beige



P1
Dune de Sable



P3
Santal



P4
Noisette



P5
Champagne



P6
Gris Argenté



P7
Gris Carbone



P8
Velours Noir

¹ IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau douce et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI 60529.

² Le temps de charge réel dépend de l'autonomie restante de la batterie et peut être affecté par les conditions de température.

Niveaux de performances

AutoSense OS™ 5.0	Premium L90	Avancé L70	Standard L50
Parole dans le bruit intense	•		
Parole en voiture	•		
Situation réverbérante	•		
Musique	•	•	
Confort dans le bruit	•	•	•
Parole dans le bruit	•	•	•
Situation calme	•	•	•
Parole média + mic	•	•	•
Musique média + mic	•	•	•
Programmes supplémentaires			
Programmes supplémentaires max.	4	4	4
Situation réverbérante	•		
Parole dans le bruit intense	•	•	
Parole à 360°	•	•	
Parole dans le bruit	•	•	•
Situation calme	•	•	•
Confort dans le bruit	•	•	•
Musique	•	•	•
Téléphone acoustique	•	•	•
Programme personnalisé	•	•	•
Téléphone via Capteur-T ± mic ¹	•	•	•
Boucle publique ± mic ¹	•	•	•
Programmes de diffusion			
RogerDirect + mic	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + mic	•	•	•
Appel téléphonique + mic	•	•	•

Fonctions	Premium L90	Avancé L70	Standard L50
SpeechSensor	•		
Renforcement de la parole	•		
StereoZoom 2.0	•	•	
Suppression dynamique du bruit	•	•	
Directivité avec capteur de mouvements ²	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•
EchoBloc	•		
Contrôle tactile ²			
- Assistant Siri/Google	•	•	
- Mettre en pause / reprendre la diffusion	•	•	
- Accepter/terminer un appel téléphonique	•	•	
SoundRelax	•	•	
DuoPhone	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•
UltraZoom	•	•	•
Roger™ et paramètres de directivité	•	•	•
Booster large bande ¹	•	•	•
Fonctionnalités de santé ^{2,3}	•	•	•
WindBloc	•	•	•
Correction de sonie	•	•	•
Tinnitus Balance ²	•	•	•
Auto Acclimatation	•	•	•
Balance environnementale	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•
LarsenBloc	•	•	•
NoiseBloc	•	•	•
QuickSync	•	•	•
AOV	•	•	•
Canaux d'adaptation fine	20	20	16

Technologie SmartSpeech

¹ Disponible pour Phonak Naída L-UP uniquement
² Disponible pour Phonak Naída L-PR uniquement
³ Disponible avec myPhonak

Programmation

	Naída L-UP L90/L70/L50	Naída L-PR L90/L70/L50
Phonak Target	9.0 ou supérieur	9.0 ou supérieur
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•	•
NOAHlink	•	
HI-PRO, HI-PRO2	•	

Couplage acoustique

			Naída L-UP L90/L70/L50	Naída L-PR L90/L70/L50
Signal acoustique de sortie	Coude	Amorti (HE11 680), transparent	•	•
	Coude	Non amorti (HE11), transparent	•	
	Tube fin 4.0	Disponible en version gauche et droite, dans cinq longueurs différentes (00, 0, 1, 2 et 3)		•
Adaptation tube fin	Dôme	Dôme cap		•
		Dôme ouvert	Disponible en trois tailles (S, M, L)	•
		Dôme obturant	Disponible en trois tailles (S, M, L)	•
		Dôme puissant	Disponible en trois tailles (S, M, L)	•
	SlimTip	Acrylique		•
	Silicone		•	
Adaptation coude	Embout		•	•

Options de charge de Phonak Naída L-PR

Chargeur Phonak Combi BTE

Naída L-PR est dotée de toutes les fonctions Lumity que vous adorez, ainsi que de l'avantage d'être rechargeable. Les patients peuvent profiter d'une journée complète d'audition incluant la diffusion sans fil*.

* Durée de vie prévue de la batterie de 16 heures, dont 4 heures de diffusion BT classique et 4 heures de diffusion par TV Connector.



Versions Bluetooth® pour Phonak Naída L

Diffusion sans fil des appels directs/audio

Technologie sans fil Bluetooth 4.2 et la plupart des téléphones Bluetooth plus anciens

Gamme de communication sans fil

	Naída L-UP L90/L70/L50	Naída L-PR L90/L70/L50
Accessoires sans fil		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
Roger		
Microphones Roger	•	•
Applications		
myPhonak	•	•
myPhonak Junior	•	•

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.phonak.com/naida-lumity

Pour plus d'informations sur les microphones Roger, rendez-vous sur www.phonak.com/roger

Pour plus d'informations sur myPhonak et myPhonak Junior, rendez-vous sur www.phonak.com/apps

life is on*

Depuis 1947, Phonak s'engage pour préserver la qualité de vie en donnant accès à de nouveaux mondes acoustiques. Déjà à l'époque de notre fondation, notre entreprise était portée par une conviction formatrice : nous sommes convaincus que bien entendre est synonyme bien être, et que c'est donc essentiel pour vivre pleinement sa vie. De fait, le sens de l'ouïe est directement lié au bien-être social, émotionnel, cognitif et physique. Aujourd'hui comme à l'avenir, nous nous efforçons de proposer le portefeuille de solutions auditives innovantes le plus complet. Enfin, en collaboration avec nos audioprothésistes, nous continuons de mettre l'accent sur ce qui compte le plus : améliorer la compréhension vocale, changer la vie des gens et avoir un effet positif sur la société dans son ensemble. *la vie s'exprime

www.phonak.com



027-0699-04/V1.00/2023-06/NLG © 2023 Sonova AG Tous droits réservés