

# Phonak Sky™ L.

## Informations sur le produit

Phonak Sky Lumity est un portefeuille de BTE pédiatrique complet pour les pertes auditives légères à profondes.

Bénéficiant de la technologie Phonak SmartSpeech™ Technology, les aides auditives Sky L sont destinées aux patients pédiatriques qui souhaitent faire l'expérience de la compréhension vocale sur notre plateforme la plus avancée, Phonak Lumity.



# Description des produits



Sky L-PR  
L90 / L70 / L50




Sky L-UP  
L90 / L70 / L50


Taille de la pile		Batterie rechargeable intégrée		675
Témoins lumineux pédiatriques		•		•
Bobine d'induction		•		•
Compatibilité avec CROS L		•		•
Bluetooth® <sup>1</sup>		•		•
Revêtement hydrophobe		•		•
Indice de protection		IP68 <sup>2</sup>		IP68 <sup>2</sup>
Dimensions	L x l x P	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33 po)		42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34 po)
	Poids	3,68 g / 0,130 oz		4,60 g / 0,162 oz
Durées de charge <sup>3</sup>	0 % à 100 %	3 h		
	0 % à 80 %	1,5 h		
	30 min d'appareillage	10 min		
		HE11 680	Tube fin 4.0	HE11
Niveau de sortie max. (dB SPL)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	130	129	141
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	68	69	84
Bande passante (Hz)		< 100 - > 5 700	< 100 - > 7 100	< 100 - > 4 700
Courant de fonctionnement (mA)				3,3
				2,8

## Plages d'application

- Plage d'application DSL pédiatrique
- Plage d'application APD/NAL

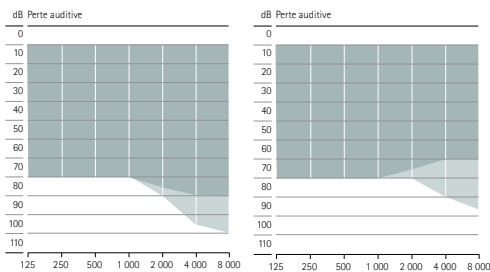

Pertes auditives légères à moyennement sévères, toutes configurations audiométriques

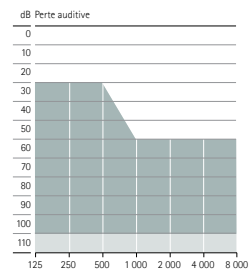

Pertes auditives sévères à profondes, toutes configurations audiométriques

<sup>1</sup> Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de telles marques par Sonova AG est faite sous licence.

<sup>2</sup> L'indice IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau fraîche et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI60529.

<sup>3</sup> Le temps de charge réel dépend de l'autonomie restante de la batterie et peut être affecté par les conditions de température.

# Niveaux de performances

	Premium L90	Avancé L70	Standard L50
<b>AutoSense Sky OS 5.0</b>			
Parole dans le bruit intense	•		
Parole en voiture	•		
Situation réverbérante	•		
Musique	•	•	
Confort dans le bruit	•	•	•
Parole dans le bruit	•	•	•
Situation calme	•	•	•
Parole média + micro	•	•	•
Musique média + micro	•	•	•
<b>Programmes supplémentaires</b>			
Programmes supplémentaires max.	4	4	4
Situation réverbérante	•		
Parole dans le bruit intense	•	•	
Parole à 360°	•	•	
Parole dans le bruit	•	•	•
Situation calme	•	•	•
Confort dans le bruit	•	•	•
Musique	•	•	•
Téléphone acoustique	•	•	•
Programme personnalisé	•	•	•
Téléphone via capteur-T ± mic <sup>1</sup>	•	•	•
Boucle publique-T ± mic <sup>1</sup>	•	•	•
<b>Programmes de diffusion</b>			
RogerDirect™ + mic	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + mic	•	•	•
Appel téléphonique + mic	•	•	•

	Premium L90	Avancé L70	Standard L50
<b>Fonctions</b>			
SpeechSensor	•		
Renforcement de la parole	•		
StereoZoom 2.0	•	•	
Suppression dynamique du bruit	•	•	
Directivité avec capteur de mouvements <sup>2</sup>	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•
EchoBloc	•		
Contrôle tactile <sup>2</sup>			
- Siri / Assistant Google	•	•	
- Mettre en pause / reprendre la diffusion	•	•	
- Accepter/terminer un appel téléphonique	•	•	
SoundRelax	•	•	
DuoPhone	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•
Réglage Roger™ et directivité	•	•	•
UltraZoom	•	•	•
Booster large bande <sup>1</sup>	•	•	•
WindBloc	•	•	•
Correction de sonie	•	•	•
Auto Acclimatation	•	•	•
Balance environnementale	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•
LarsenBloc	•	•	•
NoiseBloc	•	•	•
QuickSync	•	•	•
AOV	•	•	•
Canaux d'adaptation fine	20	20	16

Technologie SmartSpeech

<sup>1</sup> Disponible pour Phonak Sky L-UP uniquement  
<sup>2</sup> Disponible pour Phonak Sky L-PR uniquement

## Programmation

	Sky L-PR L90 / L70 / L50	Sky L-UP L90 / L70 / L50
Phonak Target	9.0 ou version ultérieure	9.0 ou version ultérieure
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•	•
NOAHLink		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

# Couplage acoustique

			Sky L-PR L90 / L70 / L50	Sky L-UP L90 / L70 / L50	
Signal acoustique de sortie	Coude standard	Amorti (HE11 680), transparent et 6 couleurs pédiatriques supplémentaires	•	•	
		Non amorti (HE 11), transparent uniquement		•	
	Coude avec sécurité enfant (mini)	Amorti (HE11 680), transparent et 6 couleurs pédiatriques supplémentaires	•	•	
		Non amorti (HE 11), transparent uniquement		•	
	Tube fin 4.0	Disponible en version gauche et droite, dans cinq longueurs différentes (00, 0, 1, 2 et 3)	•		
Adaptation tube fin	Dôme	Dôme cap	•		
		Dôme ouvert	Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	
		Dôme obturant	Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	
		Dôme puissant	Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	
	SlimTip	Acrylique	•		
		Silicone	•		
Adaptation coude	Embout		•	•	

## Couleurs du boîtier et du coude

### Boîtier



H0  
Beige



P1  
Dune de sable



P3  
Santal



P4  
Noisette



P5  
Champagne



P6  
Gris argenté



P7  
Gris carbone



P8  
Velours noir



M6  
Rouge Volcan



M7  
Bleu Océan



M8  
Violet Pourpre



Q2  
Vert Électrique



Q3  
Bleu Caraïbes



T3  
Rose Poudré

### Coude



R1  
Vert



R2  
Jaune



R3  
Rose



R4  
Orange



Q6  
Bleu



Q7  
Violet



13  
Transparent

# Options de charge de Phonak Sky L-PR

## Phonak Charger Combi BTE

Sky L-PR est doté de toutes les fonctions Lumity que vous adorez, ainsi que de l'avantage d'être rechargeable. Les patients peuvent profiter d'une journée complète d'audition incluant la diffusion sans fil\*.

\* L'autonomie prévue de la batterie s'élève à 16 heures, dont 10 heures de diffusion Roger ou audio.



## Versions Bluetooth® pour Phonak Sky L

Diffusion sans fil d'appels directs/audio

Technologie sans fil Bluetooth 4.2 et la plupart des téléphones Bluetooth plus anciens

## Gamme de communication sans fil

	Sky L-PR L90 / L70 / L50	Sky L-UP L90 / L70 / L50
<b>Accessoires sans fil</b>		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
<b>Roger</b>		
Microphones Roger	•	•
<b>Application</b>		
myPhonak Junior	•	•

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.phonak.com/sky-lumity](http://www.phonak.com/sky-lumity).

Pour plus d'informations à propos des microphones Roger, rendez-vous sur [www.phonak.com/roger-for-education](http://www.phonak.com/roger-for-education).

Pour plus d'informations à propos de myPhonak Junior, rendez-vous sur [www.phonak.com/myphonak-junior](http://www.phonak.com/myphonak-junior).

# life is on\*

Depuis 1947, Phonak a à cœur de préserver la qualité de vie en ouvrant la voie à de nouveaux mondes acoustiques. Déjà à l'époque de notre fondation, une conviction fondamentale animait notre entreprise : bien entendre est synonyme de bien vivre, un point essentiel pour vivre pleinement sa vie. En effet, le sens de l'audition est directement lié au bien-être social, émotionnel, cognitif et physique. Aujourd'hui comme demain, nous nous efforçons de proposer le plus large portefeuille de solutions auditives innovantes. En collaboration avec nos audioprothésistes, nous continuons à nous concentrer sur l'essentiel : améliorer la compréhension vocale, changer la vie des personnes et avoir un effet positif sur la société dans son ensemble. \*la vie s'exprime.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



027-0697-04/V1.00/2023-06/NLG © 2023 Sonova AG Tous droits réservés