

Phonak Virto™ 1.




Informations sur le produit

Phonak Virto Infinio est une gamme complète d'ITE pour les pertes auditives légères à profondes. Les aides auditives Virto I conviennent aux patients qui préfèrent une solution discrète et personnalisée.

Reposant sur la technologie innovante de la plateforme Phonak Infinio, Virto I-R est la première aide auditive sur mesure rechargeable de Phonak.



Description du produit

	 Virto I-R 190/170/150/130	 Virto I-10 NW O 190/170/150/130	 Virto I-Titanium 190/170
Niveau de puissance			
M	•	•	•
P	•	•	•
SP	•	•	•
UP ¹	•		
Configuration matérielle/options/technologie			
Taille de pile	Batterie rechargeable intégrée	10	10
Temps de charge ²	0 % à 100 %	3 h	
	0 % à 80 %	1,5 h	
	30 min d'appareillage	15 min	
Bluetooth®	•		
Matériau de coque	Acrylique	Acrylique	Titanium ³
Indice de protection	IP68 ⁴	IP68 ⁴	IP68 ⁴
Technologie microphonique	Directionnel	Omni	Omni
Bobine d'induction		En option	En option
Bouton-poussoir (Programme/Volume)	•	En option	En option
Contrôle du volume (rotatif)		En option	
EasyPhone (pour téléphone acoustique)		•	En option
MiniControl (pour le changement de volume ou de programme)		•	•

Couleurs

Couleurs de la faceplate



26
Rose



14⁵
Tan



22
Cocoa



28⁵
Marron



06
Noir



Gris
Titane

Couleur de la coque en titanium

Couleurs des coques en acrylique



26
Rose



14
Tan



22
Cocoa



28
Marron



06
Noir



R
Rouge transparent



B
Bleu transparent



21
Transparent

¹ Disponible uniquement dans certains pays.

² La durée de charge réelle dépend de l'autonomie restante de la batterie, mais n'excédera pas 3 heures.

³ Deux rugosités de surface disponibles : standard ou rétention supplémentaire (ERS)

⁴ L'indice IP68 signifie que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau douce et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI 60529.

⁵ Virto I-R et Virto I-10 NW O uniquement

Niveaux de performances

AutoSense OS™ 7.0 ¹	Premium I90	Avancé I70	Standard I50	Essentiel I30
Parole dans le bruit intense ²	•			
Musique	•	•		
Parole en voiture	•	•	•	
Confort dans le bruit	•	•	•	
Parole dans le bruit	•	•	•	•
Situation calme	•	•	•	•
Parole média + mic ²	•	•	•	•
Musique média + mic ²	•	•	•	•
Programmes supplémentaires				
Programmes supplémentaires max.	4	4	4	4
Parole dans le bruit intense ²	•	•		
Parole à 360° ²	•	•		
Parole en voiture	•	•	•	
Parole dans le bruit	•	•	•	•
Situation calme	•	•	•	•
Confort dans le bruit	•	•	•	•
Musique	•	•	•	•
Téléphone acoustique	•	•	•	•
Programme personnalisé	•	•	•	•
Téléphone via Capteur-T ± mic ³	•	•	•	•
Boucle publique ± mic ³	•	•	•	•
Programmes de diffusion				
RogerDirect™ + mic ²	•	•	•	•
PartnerMic + mic ²	•	•	•	•
Appel téléphonique + mic ²	•	•	•	•

Fonctions	Premium I90	Avancé I70	Standard I50	Essentiel I30
SpeechSensor ²	•			
Renforcement de la parole	•			
StereoZoom 2.0 ²	•	•		
Suppression dynamique du bruit ²	•	•		
Directivité avec capteur de mouvements ²	•	•	•	
Compatibilité avec Roger	•	•	•	•
Désactivation des appels mains libres (pour les environnements à haute sécurité) ^{2,4}	•	•	•	•
Contrôle tactile ²				
- Assistant Siri/Google	•	•		
- Mettre en pause / reprendre la diffusion	•	•		
- Accepter/terminer un appel téléphonique	•	•		
SoundRelax	•	•	•	
DuoPhone ²	•	•	•	
EasyPhone ³	•	•	•	•
UltraZoom ²	•	•	•	•
Paramètres directionnels Roger ²	•	•	•	•
WindBloc	•	•	•	•
Correction de sonie	•	•	•	•
Générateur de bruit Tinnitus Balance	•	•	•	•
Auto Acclimatation	•	•	•	•
Balance environnementale	•	•	•	•
SoundRecover ²	•	•	•	•
LarsenBloc	•	•	•	•
NoiseBloc	•	•	•	•
QuickSync ²	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Canaux d'adaptation fine	20	20	16	12

1 Phonak Virto I-10 NW 0 et Virto I-Titanium sont équipés d'AutoSense OS 6.0

2 Disponible pour Phonak Virto I-R uniquement

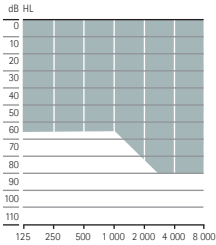
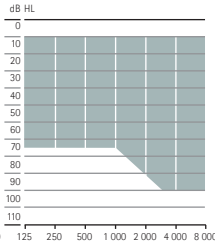
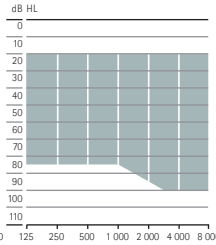
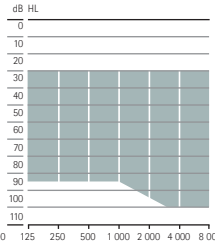
3 Disponible pour Phonak Virto I-10 NW 0 et Virto I-Titanium uniquement

4 Pour les environnements à haute sécurité, par exemple SCIF

Appareillage

	Virto I-R	Virto I-10 NW 0/Virto I-Titanium
Phonak Target	11.0 ou supérieur	10.0 ou version ultérieure
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	
Noahlink		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

Couplage acoustique

		M	P	SP	UP ¹
Niveau de sortie maximum (dB SPL)	Coupleur 2 cm ³	109	115	119	127
Gain maximum (dB)	Coupleur 2 cm ³	40	50	60	70
Bande passante (Hz)	Coupleur 2 cm ³	<100 – 7 000	<100 – 6 700	<100 – 7 000	<100 – 5 200
Courant de fonctionnement (mA)	Virto I-10 NW 0, Virto I-Titanium	1,1	1,2	1,1	
Plage d'application		 <p>Pertes auditives légères à moyennes, toutes configurations audiométriques</p>	 <p>Pertes auditives légères à moyennement sévères, toutes configurations audiométriques</p>	 <p>Pertes auditives moyennes à sévères, toutes configurations audiométriques</p>	 <p>Pertes auditives moyennes à profondes, toutes configurations audiométriques</p>

1 Disponible uniquement pour Virto I-R et dans certains pays.

Styles de coque

	Intra-conque	Demi-conque	Dans le conduit (ITC)	Complètement dans le conduit (CIC)	Invisible dans le conduit (IIC)
Virto I-R	■				
Virto I-10 NW 0	■				
Virto I-Titanium				■	

Notre approche innovante de la personnalisation, RightFit™, permet la conception de styles plus compacts d'aides auditives Virto I-R en fonction de l'anatomie de l'oreille et de la taille de l'écouteur et de l'évent.

Solution de charge Phonak Virto I-R

Phonak Charger Virto I

Phonak Virto I-R dispose de toutes vos fonctions Infinio préférées ainsi que des avantages de la rechargeabilité. Grâce à notre système de rétention magnétique exclusif, la charge devient simple et intuitive. Il suffit de placer l'aide auditive dans le chargeur pour une fixation magnétique au port de charge. Avec le système Snap and charge, Virto R offre une journée de charge complète, ce qui permet aux patients de profiter d'une journée complète d'audition incluant la diffusion sans fil.



Technologie sans fil Phonak Virto I-R

Diffusion des appels directs/audio

Bluetooth® Classic Audio

Gamme de communication sans fil

	Virto I-R I90/I70/I50/I30	Virto I-10 NW O I90/I70/I50/I30	Virto I-Titanium I90/I70
Accessoire sans fil			
TV Connector	•		
Phonak PartnerMic™	•		
Phonak RemoteControl	•		
Roger			
RogerDirect	•		
Roger NeckLoop		• ¹	• ¹
Applications			
myPhonak	•		

¹ Disponible si la bonne d'induction est installée

life is on*

Depuis 1947, Phonak se consacre à la préservation de la qualité de vie en ouvrant de nouveaux mondes acoustiques. Déjà à l'époque de notre fondation, notre entreprise était animée par une conviction formatrice : nous sommes convaincus que bien entendre est synonyme de bien être, et donc que c'est essentiel pour vivre sa vie au maximum. En fait, le sens de l'ouïe est directement lié au bien-être social, émotionnel, cognitif et physique. Aujourd'hui comme demain, nous nous efforçons d'offrir le plus large portefeuille de solutions auditives innovantes. Avec nos audioprothésistes, nous continuons à nous concentrer sur l'essentiel : améliorer la compréhension vocale, changer la vie de chacun et avoir un effet positif sur la société dans son ensemble. *la vie s'exprime

phonak.com



027-0710-04|V4.00|2025-03|NLG © 2024 - 2025 Sonova AG. Tous droits réservés.