

フォナック バート 1.

プロダクトインフォメーション

フォナック インフィニオ プラットホームの革新的テクノロジーを集結したバート1補聴器は、オーダーメイドで目立たないモデルをお求めのお客様にぴったりのソリューションです。



製品概要



パート I-10 NW O
190/170/150/130



パート I-チタン
190/170

出カレベル	パート I-10 NW O 190/170/150/130	パート I-チタン 190/170
M	●	●
P	●	●
SP	●	●
製品仕様/オプション/テクノロジー		
電池サイズ	10	10
シェルの材質	アクリル	チタン
国際保護等級 IP	IP68 ¹	IP68 ¹
マイクロホン	無指向性	無指向性
Tコイル	オプション	オプション
プログラムスイッチ (プログラム/ボリューム)	●	オプション
イージーフォン (電話プログラム)	●	オプション
ミニコントロール (プログラムまたは音量変更用)	オプション	●

カラー

フェースプレート



ブラウン



ブラック

パートI チタン限定色

シェル：チタニウムグレーのみ
フェースプレート：ブラックかブラウン



チタニウムグレー

アクリル シェル



ベージュ



レッド



ブルー



クリア

¹ IP68は、補聴器が防水および防塵であることを示します。水深1mの淡水に長時間(60分)入れた後や、粉塵試験装置に8時間入れた後でも、修理が必要なダメージが発生しないことを示しています(IEC60529規格による)。

パフォーマンスレベル

	プレミアム クラス	アドバンス クラス	スタンダード クラス	エッセンシャル クラス
オートセンス OS 6.0	190	170	150	130
音楽	●	●		
車の中でのことば	●	●	●	
雑音下での快適性	●	●	●	
騒音下でのことば	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●
追加プログラム				
最大追加プログラム数	4	4	4	4
車の中でのことば	●	●	●	
騒音下でのことば	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●
雑音下での快適性	●	●	●	●
音楽	●	●	●	●
電話	●	●	●	●
カスタムプログラム	●	●	●	●
公共設備用T コイル+マイク	●	●	●	●

	プレミアム クラス	アドバンス クラス	スタンダード クラス	エッセンシャル クラス
機能	190	170	150	130
スピーチ エンハンサー	●			
サウンドリラックス	●	●	●	
ロジャーとの互換性 ¹	●	●	●	●
イーザーフォン	●	●	●	●
ウインドブロック	●	●	●	●
ユーザー志向のチューニング	●	●	●	●
耳鳴りバランス	●	●	●	●
自動順応マネージャ	●	●	●	●
環境バランス	●	●	●	●
サウンドリカパー2	●	●	●	●
ホイッスルブロック	●	●	●	●
ノイズブロック	●	●	●	●
AOV	●	●	●	●
微調整チャンネル数	20	20	16	12

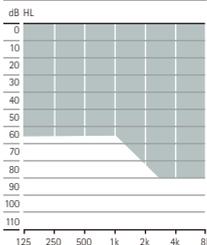
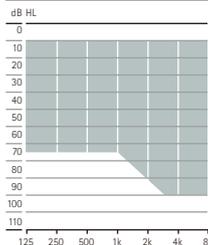
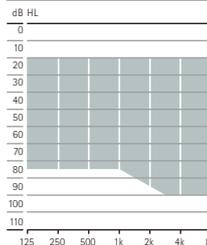
¹ オプションのTコイルが搭載されている場合は、ロジャー ネットワーク経由で使用可能

フィッティング

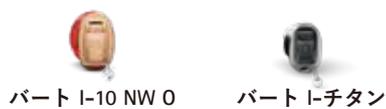
パート I-10 NW 0 /
パート I-チタン

Phonak Target	10.1以上
NOAHlink	●
HI-PRO、HI-PRO2	●

音響カプリング

		M	P	SP
最大出力音圧(OSPL90)(+3dB以下)	2ccカプラデータ	109	115	119
最大音響利得(ピーク値)(+3dB以下)	2ccカプラデータ	40	50	60
帯域幅(Hz)	2ccカプラデータ	<200 - >5000	<200 - >5000	<200 - >5000
消費電流(mA)		1.2+20% mA 以下	1.2+20% mA 以下	1.2+20% mA 以下
フィティングレンジ				
		軽度～中等度難聴	軽度～高度難聴	中等度～高度難聴

シェル スタイル



	パート I-10 NW O	パート I-チタン
IIC	•	•
CIC	•	•

詳細については www.phonak.com/virto-infinio をご覧ください。
 ロジャー マイクロホンの詳細については、www.phonak.com/roger をご覧ください。

ワイヤレスコミュニケーション ポートフォリオ

パート I-10 NW 0
190/170/150/130

パート I-チタン
190/170

ロジャー

ロジャー ネックループ

•*

•*

*Tコイルが搭載されている場合

life is on

フォナックは1947年以来、新しい音響の世界を切り開くことによって、人々の人生を豊かにする取り組みに情熱を傾けてきました。私たちは創業当初から「良い聞こえは健康で充実したしあわせな毎日に欠かせないものである」という信念に基づき活動してきました。聞こえは、社会・感情的、認知的、身体的なウェルビーイングに深くつながっています。私たちは、現在もそしてこれからも聴覚専門家とともに、「ことばの理解を高めること」、「人々の暮らしを豊かにすること」、そして「社会全体により良い効果をもたらすこと」を大切に、そして、聴覚専門家とともに、私たちは最も重要なこと、すなわち、ことばの理解の向上、人々の暮らしの向上、社会全体への積極的な影響に注力し続けています。

www.phonak.com/ja-jp