

Trådløst tilbehør til Phonak Marvel™

Produktinformation



Phonak TV Connector er en brugervenlig plug and play-løsning til Phonak Marvel-høreapparater. Den patenterede Phonak AirStream™ Technology leverer lyd i høj kvalitet fra et hvilket som helst TV og stereoanlæg. Takket være tilkoblingen til iOS- og Android-telefoner giver den brugervenlige Phonak Remote app brugerne af Marvel-høreapparater endnu flere muligheder.

TV Connector – den brugervenlige streamingløsning til TV og musik



TV Connector er plug and play-grænsefladen mellem dit høreapparat og et TV eller andre lydtilkøbere, og den understøtter direkte tilkobling til Phonak Marvel-høreapparater. Den er beregnet til at forenkle opsætning og brug, og AirStream™-teknologien sikrer fremragende stereolyd. TV Connector kan streame lydsignaler fra op til 15 meters afstand og til et ubegrænset antal lyttere, som har oprettet forbindelse, på samme tid.


Funktionsoversigt

- Streaming af lyd i stereo til begge høreapparater
- AirStream-teknologi – bedre lyd kvalitet, hurtigere lydstreaming og enklere forbindelsesproces
- Ét-klik-tilslutning til alle kompatible høreapparater inden for rækkevidde uden at skulle betjene høreapparatet
- Samtidig streaming til et ubegrænset antal brugere på samme tid
- Mulighed for diskret montering bag fjernsynet

Kompatibilitet

- TV Connector er kompatibel med alle trådløse høreapparater fra Phonak med direkte tilkoblingsmuligheder.

Sådan bruges tilbehøret

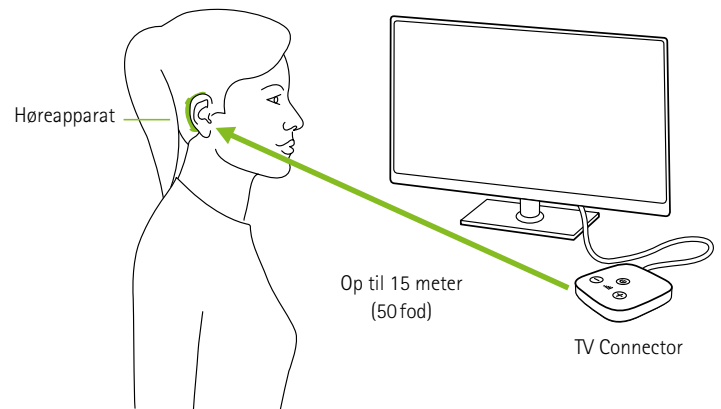

Gå til www.phonakpro.com/tvconnector for at se videoer om brug og opsætning.

Tekniske specifikationer



- 1 Tilslutningsknap
- 2 Indikatorlys (LED)
- 3 microUSB-strømskik
- 4 Lydstik til optisk lydtilslutning (Toslink) eller 3,5 mm-jackkabel
- 5 Tænd/sluk-knap
- 6 Volumenknapper (kalibrering)

Lille hus (L: 63 mm x B: 63 mm x H:12 mm)

Phonak Remote – den enkle fjernbetjenings-app




Phonak Remote appen er beregnet til at øge brugervenligheden af høreapparaterne, når brugeren anvender en fjernbetjening. Den visuelle styring på smartphonen gør det nemt at styre høreapparaternes funktioner uden behov for en separat enhed, der bæres på kroppen.


Funktionsoversigt

- Separat eller ens lydstyrkejustering i venstre/højre side
- Programoversigt med direkte valg af mulige høreapparatsprogrammer
- Omdøbning af de mulige høreapparatsprogrammer i appen
- Valg af mulige lydkilder tilsluttet høreapparaterne
- Enkel justering af niveauet for omgivende lyde, mens der streames fra en lydkilde
- Separat justering af høreapparats tinnitus-støjniveau (hvis tilgængeligt)
- Gennemsnitlig brugstid for tilsluttede høreapparater via appen
- Ladestatus for batteriet (genopladelige høreapparater)
- Konfiguration af Auto-On, når høreapparatet ikke er i opladeren (genopladelige høreapparater)


Gå til www.phonakpro.com/remoteapp for at se videoer om brug og opsætning af Phonak Remote app på din telefon.

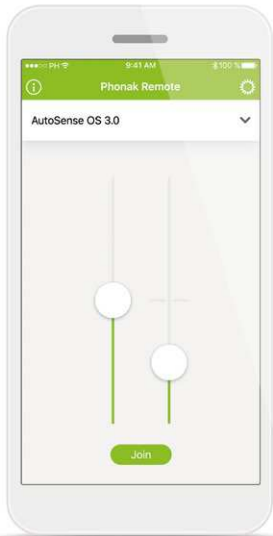


Lydstyrkejustering af venstre/højre side

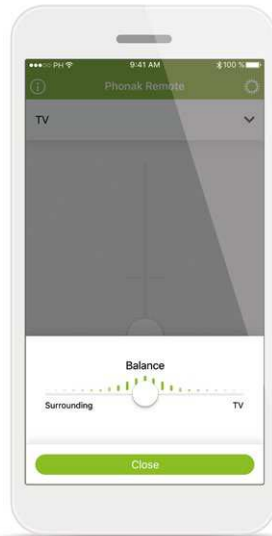

Niveau for omgivende lyde ved lydstreaming

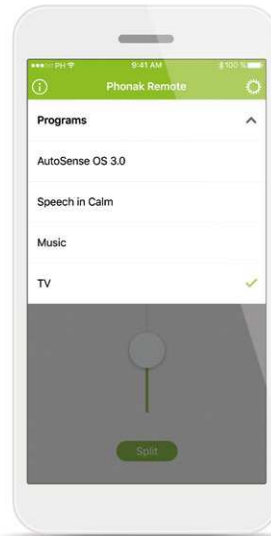

Programvalg og -tilpasning

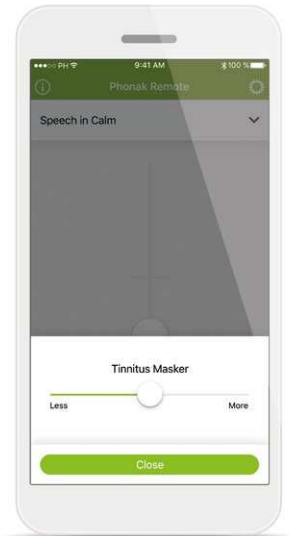

Tinnitus-støjniveau

Kompatibilitet

- Phonak Remote appen er kompatibel med Phonak-høreapparater med Bluetooth®-tilkobling.
- Phonak Remote kan bruges på telefoner med Bluetooth® Low-Energy (BT-LE) og er kompatibel med iPhone 5s og nyere telefoner med iOS version 10.2 eller nyere.
- Phonak Remote kan bruges på Google Mobile Services-certificerede (GMS) Android-enheder, der understøtter Bluetooth 4.2 og Android OS 6.0 eller nyere.

Apple, Apple-logoet, iPhone og iOS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande. App Store er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc.

Bluetooth®-ordet og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

Life is on

Hos Phonak har vi den holdning, at en god hørelse har stor betydning for at få det fulde udbytte af livet. I mere end 70 år har vi udviklet banebrydende høreløsninger, der gør en stor forskel i hverdagen – både på det sociale og det følelsesmæssige plan. Life is on.

www.phonak.dk