




# Serenity Choice™ Plus Music

Kvalitetshørebeskyttelse fra din  
hørespecialist

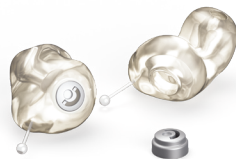

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

Lydniveauet ved koncerter overskrider som regel den anbefalede grænse på 85 dB. Lydtryk over dette niveau kan medføre høreskader i form af tinnitus, lydoverfølsomhed eller permanent hørenedsættelse. Serenity Choice™ Plus Music reducerer lydniveauet, så det er sikkert at lytte til musik med lydtryk op til 106 dB i op til 8 timer.



Serenity Choice™ Plus Music er en formstøbt øreprop i allergivenlig medicinsk silikone eller akryl, som giver en høj komfort, så de kan bæres i mange timer. De er designet specielt til musikere, musikelskere og koncertgængere. Den patenterede membranfilterteknologi dæmper alle frekvenser næsten lige meget, hvilket er godt nyt for alle musikelskere, fordi den originale lyd ikke ændres, men kun dæmpes til et sikkert niveau. Det gør Serenity Choice™ Plus Music til den mest lydægte øreprop på markedet.

Serenity Choice™ Plus Music bevarer en åben luftpassage til øret, hvorved okklusionseffekten minimeres, samtidig med at ventilationen til øret giver en meget høj komfort. Serenity Choice™ Plus Music giver en god taleforståelighed og kan derfor også anvendes af mange andre personer som eks. undervisere og lydoverfølsomme personer.

### Produktspecifikke fordele

- Perfekt pasform: Formstøbte ørepropper i allergivenlig medicinsk silikone og akryl
- Høj komfort: Avanceret membranfilterteknologi sikrer luftpassage til ørerne
- Avanceret membranfilter teknologi: Bevare lyd billedet
- Akryl ørepropper: 5 farver
- Silikone ørepropper: 7 farver
- Valgfri udtræksnor
- Dæmpning: KM15 – 15 dB, KM20 – 17dB, KM25 – 21 dB

### Anvendelsesområder


- Nyd musikken ved sikker lydstyrke
- Beskytter hørelsen
- Optimal komfort
- Minimal okklusion

### Indholder

- To formstøbte ørepropper
- To membranfiltre (KM15, KM20 eller KM25)
- Filturværktøj
- Etui til opbevaring
- Flersproget brugervejledning

### Tekniske data i overensstemmelse med EN 352-2:2020

#### Serenity Choice™ Plus Music

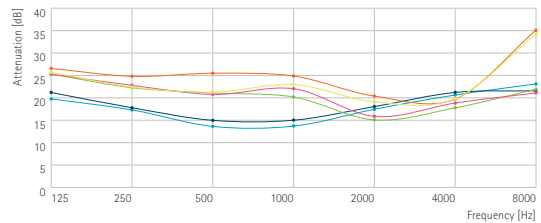

Filter	Material	Frequency [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NR <sup>1</sup>	SNR <sup>2</sup>
KM15	Acrylic	Attenuation [dB]	19.7	17.2	13.5	13.6	17.4	20.6	23.1	8	15
KM15	Silicone	Attenuation [dB]	21.0	17.7	14.9	15.0	18.0	21.1	21.4	8	15
KM20	Acrylic	Attenuation [dB]	25.1	22.1	21.0	20.1	15.0	17.7	21.8	10	17
KM20	Silicone	Attenuation [dB]	25.2	22.7	20.7	21.9	15.8	18.8	21.0	9	17
KM25	Acrylic	Attenuation [dB]	26.5	24.8	25.5	24.8	20.4	19.8	35.1	14	21
KM25	Silicone	Attenuation [dB]	25.5	22.3	21.1	22.8	18.9	19.7	34.3	12	20

<sup>1</sup>Noise Reduction Rating

<sup>2</sup>Single Number Rating

Lydreduktion:

Omgivelseslyd: