









Phonak Serenity Choice™

Oversigt over serie og dæmpning


Oversigt over serie

		Lejlighed/målgruppe	Beskyttelse	 Full concha	 Halv concha	 Standard
	Musik	Musikere, dj'er Koncertdeltagere, festivaller, fester	Høj			
			Middel			
			Lav			
	Skydning og jagt	Pistol- og riffelskud	Høj (impulsstøj)			
	Motorsport	Motorsportsaktiviteter og væddeløb.	Høj			
			Middel			
	Arbejde	Gør-det-selv og havearbejde	Maks.			
			Høj			
			Middel			
	Komfort	Fuld koncentration på opgaven	Middel			
			Lav			
	Søvn	Uforstyrrede nætter	Høj		Intet filter, forseglet skal	
	Fly	Flyrejser	Lav			
	Svømning	Vandsport	Vand			

Phonak Serenity Choice™ Plus


Middel dæmpning CE og ANSI¹

Serenity Choice™ Plus Music

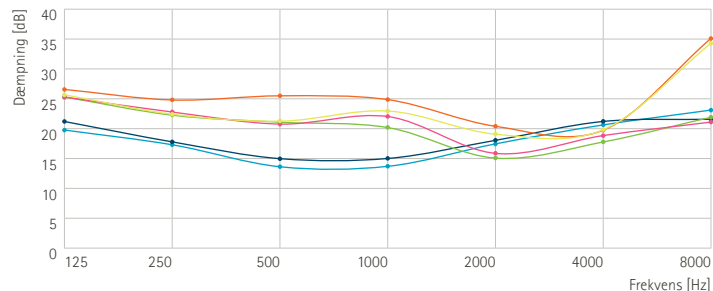


Filter	Materiale	Frekvens [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRR	SNR
KM15	• Akryl	Dæmpning [dB]	19,7	17,2	13,5	13,6	17,4	20,6	23,1	8	15
KM15	• Silikone	Dæmpning [dB]	21,0	17,7	14,9	15,0	18,0	21,1	21,4	8	15
KM20	• Akryl	Dæmpning [dB]	25,1	22,1	21,0	20,1	15,0	17,7	21,8	10	17
KM20	• Silikone	Dæmpning [dB]	25,2	22,7	20,7	21,9	15,8	18,8	21,0	9	17
KM25	• Akryl	Dæmpning [dB]	26,5	24,8	25,5	24,8	20,4	19,8	35,1	14	21
KM25	• Silikone	Dæmpning [dB]	25,5	22,3	21,1	22,8	18,9	19,7	34,3	12	20

Serenity Choice™ Plus Work

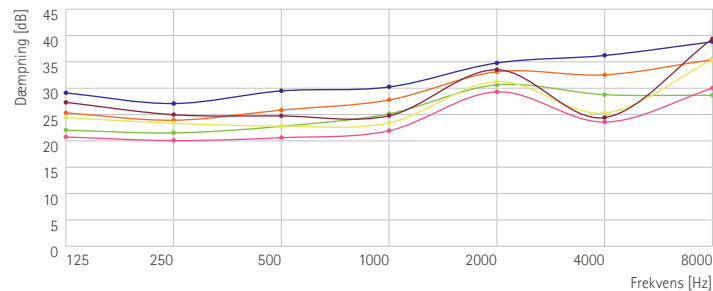


Filter	Materiale	Frekvens [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRR	SNR
KI20	• Akryl	Dæmpning [dB]	22,0	21,5	22,8	25,2	30,7	28,9	28,9	19	26
KI20	• Silikone	Dæmpning [dB]	20,8	20,2	20,8	22,1	29,4	23,9	30,2	16	22
KI25	• Akryl	Dæmpning [dB]	25,1	23,8	25,8	27,7	33,0	32,5	35,4	21	28
KI25	• Silikone	Dæmpning [dB]	24,3	23,3	22,8	23,5	31,3	25,5	35,5	17	25
KI30	• Akryl	Dæmpning [dB]	29,0	27,1	29,5	30,3	34,8	36,2	38,8	22	30
KI30	• Silikone	Dæmpning [dB]	27,1	24,9	24,7	24,8	33,5	24,6	39,4	18	26

Serenity Choice™ Plus Motorsport

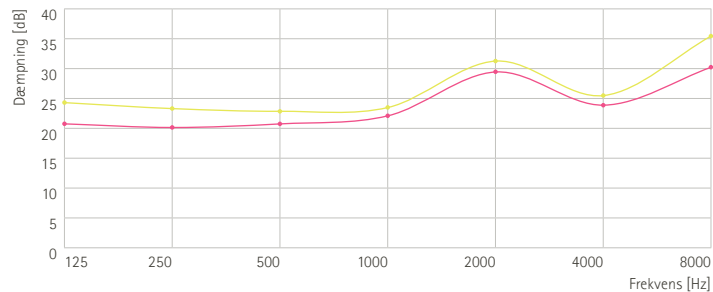


Filter	Materiale	Frekvens [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRR	SNR
KI20	• Silikone	Dæmpning [dB]	20,8	20,2	20,8	22,1	29,4	23,9	30,2	16	22
KI25	• Silikone	Dæmpning [dB]	24,3	23,3	22,8	23,5	31,3	25,5	35,5	17	25

Serenity Choice™ Plus Fly

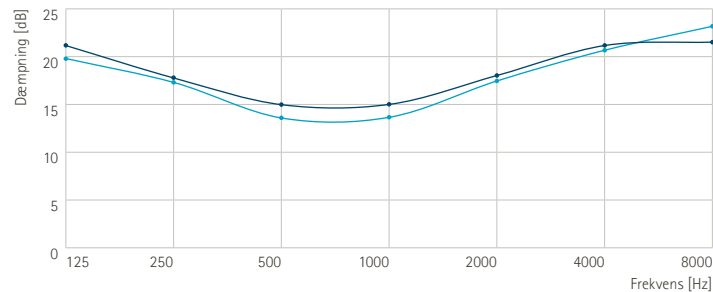

Filter	Materiale	Frekvens [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRR	SNR
KM15	• Akryl	Dæmpning [dB]	19,7	17,2	13,5	13,6	17,4	20,6	23,1	8	15
KM15	• Silikone	Dæmpning [dB]	21,0	17,7	14,9	15,0	18,0	21,1	21,4	8	15

Serenity Choice™ Plus Shooting & Hunting

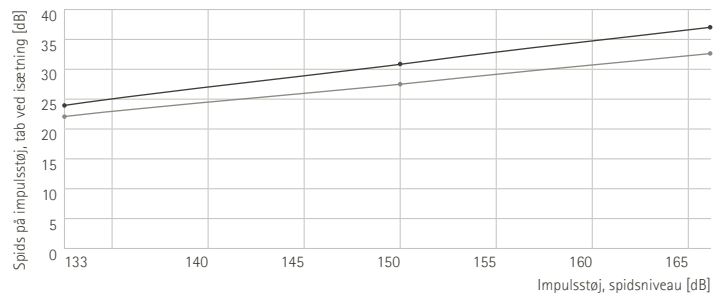

Filter	Materiale	Impulsstøj, spidsniveau [dB]	133	150	166
KIM9	• Silikone	Spids på impulsstøj, tab ved isætning (IPIIL)	22,1	27,8	32,4
KIM9	• Akryl	Spids på impulsstøj, tab ved isætning (IPIIL)	24	31,2	36,7

Serenity Choice™ Plus Sleep

For at få den bedste komfort under søvn har Serenity Choice Plus Sleep produkter ikke et filter. Dæmpning via silikoneskallen med halv concha.

Serenity Choice™ Plus Swim²

Produkt, der kan flyde, med et filter til lav dæmpning (ca. 5 dB), der gør det muligt for brugere at høre næsten alt som normalt og på samme tid holde vand ude af øret.

Serenity Choice™ Plus Comfort²

Serenity Choice Plus Comfort akustikfiltre med et filter til lav dæmpning (ca. 10 dB) gør det muligt for brugere at høre næsten alt som normalt.


¹ SNR (Single Number Rating): Et begreb anvendt af den europæiske standard EN-352-2 til at udtrykke den samlede dæmpning for en hørebeskyttelse som et enkelt nummer. NRR (Noise Reduction Rating): Et begreb anvendt af den amerikanske standard ANSI S3.19:1974 til at udtrykke den samlede dæmpning for en hørebeskyttelse som et enkelt nummer. SNR og NRR afviger en smule fra hinanden på grund af de forskellige formler, der anvendes til at udlede dem. Vi har anvendt middelværdierne for CE og ANSI til graferne.

² Dæmpningen, som dette produkt tilbyder, er ikke nok til, at det kan blive klassificeret som hørebeskyttelse i henhold til de europæiske standarder (EN 352-2:2002).

Phonak Serenity Choice™


Middel dæmpning CE og ANSI¹

Serenity Choice™ Music

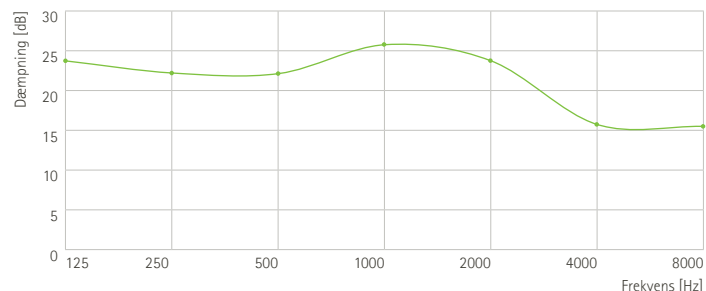


Filter	Frekvens [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRR	SNR
KM20	Dæmpning [dB]	23,7	22,2	22,1	25,8	23,7	15,7	15,4	10	17

Serenity Choice™ Work

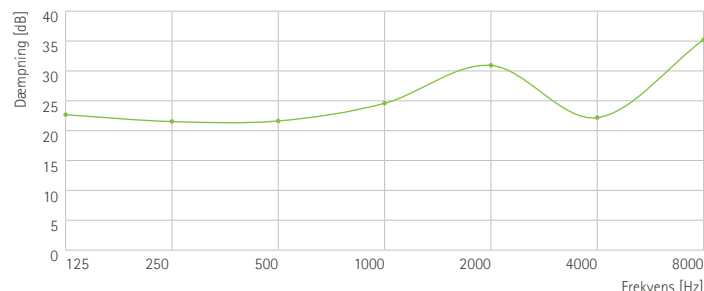


Filter	Frekvens [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRR	SNR
KI25	Dæmpning [dB]	22,6	21,5	21,6	24,5	30,9	22,15	35,2	16	24

Serenity Choice™ Motorsport

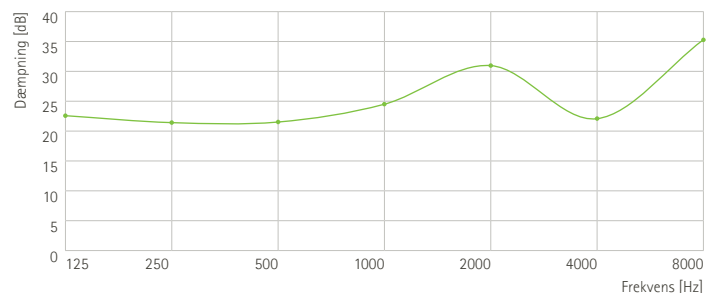


Filter	Frekvens [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRR	SNR
KI25	Dæmpning [dB]	22,6	21,5	21,6	24,5	30,9	22,1	35,2	16	24

Serenity Choice™ Comfort

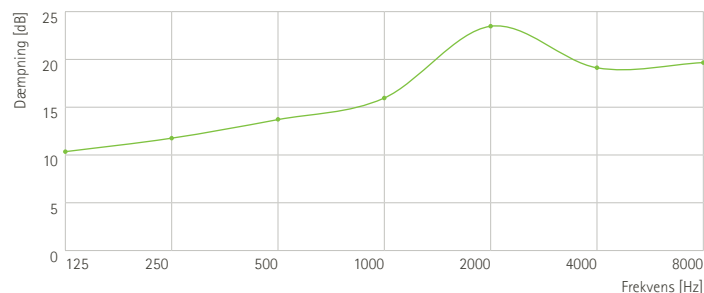


Filter	Frekvens [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRR	SNR
KR15	Dæmpning [dB]	10,3	11,7	13,6	15,9	23,4	19,1	19,6	9	16

Serenity Choice™ Sleep

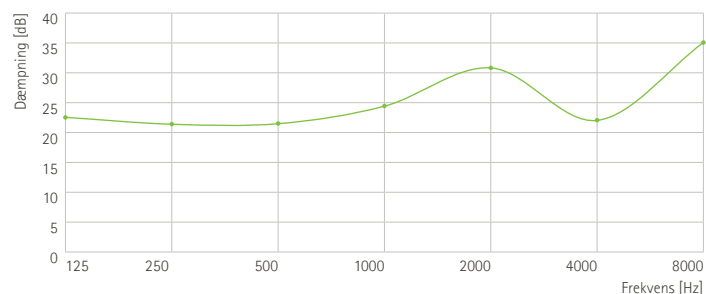

Filter	Frekvens [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRR	SNR
KI25	Dæmpning [dB]	22,6	21,5	21,6	24,5	30,9	22,1	35,2	16	24

Serenity Choice™ Shooting & Hunting

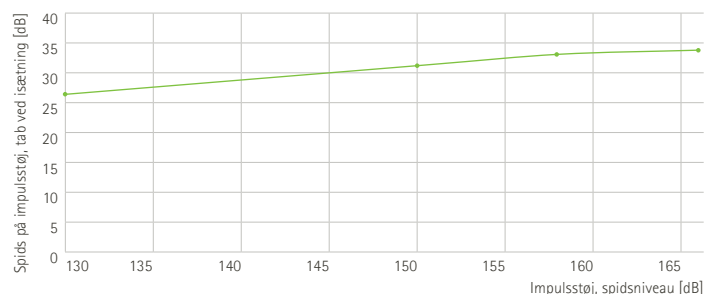

Filter	Impulsstøj, spidsniveau [dB]	130	150	158	166
KIM12	Spids på impulsstøj, tab ved isætning (IPII)	26,3	31,1	33,0	33,7

Sluk ikke for verden – blot for støjen

Dæmper støj og høje lyde


Phonak Serenity Choice™ dæmper støj og høj lyd fra 8 til 22 NRR (Noise Reduction Rating USA) eller 15 til 30 SNR (Single Number Rating EU).

Lader øret få luft

Phonak Serenity Choice™ lader øret få luft ved at ventilere øret for at forhindre ophobning af overskydende fugt.

Sikrer passage af relevant lyd og tale

Phonak Serenity Choice™ sikrer passage af relevant lyd og tale og muliggør derfor situationsbevidsthed og kommunikation.

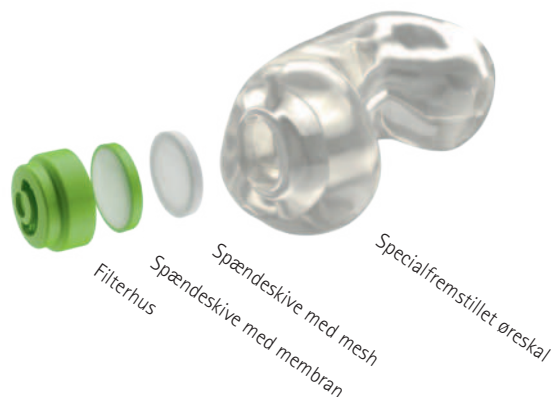

Phonak Serenity Choice™ Plus Specialfremstillet hørebeskyttelse til regelmæssig brug



Specialfremstillede ørepropper med diverse filtre til forskellige anvendelsesformål, som sikrer perfekt pasform og maksimal beskyttelse af din hørelse.

Fås i to forskellige typer materiale (silikone og akryl) og to forskellige størrelser (fuld concha og halv concha).

Lang række anvendelsesmuligheder: musik, motorsport, arbejde, skydning, jagt, flyrejser, komfort, søvn og svømning.

Phonak Serenity Choice™ Hørebeskyttelse til sporadisk brug



Disse beskyttende ørepropper fås i tre standardstørrelser og har forskellige filtre afhængigt af anvendelsesformålet.

Lang række anvendelsesmuligheder: musik, motorsport, arbejde, skydning, jagt, komfort og søvn.

life is on

Hos Phonak tror vi på, at det at høre godt også betyder et godt velvære, og at det er essentielt for at kunne leve livet uden begrænsninger. I mere end 70 år har vi været passionerede omkring at skabe en verden, hvor "life is on" for alle. Vores innovative høre løsninger er designet til mennesker i alle aldersgrupper og alle niveauer af høretab, således at alle kan interagere socialt og trives mentalt og følelsesmæssigt.

www.phonak.com

