

# Det næste kapitel om Paradise



Phonak ActiveVent™ Receiver

Der er ikke noget som lyden af Paradise



Velkommen  
til næste kapitel  
i historien om  
Paradise



Socio-er



Fysisk



Med introduktionen af Phonak Audéo™ Paradise har vi udviklet høreapparater, der giver brugerne en høreoplevelse i særklasse<sup>1</sup>. Det første kapitel startede for et år siden, og siden da er der sket markante ændringer i vores liv. Det er blevet normalt at gå med mundbind. For nogle høreapparatbrugere er dette en udfordring, da det gør det umuligt at mundaflæse taleren.

Phonak Paradise høreapparater med AutoSense OS™4.0 kan nemt tilpasse en række forskellige lyttesituationer, der giver brugeren mulighed for at navigere i forskellige miljøer. Brugerne behøver ikke længere at justere deres høreapparat, og på den måde reducerer vi kompleksiteten. Dette kan direkte påvirke høreapparatbrugeres velvære. Ved at give flere brugere med hørenedsættelse mulighed for at kommunikere problemfrit, kan de holde kontakten ved lige og trives både mentalt og følelsesmæssigt.

**Phonak er stolte af at præsentere det næste kapitel om Paradise. Med sin sprøde og naturlige signaturlyd leverer Paradise en høreoplevelse i særklasse<sup>1</sup> i endnu flere situationer end før.**





# Vi præsenterer ActiveVent™ Receiver

## Verdens første intelligente høreapparathøjttaler

Paradise er kendt for sin uovertrufne<sup>1</sup> lyd kvalitet<sup>4</sup> med fremragende taleforståelighed<sup>3,4,5</sup> og brugertilpasset støjreduktion. Nu starter vi på et nyt kapitel om ActiveVent Receiver.


Den splinternye ActiveVent™ Receiver er verdens første intelligente høreapparathøjttaler, som på intelligent vis opnår høj lyttekomfort<sup>2</sup> og taleklarhed i støjende omgivelser for at optimere den uovertrufne<sup>1</sup> lyd kvalitet<sup>4</sup> i Phonak Paradise til klienter med mild til moderat hørenedsættelse.

Denne innovative teknologi har mekanisk ventilation, der styres af AutoSense OS 4.0. Den kombinerer på intelligent vis hørepræstationen ved en lukket tilpasning med kombinationen ved en åben tilpasning<sup>2</sup>. Resultatet er en kompromisløs hørreløsning til dine klienter, der giver dem mulighed for fuld opmærksomhed på omgivelserne og naturlig gengivelse af egen stemme samtidig med en forbedret taleforståelighed i støjende omgivelser<sup>6</sup>.




## Hvordan fungerer ActiveVent Receiver?

ActiveVent er en højttaler med indbygget ventilationssystem og en lille skive, der kan flytte sig mellem åben og lukket position. Funktionen styres på intelligent vis af AutoSense OS 4.0. Når skiven skifter position, hører klienten et lille klik.

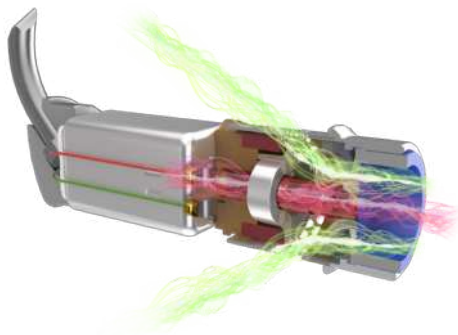

Når skiven er i åben position, kan lyd fra omgivelserne passere direkte gennem højttalerens indbyggede ventilation og dermed give komforten ved en åben tilpasning, en naturlig gengivelse af brugerens egen stemme og opmærksomhed på omgivelsernes lyde<sup>2</sup>.

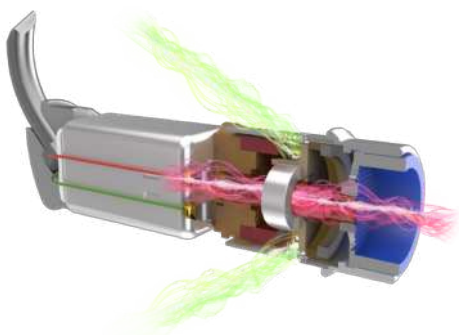

I udfordrende lyttesituationer med tale i kraftig støj, eller når brugeren streamer lyd, flytter skiven sig til lukket position. Dette forhindrer alle omgivelseslyde i at trænge ind i øret og styrker fokus på tale foran brugeren eller tale i streamet lyd.

## ActiveVent koblingsmuligheder

### 1. Universal SlimTip AV

Det er nemt at demonstrere ActiveVent Receiver for dine klienter takket være den nye Universal SlimTip AV. Universal SlimTips er designet ud fra flere tusinde ørescanninger, hvilket gav udviklerne mulighed for at skabe fire design, der sikrer en høj tilpasningsrate. Universal SlimTips er den oplagte midlertidige løsning til demoer og forsøg, mens du venter på klientens tilpassede SlimTip Titanium AV.

### 2. Brugertilpasset SlimTip Titanium AV

ActiveVent Receiver er udviklet med henblik på optimal akustisk ydelse og langtidsbrug med SlimTip Titanium, hvilket giver en unik skal i et robust, behageligt materiale.

## Fordele

- Intelligent afbalanceret klarhed af talen i støjende omgivelser samt stor lyttekomfort<sup>2</sup>
- Giver overlegen streamingkvalitet<sup>6,7</sup>
- Intelligent styring takket være AutoSense OS 4.0
- Kompatibelt med alle genopladelige høreapparater i Audéo Paradise serien<sup>8</sup>

## ActiveVent kompatibel tilpasning

- Højtalere bør udskiftes hvert halve år for at sikre optimal ydelse. Dette gøres let hos hørespecialisten
- Ideelle kandidater er klienter med minimal ørevoksdannelse og god fingerbevægelighed
- Rengøring og udskiftning af voksfilter udføres jævnligt
- Ikke egnet til klienter med kraftig tinnitus og lydoverfølsomhed





## ActiveVent Performance + fordele for dine klienter

ActiveVent Receiver er kompatibel med alle genopladelige Audéo Paradise høreapparater og giver forskellige fordele afhængigt af modellens ydelsesniveau. ActiveVent Performance + er den samling af fordele, som klienterne kan forvente, når de bruger ActiveVent Receiver med deres høreapparat.


### Særdeles afbalanceret taleklarhed under støj og stor lyttekomfort<sup>2</sup>

ActiveVent Receivers er oplagte for klienter med en aktiv livsstil, og som bruger meget tid i støjende omgivelser, såsom restauranter, sociale sammenhænge eller offentlige steder med meget støj. Disse steder kan gøre hørelse til en endnu større udfordring. Med ActiveVent Receivers lukker AutoSense OS 4.0 automatisk ventilationen, når støjniveauet øges, så brugeren får gavn af den øgede ydelse, der følger med en lukket tilpasning (kræver ydelsesniveauet Premium). Når støjniveauet falder, åbner skiven i ventilationen igen, så klienten igen kan nyde komforten ved en åben tilpasning. Med ActiveVent Receivers kan klienterne selv bruge de manuelle programmer i lukket ventilationstilstand. (Kræver ydelsesniveauet Premium, Advanced eller Standard).

### Overlegen streamingkvalitet<sup>6,7</sup>

Den lukkede ventilationstilstand giver klienterne mulighed for at nyde overlegen streamingkvalitet. Det helt unikke element i disse højttalere er, at hvis din klient vil skifte fra streaming til tale i forbindelse med en samtale, skal vedkommende kun dobbelttrykke for at sætte streamingen på pause, hvorefter ActiveVent Receiver problemfrit skifter til åben tilstand (gælder uanset ydelsesniveau).

### Fordele

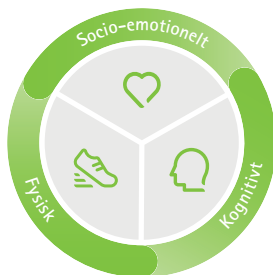

- ActiveVent Receiver forbedrer taleforståeligheden i støjende omgivelser med gennemsnitligt 10 % og giver naturlig lyd i forskellige lyttesituationer<sup>6</sup>
- Universal SlimTip gør det nemt at demonstrere og afprøve ActiveVent Receiver
- ActiveVent Receiver hjælper klienterne med at holde kontakten med familie og venner i både støjende og stille omgivelser





# Der er ikke noget som lyden af Paradise


Med introduktionen af Paradise har Phonak cementeret sin position som en af høreindustriens førende producenter. Baseret på avanceret hardware inkorporerer Paradise nu endnu flere funktioner, der hjælper dine klienter med at genfinde glæden ved lyd i endnu flere situationer og giver dem øget velvære. Disse funktioner udnytter PRISM™ chippens veldokumenterede effektivitet og samarbejder problemfrit for at give en høreoplevelse i særklasse<sup>1</sup>.

## Uovertruffen lyd kvalitet

- **Ny ActiveVent Receiver**
  - Ny ActiveVent Performance +
- **Bevægelsessensor**
- **APD 2.0**
- **AutoSense OS™ 4.0**
  - Speech Enhancer
  - Dynamic Noise Cancellation
  - Motion Sensor Hearing



▶ Genopladeligt batteri med veldokument



## Brugertilpassede digitale løsninger

- Opdateret myPhonak app
  - Brugertilpasset følsomhed i Tap Control
  - AudiogramDirect (via Fjernsupport)
  - Remote Control
- Ny Target 7.1.9

## Universelle tilkoblingsmuligheder

- Forbinder til smartphones, TV og mere
- RogerDirect™
- Universelt kompatibel
- Flere Bluetooth® tilkoblingsmuligheder
- Tap Control giver nem adgang til Bluetooth-funktionalitet









# life is on

Hos Phonak tror vi på, at det at høre godt også betyder et godt velvære, og at det er essentielt for at kunne leve livet uden begrænsninger. I mere end 70 år har vi været passionerede omkring at skabe en verden, hvor "life is on" for alle. Vores innovative høreøsninger er designet til mennesker i alle aldersgrupper og alle niveauer af høretab, således at alle kan interagere socialt og trives mentalt og følelsesmæssigt.

[www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com)

