

Phonak Naída™ L.

Produktinformation

Phonak Naída Lumity er den omfattende BTE serie til mild til svær hørenedsættelse.

Naída L høreapparater, der er baseret på Phonak SmartSpeech™ Technology er det rigtige valg for de klienter, der ønsker kraftfulde løsninger på vores mest avancerede platform Phonak Lumity.



Produktbeskrivelse



Naída L-UP
Naída L-UP Trial
L90/L70/L50/L30




Naída L-PR
Naída L-PR Trial
L90/L70/L50/L30


| | | | | |
|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Batteristørrelse | | 675 | indbygget genopladeligt | |
| Telespole | | • | | |
| Kompatibilitet med CROS L | | | • | |
| Bluetooth® | | • | • | |
| Hydrofobisk belægning | | • | • | |
| IP klassificering | | IP68 ¹ | IP68 ¹ | |
| Mål | L x B x D | 42,6 x 18,8 x 8,6 mm | 36,7 x 16,4 x 8,5 mm | |
| | Vægt | 4,60 g | 3,68 g | |
| Opladningstider ² | 0% til 100% | | 3 t | |
| | 0% til 80% | | 1,5 t | |
| | 30 min. tilpasning | | 10 min. | |
| | | HE11 | HE11 680 | HE11 680 SlimTube 4.0 |
| Maks. udgangseffekt (dB SPL) | 2 cc kobler | 141 | 134 | 130 129 |
| Maks. gain (dB) | 2 cc kobler | 84 | 78 | 68 69 |
| Frekvensområde (Hz) | | < 100 - > 4700 | < 100 - > 4700 | < 100 - > 5700 < 100 - > 7100 |
| Strømforbrug (mA) | | 3,3 | 2,8 | |

Tilpasningsområde

■ SlimTube 4.0
■ HE11 680

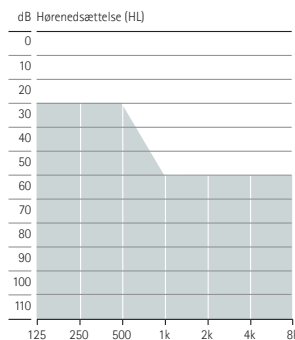

Kraftig til svær hørenedsættelse, alle audiometriske konfigurationer

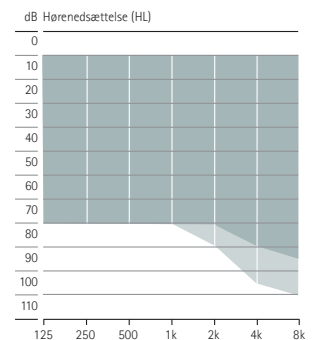

Mild til moderat-svær hørenedsættelse, alle audiometriske konfigurationer

Farver på hus



H0
Beige



P1
Sand Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver Gray



P7
Graphite Gray



P8
Velvet Black

¹ IP68 indikerer, at høreapparatet er vand- og støvafvisende. Det er blevet testet og tåler kontinuerlig nedsænkning i en meter ferskvand i 60 minutter og otte timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

² Den faktiske opladningstid afhænger af den resterende batterilevetid og kan påvirkes af temperaturforholdene.

Ydelsesniveauer

| | Premium L90 | Advanced L70 | Standard L50 | Essential L30 |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| AutoSense OS™ 5.0 | | | | |
| Tale i kraftig støj | • | | | |
| Tale i bil | • | | | |
| Komfort i ekko | • | | | |
| Musik | • | • | | |
| Komfort i støj | • | • | • | |
| Tale i støj | • | • | • | • |
| Rolig situation | • | • | • | • |
| Medie: tale ± mic | • | • | • | • |
| Medie: musik ± mic | • | • | • | • |
| Yderligere programmer | | | | |
| Maks. yderligere programmer | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Komfort i ekko | • | | | |
| Tale i kraftig støj | • | • | | |
| Tale i 360° | • | • | | |
| Tale i støj | • | • | • | • |
| Rolig situation | • | • | • | • |
| Komfort i støj | • | • | • | • |
| Musik | • | • | • | • |
| Akustisk telefon | • | • | • | • |
| Individuelt program | • | • | • | • |
| Telefon via telespole ± mic ¹ | • | • | • | • |
| Telespole ± mic ¹ | • | • | • | • |
| Streamingprogrammer | | | | |
| RogerDirect ± mic | • | • | • | • |
| PartnerMic ± mic | • | • | • | • |
| Telefonopkald + mic | • | • | • | • |

| | Premium L90 | Advanced L70 | Standard L50 | Essential L30 |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Funktioner | | | | |
| SpeechSensor | • | | | |
| Speech Enhancer | • | | | |
| StereoZoom 2.0 | • | • | | |
| Dynamic Noise Cancellation | • | • | | |
| Motion Sensor Hearing ² | • | • | • | |
| RogerDirect™ | • | • | • | • |
| EchoBlock | • | | | |
| Tap Control ² | | | | |
| - Siri/Google Assistant | • | • | | |
| - Sæt streaming på pause/genoptag | • | • | | |
| - Acceptor/afslut telefonopkald | • | • | | |
| SoundRelax | • | • | | |
| DuoPhone | • | • | • | |
| Real Ear Sound | • | • | • | |
| UltraZoom | • | • | • | • |
| Roger™ og retningsbestemt indstilling | • | • | • | • |
| Bredbåndsbooster ¹ | • | • | • | • |
| Sundhedsfunktioner ^{2,3} | • | • | • | • |
| WindBlock | • | • | • | • |
| Klientbaseret indstilling | • | • | • | • |
| Tinnitus balance ² | • | • | • | • |
| auto Acclimatization | • | • | • | • |
| Niveau for omgivende lyde | • | • | • | • |
| SoundRecover2 | • | • | • | • |
| WhistleBlock | • | • | • | • |
| NoiseBlock | • | • | • | • |
| QuickSync | • | • | • | • |
| AOV | • | • | • | • |
| Finjustering af kanaler | 20 | 20 | 16 | 12 |

SmartSpeech Technology

¹ Kun tilgængelig for Phonak Naída L-UP

² Kun tilgængelig for Phonak Naída L-PR

³ Tilgængelig i kombination med myPhonak

Tilpasning

| | Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30 | Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Phonak Target | 9.0 eller nyere | 9.0 eller nyere |
| Noahlink Wireless/Noahlink Wireless 2 | • | • |
| NOAHLINK | • | |
| HI-PRO, HI-PRO2 | • | |

Koblingsmulighed

| | | | Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30 | Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30 |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Lydudgang | Hook | Dæmpet (HE11 680), transparent | • | • |
| | Hook | Udæmpet (HE11), transparent | • | |
| | SlimTube 4.0 | Tilgængelig i venstre og højre i fem forskellige længder (00,0,1,2,3) | | • |
| Ørestykke til SlimTube | Lydkuppel | Cap dome | | • |
| | | Åben lydkuppel | Tilgængelig i tre størrelser (S, M, L) | • |
| | Vented dome | Tilgængelig i tre størrelser (S, M, L) | | • |
| | Power lydkuppel | Tilgængelig i tre størrelser (S, M, L) | | • |
| | SlimTip | Akryl | | |
| Silikone | | | | • |
| Ørestykke til hook | Øreprop | | • | • |

Phonak Naída L Trial

Phonak Naída L Trial høreapparaterne kan hurtigt indstilles til det påkrævede ydelsesniveau, så det passer til din anbefaling. Dette giver dig mulighed for at tilpasse din klient med den optimale høreøsning allerede under den første aftale eller udlevere et andet, når klientens høreapparat er til reparation. Naída L Trial apparaterne inkluderer også en præinstalleret Roger modtager, så alle Roger mikrofoner nemt kan demonstreres og afprøves.

Phonak Naída L-PR opladningstilbehør

Phonak Charger Combi BTE 2

Naída L-PR har alle de Lumity funktioner, du elsker, samt fordelene ved at være genopladelig. Klienter kan nyde en hel dags høreelse inklusive streaming*.

* Forventet batterilevetid på 16 timer, inklusive 4 timers klassisk BT streaming og 4 timers streaming med TV Connector.



Phonak Naída L Bluetooth®

Direkte opkald/lydstreaming

Trådløs Bluetooth 4.2 teknologi og de fleste ældre Bluetooth telefoner

Trådløs kommunikationsportefølje

| | Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30 | Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30 |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Trådløst tilbehør | | |
| TV Connector | • | • |
| Phonak PartnerMic | • | • |
| Phonak RemoteControl | • | • |
| Roger | | |
| Roger mikrofoner | • | • |
| Apps | | |
| myPhonak | • | • |
| myPhonak Junior | • | • |

Besøg www.phonak.com/naida-lumity for yderligere oplysninger

Besøg www.phonak.com/roger for oplysninger om Roger mikrofoner

Besøg www.phonak.com/apps for yderligere oplysninger om myPhonak og myPhonak Junior

life is on

Siden 1947 har Phonak målrettet forsøgt at forbedre livskvaliteten ved at åbne op for nye akustiske verdener. Allerede dengang da vi blev grundlagt, blev vores virksomhed drevet ud fra en klar overbevisning: Vi tror på, at god hørelse er lig med velvære og dermed er essentielt for at kunne få det fulde udbytte af livet. Rent faktisk er høresansen direkte forbundet med socialt, emotionelt, kognitivt og fysisk velvære. I dag og i fremtiden stræber vi efter at tilbyde det største udvalg af innovative høreøsninger. Og sammen med vores hørespecialister vil vi fortsat fokusere på det vigtigste: forbedre taleforståeligheden, ændre menneskers liv og have en positiv effekt på samfundet som helhed.

www.phonak.com



027-0699-08/V1.01/2023-06/ko © 2023 Sonova AG All rights reserved