

# Phonak Sky™ L.

## Produktinformation

Phonak Sky Lumity er det omfattende sortiment af BTE til børn med mild til svær hørenedsættelse.

Sky L høreapparaterne er udstyret med Phonak SmartSpeech™ Technology og er løsningen til børn, der gerne vil opleve taleforståelighed på vores mest omfattende platform Phonak Lumity.



# Produktbeskrivelse



Sky L-M  
Sky L-M Trial  
L90/L70/L50/L30



Sky L-PR  
Sky L-PR Trial  
L90/L70/L50/L30



Sky L-SP  
Sky L-SP Trial  
L90/L70/L50/L30




Sky L-UP  
Sky L-UP Trial  
L90/L70/L50/L30

Batteristørrelse		312	indbygget genopladeligt		13		675		
Adfærd for indikatorlys		•	•		•		•		
Telespole		•			•		•		
Kompatibilitet med CROS L			•						
Bluetooth®		•	•		•		•		
Hydrofobisk belægning		•	•		•		•		
IP klassificering		IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>		IP68 <sup>1</sup>		IP68 <sup>1</sup>		
Mål	L x B x D	31,3 x 14,1 x 7,3 mm	36,7 x 16,4 x 8,5 mm		40,0 x 16,9 x 8,5 mm		42,6 x 18,8 x 8,6 mm		
	Vægt	2,18 g	3,68 g		4,40 g		4,60 g		
Opladningstider <sup>2</sup>	0% til 100%		3 t						
	0% til 80%		1,5 t						
	30 min. tilpasning		10 min.						
		HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680	SlimTube 4.0	HE11	HE11 680	HE11	HE11 680
Maks. udgangseffekt (dB SPL) 2 cc kobler		128	122	130	129	139	133	141	134
Maks. gain (dB) 2 cc kobler		63	58	68	69	81	75	84	78
Frekvensområde (Hz)		<100 - >7800	<100 - >8000	<100 - >5700	<100 - >7100	<100 - >4900	<100 - >5700	<100 - > 4700	<100 - >4700
Strømforbrug (mA)		1,6	1,6			2,1	2,2	3,3	2,8


## Tilpasningsområde

■ DSL tilpasningsområde til børn  
■ APD/NAL tilpasningsområde


HE11 680

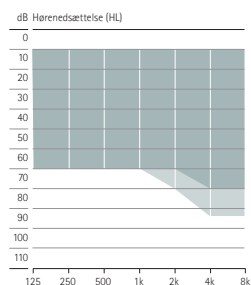


HE11 680

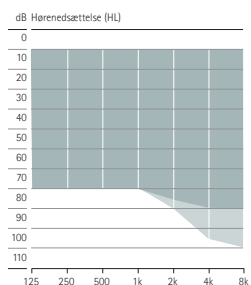


HE11 680

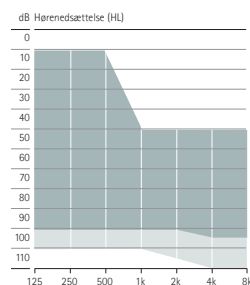


HE11 680

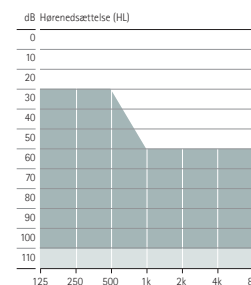


SlimTube 4.0

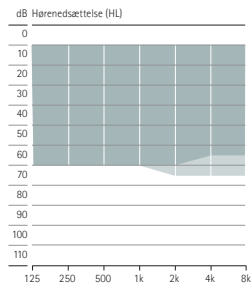

SlimTube 4.0

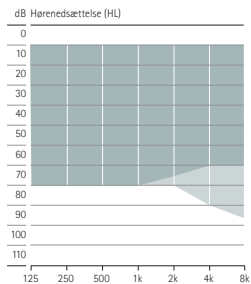

SlimTube 4.0

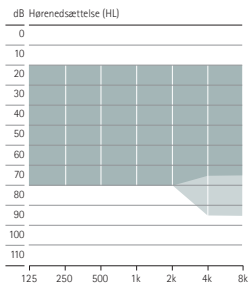

Mild til moderat  
hørenedsættelse<sup>3</sup>

Mild til moderat-svær  
hørenedsættelse<sup>3</sup>

Mild til kraftig  
hørenedsættelse<sup>3</sup>

Kraftig til svær  
hørenedsættelse<sup>3</sup>

1 IP68 betyder, at høreapparatet er vand- og støvafvisende. Det er blevet testet og tåler kontinuerlig nedvaskning i en meter ferskvand i 60 minutter og otte timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

2 Den faktiske opladningstid afhænger af den resterende batterilevetid og kan påvirkes af temperaturforholdene.

3 Ved brug af DSL tilpasningsrationale

Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse fra Sonova AG's side sker på licens.

# Ydelsesniveauer

AutoSense Sky OS 5.0	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
Tale i kraftig støj	•			
Tale i bil	•			
Komfort i ekko	•			
Musik	•	•		
Komfort i støj	•	•	•	
Tale i støj	•	•	•	•
Rolig situation	•	•	•	•
Medie: tale ± mic	•	•	•	•
Medie: musik ± mic	•	•	•	•
<b>Yderligere programmer</b>				
Maks. yderligere programmer	4	4	4	4
Komfort i ekko	•			
Tale i kraftig støj	•	•		
Tale i 360°	•	•		
Tale i støj	•	•	•	•
Rolig situation	•	•	•	•
Komfort i støj	•	•	•	•
Musik	•	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•	•
Individuelt program	•	•	•	•
Telefon via telespole ± mic <sup>1</sup>	•	•	•	•
<b>Streamingprogrammer</b>				
RogerDirect™ ± mic	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™ ± mic	•	•	•	•
Telefonopkald + mikrofon	•	•	•	•

Funktioner	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
SpeechSensor	•			
Speech Enhancer	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Dynamic Noise Cancellation	•	•		
Motion Sensor Hearing <sup>2</sup>	•	•	•	
RogerDirect	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Tap Control <sup>2</sup>				
- Siri/Google Assistant	•	•		
- Sæt streaming på pause/genoptag	•	•		
- Accepter/afslut telefonopkald	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
Roger™ og retningsbestemt indstilling	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•
Bredbåndsbooster <sup>3</sup>	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Klientbaseret indstilling	•	•	•	•
auto Acclimatization	•	•	•	•
Niveau for omgivende lyde	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AQV	•	•	•	•
Finjustering af kanaler	20	20	16	12

SmartSpeech Technology

1 Fås ikke til Phonak Sky L-PR  
2 Fås kun til Phonak Sky L-PR  
3 Fås kun til Phonak Sky L-UP

## Tilpasning

	Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.1 eller nyere	9.0 eller nyere	9.1 eller nyere	9.0 eller nyere
Noahlink Wireless/ Noahlink Wireless 2	•	•	•	•
NOAHLink			•	•
HI-PRO, HI-PRO2			•	•

# Koblingsmulighed

		Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
<b>Lydudgang</b>					
Standard hook	Dæmpet (HE11 680), transparent og 6 yderligere farver til børn	•	•	•	•
	Udæmpet (HE 11) kun i transparent farve			•	•
Børnesikret hook (mini)	Dæmpet (HE11 680), transparent og 6 yderligere farver til børn	•	•	•	•
	Udæmpet (HE 11) kun i transparent farve			•	•
SlimTube 4.0	Tilgængelig til venstre og højre i fem forskellige længder (00, 0, 1, 2, 3)	•	•	•	
<b>Øreprop til SlimTube</b>					
Lydkuppel	Cap lydkuppel	•	•	•	
	Åben lydkuppel Tilgængelig i tre størrelser (S, M, L)	•	•	•	
	Vented lydkuppel Tilgængelig i tre størrelser (S, M, L)	•	•	•	
	Power lydkuppel Tilgængelig i tre størrelser (S, M, L)	•	•	•	
SlimTip	Akryl	•	•	•	
	Silikone	•	•	•	
<b>Øreprop til hook</b>					
Øreprop		•	•	•	•

## Farver på hus og hook

### Hus



H0  
Beige



P1  
Sand Beige



P3  
Sandalwood



P4  
Chestnut



P5  
Champagne



P6  
Silver Gray



P7  
Graphite Gray



P8  
Velvet Black



M6  
Lava Red



M7  
Blue Ocean



M8  
Majesty Purple



Q2  
Electric Green



Q3  
Caribbean Pirate



T3  
Precious Pink

### Hook



R1  
Green



R2  
Yellow



R3  
Pink



R4  
Orange



Q6  
Blue



Q7  
Purple



13  
Transparent

# Phonak Sky L-PR oplader

## Phonak Charger Combi BTE 2

Sky L-PR har alle Lumity funktionerne samt fordelen ved at være genopladelig. Klienter kan nyde en hel dags hørelse inklusive streaming\*.

\* Forventet batterilevetid på 16 timer, inklusive 10 timer med Roger eller lydstreaming.



## Phonak Sky L Trial

De nye Phonak Sky L Trial høreapparater kan hurtigt indstilles til det ønskede ydelsesniveau for at passe til din anbefaling. Dette giver dig mulighed for at tilpasse din klient med den optimale hørreløsning allerede under den første aftale eller udlevere et andet, når klientens høreapparat er til reparation. Sky L Trial apparaterne inkluderer også en præinstalleret Roger modtager, så alle Roger mikrofoner nemt kan demonstreres og afprøves.

## Phonak Sky L Bluetooth® versioner

Direkte opkald/lydstreaming

Trådløs Bluetooth 4.2 teknologi og de fleste ældre Bluetooth telefoner

## Trådløs kommunikationsportefølje

	Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
<b>Trådløst tilbehør</b>				
TV Connector	•	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•	•
<b>Roger</b>				
Roger mikrofoner	•	•	•	•
<b>App</b>				
myPhonak Junior	•	•	•	•

Besøg [www.phonak.com/sky-lumity](http://www.phonak.com/sky-lumity) for yderligere oplysninger

Besøg [www.phonak.com/roger-for-education](http://www.phonak.com/roger-for-education) for yderligere oplysninger om Roger mikrofoner

Besøg [www.phonak.com/myphonak-junior](http://www.phonak.com/myphonak-junior) for yderligere oplysninger om myPhonak Junior

# life is on

Siden 1947 har Phonak målrettet forsøgt at forbedre livskvaliteten ved at åbne op for nye akustiske verdener. Allerede dengang da vi blev grundlagt, blev vores virksomhed drevet ud fra en klar overbevisning: Vi tror på, at god hørelse er lig med velvære og dermed er essentielt for at kunne få det fulde udbytte af livet. Rent faktisk er høresansen direkte forbundet med socialt, emotionelt, kognitivt og fysisk velvære. I dag og i fremtiden stræber vi efter at tilbyde det største udvalg af innovative høreøsninger. Og sammen med vores hørespecialister vil vi fortsat fokusere på det vigtigste: forbedre taleforståeligheden, ændre menneskers liv og have en positiv effekt på samfundet som helhed.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



027-0697-08/V1.00/2024-02/NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved