

# Phonak Naída™ Marvel



## Kærlighed ved første lyd

Du kan finde flere oplysninger på [www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com)

# Med Phonak Naída™ Marvel introducerer vi multifunktionelle høreapparater, der giver en ”kærlighed ved første lyd”-oplevelse

Når vi siger "kærlighed ved første lyd", mener vi ikke blot den første gang, klienterne prøver Phonak Naída™ Marvel høreapparaterne – vi mener hver eneste gang, de bruger dem. Fra det øjeblik, du tilpasser klientens høreapparater, kan de forvente en lyd kvalitet i særklasse.

Denne nye generation af Phonak-teknologi genkender og tilpasser automatisk lytteoplevelsen, så den passer til flere lyttesituationer end nogensinde før<sup>1</sup>. Med AutoSense OS™ 3.0 og Binaural VoiceStream Teknologi™ kan dine klienter nyde bedre hukommelsesgenkaldelse og reduceret lyttebesvær i støj.<sup>2</sup>


## Vigtigste funktioner:

- Bedre taleforståelse i støj med Roger<sup>3</sup>
- Reduceret lyttebesvær i støj\*<sup>2</sup>
- Bedre hukommelsesgenkaldelse i støj\*<sup>2</sup>
- Verdens første høreapparat med klassificering af streamede lyd signaler<sup>1</sup>

## Pålidelighed

Naída er verdens mest populære høreapparat<sup>4</sup>. Førsteklasses ingeniørkunst og design gør Naída Marvel til en meget effektiv og diskret løsning for personer med kraftig til svær hørenedsættelse. Siden 1978, hvor vores første ultraeffektive høreapparat blev lanceret, har vi løbende udviklet høreapparater med det formål at forbedre klientens liv. Den nye Naída M-SP, som er baseret på den anerkendte Marvel teknologi, omfatter ultraeffektive premium-høreapparater med avancerede teknologiske løsninger, der til enhver tid leverer den ydeevne, som er nødvendig for at håndtere klienternes hørenedsættelse.

Klienter med kraftig til svær hørenedsættelse er afhængige af deres høreapparater og har brug for en løsning, der kan levere varen. Det robuste hus gør det muligt for klienten at håndtere sine aktiviteter og hverdagslivet, vel vidende at høreapparaterne aldrig lader dig i stikken og klarer selv de mest krævende lyttesituationer.

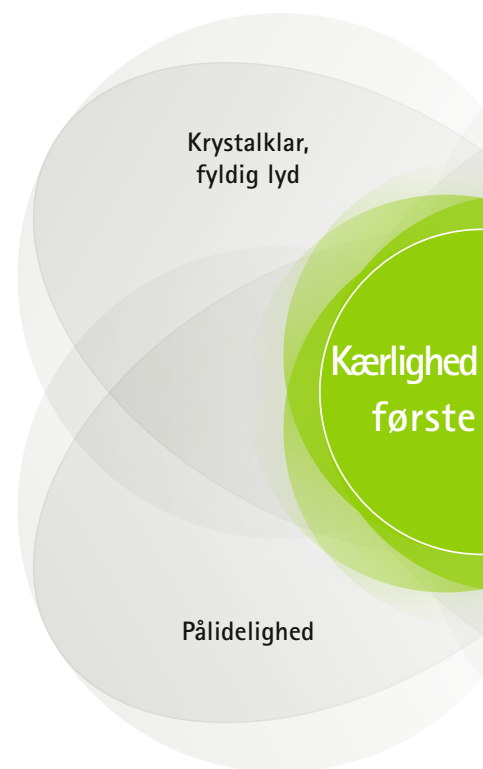


# Produktbeskrivelse



**Naída M-SP**  
**Naída M-SP Trial**  
 M90/M70/M50/M30

Batteristørrelse		13
Multi -funktionsknap		•
Telespole		•
Bluetooth®		•
Nano-coating		•
IP-rating		IP68 <sup>5</sup>
Mål	L x B x D	40,0 x 16,9 x 8,5 (1,57 x 0,67 x 0,33)
	Vægt	4,4 g/0.155 oz
		<b>HE11</b> <b>HE11 680</b>
Maks. Power Output (dB SPL)	2 cc-kobler	139      133
Maks. gain (dB)	2 cc-kobler	81      75
Frekvensområde (Hz)		<100 - >5000      <100 - >5000
Strømforbrug (mA)		2,1      2,0

## Tilpasningsområde

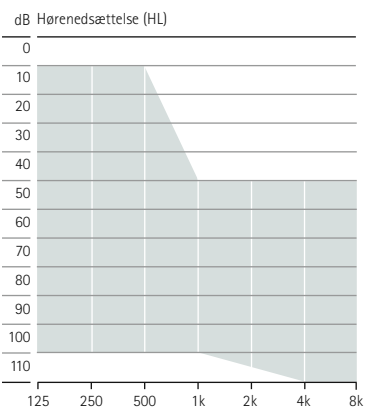

Moderat til svær hørenedsættelse,  
 alle audiometriske konfigurationer

■ HE11 680

# Husfarver



**P1**  
Sand Beige



**P3**  
Sandalwood



**P4**  
Chestnut



**P5**  
Champagne



**P6**  
Silver Gray



**P7**  
Graphite Gray



**P8**  
Velvet Black



**T7**  
Alpine White



**HO**  
Beige

## Ydelsesniveauer

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
<b>AutoSense OS 3.0</b>				
Rolig situation	•	•	•	•
Tale i støj	•	•	•	•
Komfort i støj	•	•	•	
Musik	•	•		
Tale i kraftig støj	•			
Tale i bil	•			
Komfort i ekko	•			
Medie:tale + mic	•	•	•	•
Medie:musik + mic	•	•	•	•
<b>Yderligere programmer</b>				
Maks. yderligere programmer	3	3	3	3
Komfort i ekko	•			
Tale i kraftig støj	•	•		
Tale i 360°	•	•		
Tale i støj	•	•	•	•
Rolig situation	•	•	•	•
Komfort i støj	•	•	•	•
Musik	•	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•	•
Individuelt program	•	•	•	•
<b>Streamingprogrammer</b>				
RogerDirect + mic	•	•	•	•
PartnerMic + mic	•	•	•	•
Telefonopkald + mic	•	•	•	•

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
<b>Funktioner</b>				
UltraZoom	•	•	•	•
SNR-Boost	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•
Klientbaseret finindstilling	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•	
Finjustering af kanaler	20	16	12	8
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
WindBlock	•	•		
EchoBlock	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync	•	•	•	•
Akustisk Optimeret Ventilation	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
Auto acclimatization	•	•	•	•
Niveau for omgivende lyde	•	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•	•
Roger og retningsindstilling	•	•	•	

## Tilpasning

Naída M-SP  
Naída M-SP Trial  
M90/M70/M50/M30

Phonak Target	6.2 eller nyere
Noahlink Wireless	•
Noahlink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

# Koblingsmulighed

Lyddudgang	Hook	Dæmpet (HE11 680) eller udæmpet (HE11), transparent	
	SlimTube 4.0	Fås til venstre/højre side og i fem forskellige længder (00, 0, 1, 2, 3)	
Øredel til SlimTube	Lydkuppel	Cap dome	
		Åben kuppel	fås i tre størrelser (S, M, L)
		Ventileret kuppel	fås i tre størrelser (S, M, L)
	SlimTip	Power kuppel	fås i tre størrelser (S, M, L)
		Akryl	
		Silikone	
	Titanium		
Til hook	Øreprop		
	Universal øretip		

## Phonak Trial™

De nye Phonak Naída M Trial-høreapparater kan hurtigt indstilles til det ønskede ydelsesniveau for at passe til din anbefaling. De giver dig mulighed for at give din klient den optimale høreløsning allerede ved første aftale eller at tilbyde et låneapparat, når klientens høreapparat er til reparation.

- 1 Rodrigues, T., & Liebe, S. (2018). AutoSense OS™ 3.0. The new & enhanced automatic operating system. Phonak Insight, retrieved from [www.phonakpro.com/evidence](http://www.phonakpro.com/evidence), åbnet den 19. februar 2020.
- 2 Winneke, A., Schulte, M. & Latzel, M. (2019). The effect of spatial noise processing in hearing aids on neural correlates of listening and memory effort: an EEG study. Manuskript under udarbejdelse. Forventes primo 2020.
- 3 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. *American Journal of Audiology*, 23(2), 201-210.
- 4 Taphuntsang, D. (2017) Market Research ID 924. Skriv til os på adressen [marketinsight@phonak.com](mailto:marketinsight@phonak.com), hvis du vil have flere oplysninger. Baseret på kundetilfredshedsundersøgelsen 2017.
- 5 IP68 betyder, at høreapparatet er vandafvisende og støvtæt. Det er blevet testet og tåler kontinuerlig nedsænkning i 1 meter vand i 60 minutter og 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

Brug af disse mærker fra Sonova AG er underlagt licens.

IOS er et varemærke tilhørende Cisco Technology, Inc.

Android er et varemærke tilhørende Google, LLC.

# Phonak Naída Marvel Bluetooth®-versioner

---

## Direkte opkald/audiostreaming

---

Trådløs Bluetooth® 4.2-teknologi og de fleste ældre Bluetooth-telefoner

---

Bluetooth®-ordet og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

## Trådløs kommunikationsportefølje

		Naída M-SP Naída M-SP Trial M90/M70/M50/M30
Trådløst tilbehør	TV Connector	•
	Phonak PartnerMic	•
	Phonak RemoteControl	•
Roger	Roger-mikrofoner	•
App	myPhonak	•
	Phonak Guide	•


Du kan finde flere oplysninger om Naída Marvel ved at besøge [www.phonakpro.com/naidamarvel](http://www.phonakpro.com/naidamarvel)

Du kan finde oplysninger om Roger-mikrofoner på [www.phonakpro.com/roger](http://www.phonakpro.com/roger)

Du kan finde flere oplysninger om Phonak-apps på [www.phonakpro.com/smartapps](http://www.phonakpro.com/smartapps)

# Mageløse Marvel

Naída Marvel er de første og mest avancerede bag-øret-høreapparater i verden med håndfri opkald, som streamer til iOS, Android eller andre Bluetooth-kompatible enheder. Nu kan klienterne få gavn af håndfri telefonopkald ved hjælp af de indbyggede mikrofoner. Derudover kan lydmeddelelser afspilles i høreapparaterne. Naída gør det også muligt at streame musik, videoer, e-bøger, podcasts m.m. i stereo.

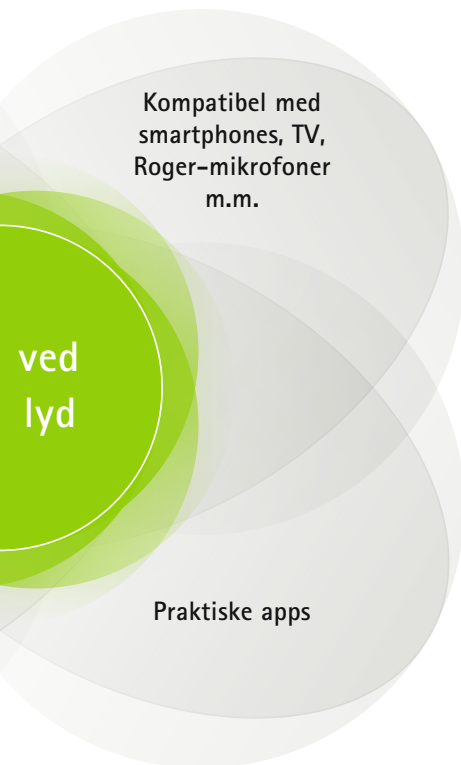

Naída er udstyret med patenteret AirStream™-teknologi, der gør det muligt at streame fra ethvert fjernsyn eller stereosystem. Med den brugervenlige plug and play-løsning TV Connector kan klienterne se TV-programmer og film. Den fungerer ligesom trådløse hovedtelefoner – eller måske endda endnu bedre, fordi Marvel høreapparaterne kan skelne mellem streamede tale- og musiksignaler og automatisk justere lyd kvaliteten derefter.

## Vigtigste funktioner:

- Tilslutning til smartphones – iOS og Android
- Tilslutning til en lang række elektroniske hverdagsprodukter
- Høreapparaterne fungerer som trådløse hovedtelefoner med stereolyd
- Ekstra lang streamingtid takket være AirStreamTeknologi

Roger™-teknologien tilbyder en fremragende hørepræstation i støj og på afstand.<sup>3</sup> Phonak Naída™ Marvel har RogerDirect™, som gør det muligt for Roger-teknologi at streame direkte til Marvel høreapparater uden tilslutning af en ekstern modtager.

## Vigtigste funktioner:

- Marvel og Roger – den optimale løsning til udfordrende lyttesituationer
- Udviklet til at forbedre taleforståeligheden i støj og på afstand
- Diskrete og attraktive løsninger

# Apps-olut mageløs!

Phonaks nye digitale serviceplatform er udviklet til at forbedre klienternes personlige lyttebehov. Via **myPhonak appen** kan dine klienter vælge at dele oplysninger med dig, du kan tilpasse deres lytteoplevelse i realtid, og med den avancerede fjernbetjeningsfunktion kan dine klienter selv justere deres høreapparater til lige netop deres behov.

## Vigtigste funktioner:

- Tilpasning af lyd i realtid

# Life is on

Hos Phonak har vi den holdning, at en god hørelse har stor betydning for at få det fulde udbytte af livet. I mere end 70 år har vi udviklet banebrydende høreløsninger, der gør en stor forskel i hverdagen – både på det sociale og det følelsesmæssige plan. Life is on.

[www.phonakpro.dk](http://www.phonakpro.dk)