

Phonak Sky™ Marvel



Kærlighed ved første lyd

Du kan finde flere oplysninger på www.phonakpro.com

Sky Marvel indeholder meget avanceret teknologi, der giver optimal lyd kvalitet, og børnene er sikret god komfort, høj sikkerhed og stor robusthed i alle aspekter af deres liv.

De nye høreapparater i Sky Marvel-serien introducerer en unik kombination af verdensførende teknologi kombineret med helt særlige funktioner, der er skræddersyet til børn. Vi bestræber os på udelukkende at tilbyde børnene de bedst mulige løsninger til udvikling af tale og sprog, taleforståelighed og brugervenlighed. Sky Marvel er udviklet til at maksimere både kvaliteten og kvantiteten af lydinput og understøtter dermed barnets sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling med kærlighed fra aller første lyd.

Klar, fyldig lyd

Verdens første operativsystem, der er skræddersyet til børn

AutoSense Sky OS 3.0 er designet til at genkende de udfordrende lyttesituationer, som børn oplever hver dag, og til at tilbyde den helt rette kombination af adaptiv støjreduktion, som giver større komfort og mindre lytteanstrengelse.¹ Vi introducerer med Sky Marvel AutoSense Sky OS 3.0, som nu også klassificerer streamede signaler. Takket være dette får børnene klar fyldig lyd, når de streamer tale, og optimeret lyd kvalitet, når de streamer musik.

Kompatibelt med smartphones, Roger™-mikrofoner m.m.

Direkte streaming fra både iOS® og Android™

Som det eneste høreapparat til børn kan Sky Marvel sluttes direkte til næsten alle smartphones og Bluetooth®-aktiverede enheder. Det kan sluttes til to enheder og streamer lyd til begge ører. I en moderne verden, hvor intelligente enheder spiller en central rolle både i et barns sociale liv og skolegang, giver Sky Marvel intuitiv adgang og streaming i stereolyd kvalitet for både tale, apps, musik, e-bøger og meget mere.





Direkte streaming fra Roger-mikrofoner

Med RogerDirect™ har børn nu adgang til Roger-teknologi uden behovet for en ekstern modtager. Roger-modtagere kan installeres trådløst i Sky Marvel-høreapparater, og du slipper dermed for problemerne med kompleks modtagerkompatibilitet. Denne uovertrufne kombination tilbydes nu i den mindste pakke nogensinde, hvilket giver børn nemmere adgang til flere ord og samtaler.² Sky med Roger er nu op til 42 % mindre og 32 % lettere end den tidligere generation.*

Genopladelighed

Sky M-PR kan lades helt op på blot 3 timer og tilbyder en hel dags hørelse inklusiv 10 timers Roger- eller mediestreaming.** Forældre, omsorgspersoner, lærere og børnene selv får den ro i sindet, der følger med visheden om, at høreapparaterne er tændt hele dagen lang.

Design, der er specialudviklet til børn

Branchens bedste robusthed

Med Sky Marvel har børn frihed til at lege, selv hvis høreapparaterne bliver lidt våde. Marvel høreapparater er bygget med et robust hus, der gør dem vand- og støvafvisende (IP68-kapsling).***

Børnesikring

Unge lyttere er beskyttet takket være den børnesikrede ørehook og den nye børnesikrede batteriskuffe, da batterierne sidder i høreapparatet godt beskyttet mod små nysgerrige fingre og munde. Med Sky M-PR kan det indbyggede lithium-ion-batteri ikke fjernes, og der er dermed ikke risiko for, at det kan sluges ved en fejl.

Nyt indikatorlys

Sky Marvel har et nyt indikatorlys, som er intuitivt og diskret og tydeligt angiver høreapparatets status.

² Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. *Journal of Speech, Language and Hearing Research*, Vol. 61, 399-409.

* Sammenligning af Sky M-M og Sky B-P + Roger 18 (designintegreret modtager)

** Den faktiske opladningstid afhænger af den resterende batterilevetid, men den overskrider ikke 3 timer.

*** IP68 betyder, at høreapparatet er vandafvisende og støvtæt. Det er blevet testet og tåler kontinuerlig nedsænkning i 1 meter vand i 60 minutter og 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC 60529.


Produktbeskrivelse



Sky M-M
Sky M-M Trial
M90/M70/M50

Batteri		312	
Multifunktionsknap		•	
Telespole		•	
Bluetooth®		•	
Nano-coating		•	
IP-klassificering		IP68	
Mål (L x B x D)	mm	31,3 x 14,1 x 7,3	
	tommer	1,23 x 0,56 x 0,29"	
Vægt	g/oz	2,18/0,077	
Opladningstid	0 % til 100 %		
	0 % til 80 %		
	30 min. til tilpasning		
Maks. power output (2 cc-kobler)		Tynd slange 4.0	HE11 680
	dB SPL	122	128
	dB	58	63
Frekvensområde	Hz	<100 - 6500	<100 - 8000
Strømforbrug	mA	1,5	1,6

Tilpasningsområde

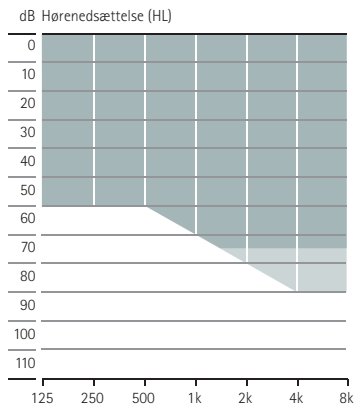


Mild til moderat/svær hørenedsættelse, alle audiometriske konfigurationer



Sky M-PR
Sky M-PR Trial
M90/M70/M50

Batteri		indbygget genopladeligt	
Multifunktionsknap		•	
Telespole		•	
Bluetooth®		•	
Nano-coating		•	
IP-klassificering		IP68	
Mål (L x B x D)	mm	36,7 x 16,4 x 8,5	
	tommer	1,44 x 0,65 x 0,33"	
Vægt	g/oz	3,71/0,131	
Opladningstid	0 % til 100 %	3 t	
	0 % til 80 %	1,5 t	
	30 min. til tilpasning	10 min.	
Maks. power output (2 cc-kobler)		Tynd slange 4.0	HE11 680
	dB SPL	127	130
	dB	60	66
Frekvensområde	Hz	<100 - 7000	<100 - 6800
Strømforbrug	mA		

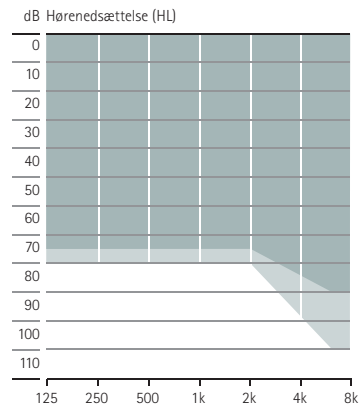


Mild til svær hørenedsættelse, alle audiometriske konfigurationer



Sky M-SP
Sky M-SP Trial
M90/M70/M50

Batteri		13	
Multifunktionsknap		•	
Telespole		•	
Bluetooth®		•	
Nano-coating		•	
IP-klassificering		IP68	
Mål (L x B x D)	mm	40 x 16,9 x 8,5	
	tommer	1,57 x 0,67 x 0,33"	
Vægt	g/oz	4,4/0,155	
Opladningstid	0 % til 100 %		
	0 % til 80 %		
	30 min. til tilpasning		
Maks. power output (2 cc-kobler)		HE11	HE11 680
	dB SPL	139	133
	dB	81	75
Frekvensområde	Hz	<100 - 5000	<100 - 5000
Strømforbrug	mA	2,1	2,0

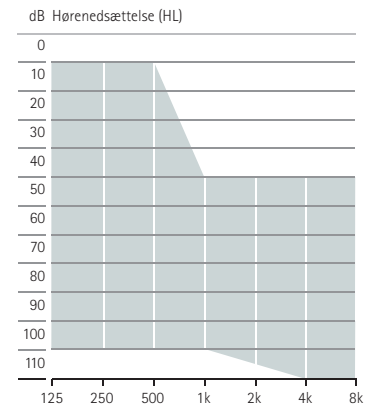

Mild til meget svær hørenedsættelse, alle audiometriske konfigurationer

■ Tynd slange 4.0
■ HE11 680

Farver på hus og hook

Hus



Hook



Ydelsesniveauer

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50
AutoSense Sky OS 3.0			
Rolig situation	•	•	•
Tale i støj	•	•	•
Komfort i støj	•	•	•
Musik	•	•	
Tale i kraftig støj ³	•		
Speech in car	•		
Komfort i ekko	•		
Medietale + mikrofon	•	•	•
Mediemusik + mikrofon	•	•	•
Yderligere programmer			
Maks. yderligere programmer	3	3	3
Komfort i ekko	•		
Tale i kraftig støj	•	•	
Tale i 360°	•	•	
Tale i støj	•	•	•
Rolig situation	•	•	•
Komfort i støj	•	•	•
Musik	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•
Tilpasset program	•	•	•
Streamingprogrammer			
RogerDirect + mikrofon	•	•	•
PartnerMic + mikrofon	•	•	•
Telefonopkald + mikrofon	•	•	•

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50
Funktioner			
UltraZoom	•	•	•
SNR-Boost	•	•	•
DuoPhone	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•
Brugerbaseret finindstilling	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•
Finjustering af kanaler	20	16	12
WhistleBlock	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•
WindBlock	•	•	
EchoBlock	•		
SoundRelax	•	•	
QuickSync	•	•	•
Akustisk optimeret ventilation	•	•	•
auto Acclimatization	•	•	•
Niveau for omgivende lyde	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•
Roger og retningsindstilling	•	•	•

Tilpasning

	Sky M-M Sky M-M Trial M90/M70/M50	Sky M-PR Sky M-PR Trial M90/M70/M50	Sky M-SP Sky M-SP Trial M90/M70/M50
Phonak Target	6.1 eller nyere	6.1 eller nyere	6.2 og nyere
Noahlink Wireless	•	•	•
Noahlink			•
HI-PRO og HI-PRO 2			•

Koblingsmulighed

Lyddugang	Standardhook	Dæmpet (HE 11 680) transparent og 6 yderligere børnevenlige farver (se side 4) til Sky M-M og Sky M-PR Ikke dæmpet (HE 11) kun transparent til Sky M-SP	
	Børnesikret hook	Minidæmpet (HE 11 680) transparent og 6 yderligere børnevenlige farver (se side 4) til Sky M-M og Sky M-PR Minidæmpet (HE 11) kun i gennemsigtig farve til Sky M-SP	
	Tynd slange 4.0	Fås til venstre/højre side og i fem forskellige længder (00, 0, 1, 2, 3)	
Ørestykke til SlimTube	Lydkuppel	Cap dome	
		Åben kuppel	fås i tre størrelser (S, M, L)
		Ventileret kuppel	fås i tre størrelser (S, M, L)
		Power kuppel	fås i tre størrelser (S, M, L)
	SlimTip™	Akryl	
		Silikone	
		Titanium	
Ørestykke til hook	Øreprop		
	Universal øretip		

Phonak Sky Marvel Trial

De nye Phonak Sky M Trial-høreapparater kan hurtigt indstilles til det ønskede ydelsesniveau for at passe til din anbefaling. De forskellige niveauer af teknologi i ét Phonak Sky M Trial høreapparat giver mange muligheder for at levere en høreløsning ved første aftale eller bygge bro under reparation.

Phonak Charger BTE RIC

Denne oplader er velegnet til alle genopladelige Marvel BTE- og RIC-høreapparater. Den har plads til store ørepropper, en USB-C-opladningsindgang og et indikatorlys.



Phonak Sky M Bluetooth®-versioner

Direkte opkald/audiostreaming

Trådløs Bluetooth® 4.2-teknologi og de fleste ældre Bluetooth-telefoner

Trådløs kommunikationsportefølje

		Sky M-M Sky M-M Trial M90/M70/M50	Sky M-PR Sky M-PR Trial M90/M70/M50	Sky M-SP Sky M-SP Trial M90/M70/M50
Trådløst tilbehør	TV Connector	•	•	•
	Phonak PartnerMic™	•	•	•
	Phonak RemoteControl	•	•	•
Roger™	Roger-mikrofoner	•	•	•

Du kan få nærmere oplysninger på:



www.phonakpro.com/skymarvel



www.phonakpro.com/roger

Life is on

Hos Phonak har vi den holdning, at en god hørelse har stor betydning for at få det fulde udbytte af livet. I mere end 70 år har vi udviklet banebrydende høreløsninger, der gør en stor forskel i hverdagen – både på det sociale og det følelsesmæssige plan. Life is on.

www.phonakpro.dk