


Mageløse Virto M-312

Phonak Virto M-312 er det første kundetilpassede høreapparat i verden med håndfri opkald, som streamer lydindhold direkte fra iOS®, Android™ eller andre Bluetooth®-kompatible enheder. Derudover kan telefonens lydmeddelelser indstilles til at blive afspillet i Marvel høreapparaterne. Marvel gør det også muligt at streame musik, videoer, e-bøger, podcasts m.m. i stereo.

Life is on

Hos Phonak har vi den holdning, at en god hørelse har stor betydning for at få det fulde udbytte af livet. I mere end 70 år har vi udviklet banebrydende høreoplysninger, der gør en stor forskel i hverdagen – både på det sociale og det følelsesmæssige plan. Life is on.

www.phonakpro.dk

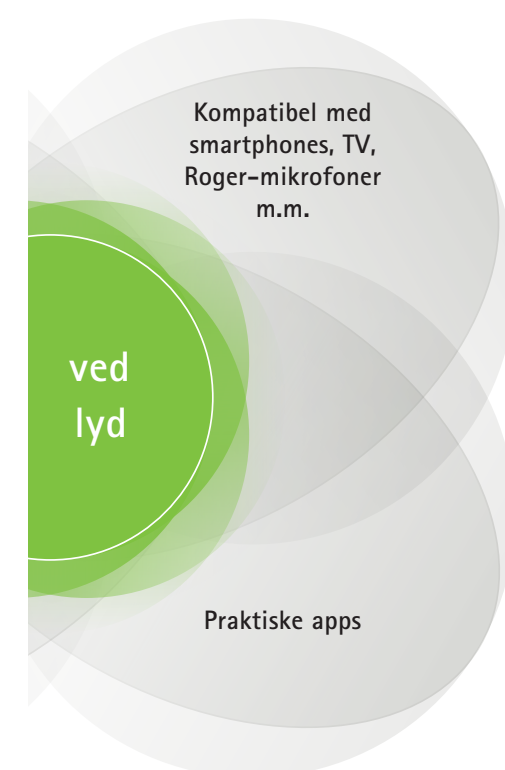

Phonak Virto M-312 er også udstyret med patenteret AirStream™-teknologi, der gør det muligt at streame fra ethvert fjernsyn eller stereosystem. Med den brugervenlige plug and play-løsning Phonak TV Connector kan brugerne se TV-programmer og film. Den fungerer ligesom trådløse hovedtelefoner eller måske endda endnu bedre, fordi Marvel høreapparaterne kan skelne mellem streamede tale- og musiksignaler og automatisk justere lyd kvaliteten derefter.

Vigtigste funktioner:

- Tilslutning til smartphones – iOS og Android
- Tilslutning til en lang række elektroniske hverdagsprodukter
- Høreapparaterne fungerer som trådløse hovedtelefoner med stereolyd
- Ekstra lang streamingtid takket være AirStream Teknologi

Med RogaDirect™ er Phonak Virto M-312 det eneste tilpassede høreapparat, der giver Roger-teknologi mulighed for at streame direkte uden en ekstern modtager.

Vigtigste funktioner:

- Udviklet til at forbedre taleforståeligheden i støj og på afstand
- Diskrete og attraktive løsninger med bedre hørepræstation i støj, både tæt på og over større afstande
- Virto Marvel og Roger er den optimale løsning til udfordrende lyttesituationer

Apps-olut mageløs!

Phonaks nye digitale serviceplatform er udviklet til at forbedre klienternes personlige lyttebehov. Via myPhonak-appen kan dine klienter vælge at dele oplysninger med dig, du kan tilpasse deres lytteoplevelse i realtid, og med den avancerede fjernbetjeningsfunktion kan dine klienter selv justere deres høreapparater til lige netop deres behov.

Vigtigste funktioner:

- Tilpasning af lyd i realtid

Phonak Virto™ Marvel



Med Phonak Virto™ Marvel introducerer vi multifunktionelle høreapparater, der giver en ”kærlighed ved første lyd”-oplevelse

Kærlighed ved første lyd – hver eneste dag

Når vi siger "kærlighed ved første lyd", mener vi ikke blot den første gang, klienterne prøver Phonak Virto™ Marvel høreapparaterne – vi mener hver eneste gang, de bruger dem. Fra det øjeblik, du tilpasser klientens Marvel høreapparater, kan de forvente en **lydkvalitet i særklasse**.

Vigtigste funktioner Virto M-312:

- Exceptionel lydkvalitet fra første tilpasning¹
- Bedre taleforståelse i støj²
- Reduceret lyttebesvær i støj³
- Verdens første kundetilpassede høreapparat med klassificering af streamede lydssignaler⁴

Vigtigste funktioner Virto M-NW O:

- Exceptionel lydkvalitet fra første tilpasning¹

Individuelt tilpasset

Biometrisk kalibrering

Phonak Virto™ Marvel høreapparater med biometrisk kalibrering er præcist kalibreret til klientens individuelle øreanatomi for at opnå en bedre hørepræstation. Softwaren identificerer over 1600 biometriske datapunkter og beregner derefter de unikke kalibreringsindstillinger for hvert enkelt Virto M-høreapparat. Kalibreringsindstillingerne sikrer forbedret nøjagtighed og præcision samt en 2 dB forbedring i retningsbestemmelse sammenlignet med Phonak-produkter uden biometrisk kalibrering.⁵

Akustisk Optimeret Ventilation (AOV)

Valget af ventilation er en præcis balancegang mellem okklusion, feedback, hørbarhed og lydkvalitet. AOV er vores mest populære ventilationsfunktion, da den tager højde for størrelsen og formen på klientens høreapparater samt deres audiometriske konfiguration og bestemmer, hvilken ventilation der minimerer feedback og okklusion og maksimerer hørepræstationer.

Virto M-Titanium med Titanium FitGuide

Titanium er kendt for sin styrke og holdbarhed. Da de klienttilpassede skaller 3D-printes i dette ekstraordinære materiale, er dette det mindste klienttilpassede høreapparat fra Phonak nogensinde. Takket være Titanium FitGuide opnår mere end 50 % af brugerne en endnu mere diskret og i gennemsnit 2,5 mm⁶ dybere tilpasning af Virto M-Titanium. Det er forskellen mellem diskret og meget diskret.

EasyView Otoblock

Få dybere aftryk med EasyView Otoblock (EVOB). EVOB sættes direkte på standardotoskopets speculum. Den transparente linse i den ene ende af EVOB sikrer fuld visualisering af øregangen og trommehinden under indføring. Aftryk af øret er i gennemsnit 6 mm længere med EVOB sammenlignet med standardaftryksprotokollen.⁷



027-2999-0812/001019-11/rev. © 2019-2022 Sonova AG. All rights reserved.

sonova
HEAR THE WORLD





Sonova AG · Laubisrütstrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz

CE
0459

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Produktbeskrivelse

	 Virto M-Titanium M90/M70	 Virto M-10 NW O M90/M70/M50/M30	 Virto M-312 NW O M90/M70/M50/M30	 Virto M-312 M90/M70/M50/M30
Effektniveau				
M	•	•	•	•
P	•	•	•	•
SP	•	•	•	•
UP**				•
Hardwarekonfiguration/ekstraudstyr/teknologi				
Batteristørrelse	10	10	312	312
Trykknop (program/volumen)	•	•	•	•
EasyPhone (til akustisk telefon)	•	•	•	
MiniControl (til programændring eller regulering af volumen)	•	•		
Volumenkontrol (hjul)			•	•
Telespole	•	•	•	
Mikrofonteknologi	Omni	Omni	Omni	Retningsbestemt
IP-rating (uden volumenkontrol)	IP68*	IP68*		
Bluetooth®				•
Binaural VoiceStream Teknologi				•

Farver

Faceplate-farver



Skalfarver



Skaltype

	 Virto M-Titanium	 Virto M-10 NW O	 Virto M-312 NW O	 Virto M-312
IIC	•	•		
CIC	•	•	•	
MC		•	•	
ITC		•	•	•
HS		•	•	•
FS		•	•	•

Ydelsesniveauer

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30	Funktioner	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
AutoSense OS™ 3.0					UltraZoom	•	•	•	•
Rolig situation	•	•	•	•	SNR-Boost	•	•	•	
Tale i støj	•	•	•	•	DuoPhone	•	•	•	
Komfort i støj	•	•	•		SoundRecover2	•	•	•	•
Musik	•	•			Klientbaseret finindstilling	•	•	•	•
Tale i kraftig støj*	•				Finjustering af kanaler	20	16	12	8
Tale i bil	•				WhistleBlock	•	•	•	•
Komfort i ekko	•				NoiseBlock	•	•	•	•
Medie: tale + mic*	•	•	•	•	WindBlock	•	•		
Medie: musik + mic*	•	•	•	•	EchoBlock	•			
Yderligere programmer					SoundRelax	•	•		
Maks. yderligere programmer (M-312 NW O)	3* / 5 (6)	3* / 5 (6)	3* / 5 (6)	3* / 5 (6)	QuickSync*	•	•	•	•
Komfort i ekko	•				Akustisk Optimeret Ventilation	•	•	•	•
Tale i kraftig støj*	•	•			Tinnitus Balance	•	•	•	•
Tale i 360**	•	•			Auto acclimatization	•	•	•	•
Tale i støj	•	•	•	•	Niveau for omgivende lyde	•	•	•	•
Rolig situation	•	•	•	•	RogerDirect*	•	•	•	•
Komfort i støj	•	•	•	•	Roger og retningsindstilling*	•	•	•	
Musik	•	•	•	•					
Akustisk telefon	•	•	•	•					
Individuelt program	•	•	•	•					
Streamingprogrammer									
RogerDirect + mic*	•	•	•	•					
PartnerMic + mic*	•	•	•	•					
Telefonopkald + mic*	•	•	•	•					

Tilpasning

Software	Phonak Target 6.2 eller nyere
Grænseflader	Noahlink Wireless, programmeringskabel, HI-PRO, HI-PRO2

- Jansen, S. & Woodward, J. (2018). Love at first sound: the new Phonak precalculation. Phonak Insight, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, åbnet den 19. februar 2020.
- Stewart, E., Rakita, L. & Drexler, J. (2019). StereoZoom Part 1: The benefit of wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech intelligibility. Phonak Compendium, hentet fra <http://www.phonakpro.com/evidence> www.phonakpro.com/evidence, 19. februar 2020.
- Winneke, A., Latzel, M. & Appleton-Huber (2018). Less listening- and memory effort in noisy situations with StereoZoom. Phonak Field Study News, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, åbnet den 19. februar 2020.
- Rodrigues, T. & Liebe, S. (2018). AutoSense OS™ 3.0. The new & enhanced automatic operating system. Phonak Insight, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, åbnet den 19. februar 2020.
- Kleine, T., Ochsner, G., Hoffman, C., Schumacher, D., Bishop, R. (2017). Biometric Calibration: improving Biometric Calibration: improving directionality for Phonak Virto™ B. Phonak Field Study News, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, åbnet den 19. februar 2020.
- Bishop, R., Stewart, E. & Loyola, N. (2018). Titanium FitGuide – helping more than 50% of people get an even more discreet Virto B-Titanium. Phonak Field Study News, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, åbnet den 19. februar 2020.
- Schwarzlos-Sooprayen, J.K. (2017). Deeper ear impressions with EasyView Otoblock. Phonak Field Study News, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, åbnet den 19. februar 2020.
- IP68 betyder, at høreapparatet er vandafvisende og støvtæt. Det er blevet testet og tåler kontinuerlig nedvaskning i 1 meter vand i 60 minutter og 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

* Kun for Virto M-312
** Fås kun i udvalgte lande


Bluetooth®-ordmærket og -logoen er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
IOS er et varemærke tilhørende Cisco, Inc.
Android er et varemærke tilhørende Google Inc.

Koblingsmulighed

Effektniveau

		M	P	SP	UP**
Maks. Power output (dB SPL)	2 cc-kobler	109	115	119	127
Maks gain (dB)	2 cc-kobler	40	50	60	70
Frekvensområde (Hz)	2 cc-kobler	<100 - 7000	<100 - 6700	<100 - 7000	<100 - 5200
Strømforsbrug (mA)	NW	1,0	1,0	1,0	
	Bluetooth®	2,0	2,0	2,0	2,1

Tilpasningsområde

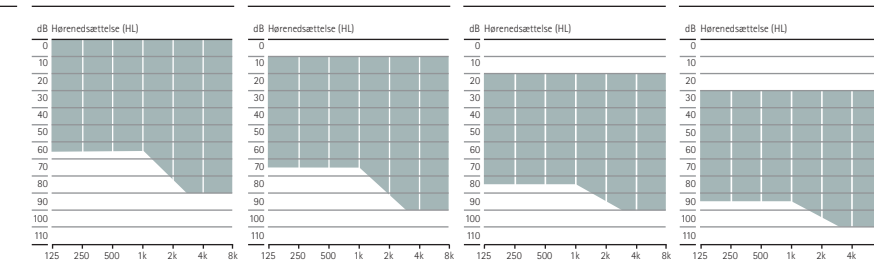

Til personer med let til moderat høresættelse, alle audiometriske konfigurationer

Til personer med let til moderat/kraftig høresættelse, alle audiometriske konfigurationer

Til personer med moderat til kraftig høresættelse, alle audiometriske konfigurationer

Til personer med moderat til svær høresættelse, alle audiometriske konfigurationer

Trådløs kommunikationsportefølje

	Virto M-Titanium M90/M70	Virto M-10 NW O M90/M70/M50/M30	Virto M-312 NW O M90/M70/M50/M30	Virto M-312 M90/M70/M50/M30
Trådløst tilbehør				
TV Connector				•
Phonak PartnerMic				•
Phonak RemoteControl				•
Roger				
Roger-mikrofoner				•
Apps				
myPhonak				•
Phonak Guide				•

Du kan finde flere oplysninger om Virto Marvel ved at besøge www.phonakpro.com/virtomarvel

Du kan finde oplysninger om Roger-mikrofoner på www.phonakpro.com/roger

Du kan finde flere oplysninger om Phonak-apps på www.phonakpro.com/smartapps