

Phonak Audéo™ P

Produktinformation



Phonak Audéo P er den omfattende RIC portefølje til let til svær hørenedsættelse. Phonak Audéo P omfatter fem designs, fire ydelsesniveauer og fire eksterne modtagere. Udstyret med den innovative teknologi fra Phonak Paradise platformen er Phonak Audéo P høreapparater løsningen til de klienter, der foretrækker fleksible og diskrete RIC modeller.

Du kan finde flere oplysninger på www.phonakpro.com.

Produktbeskrivelse



		Audéo P-312 Audéo P-312 Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-13T Audéo P-13T Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-R Audéo P-R Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-RT Audéo P-RT Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-RL Audéo P-RL Trial P90/P70/P50/P30
Batteristørrelse		312	13			
Multi-funktionsknap		•	•	•	•	•
Telespole			•		•	
Bluetooth®		•	•	•	•	•
Vandafvisende belægning		•	•	•	•	•
IP rating		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Mål	L x B x D	26,8 x 11,2 x 7,1 mm (1,05 x 0,44 x 0,28")	29,0 x 11,9 x 8,1 mm (1,13 x 0,47 x 0,32")	28,0 x 11,9 x 8,0 mm (1,11 x 0,47 x 0,32")	30,5 x 12,5 x 8,0 mm (1,20 x 0,49 x 0,32")	30,0 x 13,1 x 8,8 mm (1,18 x 0,52 x 0,35")
	Vægt	1,1 g (0,04 oz)	1,4 g (0,05 oz)	2,1 g (0,07 oz)	2,4 g (0,08 oz)	2,75 g (0,97 oz)
Opladningstider ²	0 % til 100 %			3 t	3 t	3 t
	0 % til 80 %			1,5 t	1,5 t	1,5 t
	30 min. tilpasning			10 min.	10 min.	10 min.
S Receiver						
Maks. udgangseffekt (dB SPL)	2 cc-kobler	111	111	111	111	111
Maks. gain (dB)	2 cc-kobler	47	47	47	47	47
Frekvensområde (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000
Strømforsbrug (mA)		1,4	1,4			
M Receiver						
Maksimal udgangseffekt (dB SPL)	2 cc-kobler	114	114	114	114	114
Maks. gain (dB)	2 cc-kobler	51	51	51	51	51
Frekvensområde (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000
Strømforsbrug (mA)		1,4	1,4			
MAV Receiver						
Maksimal udgangseffekt (dB SPL)	2 cc-kobler			119	119	119
Maks. gain (dB)	2 cc-kobler			50	50	50
Frekvensområde (Hz)				<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000
Strømforsbrug (mA)						
P Receiver						
Maksimal udgangseffekt (dB SPL)	2 cc-kobler	122	122	122	122	122
Maks. gain (dB)	2 cc-kobler	59	59	59	59	59
Frekvensområde (Hz)		<100 - 6300	<100 - 6300	<100 - 6300	<100 - 6300	<100 - 6300
Strømforsbrug (mA)		1,5	1,5			
UP Receiver						
Maks. Udgangseffekt (dB SPL)	2 cc-kobler	132	132	132	132	132
Maks. gain (dB)	2 cc-kobler	71	71	71	71	71
Frekvensområde (Hz)		<100 - 6100	<100 - 6100	<100 - 6100	<100 - 6100	<100 - 6100
Strømforsbrug (mA)		1,4	1,4			

Husfarver



P1
Sand Beige



HO
Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver Gray



P7
Graphite Gray



P8
Velvet Black

¹ IP68 indikerer, at høreapparatet er vand- og støvafvisende. Det er blevet testet og tåler kontinuerlig nedsænkning i en meter ferskvand i 60 minutter og otte timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

² Faktisk opladningstid afhænger af den resterende batterilevetid, men vil ikke overstige 3 timer.

Ydelsesniveauer

	Premium	Advanced	Standard	Essential	Funktioner	Premium	Advanced	Standard	Essential
AutoSense OS™ 4.0	Premium	Advanced	Standard	Essential	UltraZoom	•	•	•	•
Komfort i ekko	•				Dynamic Noise Cancellation	•			
Tale i bil	•				Speech Enhancer	•			
Tale i kraftig støj	•				EchoBlock	•			
Musik	•	•			Tap Control ^{a)}				
Komfort i støj	•	•	•		- Siri/Google Assistant	•	•		
Tale i støj	•	•	•	•	- Sæt streaming på pause/genoptag	•	•		
Rolig situation	•	•	•	•	- Acceptor/afslut telefonopkald	•	•		
Medietale + mic	•	•	•	•	StereoZoom	•	•		
Mediemusik + mic	•	•	•	•	WindBlock	•	•		
Yderligere programmer					SoundRelax	•	•		
Maks. yderligere programmer	4	4	4	4	Motion Sensor Hearing ^{a)}	•	•	•	
Komfort i ekko	•				DuoPhone	•	•	•	
Tale i kraftig støj	•	•			Real Ear Sound	•	•	•	
Tale i 360°	•	•			Roger og Directional indstilling	•	•	•	
Tale i støj	•	•	•	•	SoundRecover2	•	•	•	•
Rolig situation	•	•	•	•	WhistleBlock	•	•	•	•
Komfort i støj	•	•	•	•	NoiseBlock	•	•	•	•
Musik	•	•	•	•	RogerDirect™	•	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•	•	Klientbaseret indstilling	•	•	•	•
Individuelt program	•	•	•	•	QuickSync	•	•	•	•
Streamingprogrammer					AOV	•	•	•	•
RogerDirect + mic	•	•	•	•	Tinnitus balance	•	•	•	•
PartnerMic + mic	•	•	•	•	auto Acclimatization	•	•	•	•
Telefonopkald + mic	•	•	•	•	Niveau for omgivelsernes lyde	•	•	•	•
					Finjustering af kanaler	20	20	16	12


^{a)} Fås kun til Phonak Audéo P-R, RT og RL

Tilpasning

	Audéo P-312 Audéo P-312 Trial	Audéo P-13T Audéo P-13T Trial	Audéo P-R Audéo P-R Trial	Audéo P-RT Audéo P-RT Trial	Audéo P-RL Audéo P-RL Trial
Phonak Target	7.0 eller nyere	7.0 eller nyere	7.2 eller nyere	7.2 eller nyere	7.2 eller nyere
Noahlink Wireless	•	•	•	•	•
NOAHLink		•			
HI-PRO, HI-PRO2		•			

Koblingsmulighed

Længde	S Receiver	M Receiver	P Receiver	UP Receiver
Fås i fire forskellige farver (0, 1, 2, 3), til venstre og højre øre	•	•	•	•
Dome (lydkuppel)				
Cap dome	•	•	•	
Åben lydkuppel Fås i tre størrelser (S, M, L)	•	•	•	
Vented lydkuppel Fås i tre størrelser (S, M, L)	•	•	•	
Power lydkuppel Fås i tre størrelser (S, M, L)	•	•	•	
SlimTip*				
Akryl	•	•	•	
Silikone	•	•	•	
cShell				
Akryl	•	•	•	•
Titanium	•	•	•	•
Tilpasningsområder				

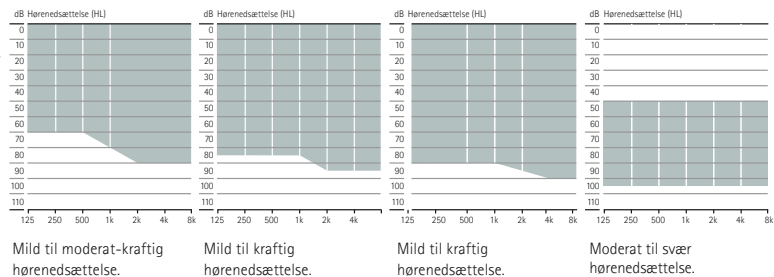

Phonak Audéo P Trial™

Phonak Audéo P Trial høreapparaterne kan hurtigt indstilles til det ønskede ydelsesniveau for at passe til din anbefaling. Alle niveauer af teknologi i ét Phonak Audéo P Trial høreapparat giver mange muligheder for at levere en hørreløsning ved første aftale og sikrer dig at du kan høre imens dit apparat er til reparation.

*Fås med ekstra kanallængde

Phonak Audéo P opladningsmuligheder



Phonak Charger Case Combi

Phonak Charger Case Combi er en oplader, et tørresæt og en beskyttende hård boks i ét, hvilket giver robust og vandsprøjtssikker opbevaring.



Phonak Power Pack

Hvis du ønsker at oplade genopladelige høreapparater, når du er på farten, kan Phonak Power Pack nemt fastgøres nederst på Phonak Charger Case Combi.



Phonak Charger Case Go og Phonak Life Charger

Der er to muligheder til Audéo P-RL. Phonak Charger Case Go er udstyret med et indbygget batteri, der kan oplade to høreapparater op til tre gange.

Phonak Audéo P Bluetooth® versioner

Direkte opkald/lydstreaming

Trådløs Bluetooth® 4.2 teknologi og de fleste ældre Bluetooth telefoner

Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse fra Sonova AG's side sker under licens.

Trådløs kommunikationsportefølje

	Audéo P-312 Audéo P-312 Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-13T Audéo P-13T Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-R Audéo P-R Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-RT Audéo P-RT Trial P90/P70/P50/P30	Audéo P-RL Audéo P-RL Trial P90/P70/P50/P30
Trådløst tilbehør					
TV Connector	•	•	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•	•	•
Roger					
RogerDirect™	•	•	•	•	•
Apps					
myPhonak	•	•	•	•	•

Du kan finde yderligere oplysninger på www.phonakpro.com/audeoparadise

Du kan finde oplysninger om Roger mikrofoner på www.phonakpro.com/roger

Du kan finde yderligere oplysninger om eSolutions på www.phonakpro.com/smartapps

life is on

Hos Phonak tror vi på, at det at høre godt også betyder et godt velvære, og at det er essentielt for at kunne leve livet uden begrænsninger.

I mere end 70 år har vi været passionerede omkring at skabe en verden, hvor "life is on" for alle. Vores innovative høreøsninger er designet til mennesker i alle aldersgrupper og alle niveauer af høretab, således at alle kan interagere socialt og trives mentalt og følelsesmæssigt.

www.phonak.com



7 116 1 3 8 9 13 9 3 1 9 4

027-0602-08/V5.00/2022-01/ILG © 2022 Sonova AG All rights reserved