

# Oplev verdens fantastiske lyde



## Phonak Naída™ Paradise

### Der er ikke noget som lyden af Paradis

# Phonak Naída Paradise

Phonak Naída Paradise leverer en uovertruffen høreoplevelse.

Naída har lange traditioner for banebrydende innovation, der hjælper personer med kraftig til svær hørenedsættelse. Den nyeste generation, Naída Paradise, kombinerer sublim lyd, universal forbindelse og skræddersyede digitale løsninger. Resultatet er en uovertruffen høreoplevelse, der giver klienterne mulighed for at knytte sociale bånd og trives på det følelsesmæssige plan, hvilket er fundamentalt for deres generelle velbefindende.<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J-P., Goy, H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. Hearing Review, 27(3):18-22. Åbnet 1. Juni 2020.

## Sublim lyd af den nyeste generation

Naída P leverer mere end blot kraft og løfter lyd kvaliteten op på et helt nyt niveau for den enkelte bruger og tager højde for selv de mindste detaljer. Med ny hardware og forbedret software opfylder Naída hørebehovet hos power brugere i utallige lyttesituationer. Det er også designet til, at man nemt kan foretage mere præcise tilpasninger.

### Ny hardware

- **PRISM™:** Med funktioner til lyd kvalitet af den nyeste generation
- **Kraftfuld dobbelt receiver:** Leverer en MPO på 141 dB i Naída P-UP og 130 dB i Naída P-PR
- **Bevægelsessensor:** Understøtter Motion Sensor Hearing og Tap control\*

### Ny software



#### Adaptive Phonak Digital 2.0:

Den nye behandling af forstærkningen med alle fordelene ved adaptiv kompression

- Mere fleksibilitet, så en præcis klienttilpasning sikres
- Designet til at skabe balance mellem hørbarhed, lydstyrke og lyd kvalitet
- Designet til at give en oplevelse af naturlig lyd



#### AutoSense OS™ 4.0:

Perfekt samspil mellem funktioner, som sikrer den optimale individuelle indstilling

- Speech Enhancer – udviklet til at forstærke spidserne af et talesignal i rolige situationer
- Dynamic Noise Cancellation – sammen med en retningel beamformer forbedres signal-støjforholdet i krævende situationer
- Motion Sensor Hearing\* – tilpasser mikrofonindstillingen og Dynamic Noise Cancellation indstillingerne helt af sig selv, når klienten er i bevægelse

\* Kun Naída P-PR leveres med Motion Sensor Hearing teknologi, inkl. Tap Control.

# Universal forbindelse

Phonak Naída Paradise nedbryder teknologibarriererne for power brugere. Med direkte tilkoblingsmuligheder til flere Bluetooth®enheder.

I dag er det vigtigere end nogensinde at være forbundet. Phonak Naída Paradise hjælper klienter med at holde forbindelsen hele dagen, og det er muligt at streame direkte fra næsten alle Bluetooth enheder.

- Forbinder til smartphones, TV og mere
- Made For All
- Håndfri opkald
- RogerDirect™\*
- Flere Bluetooth forbindelser
- Tap Control\*\*

## Universal forbindelse for alle

Naída Paradise kan tilsluttes direkte til iOS®-, Android™- eller andre Bluetooth aktiverede enheder, så dine klienter kan streame lyd i fremragende kvalitet direkte til deres høreapparater. Høreapparaterne kan anvendes til håndfri telefonopkald, lytning til TV, musik, e-bøger, podcasts og mere.

## Skift enkelt og nemt mellem enheder

Multifunktionsevnen i Naída Paradise gør det muligt at parre høreapparatet til op til otte Bluetooth aktiverede enheder, hvoraf to kan være forbundet samtidigt. Dette øger lytteoplevelsen, da klienten nemt kan skifte fra at lytte til musik og til at besvare et opkald.

## Adgang til Bluetooth med et enkelt tryk!

Takket være den nye Motion Hearing Sensor i Naída P-PR er det nu muligt at styre Bluetooth funktionerne med et dobbelttryk på øret. Klienter kan besvare/afslutte telefonopkald, sætte streaming på pause/genoptag, og de har adgang til Bluetooth baserede start/stop voice assistant apps.

\* RogerDirect kræver installation af Roger modtagere i Phonak høreapparaterne ved hjælp af en Roger X modtager eller en Roger iN mikrofon.

\*\* Fås kun til Naída P-PR 70/90.

iOS er et varemærke tilhørende Cisco Technology, Inc.

Android er et varemærke tilhørende Google LLC.

Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse fra Sonova AG's side sker under licens.

# Skræddersyede digitale løsninger

Med myPhonak 5.0 appen kan klienter nyde en endnu mere individuelt tilpasset lytteoplevelse.

Phonak har udviklet en Smart app, der giver dig kontrollen og lader Paradise udfolde sit fulde potentiale. For hørespecialisten kan digitalt engagement være med til at opbygge en endnu stærkere relation til klienterne.

## Remote Control med myPhonak Memory


Klienter kan nemt foretage avanceret lydtilpasning i Naída Paradise, så det passer til deres personlige præferencer ved forskellige lyttesituationer. Takket være myPhonak Memory kan du nu gemme det senest anvendte individuelt tilpassede program i høreapparatet og har adgang til det via trykknappen. Der er adgang til andre individuelt tilpassede programmer via appen.

## Markedesledende Fjernsupport<sup>2</sup>

En ekstra service i din praksis. Fjernsupport gør det muligt for dig at foretage tilpasninger i realtid på afstand, og du kan dermed optimere dine klienters høreapparater, når det ikke er muligt for dem at komme til din klinik. Du kan foretage avancerede finjusteringer med hurtig synkronisering, og det er ikke nødvendigt at have yderligere tilbehør eller apps.

## Høredagbog 2.0 og Klient skrivebord 2.0

Ved hjælp af Klient skrivebordet har du adgang til data om klientfeedback, brug og datalogging direkte via myPhonak appen. Høredagbog 2.0 giver dig også mulighed for at oprette opgaver og definere mål for dine klienter.

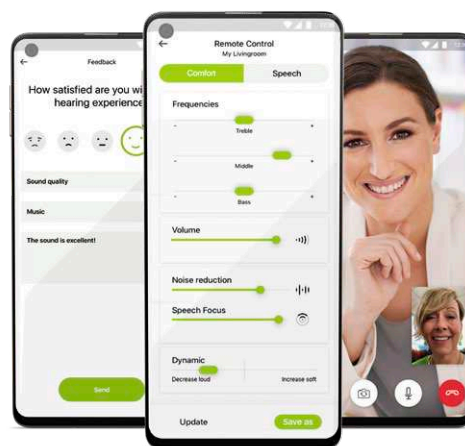

<sup>2</sup> Emery, S. (2020). Market Research ID #4371. Skriv til os på adressen [marketinsight@phonak.com](mailto:marketinsight@phonak.com), hvis du vil have flere oplysninger.

# Roger™ Teknologi

Phonak Naída Paradise og Roger kombinerer det bedste fra to verdener, når det gælder om at lytte i støj eller på afstand

## Mere end StereoZoom: løsninger til stor afstand

Med Naída Paradise har klienter både StereoZoom og Dynamic Noise Cancellation for bedre at kunne høre i støjende situationer. Der vil dog altid være særlige omstændigheder, hvor klienter fortsat oplever udfordringer. Dette gør sig især gældende, når man kombinerer en støjende situation med afstand. Et andet eksempel er når taleren har en ansigtsmaske på, hvilket betyder, at de visuelle hjælpemidler mangler.<sup>3</sup> Her kan Roger være en hjælp.

## Naída Paradise med Roger: en kraftfuld duo

Det er videnskabeligt bevist, at Roger teknologi hjælper høreapparatbrugere\* med at forstå mere tale i støj og på afstand i forhold til mennesker med normal hørelse.<sup>4</sup> RogerDirect gør det muligt for Roger mikrofoner at streame direkte til Naída høreapparater. Det er ikke nødvendigt at fastgøre eller bære eksterne modtagere. Forbindelsen er direkte og problemfri. Kombinationen af høreapparater og Roger hjælper mange klienter til at leve et socialt aktivt og professionelt tilfredsstillende liv.



\* Baseret på undersøgelser med moderat til kraftig hørenedsættelse.

<sup>3</sup> Taylor, D., & Seitz-Paquette, K. (2020). Udfordring ved anvendelse af maske : Hjælp klienter med kommunikation under Covid-19. Phonak Field Study News. Hentet fra [www.phonakpro.com/evidence](http://www.phonakpro.com/evidence). Åbnet 19. November 2020.

<sup>4</sup> Thibodeau, L. (2014). Sammenligning af talegenkendelse med adaptiv digital og FM trådløs teknologi for høreapparatsbrugere. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.

# Præsentation af Roger On™

Roger On er en ekstern mikrofon, der er beregnet til alle de samtaler, hvor der er baggrundsstøj, eller hvor taleren står på større afstand.

Den nyeste innovation i Roger mikrofoner gør det muligt for klienter at fokusere på de samtaler, der virkelig betyder noget på arbejdet, i undervisningen og i det sociale liv.



## Funktioner

- MultiBeam 2.0-teknologi\*
- Interview 2.0
- Retningsuafhængig i Oplægsholdertilstand
- Premium-design i bærbart format
- Nyt display
- myRogerMic-app
- IP54; beskyttet mod vandstænk

- **Høreevne:** Med MultiBeam 2.0 teknologi kan Roger On retningsbestemme den indgående tale, mens Interview 2.0 gør det muligt for klienter at fokusere på en bestemt taler.
- **Udviklet med henblik på fleksibilitet:** Uanset om den er placeret på bordet eller båret som en præsentationsmikrofon, skifter Roger On automatisk mellem bord-, interview- og oplægsholdertilstand samt tilpasser sig baggrundsstøjen.
- **Brugervenlighed med myRogerMic app:** Klienter kan justere mikrofonindstillinger efter omgivelserne og deres situation. De kan også ændre mikrofonindstillingen manuelt, ændre fokusområdet og slå mikrofonen til eller fra på afstand.

\* MultiBeam 2.0-teknologi kræver RogerDirect i høreapparatet.

Vi sætter nye  
standarder med  
vores power BTE.

Velkommen til Phonak  
Naída Paradise.





# Phonak Naída teknologier og funktioner

Baseret på troværdig audiologisk ekspertise og dokumenteret multifunktionalitet.

	Naída P-PR Paradise	Naída M-SP Naída Link M Marvel	Naída P-UP Paradise
Lydprocessorchip		Marvel lydprocessor	
Multiprotokolchip til tilkobling	PRISM	Sonova Wireless One Radio Digital 3.0	PRISM
Dobbeltmodtager	•	•	•
Telespole		•	•
Motion Sensor	•		
<b>Adaptiv Phonak digital</b>	2.0	•	2.0
Adaptiv Phonak Digital Contrast	2.0	•	2.0
<b>AutoSense OS</b>	4.0	3.0	4.0
– Binaural VoiceStream Teknologi™	•	•	•
– Speech Enhancer	P90		P90
– Dynamic Noise Cancellation	P90		P90
– SNR-Boost*		M90, M70, M50	
– Motion Sensor Hearing	P90, P70, P50		
BroadBand Booster		•	•
Maks. antal yderligere programmer	4	3	4

\* Erstattet af Dynamic Noise Cancellation i Paradise

	Naída P-PR Paradise	Naída M-SP Naída Link M Marvel	Naída P-UP Paradise
<b>RogerDirect</b>	•	•	•
Direkte forbindelsesmuligheder med iOS og Android smartphones til håndfri telefonopkald	•	•	•
Direkte forbindelsesmuligheder til TV, Bluetooth aktiverede enheder	•	•	•
Direkte Bluetooth parring	med op til otte enheder	med op til to enheder	med op til otte enheder
Direkte Bluetooth tilkobling med to enheder parallelt	•		•
TV Connector	•	•	•
Tap Control	P90, P70		
<b>myPhonak app</b>	5.0 eller nyere	M-SP: 3.0.4 eller nyere Link M: 5.0 eller nyere	5.0 eller nyere
- Remote Control	2.0 eller nyere	1.0 eller nyere	2.0 eller nyere
- myPhonak Memory	•		•
- Fjernsupport	inklusive AudiogramDirect	inklusive AudiogramDirect	inklusive AudiogramDirect
- Høredagbog	•	•	•
Klient skrivebord	•	•	•
Phonak Target	7.1 eller nyere	Naída M-SP: 6.2 eller nyere Naída Link M: 7.1 eller nyere	7.1 eller nyere
Bimodale funktioner		Naída Link M	

# Produktbeskrivelse



Naída P-PR  
Naída P-PR Trial




Naída P-UP  
Naída P-UP Trial


Batteristørrelse			675		
Multi-funktionsknap		•	•		
Telespole			•		
Bluetooth® 4.2 trådløs teknologi		•	•		
Nano coating		•	•		
IP klassificering		IP68 <sup>5</sup>		IP68 <sup>5</sup>	
Mål	L x B x D	36,7 x 16,4 x 8,5 (1,44 x 0,64 x 0,33")		42,6 x 18,8 x 8,6 (1,68 x 0,74 x 0,34")	
	Vægt	3,68g/0,130 oz		4,60 g/0,162 oz	
Opladningstider <sup>6</sup>	0 % til 100 %	3 t			
	0 % til 80%	1,5 t			
	30 min. til tilpasning	10 min.			
		<b>SlimTube 4.0</b>	<b>HE11 680</b>	<b>HE11</b> <b>HE11 680</b>	
Maks. Power Output (dB SPL)	2 cc kobler	129	130	141	134
Maks. gain (dB)	2 cc kobler	69	68	84	78
Frekvensområde (Hz)		< 100 - > 7100	< 100 - > 5700	< 100 - > 4700	< 100 - > 4700
Strømförbrug (mA)				3.3	2.8

## Tilpasningsområde

- SlimTube 4.0
- HE11 680

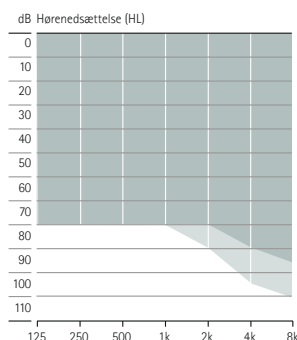

Mild til moderat/svær hørenedsættelse,  
alle audiometriske konfigurationer

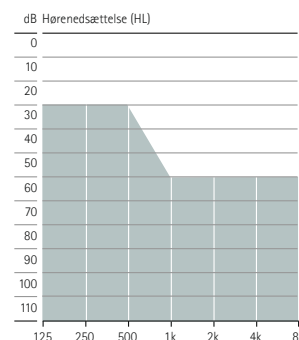

Svær til meget svær hørenedsættelse,  
alle audiometriske konfigurationer

## Farver



P1  
Sand Beige



H0  
Beige



P4  
Chestnut



P5  
Champagne



P6  
Silver Gray



P7  
Graphite Gray



P8  
Velvet Black

<sup>5</sup> IP68 betyder, at høreapparatet er vand- og støvafvisende. Det er blevet testet og tåler kontinuerlig nedsænkning i en meter ferskvand i 60 minutter og otte timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

<sup>6</sup> Den faktiske opladningstid afhænger af den resterende batterilevetid, men den overskrider ikke tre timer.

## Ydelsesniveauer

	Premium P90	Advanced P70	Standard P50	Essential P30
<b>AutoSense OS 4.0</b>	Premium	Advanced	Standard	Essential
Komfort i ekko	•			
Tale i bil	•			
Tale i kraftig støj	•			
Musik	•	•		
Komfort i støj	•	•	•	
Tale i støj	•	•	•	•
Rolig situation	•	•	•	•
Medietale + mikrofon	•	•	•	•
Mediemusik + mikrofon	•	•	•	•
<b>Yderligere programmer</b>				
Maks. yderligere programmer	4	4	4	4
Komfort i ekko	•			
Tale i kraftig støj	•	•		
Tale i 360°	•	•		
Tale i støj	•	•	•	•
Rolig situation	•	•	•	•
Komfort i støj	•	•	•	•
Musik	•	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•	•
Individuelt program	•	•	•	•
<b>Streamingprogrammer</b>				
RogerDirect + mikrofon	•	•	•	•
PartnerMic + mikrofon	•	•	•	•
Telefonopkald + mikrofon	•	•	•	•

	Premium P90	Advanced P70	Standard P50	Essential P30
<b>Funktioner</b>				
UltraZoom	•	•	•	•
Dynamic Noise Cancellation	•			
Speech Enhancer	•			
EchoBlock	•			
Tap Control*				
- Siri/Google Assistant	•	•		
- Sæt streaming på pause/genoptag	•	•		
- Modtag/afslut telefonopkald	•	•		
StereoZoom	•	•		
WindBlock	•	•		
SoundRelax	•	•		
Motion Sensor Hearing*	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
Roger og direktionel	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
RogerDirect	•	•	•	•
Klientbaseret finindstilling	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
Akustisk optimeret ventilation	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
auto Acclimatization	•	•	•	•
Niveau for omgivende lyde	•	•	•	•
Finjustering af kanaler	20	20	16	12

\* Fås kun til Phonak Naída P-PR

## Tilpasning

	Naída P-PR Naída P-PR Trial P90/P70/P50/P30	Naída P-UP Naída P-UP Trial P90/P70/P50/P30
Phonak Target	7.1 eller nyere	7.1 eller nyere
Noahlink Wireless	•	•
NOAHLINK		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

## Trådløs kommunikationsportefølje

	Naída P-PR Naída P-PR Trial P90/P70/P50/P30	Naída P-UP Naída P-UP Trial P90/P70/P50/P30
<b>Trådløst tilbehør</b>		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic™	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
<b>Roger</b>		
Roger mikrofoner	•	•
<b>Apps</b>		
myPhonak	•	•

## Akustiske funktioner



Naída P-PR  
Naída P-PR Trial

Naída P-UP  
Naída P-UP Trial

			Naída P-PR Naída P-PR Trial	Naída P-UP Naída P-UP Trial
<b>Lydudgang</b>				
	Hook	Dæmpet (HE11 680) eller udæmpet (HE11), transparent	•	•
	SlimTube 4.0	Fås til venstre/højre side i fem forskellige længder (00, 0, 1, 2, 3)	•	
<b>Kupler til SlimTube</b>	Lydkuppel	Cap dome	•	
		Åben lydkuppel	•	
		Fås i tre størrelser (S, M, L)		
		Vented dome	•	
		Fås i tre størrelser (S, M, L)		
		Power lydkuppel	•	
		Fås i tre størrelser (S, M, L)		
	SlimTip	Akryl	•	
		Silikone	•	
<b>Øreprop til hook</b>	Øreprop		•	•

## Phonak Naída P Trial™

Phonak Naída P Trial høreapparaterne kan hurtigt indstilles til det ønskede ydelsesniveau for at passe til din anbefaling. De giver dig mulighed for at give din klient den optimale høreøsning allerede ved første aftale eller at tilbyde et låneapparat, når klientens høreapparat er til reparation. Naída P Trial apparaterne inkluderer også en præinstalleret Roger (O2) modtager, så alle Roger mikrofoner nemt kan demonstreres og afprøves.

## Praktisk genopladelig batteriteknologi

Naída P-PR har alle de Paradise funktioner, du elsker, samt fordelen ved at være genopladelig. Klienter kan nyde en hel dags hørelse inklusive streaming\*.

**Phonak Charger BTE RIC:** Den har plads til ørepropper, et USB-C strømstik og et indikatorlys.



\* Forventet batterilevetid på 16 timer, inklusive otte timers klassisk Bluetooth-streaming og fire timers streaming med TV Connector.

# Phonak Well-Hearing is Well-Being™

At høre godt er meget mere end blot at høre klart. Det er knyttet til en tilstand af socialt-emotionelt, kognitivt og fysisk velvære. Det samlede billede, hvor det at gøre noget ved hørenedsættelse fungerer som katalysator for velvære, er det vi mener, når vi siger "**Well-Hearing is Well-Being**".



## Social og emotionel velvære

At høre godt giver et større engagement, stærkere forbindelser og et mere positivt livssyn.



## Kognitiv velvære

At høre godt understøtter kognitivt velbefindende.<sup>7</sup>



## Fysisk velvære

At høre godt gør folk i stand til at leve et mere aktivt og sundt liv.



**Tag det næste skridt mod at hjælpe dine klienter til social interaktion, mental og følelsesmæssig velvære med Phonak Paradise.**

**Besøg [phonakpro.com/well-hearing](https://phonakpro.com/well-hearing) for at implementere Well-Hearing is Well-Being i dagligdagen.**

Medmindre andet angives, er indholdet af denne side baseret på:

Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S. E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J.-P., Goy, H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. *Hearing Review*, 27(3):18-22. Åbnet 1. Juni 2020.

<sup>7</sup> Karawani, H., Jenkins, K., & Anderson, S. (2018). Restoration of sensory input may improve cognitive and neural function. *Neuropsychologia*, 114, 203-213. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2018.04.041>

# life is on

Hos Phonak tror vi på, at det at høre godt også betyder et godt velvære, og at det er essentielt for at kunne leve livet uden begrænsninger. I mere end 70 år har vi været passionerede omkring at skabe en verden, hvor "life is on" for alle. Vores innovative høreøsninger er designet til mennesker i alle aldersgrupper og alle niveauer af høretab, således at alle kan interagere socialt og trives mentalt og følelsesmæssigt.

[www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com)



027-0623-08/V1.00/2020-11/ING © 2020 Sonova AG. All rights reserved.