

Phonak Virto™ Paradise



Phonak Virto P er det omfattende ITE sortiment til mild til svær hørenedsættelse. Virto P omfatter fire modeller, effektive niveauer og fire ydelsesniveauer, inklusive en Noise generator til håndtering af tinnitus. Udstyret med Phonak Paradise platformens innovative teknologi er Virto P høreapparaterne den ideelle løsning til de klienter, der foretrækker en individuelt tilpasset løsning med optimal hørepræstation.

Du kan finde flere oplysninger på www.phonakpro.com.

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Produktbeskrivelse

	 Virto P-Titanium P90/P70	 Virto P-10 NW O P90/P70/P50/P30	 Virto P-312 NW O P90/P70/P50/P30	 Virto P-312 P90/P70/P50/P30
Effektniveau				
M	•	•	•	•
P	•	•	•	•
SP	•	•	•	•
UP**				•
Hardwarekonfiguration/ekstraudstyr/teknologi				
Batteristørrelse	10	10	312	312
Trykknop (program/volumen)	Valgfrit	Valgfrit	Valgfrit	•
EasyPhone (til akustisk telefon)	Valgfrit	•	•	
MiniControl (til programændring eller regulering af volumen)	•	•		
Indstilling af volumen (hjul)		Valgfrit	Valgfrit	Valgfrit
Telespole	Valgfrit	Valgfrit	Valgfrit	
Mikrofonteknologi	Omni	Omni	Omni	Retningsbestemt
IP klassificering (uden volumenkontrol)	IP68 ¹	IP68 ¹		
Bluetooth®				•
Binaural VoiceStream Teknologi				•

Farver

Faceplatefarver



26
Pink



22
Cocoa



28
Brown



06
Black



26
Pink



22
Cocoa



06
Black

Kun Titanium:
Skalfarve Titanium Gray & faceplatefarver

Skalfarver



21
Transparent



26
Pink



22
Cocoa



28
Brown



06
Black



R
Red Transparent



B
Blue Transparent

Skaltype



Virto P-Titanium



Virto P-10 NW O



Virto P-312 NW O



Virto P-312

IIC	•	•		
CIC	•	•		
MC		•	•	
ITC		•	•	
HS		•	•	•
FS		•	•	•

Ydelsesniveauer

	Premium P90	Advanced P70	Standard P50	Essential P30		Premium P90	Advanced P70	Standard P50	Essential P30
AutoSense OS[®] 4.0					Funktioner				
Tale i kraftig støj*	•				UltraZoom	Premium	Advanced	Standard	Essential
Tale i bil	•				Dynamic Noise Cancellation	•			
Komfort i ekko	•				Speech Enhancer	•			
Musik	•	•			EchoBlock	•			
Komfort i støj	•	•	•		WindBlock	•	•		
Tale i støj	•	•	•	•	SoundRelax	•	•		
Rolig situation	•	•	•	•	DuoPhone	•	•	•	
Medie: tale + mic*	•	•	•	•	Roger og retningsindstilling*	•	•	•	
Medie: musik + mic*	•	•	•	•	SoundRecover2	•	•	•	•
Yderligere programmer					Klientbaseret finjustering	•	•	•	•
Maks. yderligere programmer	4	4	4	4	WhistleBlock	•	•	•	•
Komfort i ekko	•				NoiseBlock	•	•	•	•
Tale i kraftig støj*	•	•			QuickSync *	•	•	•	•
Tale i 360°*	•	•			Akustisk Optimeret Ventilation (AOV)	•	•	•	•
Tale i støj	•	•	•	•	Tinnitus balance	•	•	•	•
Rolig situation	•	•	•	•	auto Acclimatization	•	•	•	•
Komfort i støj	•	•	•	•	Niveau for omgivelsernes lyde	•	•	•	•
Musik	•	•	•	•	RogerDirect *	•	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•	•	Finjustering af kanaler	20	20	16	12
Individuelt program	•	•	•	•					
Streamingprogrammer									
RogerDirect + mic*	•	•	•	•					
PartnerMic + mic*	•	•	•	•					
Telefonopkald + mic*	•	•	•	•					

Tilpasning

Software	Phonak Target 7.3 eller nyere
Grænseflader	Noahlink Wireless, programmeringskabel, HI-PRO, HI-PRO2

* Kun til Virto P-312

** Fås kun i specifikke lande

1. IP68 betyder, at høreapparatet er vandafvisende og støvtæt. Det er blevet testet og tåler kontinuerlig nedsænkning i 1 meter vand i 60 minutter og 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

iOS er et varemærke tilhørende Cisco, Inc.


Android er et varemærke tilhørende Google Inc.

Koblingsmulighed


Effektniveau

		M	P	SP	UP**
Maksimal Power Output (dB SPL)	2 cc kobler	109	115	119	127
Maksimal gain (dB)	2 cc kobler	40	50	60	70
Frekvensområde (Hz)	2 cc kobler	<100-7.000	<100-6.700	<100-7.000	<100 - 5200
Strømforbrug (mA)	Ikke-trådløs	1.1.	1.2	1.1.	
	Trådløs	1.7	1.8	1.7	1.7


Tilpasningsområde

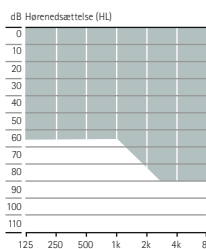


Til personer med mild til moderat hørenedsættelse, alle audiometriske konfigurationer

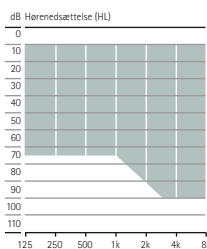

Til personer med mild til moderat/svær hørenedsættelse, alle audiometriske konfigurationer

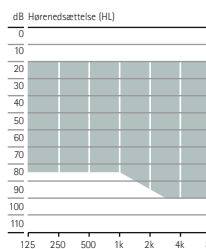

Til personer med moderat til kraftig hørenedsættelse, alle audiometriske konfigurationer

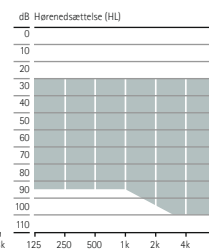

Ved moderat til svær hørenedsættelse, alle audiometriske konfigurationer

Trådløs kommunikationsportefølje

	Virto P-Titanium P90/P70	Virto P-10 NW 0 P90/P70/P50/P30	Virto P-312 NW 0 P90/P70/P50/P30	Virto P-312 P90/P70/P50/P30
Trådløst tilbehør				
TV Connector				•
Phonak PartnerMic				•
Phonak RemoteControl				•
Roger				
RogerDirect™				•
Apps				
myPhonak				•

Du kan finde flere oplysninger om Virto Paradise på www.phonakpro.com/virtoparadise

Du kan finde flere oplysninger om Roger mikrofoner på www.phonakpro.com/roger

Du kan finde flere oplysninger om Phonak apps på www.phonakpro.com/smartapps


life is on

Hos Phonak tror vi på, at det at høre godt også betyder et godt velvære, og at det er essentielt for at kunne leve livet uden begrænsninger. I mere end 70 år har vi været passionerede omkring at skabe en verden, hvor "life is on" for alle. Vores innovative høreøsninger er designet til folk i alle aldersgrupper og alle niveauer af hørenedsættelse, således at alle kan knytte sociale bånd, trives mentalt og udvikles følelsesmæssigt.

www.phonakpro.com

027-0648-08/V2.00/2022-01/ NLG © 2022 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz

 **CE**
0459