

# Phonak Naída™ L ●

## Produktinformation

Phonak Naída Lumity ist das umfassende HdO-Portfolio für leicht- bis hochgradige Hörverluste.

Dank Phonak SmartSpeech™ Technologie sind Naída L Hörsysteme ideal für Kunden, die leistungsstarke Lösungen auf unserer hochentwickelten Phonak Lumity Plattform benötigen.



# Produktbeschreibung



**Naída L-UP**  
**Naída L-UP Trial**  
L90/L70/L50/L30





**Naída L-PR**  
**Naída L-PR Trial**  
L90/L70/L50/L30

Batterietyp		675	Integrierter Akku	
Telefonspule		•		
CROS L Kompatibilität			•	
Bluetooth®		•	•	
Wasserabweisende Beschichtung		•	•	
IP-Code (Schutzgrad)		IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	
Maße	L x B x T	42,6 x 18,8 x 8,6 mm		36,7 x 16,4 x 8,5 mm
	Gewicht	4,60 g		3,68 g
Ladezeiten <sup>2</sup>	0% bis 100%			3 Std.
	0% bis 80%			1,5 Std.
	30 Min. Anpassung			10 Min.
		<b>HE11</b>	<b>HE11 680</b>	<b>HE11 680</b> <b>SlimTube 4.0</b>
Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	141	134	130      129
Max. Verstärkung (dB)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	84	78	68      69
Frequenzbereich (Hz)		< 100 - > 4700	< 100 - > 4700	< 100 - > 5700      < 100 - > 7100
Betriebsstrom (mA)		3,3	2,8	

## Anpassbereich

- SlimTube 4.0
- HE11 680

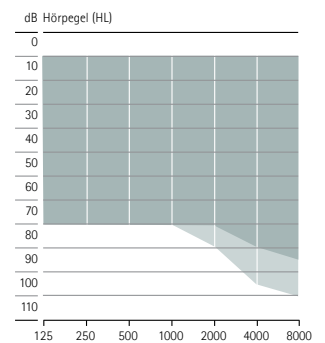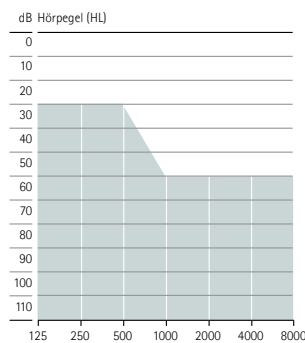

## Gehäusefarben



**H0**  
Beige



**P1**  
Sand Beige



**P3**  
Sandelholz



**P4**  
Kastanie



**P5**  
Champagner



**P6**  
Silbergrau



**P7**  
Graphitgrau



**P8**  
Samtschwarz

<sup>1</sup> IP68 bezeichnet die Wasser- und Staubresistenz des Hörgeräts. Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 Meter tiefem Süßwasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß IEC60529 Standard schadlos überstanden.

<sup>2</sup> Die tatsächliche Ladezeit hängt auch vom Ladezustand des Akkus ab und kann je nach Temperaturbedingungen variieren.

# Technologiestufen

AutoSense OS™ 5.0	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
Verstehen im lauten Störgeräusch	•			
Verstehen bei Fahrgeräuschen	•			
Komfort in halligen Situationen	•			
Musik	•	•		
Komfort im Störgeräusch	•	•	•	
Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•
Ruhige Umgebung	•	•	•	•
Sprach-Streaming (Medien) + Mik.	•	•	•	•
Audio-Streaming (Medien) + Mik.	•	•	•	•
<b>Zusätzliche Programme</b>				
Maximale Anzahl der zusätzlichen Programme	4	4	4	4
Komfort in halligen Situationen	•			
Verstehen im lauten Störgeräusch	•	•		
Sprachverstehen in 360°	•	•		
Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•
Ruhige Umgebung	•	•	•	•
Komfort im Störgeräusch	•	•	•	•
Musik	•	•	•	•
Akustisches Telefon	•	•	•	•
Individuelles Hörprogramm	•	•	•	•
Telefon über T-Spule ± Mik. <sup>1</sup>	•	•	•	•
Induktionsschleife (Telefonspule ± Mik.) <sup>1</sup>	•	•	•	•
<b>Streaming-Programme</b>				
RogerDirect + Mik.	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + Mik.	•	•	•	•
Anruf + Mik.	•	•	•	•

Funktionen	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
SpeechSensor	•			
Speech Enhancer	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Dynamic Noise Cancellation	•	•		
Motion Sensor Hearing <sup>2</sup>	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Tap Control <sup>2</sup>				
- Siri/Google-Assistent	•	•		
- Streaming pausieren/fortsetzen	•	•		
- Anruf annehmen/beenden	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
UltraZoom	•	•	•	•
Roger™ und direktionale Einstellung	•	•	•	•
Broadband Booster <sup>1</sup>	•	•	•	•
Gesundheitsfunktionen <sup>2,3</sup>	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Lautstärkeabgleich (DataLogging)	•	•	•	•
Tinnitus Balance <sup>2</sup>	•	•	•	•
Auto Akklimatisierung	•	•	•	•
Streaming-Balance	•	•	•	•
SoundRecover <sup>2</sup>	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Kanäle für Feinanpassung	20	20	16	12

SmartSpeech Technologie

1 Nur für Phonak Naída L-UP verfügbar  
 2 Nur für Phonak Naída L-PR verfügbar  
 3 In Kombination mit myPhonak verfügbar

## Anpassung

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.0 oder höher	9.0 oder höher
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•	•
NOAHLink	•	
HI-PRO, HI-PRO2	•	

# Akustische Ankopplung

			Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Schallaustritt	Hörwinkel	Gedämpft (HE11 680), transparent	•	•
	Hörwinkel	Ungedämpft (HE11), transparent	•	
	SlimTube 4.0	Für rechts und links in fünf unterschiedlichen Längen (00, 0, 1, 2, 3) erhältlich		•
Ohrpassstück für SlimTube	Dome	Mini Dome		•
		Offener Dome	In drei Größen erhältlich (S, M, L)	•
		Geschlossener Dome	In drei Größen erhältlich (S, M, L)	•
		Power Dome	In drei Größen erhältlich (S, M, L)	•
	SlimTip	Acryl		•
Silikon			•	
Ohrpassstück für Hörwinkel	Otoplastik		•	•

## Phonak Naída L Trial

Die Phonak Naída L Trial Hörgeräte können entsprechend Ihrer Empfehlung schnell auf die gewünschte Technologiestufe eingestellt werden. So können Sie die Hörlösung Ihres Kunden bereits beim ersten Termin optimal anpassen oder ein Ersatzgerät zur Verfügung stellen, falls das Hörgerät des Kunden in Reparatur ist. In den Naída L Trial Geräten ist ein Roger-Empfänger vorinstalliert, der eine einfache Demonstration und das Probetragen jedes beliebigen Roger-Mikrofons ermöglicht.

# Phonak Naída L-PR Ladeoptionen

## Phonak Charger Combi BTE / Phonak Charger Combi BTE 2

Naída L-PR verfügt über alle beliebten Lumity Funktionen und ist zudem wiederaufladbar. So erleben Ihre Kunden einen ganzen Tag Hörgenuss inklusive Wireless-Streaming.\*

\* Die erwartete Akkulaufzeit beträgt 16 Stunden, einschließlich 4 Stunden Streaming mit klassischem Bluetooth und 4 Stunden Streaming über TV Connector.



## Phonak Naída L Bluetooth®-Versionen

Streaming von Telefonanrufen /  
Audio-Streaming

Bluetooth 4.2 Wireless-Technologie und ältere bluetoothfähige  
Smartphones

## Wireless Communication Portfolio

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
<b>Wireless-Zubehör</b>		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
<b>Roger</b>		
Roger-Mikrofone	•	•
<b>Apps</b>		
myPhonak	•	•
myPhonak Junior	•	•

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.phonak.com/naida-lumity](http://www.phonak.com/naida-lumity)

Weitere Informationen zu den Roger-Mikrofonen finden Sie unter: [www.phonak.com/roger](http://www.phonak.com/roger)

Weitere Informationen zu myPhonak und myPhonak Junior finden Sie unter: [www.phonak.com/apps](http://www.phonak.com/apps)

# life is on

Seit 1947 setzt sich Phonak für einen Erhalt der Lebensqualität durch die Eröffnung neuer Klangwelten ein. Schon in der Gründungszeit prägte das Unternehmen eine wichtige Überzeugung: Gutes Hören bedeutet Lebensqualität. Tatsächlich besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Hören und sozialer, emotionaler, kognitiver und körperlicher Gesundheit. Heute und in Zukunft ist es unser Ziel, das breiteste Portfolio an innovativen Hörlösungen anzubieten. Gemeinsam mit unseren Hörakustikern konzentrieren wir uns auf das Wesentliche: Wir wollen das Sprachverstehen verbessern und das Leben unserer Kunden und die Gesellschaft zum Positiven verändern.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



027-0699-01|V1.00|2023-06|NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved

