

Phonak Sky™ L.

Produktinformationen

Phonak Sky Lumity ist das umfangreiche HdO-Portfolio für Kinder mit leicht- bis hochgradigem Hörverlust.

Mit Phonak SmartSpeech™ Technologie sind Sky L Hörsysteme die beste Wahl für junge Kunden, die Sprachverstehen auf unserer modernen Phonak Lumity Plattform erleben möchten.



Produktbeschreibung




Sky L-PR
Sky L-PR Trial
L90/L70/L50/L30



Sky L-UP
Sky L-UP Trial
L90/L70/L50/L30

Batteriegröße		Integrierter Akku		675	
LED-Blinkmuster für Kinder		•		•	
Telefonspule				•	
CROS L-Kompatibilität		•			
Bluetooth® ¹		•		•	
Wasserabweisende Beschichtung		•		•	
IP-Code (Schutzgrad)		IP68 ²		IP68 ²	
Maße	L x B x T	36,7 x 16,4 x 8,5 mm		42,6 x 18,8 x 8,6 mm	
	Gewicht	3,68 g		4,60 g	
Ladezeiten ³	0% bis 100%	3 Std.			
	0% bis 80%	1,5 Std.			
	30 Min. Anpassung	10 Min.			
		HE11 680	SlimTube 4.0	HE11	HE11 680
Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL)	2 cm ³ Kuppler	130	129	141	134
Max. Verstärkung (dB)	2 cm ³ Kuppler	68	69	84	78
Frequenzbereich (Hz)		< 100 - > 5700	< 100 - > 7100	< 100 - > 4700	< 100 - > 4700
Betriebsstrom (mA)				3,3	2,8

Anpassbereiche

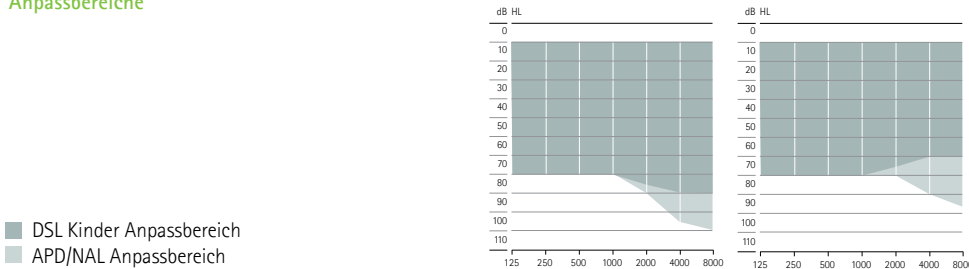

Leichtgradiger bis starker Hörverlust,
alle audiometrischen Konfigurationen

Starker bis hochgradiger Hörverlust,
alle audiometrischen Konfigurationen.

¹ Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., jegliche Verwendung dieser Marken durch die Sonova AG erfolgt unter Lizenz.

² IP68 zeigt an, dass das Hörsystem wasser- und staubdicht ist. Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 Meter tiefes Süßwasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß IEC60529 Standard schadlos überstanden.

³ Die tatsächliche Ladezeit hängt auch vom Ladezustand des Akkus und den Temperaturbedingungen ab.

Technologiestufen

AutoSense Sky OS 5.0	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
Verstehen im lauten Störgeräusch	•			
Verstehen bei Fahrgeräuschen	•			
Komfort in halligen Situationen	•			
Musik	•	•		
Komfort im Störgeräusch	•	•	•	
Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•
Ruhige Umgebung	•	•	•	•
Sprach-Streaming (Medien) + Mik.	•	•	•	•
Audio-Streaming (Medien) + Mik.	•	•	•	•
Zusätzliche Programme				
Maximale Anzahl der zusätzlichen Programme	4	4	4	4
Komfort in halligen Situationen	•			
Verstehen im lauten Störgeräusch	•	•		
Speech in 360°	•	•		
Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•
Ruhige Umgebung	•	•	•	•
Komfort im Störgeräusch	•	•	•	•
Musik	•	•	•	•
Akustisches Telefon	•	•	•	•
Individuelles Hörprogramm	•	•	•	•
Telefon über T-Spule ± Mik. ¹	•	•	•	•
Induktionsschleife (Telefonspule ± Mik.) ¹	•	•	•	•
Streaming-Programme				
RogerDirect™ + Mik.	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + Mik.	•	•	•	•
Anruf + Mik.	•	•	•	•

Funktionen	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
SpeechSensor	•			
Speech Enhancer	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Dynamic Noise Cancellation	•	•		
Motion Sensor Hearing ²	•	•	•	
RogerDirect	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Tap Control ²				
- Siri/Google Assistant	•	•		
- Streaming pausieren/fortsetzen	•	•		
- Anruf annehmen/beenden	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
Roger™ und direktional	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•
Broadband Booster ¹	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Lautstärkeabgleich (DataLogging)	•	•	•	•
auto Akklimatisierung	•	•	•	•
Streaming-Balance	•	•	•	•
SoundRecover ²	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Kanäle für Feinanpassung	20	20	16	12

SmartSpeech Technologie

¹ Nur für Phonak Sky L-UP verfügbar
² Nur für Phonak Sky L-PR verfügbar

Anpassung

	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	ab 9.0	ab 9.0
Noahlink Wireless/ Noahlink Wireless 2	•	•
NOAHLink		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

Akustische Ankopplung

			Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Schallaustritt	Standard-Hörwinkel	Gedämpft (HE11 680), transparent und 6 weitere Kinderfarben	•	•
		Ungedämpft (HE 11) nur in transparenter Farbe		•
	Kindersicherer Hörwinkel (Mini)	Gedämpft (HE11 680), transparent und 6 weitere Kinderfarben	•	•
		Ungedämpft (HE 11) nur in transparenter Farbe		•
	SlimTube 4.0	Für rechts und links und in fünf unterschiedlichen Längen (00, 0, 1, 2, 3) erhältlich	•	
Ohrpassstück für SlimTube Dome		Mini Dome	•	
		Offener Dome	In drei Größen (S, M, L) erhältlich	•
		Geschlossener Dome	In drei Größen (S, M, L) erhältlich	•
		Power Dome	In drei Größen (S, M, L) erhältlich	•
	SlimTip	Acryl	•	
		Silikon	•	
Ohrpassstück für Hörwinkel	Otoplastik		•	•

Gehäuse- und Hörwinkelfarben

Gehäuse



H0
Beige



P1
Sandbeige



P3
Sandelholz



P4
Kastanie



P5
Champagner



P6
Silbergrau



P7
Graphitgrau



P8
Samtschwarz



M6
Lava Red



M7
Blue Ocean



M8
Majesty Purple



Q2
Electric Green



Q3
Caribbean Pirate



T3
Precious Pink

Hörwinkel



R1
Grün



R2
Gelb



R3
Pink



R4
Orange



Q6
Blau



Q7
Violett



13
Transparent

Phonak Sky L Trial

Phonak Sky L Trial Hörsysteme können entsprechend Ihrer Empfehlung schnell auf die gewünschte Technologiestufe eingestellt werden. So können Sie die Hörlösung Ihres Kunden bereits beim ersten Termin optimal anpassen oder ein Ersatzgerät zur Verfügung stellen, falls das Hörsystem des Kunden in Reparatur ist. Sky L Trial Systeme enthalten auch einen vorinstallierten Roger-Empfänger für eine einfache Demo und Probetragen von allen Roger-Mikrofonen.

Phonak Sky L-PR Ladeoptionen

Phonak Charger Combi BTE / Phonak Charger Combi BTE 2

Sky L-PR verfügt über alle beliebten Lumity-Funktionen sowie die Vorteile von Wiederaufladbarkeit. So erleben Ihre Kunden einen ganzen Tag Hörerlebnis inklusive Wireless-Streaming.*

* Erwartete Akkulaufzeit von 16 Stunden, einschließlich 10 Stunden Roger oder Audio-Streaming.



Phonak Sky L Bluetooth®-Versionen

Streaming von Telefonanrufen / Audio-Streaming Bluetooth 4.2 Wireless Technologie und die meisten älteren bluetoothfähigen Telefone

Wireless Communication Portfolio

	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Wireless-Zubehör		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
Roger		
Roger-Mikrofone	•	•
App		
Roger-Mikrofone	•	•

Weitere Informationen finden Sie unter www.phonak.com/sky-lumity

Informationen zu Roger-Mikrofonen finden Sie unter www.phonak.com/roger-for-education

Informationen zu myPhonak Junior finden Sie unter www.phonak.com/myphonak-junior

life is on

Seit 1947 setzt sich Phonak dafür ein, Menschen den Zugang zu neuen Klangwelten zu eröffnen und ihnen so mehr Lebensqualität zu ermöglichen. Schon als das Unternehmen gegründet wurde, ließen wir uns bei Phonak von einer zentralen Annahme leiten: Wir glauben, die Fähigkeit gut zu hören ist eng mit dem Wohlbefinden verknüpft und trägt damit maßgeblich dazu bei, das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Tatsächlich gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen unserem Hörvermögen und unserem emotionalen, kognitiven und körperlichen Wohlbefinden. Deshalb hat es sich Phonak zum Ziel gesetzt, das vielfältigste Portfolio an innovativen Hörlösungen anzubieten – sowohl jetzt als auch in Zukunft. Phonak arbeitet eng mit Hörakustikern zusammen und konzentriert sich dabei auf das, was wirklich wichtig ist: Ein besseres Sprachverstehen, eine höhere Lebensqualität und eine positive Wirkung auf die Gesellschaft als Ganzes.

www.phonak.com



027-0697-01|V1.00|2023-06|NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved