Phonak Sky[™] Marvel



Liebe auf den ersten Klang

Für weitere Informationen besuchen Sie www.phonakpro.de



Sky Marvel bietet modernste Technologie für eine optimale Klangqualität und sorgt für mehr Komfort,

Sicherheit und Robustheit in allen Lebensbereichen eines Kindes.

Unser neues Sky Marvel Portfolio bietet eine einzigartige Kombination aus neuesten technologischen Innovationen und kindgerechten Funktionen. Um die Sprachentwicklung und Sprachverständlichkeit bei Kindern bestmöglich zu fördern, arbeiten wir an der Entwicklung optimierter und anwenderfreundlicher Lösungen. Mit Sky Marvel wird sowohl die Quantität als auch die Qualität akustischer Signale erhöht. So unterstützen unsere Geräte Kinder bei ihrer sozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklung. Mit Liebe auf den ersten Klang.



Das weltweit erste speziell für Kinder entwickelte Automatik-Betriebssystem

Das AutoSense Sky OS 3.0 Automatik-Betriebssystem wurde speziell für die anspruchsvollen Hörsituationen entwickelt, die Kinder täglich erleben. Die adaptive Störgeräuschunterdrückung sorgt für mehr Komfort und wirkt einer Hörermüdung entgegen. Mit Sky Marvel führen wir AutoSense Sky OS 3.0 ein, das nun auch gestreamte Signale klassifizieren kann. Dadurch genießen Kinder einen klaren und vollen Klang und eine optimierte Soundqualität beim Streamen von Sprache und Musik.

Direkte binaurale Anbindung an Smartphones, Roger™-Mikrofone u.v.m.

Direkte Übertragung von iOS®- und Android™-Geräten

Anders als die meisten anderen Hörgeräte für Kinder lassen sich Sky Marvel Hörgeräte direkt mit jedem Smartphone und bluetoothfähigen Geräten verbinden. Das Audiosignal wird dabei direkt auf beide Ohren übertragen und zudem ist eine Kopplung mit zwei Geräten möglich. In einer Welt, in der digitale Geräte im sozialen Leben und in der Bildung eines Kindes zum Alltag gehören, ermöglicht Sky Marvel intuitiven Zugang zu Sprache, Apps, Musik, Hörspielen und vielem mehr – inklusive Streaming in Stereo-Qualität.

Produktbeschreibung



Sky M-M Sky M-M Trial



Sky M-PR Sky M-PR Trial M90/M70/M50/M30



Sky M-SP Sky M-SP Tria

Batterie	
Multifunktionstast	er
Telefonspule	
Bluetooth®	
Nanobeschichtung	
IP-Code (Schutzgra	ad)
Maße (L x B x H)	mm
Gewicht	g
Ladezeiten	0% bis 100%
	0% bis 80%
	30 Min. Anpassung
Max. Ausgangsscha	lldruck (2 cm³-Kuppler)
	dB SPL
	dB
Frequenzbereich	Hz
Betriebsstrom	mA

M90/M70/M50/M30
312
•
•
•
•
IP68
31,3 x 14,1 x 7,3
2,18

_	Integrierter Akku
	•
	•
	•
	IP68
	36,7 x 16,4 x 8,5
	3,71
	3 h
	1,5 h
	10 Min.


Sky M-SP Trial M90/M70/M50/M30	
13	
•	
•	
•	
•	
IP68	
40 x 16,9 x 8,5	
4,4	


isgangsschal	ldruck (2 cm³-Kuppler)	SlimTube 4.0	HE11 680
	dB SPL	122	128
	dB	58	63
nzbereich	Hz	<100 - 6500	<100 - 8000
sstrom	mA	1,5	1,6


SlimTube 4.0	HE11 680
127	130
60	66
<100 - 7000	<100 - 6800

HE11	HE11 680
139	133
81	75
<100 - 5000	<100 - 5000
2,1	2,0


Λ	 			- 1	
An	SSI	bei	rei	cr	ıe

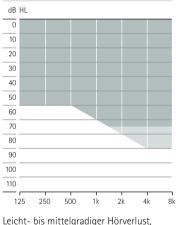

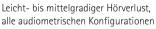

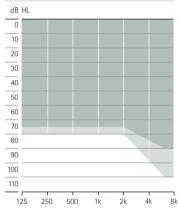

Leichtgradiger bis starker Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen

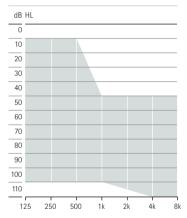


Leicht- bis hochgradiger Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen

SlimTube 4.0

HE11 680

Gehäuse- und Hörwinkelfarben

Gehäuse

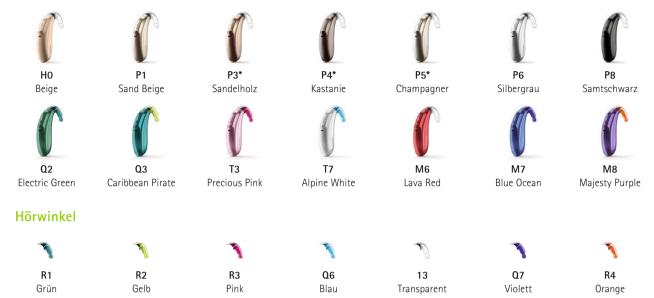

^{*} Die Farben P3, P4 und P5 sind für die Technologiestufe M30 nicht verfügbar.

Technologiestufen

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
AutoSense Sky OS 3.0				
Ruhige Umgebung	•	•	•	•
Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•
Komfort im Störgeräusch	•	•	•	
Musik	•	•		
Verstehen im lauten Störgeräusch ³	•			
Verstehen bei Fahrgeräuschen	•			
Komfort in halligen Situationen	•			
Sprach-Streaming (Medien) + Mik.	•	•	•	•
Audio-Streaming (Medien) + Mik.	•	•	•	•
Zusätzliche Programme				
Maximale Anzahl der zusätzlichen	3	3	3	3
Programme				
Komfort in halligen Situationen	•			
Verstehen im lauten Störgeräusch	•	•		
Speech in 360°	•	•		
Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•
Ruhige Umgebung	•	•	•	•
Komfort im Störgeräusch	•	•	•	•
Musik	•	•	•	•
Akustisches Telefon	•	•	•	•
Individuelles Programm	•	•	•	•
Streaming-Programme				
RogerDirect + Mik.	•	•	•	•
PartnerMic + Mik.	•	•	•	•
Anruf + Mik.	•	•	•	•

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
Funktionen				
UltraZoom	•	•	•	•
SNR-Boost	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•
Lautstärkeabgleich (DataLogging)	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•	
Kanäle für Feinanpassung	20	16	12	8
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
WindBlock	•	•		
EchoBlock	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync	•	•	•	•
Akustisch optimiertes Vent	•	•	•	•
auto Akklimatisierung	•	•	•	•
Streaming-Balance	•	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•	•
Roger und direktional	•	•	•	

Anpassung

, an passering	Sky M-M Sky M-M Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-PR Sky M-PR Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-SP Sky M-SP Trial M90/M70/M50/M30
Phonak Target	ab 6.1	ab 6.1	ab 6.2
Noahlink Wireless	•	•	•
Noahlink			•
HI-PRO und HI-PRO 2			•

Akustische Ankopplung

Schallaustritt	Standard-Hörwinkel	Gedämpft (ER 11 680), transparent und 6 zusätzliche Farben für Kinder (siehe Seite 4) für Sky M-M und Sky M-PR			
		Nicht gedämpft (HE 11), nur transparent für Sky M-SP			
	Kindersicherer Hörwinkel	Mini gedämpft (ER 11 6	80), transparent und 6 zusätzliche Farben für Kinder (siehe Seite -4) für Sky M-M und Sky M-PR		
		Mini nicht gedämpft (HE 11), nur transparent für Sky M-SP Für rechts und links und in fünf unterschiedlichen Längen (00, 0, 1, 2, 3) erhältlich			
	SlimTube 4.0				
Ohrpassstück für SlimTube Dome	Dome	Mini Dome			
		Offener Dome	in drei Größen (S, M, L) erhältlich		
		Geschlossener Dome	in drei Größen (S, M, L) erhältlich		
		Power Dome	in drei Größen (S, M, L) erhältlich		
	SlimTip™	Acryl			
		Silikon			
		Titan			
Ohrpassstück für Hörwinkel	Otoplastik				

Phonak Sky Marvel Trial

Die neuen Phonak Sky M Trial Hörgeräte können entsprechend Ihrer Empfehlung schnell auf die gewünschte Technologiestufe eingestellt werden. Verschiedene Technologiestufen im Phonak Sky M Trial Hörgerät bieten Ihnen viele Möglichkeiten, die Hörlösung für den ersten Termin zu optimieren oder die Wartezeit bei Reparaturen zu überbrücken.

Phonak Charger BTE RIC

Dieses Ladegerät ist für alle wiederaufladbaren Marvel HdO- und RIC-Modelle geeignet. Es ist auch für große Ohrpassstücke geeignet. Es verfügt über einen USB-C-Netzanschluss und eine Statusanzeige.



Phonak Sky M Bluetooth® Versionen

Streaming von Telefonanrufen/Audio-Streaming

Bluetooth® 4.2 Wireless Technologie und ältere bluetoothfähige Telefone

Wireless Communication Portfolio

		Sky M-M Sky M-M Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-PR Sky M-PR Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-SP Sky M-SP Trial M90/M70/M50/M30
Wireless-Zubehör	TV Connector	•	•	•
	Phonak PartnerMic™	•	•	•
	Phonak RemoteControl	•	•	•
Roger™	Roger-Mikrofone	•	•	•

Weitere Informationen finden Sie unter:





www.phonakpro.de/skymarvel

www.phonakpro.de/roger



Direkte Anbindung an Roger-Mikrofone

Mit RogerDirect™ können Kinder die Roger-Technologie nun auch ohne externen Empfänger nutzen. Roger-Empfänger lassen sich einfach wireless in Sky Marvel Hörgeräte installieren, sodass Probleme mit der Empfänger-Kompatibilität entfallen. Diese unschlagbare Kombination ermöglicht Kindern den Zugang zu mehr Wörtern und mehr Gesprächen.² Sky mit Roger ist jetzt um bis zu 42% kleiner and 32% leichter als die vorherige Generation.*

Lithium-lonen-Akku Technologie

In nur 3 Stunden ist das Sky M-PR vollständig aufgeladen – für einen ganzen Tag Hörgenuss, einschließlich 10 Stunden Nutzung von Rogeroder Wireless-Streaming.** Eltern, Betreuungspersonen, Lehrer und Kinder können sich darauf verlassen, dass das Hörgerät sicher geladen ist und den ganzen Tag bestmögliche Hörleistung bietet.

Speziell für Kinder entwickelt

Herausragende Robustheit

Mit Sky Marvel erhalten Kinder mehr Freiheiten, um zu spielen und das Leben zu entdecken, auch wenn es mal nass wird. Die robusten Gehäuse der Marvel Hörgeräte sind wasserresistent und staubdicht (Schutzklasse IP68).***

Kindersichere Funktionen

Der Hörwinkel und das neue Batteriefach sind kindersicher und junge Hörgeräteträger damit bestens geschützt. Die Batterien bleiben sicher im Hörgerät und geraten nicht in kleine Hände oder Kindermünder. Der verbaute Lithium-Ionen-Akku von Sky M-PR kann nicht entfernt und nicht verschluckt werden.

Neue Statusanzeige

Sky Marvel bietet eine neu gestaltete intuitive Anzeige, die diskret und eindeutig den aktuellen Status des Hörgeräts anzeigt.

² Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409.

* Vergleich von Sky M-M und Sky B-P + Roger 18 (Designintegrierter Empfänger)

Die tatsächliche Ladezeit hängt auch vom Ladezustand des Akkus ab, beträgt jedoch max. 3 Stunden

^{***} IP68 bedeutet, dass das Hörgerät wasserresistent und staubdicht ist. Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 Meter Wassertiefe und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß IEC 60529 schadlos überstanden

Life is on

Gutes Hören bedeutet Lebensqualität. Deshalb widmen wir uns bei Phonak seit mehr als 70 Jahren der Entwicklung wegweisender Hörlösungen. Damit ermöglichen wir es jedem, sich sozial und emotional frei zu entfalten und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Life is on.

www.phonakpro.de



