

# Phonak Audeo Fit™

## Produktinformation



Audeo Fit ist unsere neueste Innovation in der Paradise-Serie. Dieses Hörgerät verfügt über einen Herzfrequenzsensor, der die Gesundheitsdaten des Körpers aufzeichnet. Diese werden anschließend in der myPhonak App angezeigt. Durch die Erfassung von Herzfrequenz, Schrittzahl und Aktivitätslevel kann dieses Modell dazu beitragen, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln und das Wohlbefinden zu steigern. Phonak Audeo Fit Hörgeräte sind für leichtgradige bis starke Hörverluste geeignet und mit der zukunftsweisenden Technologie der Phonak Paradise Plattform ausgestattet. Sie sind die ideale Lösung für alle Kunden, die ihre Gesundheit sehr genau im Blick behalten wollen.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com)

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

# Produktbeschreibung



Audéo P-R Fit  
Audéo P-R Fit Trial  
P90/P70

Multifunktionstaster		•
Bluetooth®		•
Wasserabweisende Beschichtung		•
IP-Code (Schutzgrad)		IP68 <sup>1</sup>
Maße	L x B x T	30,6 x 12,3 x 8,1 mm
	Gewicht	2,23 g
Ladezeiten <sup>2</sup>	0% bis 100%	3 Std.
	0% bis 80%	1,5 Std.
	30 Min. Anpassung	10 Min.
<b>M Receiver</b>		
Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL)		114
Max. Verstärkung (dB)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	51
Frequenzbereich (Hz)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	<100 - >8000
<b>P Receiver</b>		
Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL)		122
Max. Verstärkung (dB)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	59
Frequenzbereich (Hz)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	<100 - 6300

## Gehäusefarben



P1  
Sand Beige



P4  
Kastanie



P6  
Silbergrau

<sup>1</sup> IP68 bedeutet, dass das Hörgerät wasserresistent und staubdicht ist. Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 Meter tiefem Wasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß IEC60529 Standard schadlos überstanden.  
<sup>2</sup> Die tatsächliche Ladezeit hängt auch vom Ladezustand des Akkus ab, dauert jedoch nie länger als 3 Stunden.

# Technologiestufen

	Premium	Advanced	Funktionen	Premium	Advanced
<b>AutoSense OS™ 4.0</b>	Premium	Advanced	UltraZoom	•	•
Komfort in halligen Situationen	•		Dynamic Noise Cancellation	•	
Verstehen bei Fahrgeräuschen	•		Speech Enhancer	•	
Verstehen im lauten Störgeräusch	•		EchoBlock	•	
Musik	•	•	Tap Control		
Komfort im Störgeräusch	•	•	- Siri/Google Assistant	•	•
Verstehen im Störgeräusch	•	•	- Streaming pausieren/fortsetzen	•	•
Ruhige Umgebung	•	•	- Anruf annehmen/beenden	•	•
Sprach-Streaming (Medien) + Mik.	•	•	StereoZoom	•	•
Audio-Streaming (Medien) + Mik.	•	•	WindBlock	•	•
<b>Zusätzliche Programme</b>			SoundRelax	•	•
Maximale Anzahl der zusätzlichen Programme	4	4	Motion Sensor Hearing	•	•
Komfort in halligen Situationen	•		DuoPhone	•	•
Verstehen im lauten Störgeräusch	•	•	Real Ear Sound	•	•
Speech in 360°	•	•	Roger und direktional	•	•
Verstehen im Störgeräusch	•	•	SoundRecover2	•	•
Ruhige Umgebung	•	•	WhistleBlock	•	•
Komfort im Störgeräusch	•	•	NoiseBlock	•	•
Musik	•	•	RogerDirect™	•	•
Akustisches Telefon	•	•	Lautstärkeabgleich (DataLogging)	•	•
Individuelles Hörprogramm	•	•	QuickSync	•	•
<b>Streaming-Programme</b>			AOV	•	•
RogerDirect + Mik.	•	•	Tinnitus Balance Noiser	•	•
PartnerMic + Mik.	•	•	auto Akklimatisierung	•	•
Anruf + Mik.	•	•	Streaming-Balance	•	•
			Kanäle für Feinanpassung	20	20

# Gesundheitsfunktionen

	Audéo Fit	Wiederaufladbare Paradise RICs
Separate Tragedauer für die einzelnen Hörgeräte	•	•
Durchschnittliche Gesamttragedauer für bilaterale Hörgeräte	•	•
Durchschnittliche Tragedauer in unterschiedlichen Hörumgebungen	•	•
Schritte	•	•
Aktivitätslevel	•	•
Im Gehen oder Laufen zurückgelegte Entfernung	•	
Herzfrequenz	•	
Optionale Zielfestlegung für die Tragedauer	•	•
Optionale Zielfestlegung für die Anzahl der Schritte	•	•

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.  
IOS ist eine Marke von Cisco, Inc.  
Android ist eine Marke von Google, Inc.

# Anpassung


## Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial

Phonak Target	ab 7.3
Noahlink Wireless	•

# Akustische Ankopplung\*

	M Sensor Receiver	P Sensor Receiver
<b>Länge</b>		
Verfügbar in vier unterschiedlichen Längen (0, 1, 2, 3) linke und rechte Seite	•	•
<b>Dome</b>		
Mini Dome	•	
Offener Dome                      In drei Größen verfügbar (S, M, L)	•	
Geschlossener Dome (klar)      In drei Größen verfügbar (S, M, L)	•	
<b>cShell</b>		
Acryl	•	•
<b>Anpassbereiche</b>		

\* Nur der 8-polige Sensor Receiver und Sensor cShell sind mit Audeo Fit kompatibel.

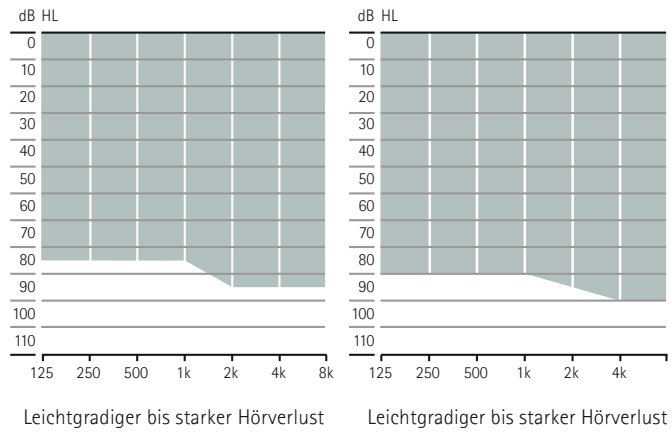

# Phonak Audéo Fit Trial™

Die neuen Phonak Audéo P Fit Trial Hörgeräte können entsprechend Ihrer Empfehlung schnell auf die gewünschte Technologiestufe eingestellt werden. Die beiden Technologiestufen im Phonak Audéo P Fit Trial Hörgerät bieten Ihnen viele Möglichkeiten, die Hörlösung für den ersten Termin zu optimieren oder die Wartezeit bei Reparaturen zu überbrücken.

## Phonak Audéo Fit Ladeoptionen



### Phonak Charger Case Combi

Das Phonak Charger Case Combi ist Ladegerät, Trockenbox und schützendes Hartschalenetui in einem. Diese robuste und spritzwassergeschützte Aufbewahrungsbox enthält außerdem ein Reinigungswerkzeug.



### Phonak Power Pack

Um wiederaufladbare Hörgeräte unterwegs aufzuladen, bringen Sie das Phonak Power Pack einfach an der Unterseite des Phonak Charger Case Combi an.

## Phonak Audéo Fit Bluetooth® Versionen

**Streaming von Telefonanrufen/**

Bluetooth® 4.2 Wireless Technologie und die meisten älteren

**Audio-Streaming**

bluetoothfähigen Telefone

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

## Wireless Communication Portfolio

	Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial P90/P70
<b>Wireless-Zubehör</b>	
TV Connector	•
Phonak PartnerMic	•
Phonak RemoteControl	•
<b>Roger</b>	
RogerDirect™	•
<b>Apps</b>	
myPhonak	•

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.phonakpro.de/audeoparadise](http://www.phonakpro.de/audeoparadise)

Weitere Informationen zu den Roger-Mikrofonen finden Sie unter: [www.phonakpro.de/roger](http://www.phonakpro.de/roger)

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.phonakpro.de/smartapps](http://www.phonakpro.de/smartapps)

## life is on

Wir bei Phonak glauben, dass gutes Hören gleichbedeutend mit Wohlbefinden und Lebensqualität ist. Seit mehr als 70 Jahren arbeiten wir mit Leidenschaft daran, eine Welt zu schaffen, in der „life is on“ für jeden gilt. Unsere innovativen Hörlösungen sind für Menschen jeden Alters und jede Art von Hörverlust konzipiert, um jedem zu ermöglichen, sich sozial und emotional frei zu entfalten.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



027-0656-01|V1.00|2022-01|NLG © 2022 Sonova AG All rights reserved