

# Phonak Virto™ Paradise



Phonak Virto P ist das umfassende ITE-Portfolio für leicht- bis hochgradige Hörverluste. Virto P ist in vier Modellen, vier Leistungsstufen und vier Technologiestufen erhältlich und verfügt über einen Tinnitus Balance Noiser zur Tinnitus-Therapie. Virto P Hörgeräte basieren auf der innovativen Phonak Paradise Plattform und eignen sich damit ideal für Kunden, die sich eine maßgefertigte Lösung mit bester Hörleistung wünschen.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com)

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on



# Produktbeschreibung

	 Virto P-Titanium P90/P70	 Virto P-10 NW O P90/P70/P50/P30	 Virto P-312 NW O P90/P70/P50/P30	 Virto P-312 P90/P70/P50/P30
<b>Leistungsstufe</b>				
M	•	•	•	•
P	•	•	•	•
SP	•	•	•	•
UP**				•
<b>Hardware-Konfiguration / Optionen / Technologie</b>				
Batteriegröße	10	10	312	312
Taster (Hörprogramm / Lautstärke)	Optional	Optional	Optional	•
EasyPhone (für akustisches Telefon)	Optional	•	•	
MiniControl (für Programmwechsel oder Lautstärkeänderungen)	•	•		
Lautstärkesteller (Poti)	Optional	Optional	Optional	
Telefonspule	Omni	Omni	Omni	Direktional
Mikrofon-Technologie	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>		
IP Schutzgrad (ohne Lautstärkesteller)				•
Bluetooth®				•
Binaurale VoiceStream Technologie				

## Farben

### Faceplate Farben

Nur Titanium:  
Schalenfarben Titanium Gray und Faceplate Farben



### Farben von Acryl-Schalen



### Schalenformen

	 Virto P-Titanium	 Virto P-10 NW O	 Virto P-312 NW O	 Virto P-312
IIC	•	•		
CIC	•	•		
MC		•	•	
ITC		•	•	
HS		•	•	•
FS		•	•	•

# Technologiestufen

	Premium P90	Advanced P70	Standard P50	Essential P30	Funktionen	Premium P90	Advanced P70	Standard P50	Essential P30
<b>AutoSense OS<sup>®</sup> 4.0</b>					UltraZoom	Premium	Advanced	Standard	Essential
Verstehen im lauten Störgeräusch*	•				Dynamic Noise Cancellation	•			
Verstehen bei Fahrgeräuschen	•				Speech Enhancer	•			
Komfort in halligen Situationen	•				EchoBlock	•			
Musik	•	•			WindBlock	•	•		
Komfort im Störgeräusch	•	•	•		SoundRelax	•	•		
Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•	DuoPhone	•	•	•	
Ruhige Umgebung	•	•	•	•	Roger und direktional*	•	•	•	
Sprach-Streaming (Medien) + Mik.*	•	•	•	•	SoundRecover2	•	•	•	•
Audio-Streaming (Medien) + Mik.*	•	•	•	•	Lautstärkeabgleich (DataLogging)	•	•	•	•
<b>Zusätzliche Programme</b>					WhistleBlock	•	•	•	•
Max. Anzahl zusätzl. Programme	3 (4*)	3 (4*)	3 (4*)	3 (4*)	NoiseBlock	•	•	•	•
Komfort in halligen Situationen	•				QuickSync*	•	•	•	•
Verstehen im lauten Störgeräusch*	•	•			Akustisch optimiertes Vent	•	•	•	•
Speech in 360° *	•	•			Tinnitus Balance	•	•	•	•
Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•	auto Akklimatisierung	•	•	•	•
Ruhige Umgebung	•	•	•	•	Streaming-Balance	•	•	•	•
Komfort im Störgeräusch	•	•	•	•	RogerDirect*	•	•	•	•
Musik	•	•	•	•	Kanäle für Feinanpassung	20	20	16	12
Akustisches Telefon	•	•	•	•					
Individuelles Hörprogramm	•	•	•	•					
<b>Streaming-Programme</b>									
RogerDirect + Mik.*	•	•	•	•					
PartnerMic + Mik.*	•	•	•	•					
Anruf + Mik.*	•	•	•	•					

# Anpassung

Software	Phonak Target ab Version 7.3
Schnittstellen	Noahlink Wireless, Programmierkabel, HI-PRO, HI-PRO2

\* Nur für Virto P-312

\*\* Nur in bestimmten Ländern erhältlich

1. IP68 bedeutet, dass das Hörgerät wasserresistent und staubdicht ist. Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 Meter tiefem Wasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß IEC60529 Standard schadlos überstanden.

Die Bluetooth<sup>®</sup> Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

iOS ist eine Marke von Cisco, Inc.


Android ist eine Marke von Google Inc.

# Akustische Ankopplung


## Leistungsstufe

		M	P	SP	UP**
Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	109	115	119	127
Max. Verstärkung (dB)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	40	50	60	70
Frequenzbereich (Hz)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	<100 - 7000	<100 - 6700	<100 - 7000	<100 - 5200
Betriebsstrom (mA)	Nicht wireless	1,1	1,2	1,1	
	Wireless	1,7	1,8	1,7	1,7


## Anpassbereich

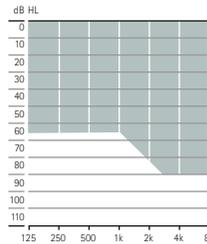


Für leicht- bis mittelgradigen Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen

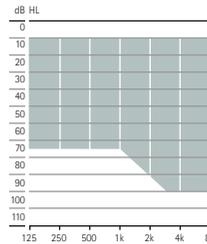

Für leichtgradigen bis starken Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen

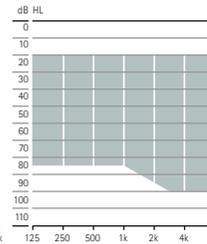

Für mittelgradigen bis starken Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen

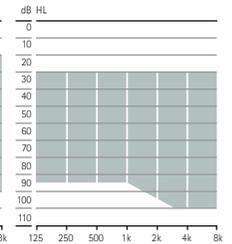

Für mittel- bis hochgradigen Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen

# Wireless Communication Portfolio

	Virto P-Titanium P90/P70	Virto P-10 NW 0 P90/P70/P50/P30	Virto P-312 NW 0 P90/P70/P50/P30	Virto P-312 P90/P70/P50/P30
<b>Wireless-Zubehör</b>				
TV Connector				•
Phonak PartnerMic				•
Phonak RemoteControl				•
<b>Roger</b>				
RogerDirect™				•
<b>Apps</b>				
myPhonak				•

Weitere Informationen zu Virto Paradise Finden Sie unter [www.phonakpro.com/virtoparadise](http://www.phonakpro.com/virtoparadise)

Weitere Informationen zu den Roger-Mikrofonen finden Sie unter: [www.phonakpro.de/roger](http://www.phonakpro.de/roger)

Weitere Informationen zu den Phonak Apps finden Sie unter: [www.phonakpro.de/smartapps](http://www.phonakpro.de/smartapps)



## Life is on

Wir bei Phonak glauben, dass gutes Hören gleichbedeutend mit Wohlbefinden und Lebensqualität ist. Seit mehr als 70 Jahren arbeiten wir mit Leidenschaft daran, eine Welt zu schaffen in der jeder das Leben in vollen Zügen genießen kann. Unsere innovativen Hörlösungen sind für Menschen jeden Alters und jede Art von Hörminderung konzipiert, um jedem zu ermöglichen sich sozial und emotional frei zu entfalten.

[www.phonakpro.de](http://www.phonakpro.de)

027-0648-01|V2.00|2022-01|NLG © 2022 Sonova AG All rights reserved