



Phonak Naída™ L-M

Phonak Naída L-M (L90/L70/L50/L30)


Technische gegevens

Standaard toonbocht HE11 680


2 cm³ couplergegevens

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2015/IEC 60118-0:2022

Output sound pressure level

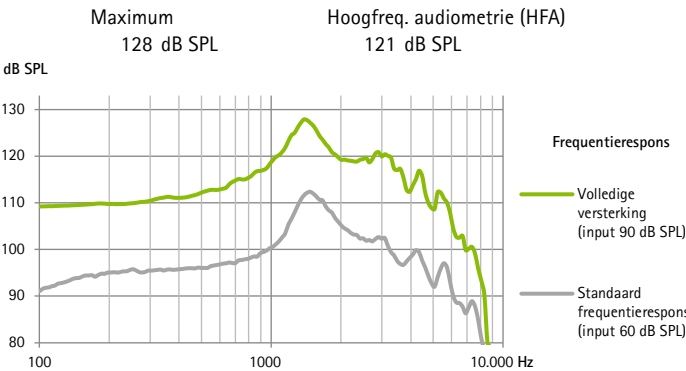


Akoestische versterking

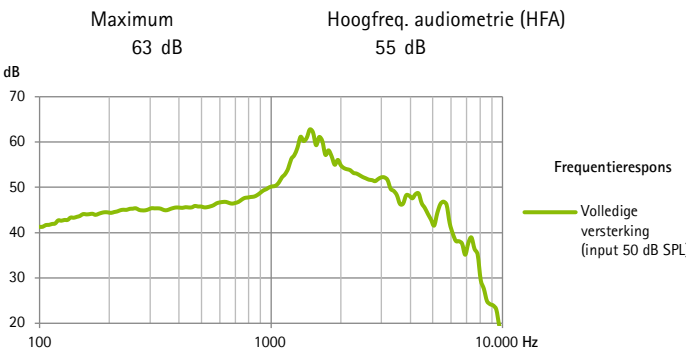

Frequentiebereik	<100 Hz - >7800 Hz			
Totale harmonische vervorming	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	5,0%	3,0%	2,0%	1,0%
Batterijstroom	1,6	mA		
Verwachte bedrijfsduur*	107	u		
Equivalent ingangsruijsniveau	19	dB SPL		

Luisterspoelgevoeligheid

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	105 dB SPL

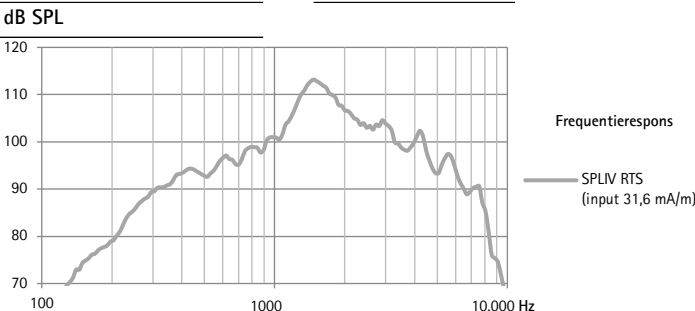


SlimTube HE


2 cm³ couplergegevens

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2015/IEC 60118-0:2022

Output sound pressure level

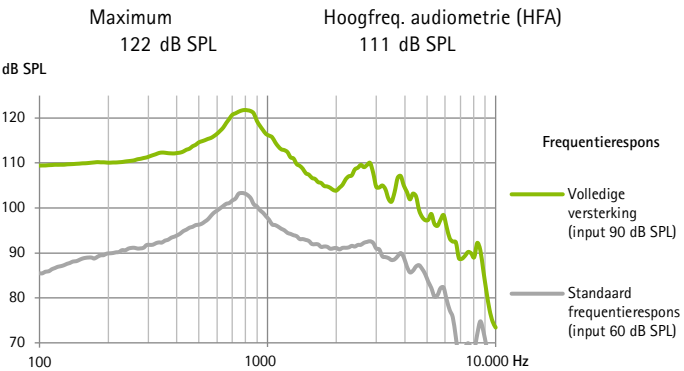


Akoestische versterking

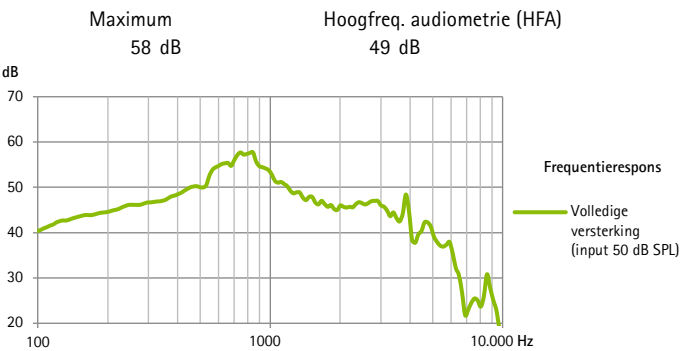

Frequentiebereik	<100 Hz - >8000 Hz			
Totale harmonische vervorming	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	1,5%	2,0%	1,0%
Batterijstroom	1,6	mA		
Verwachte bedrijfsduur*	107	u		
Equivalent ingangsruijsniveau	19	dB SPL		

Luisterspoelgevoeligheid

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	95 dB SPL

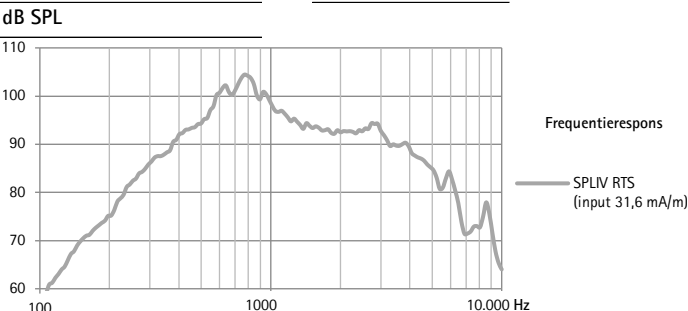

Algemene testinformatie

- Toevoerspanning 1,3 V/impedantie 6,2 Ω
- Er worden specifieke meetinstellingen gebruikt. RTS-aanpassing met volumeregelaar
- Het apparaat werkt in de lineaire modus
- Expansie op laag niveau is actief
- Alle verkregen gegevens zijn gemeten met Phonak Target-meetinstellingen
- De latentie van het vastgestelde audiosignaal is 6,2 ms volgens een interne standaard

Waarschuwingen

⚠ Wijzigingen aan het hoortoestel die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door de fabrikant zijn niet toegestaan. Dergelijke wijzigingen kunnen het oor of het hoortoestel beschadigen.

⚠ De geluidssterkte in de oren van kinderen kan aanzienlijk hoger liggen dan bij de gemiddelde volwassene. Een RECD-meting ter correctie van de OSPL90 van de doelaanpasser is aanbevolen.

* De prestaties van de batterij zijn afhankelijk van de actieve functies, het gebruik van draadloze accessoires, het gehoorverlies, de leeftijd van de batterij, de geluidsomgeving en het oorstukje. Voor niet-oplaadbare zink-luchtbatterijen kan de werkingstijd variëren afhankelijk van het model van de batterij



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Zwitserland
www.phonak.com

A Sonova brand

