
B5

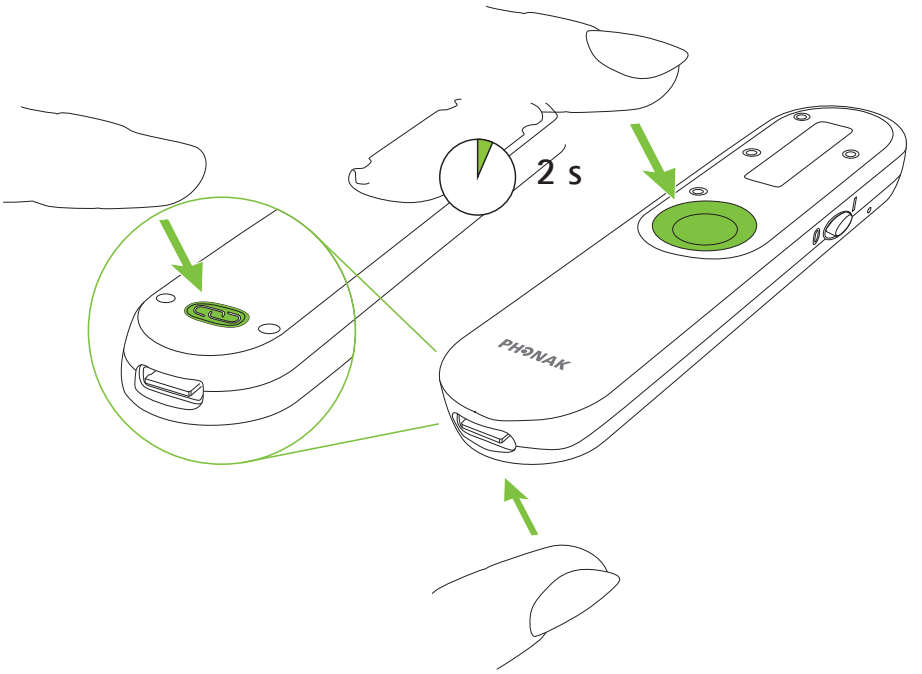


Press and hold the large center button and the small button with the chain icon on the backside for two seconds.

Halten Sie gleichzeitig die grosse mittlere Taste und die kleine Taste mit dem Kettensymbol auf der Rückseite zwei Sekunden lang gedrückt.

Appuyez et maintenez le grand bouton central et le petit bouton avec l'icône de la chaîne à l'arrière pendant deux secondes.

Houd de grote middelste knop en de kleine knop met het kettingpictogram op de achterkant twee seconden ingedrukt.

B6

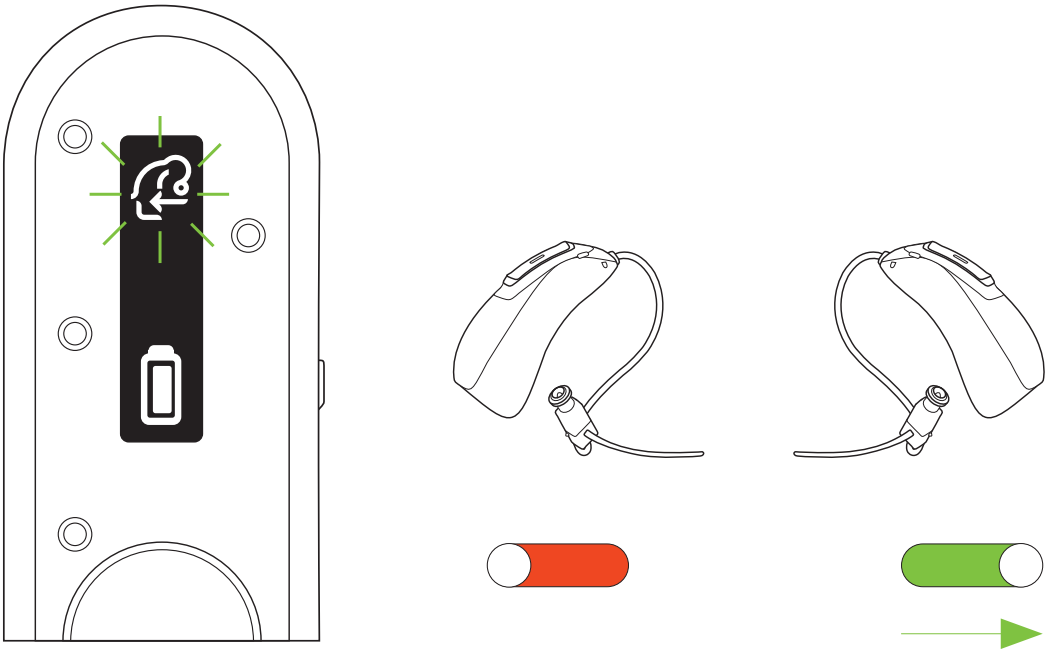


You should see a flashing hearing aid icon. Then switch on your right hearing aid and place it close to Roger On. Sie sollten nun ein blinkendes Hörgerät-Symbol sehen. Schalten sie nun Ihr rechtes Hörgerät ein und legen Sie es nahe Roger On.

Vous devriez voir une icône d`aide auditive clignotante. Allumez maintenant votre aide auditive droite et placez-la à proximité de Roger On.

U zou een knipperend hoortoestelpictogram moeten zien. Schakel nu uw rechterhoortoestel in en plaats het dicht bij Roger On.

B7

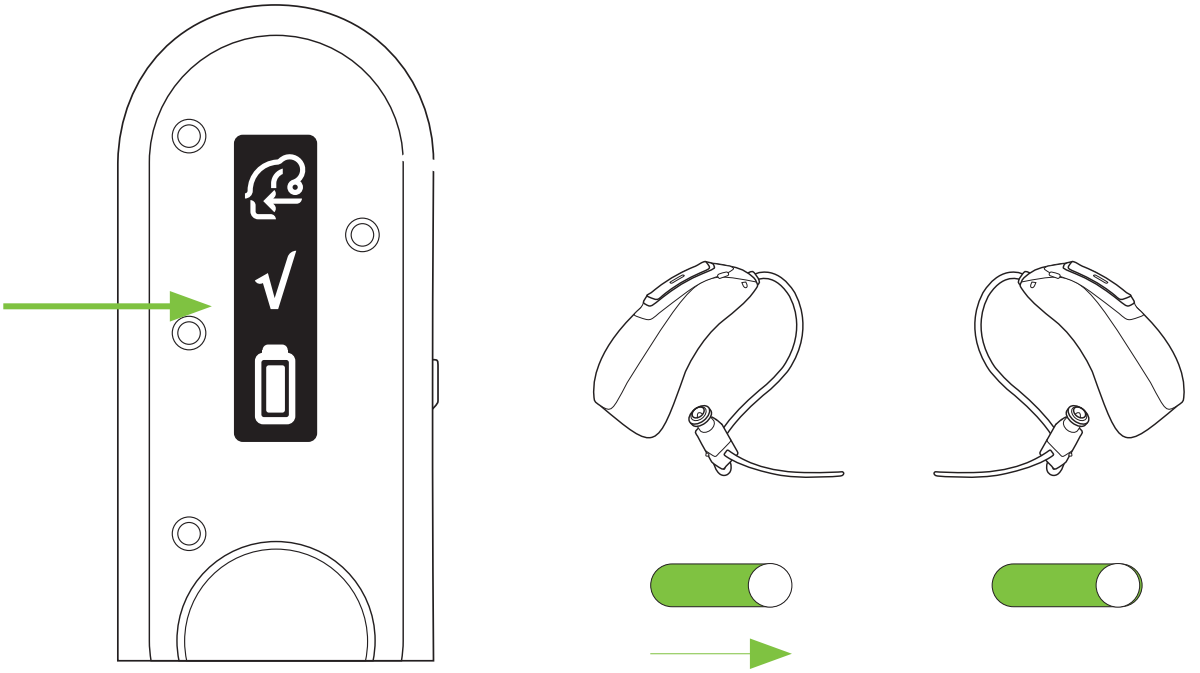

Wait a few seconds until you see a solid green LED. Then switch on your other hearing aid.

Warten Sie, bis Sie eine konstante grüne LED sehen. Schalten Sie Ihr anderes Hörgerät wieder ein.

En quelques secondes, vous voyez une LED verte fixe. Allumez votre autre aide auditive.

Wacht een paar seconden totdat u een groene ononderbroken LED en s chakel vervolgens uw andere hoortoestel in.

Model: Roger On 3
Roger On Sphere

Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4 CH-
3280 Murten
Switzerland

www.phonak.com/roger

sonova
HEAR THE WORLD

7 613389 747874

029-1512-49/V1.00/2026-02/ds © 2026 Sonova AG. All rights reserved.

PHONAK
life is on

A Sonova brand

Roger receiver setup.

Roger-Empfänger einrichten | Configuration du récepteur Roger | Roger ontvanger instellen



When the receiver is not yet attached/ installed. Wenn der Empfänger noch nicht angebracht/ installiert ist. Lorsque le récepteur n'est pas encore fixé/ installé. Wanneer de ontvanger nog niet bevestigd/geïnstalleerd is.

For an external Roger receiver such as Roger X, Roger 14 - Roger 21, Roger Neckloop, please follow instruction A. Otherwise proceed with steps B1 - B7. Für einen externen Roger-Empfänger wie Roger X, Roger 14 - Roger 21, Roger Neckloop, bitte folgen Sie der Anweisung A. Andernfalls fahren Sie mit den Schritten B1 - B7 fort. Pour un récepteur Roger externe tel que Roger X, Roger 14 - Roger 21, Roger Neckloop, veuillez suivre l'instruction A. Sinon, passez aux étapes B1 - B7. Voor een externe Roger-ontvanger zoals Roger X, Roger 14 - Roger 21, Roger Neckloop, volg alstublieft instructie A. Anders gaat u verder met de stappen B1 - B7.

roger


A

Attach the Roger receiver to your hearing aid, switch everything on, hold Roger On close to the Roger receiver and press the connect button on the backside of Roger On.


Bringen Sie den Roger-Empfänger an Ihrem Hörgerät an, schalten Sie alles ein, halten Sie den Roger On nahe an den Roger-Empfänger und drücken Sie die Verbindungstaste auf der Rückseite des Roger On.

Fixez le récepteur Roger à votre appareil auditif, mettez tout en marche, maintenez le Roger On près du récepteur Roger et appuyez sur le bouton de connexion au dos du Roger On.

Bevestig de Roger On-ontvanger aan uw hoortoestel, zet alles aan, houd de Roger On dicht bij de Roger On-ontvanger en druk op de verbindingstoets op de achterkant van de Roger On.

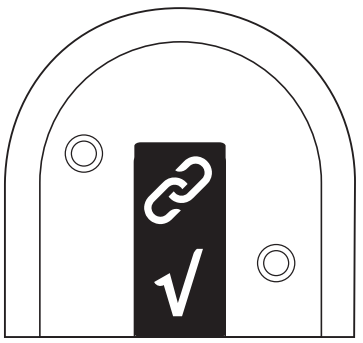


Done | Erledigt | Terminé | Gedaan

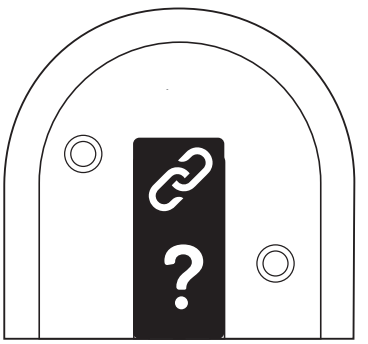

Go closer | Gehen Sie näher heran | Va plus près | Kom dichtererbij

B1

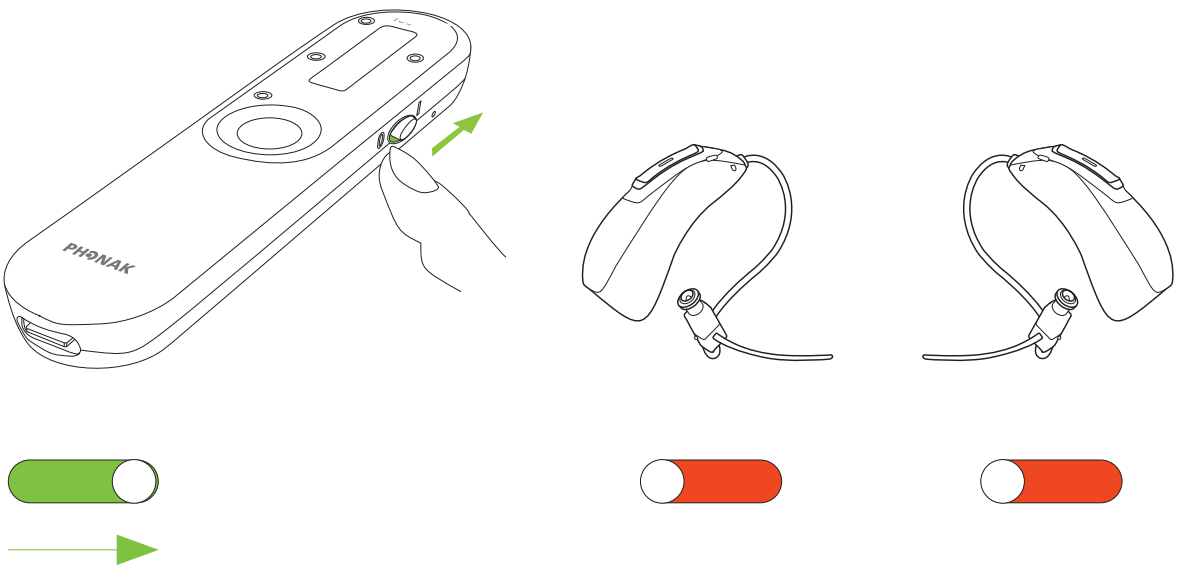


Switch on your Roger On.

Schalten Sie den Roger On ein.

Allumez votre Roger On.

Schakel uw Roger On in.

B2

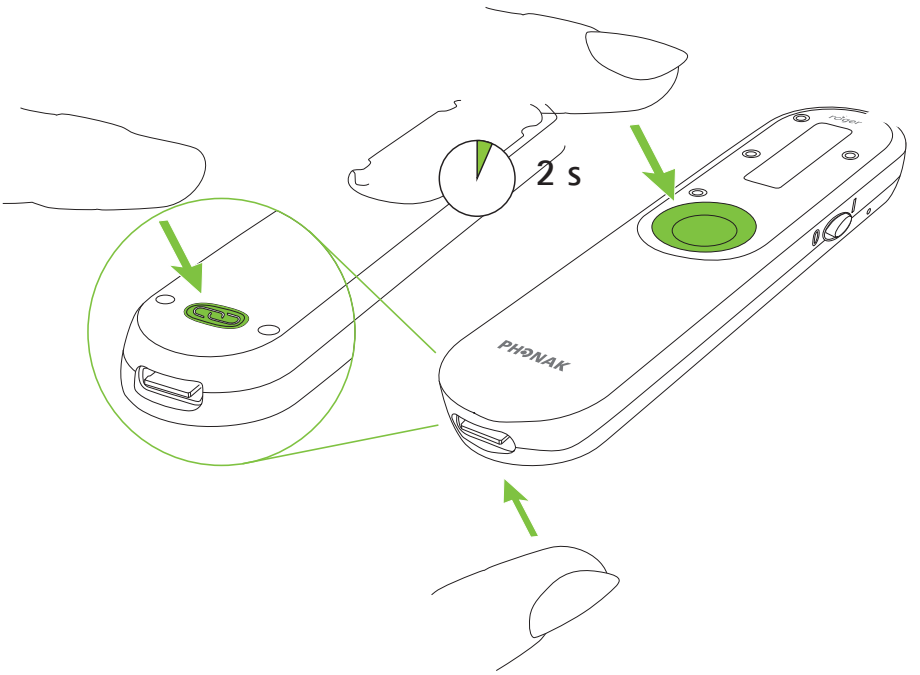


Press and hold the large center button and the small button with the chain icon on the backside for two seconds.

Halten Sie gleichzeitig die grosse mittlere Taste und die kleine Taste mit dem Kettensymbol auf der Rückseite zwei Sekunden lang gedrückt.

Appuyez et maintenez le grand bouton central et le petit bouton avec l'icône de la chaîne à l'arrière pendant deux secondes.

Houd de grote middelste knop en de kleine knop met het kettingpictogram op de achterkant twee seconden ingedrukt.

B3

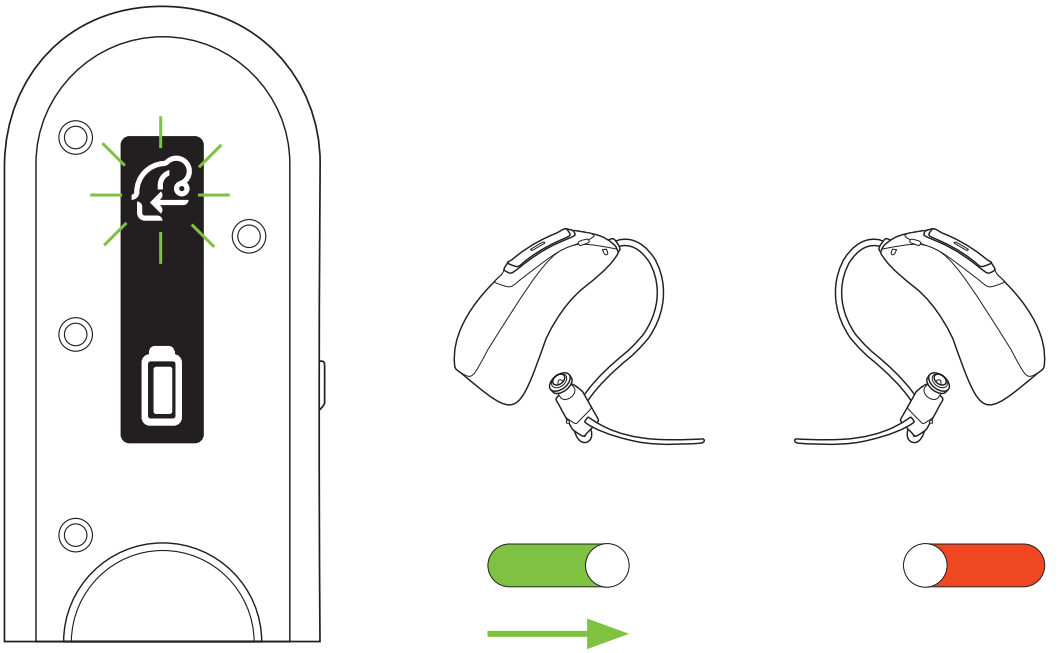


You should see a flashing hearing aid icon. Then switch on your left hearing aid and place it close to Roger On. Sie sollten nun ein blinkendes Hörgerät-Symbol sehen. Schalten sie nun Ihr linkes Hörgerät ein und legen Sie es nahe Roger On.

Vous devriez voir une icône d`aide auditive clignotante. Allumez maintenant votre aide auditive gauche et placez-la à proximité de Roger On.

U zou een knipperend hoortoestelpictogram moeten zien. Schakel nu uw linkerhoortoestel in en plaats het dicht bij Roger On.

B4

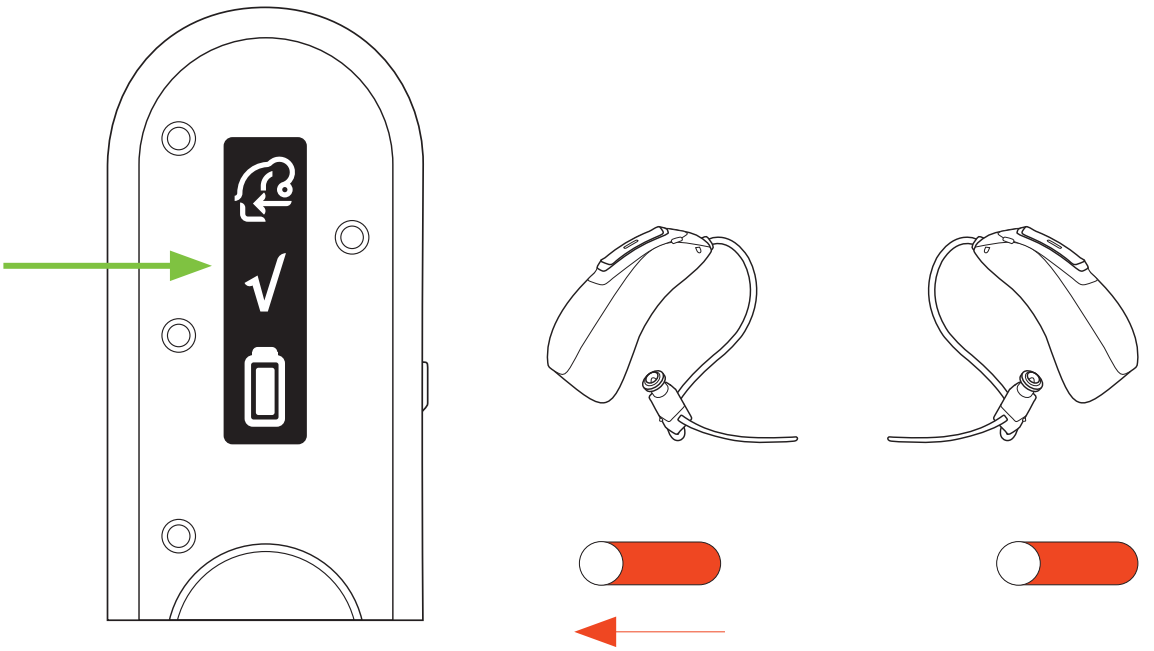

Wait until you see the check on the display. Then switch off your left hearing aid.

Warten Sie, bis Sie das Häkchen unterhalb des Hörgeräte-symbols sehen. Schalten Sie Ihr linkes Hörgerät wieder aus.

En quelques secondes, vous voyez la coche sur l`écran. Eteignez votre aide auditive gauche.

Wacht een paar seconden tot u het vinkje op het display ziet en schakel vervolgens uw linkerhoortoestel uit.