

Accesorios inalámbricos de Phonak Marvel™

Información del producto



El TV Connector de Phonak es una solución sencilla lista para usar con los audífonos Phonak Marvel. Con la tecnología exclusiva Phonak AirStream™, ofrece calidad sonora de nivel superior para transmitir desde cualquier televisor y sistema estéreo. Además, gracias a la conectividad directa a teléfonos iOS y Android, la aplicación intuitiva Phonak Remote app permite al usuario sacar aún más partido de sus audífonos Marvel.

TV Connector: el dispositivo de transmisión fácil de utilizar para TV y música



El **TV Connector** es la interfaz lista para usar para la televisión y otras fuentes de audio compatible con la conectividad directa para audífonos Phonak Marvel. El objetivo de su diseño es simplificar su configuración y uso; además, ofrece un sonido en estéreo con una calidad excelente mediante la tecnología AirStream™. TV Connector puede transmitir señales de audio a una distancia de hasta 15 metros a una cantidad ilimitada de oyentes conectados al mismo tiempo.


Descripción general de las funciones

- Transmisión a ambos audífonos con sonido estéreo
- Tecnología AirStream para obtener una mejor calidad sonora, la menor latencia de transmisión y un método de conexión más sencillo
- Un solo clic para conectar todos los audífonos compatibles dentro del radio de alcance sin necesidad de tocar el audífono.
- Transmisión simultánea a una cantidad ilimitada de usuarios al mismo tiempo
- Para una mayor discreción, puede instalarse detrás de la televisión

Compatibilidad

- El TV Connector es compatible con todos los audífonos de conectividad directa Phonak.

Utilización

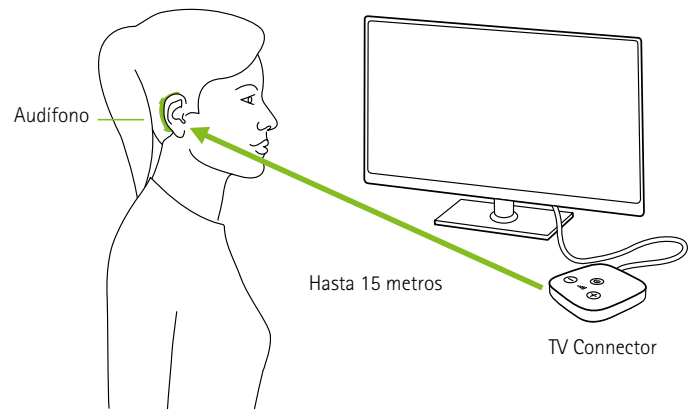

Para ver vídeos sobre cómo utilizar y configurar TV Connector, visite www.phonakpro.es/tvconnector

Datos técnicos



- 1 Botón de conexión
- 2 Indicador luminoso (LED)
- 3 Toma de alimentación micro-USB
- 4 Conexión de audio para cable óptico (Toslink) o cable analógico (con clavija de 3,5 mm)
- 5 Botón de encendido
- 6 Botones de subir y bajar el volumen (calibración)

Tamaño de caja pequeño (L.: 63 mm × an.: 63 mm × al.:12 mm)

Phonak Remote: la aplicación de mando a distancia simplificada




La aplicación **Phonak Remote** está diseñada para mejorar la capacidad de uso para una mayor comodidad al utilizar un mando a distancia. Se trata de un fácil control de las funciones del audífono visualizadas en el teléfono inteligente sin la necesidad de un dispositivo intermedio en el cuerpo.


Descripción general de las funciones

- Ajuste de volumen de los audífonos en ambos lados o cada uno de manera individual
- Lista de programas con selección directa de los programas de audífonos disponibles
- Posibilidad de personalizar el nombre de los programas de audífonos disponibles en la aplicación
- Selección de fuentes de audio disponibles conectadas a los audífonos
- Fácil ajuste de la función de equilibrio ambiental del audífono durante una transmisión desde una fuente de audio
- Ajuste independiente de la intensidad de ruido de Tinnitus, si está disponible en el audífono
- Comprobación del tiempo de uso medio de los audífonos conectados en la aplicación
- Estado de carga de la batería (audífonos recargables)
- Configuración del encendido automático sin cargador (audífonos recargables)


Para ver vídeos sobre cómo utilizar y configurar la aplicación Phonak Remote app en su teléfono, visite www.phonakpro.es/remoteapp

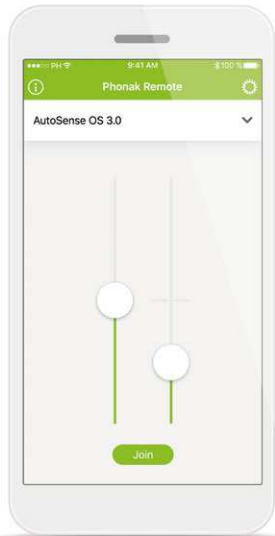


Ajuste de volumen en cada lado

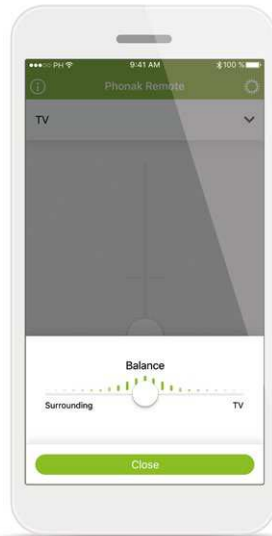

Equilibrio ambiental de una transmisión de audio

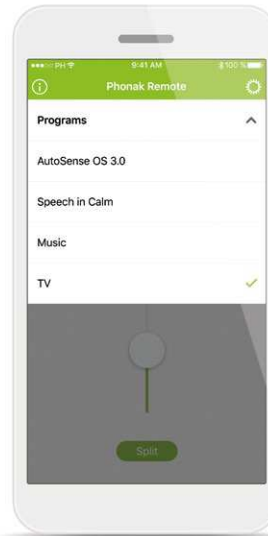

Selección y personalización de programas

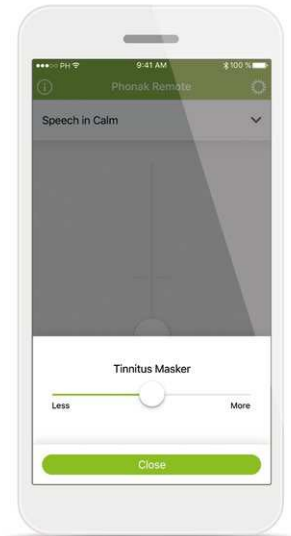

Intensidad de ruido Tinnitus

Compatibilidad

- La aplicación Phonak Remote app es compatible con los audífonos Phonak con conectividad Bluetooth®.
- Phonak Remote puede utilizarse en teléfonos con la función de baja energía Bluetooth® (BT-LE, por sus siglas en inglés) y es compatible con los iPhone 5s o superiores con iOS 10.2 o una versión posterior.
- Phonak Remote puede utilizarse en dispositivos Android certificados con los servicios móviles de Google (GMS) que sean compatibles con Bluetooth 4.2 y el sistema operativo Android 6.0 y posteriores.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone e iOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

La palabra de la marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc.

Life is on

En Phonak, creemos que una buena audición es fundamental para poder disfrutar al máximo de la vida. Durante más de 70 años hemos permanecido fieles a nuestro objetivo y, para ello, hemos desarrollado soluciones auditivas avanzadas que pueden mejorar la vida social y emocional de las personas. Life is on.

www.phonak.es