

Phonak Audéo™ L.

Información del producto

Phonak Audéo L es el portafolio completo de audífonos RIC para pérdidas auditivas de leves a profundas. Phonak Audéo L incluye tres diseños, cuatro niveles de rendimiento y cinco auriculares, incluido el auricular ActiveVent™.

Con la innovadora tecnología de la plataforma Phonak Lumity, los audífonos Phonak Audéo L son la solución perfecta para aquellos usuarios que prefieren cajas para RIC flexibles y discretas.



Descripción del producto



Audéo L-R
Audéo L-R Trial
L90/L70/L50/L30

Audéo L-RT
Audéo L-RT Trial
L90/L70/L50/L30

Audéo L-RL
Audéo L-RL Trial
L90/L70/L50/L30

Botón multifunción		•	•	•
Bobina inductiva			•	
Bluetooth®		•	•	•
Recubrimiento hidrófobo		•	•	•
Índice IP		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Dimensiones	L. x An. x Prof.	27,7 x 12 x 8,1 mm (1,09 x 0,47 x 0,32")	30,3 x 12,6 x 8,1 mm (1,19 x 0,5 x 0,32")	29,5 x 12,9 x 9 mm (1,16 x 0,51 x 0,35")
	Peso	2,2 g (0,08 oz)	2,6 g (0,09 oz)	2,8 g (0,1 oz)
Tiempos de carga ²	De 0 % a 100 %	3 h	3 h	3 h
	De 0 % a 80 %	1,5 h	1,5 h	2,0 h
	Adaptación de 30 minutos	15 min	15 min	20 min

Auricular S

Presión de salida máx. (dB SPL)	Acoplador de 2 cc	111	111	111
Ganancia máx. (dB)	Acoplador de 2 cc	47	47	47
Rango de frecuencia (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000

Auricular M

Presión de salida máx. (dB SPL)	Acoplador de 2 cc	114	114	114
Ganancia máx. (dB)	Acoplador de 2 cc	51	51	51
Rango de frecuencia (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000

Auricular MAV

Presión de salida máx. (dB SPL)	Acoplador de 2 cc	119	119	119
Ganancia máx. (dB)	Acoplador de 2 cc	50	50	50
Rango de frecuencia (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000

Auricular P

Presión de salida máx. (dB SPL)	Acoplador de 2 cc	122	122	122
Ganancia máx. (dB)	Acoplador de 2 cc	59	59	59
Rango de frecuencia (Hz)		<100 - 6300	<100 - 6300	<100 - 6300

Auricular UP

Presión de salida máx. (dB SPL)	Acoplador de 2 cc	132	132	132
Ganancia máx. (dB)	Acoplador de 2 cc	71	71	71
Rango de frecuencia (Hz)		<100 - 6100	<100 - 6100	<100 - 6100

Colores de la caja



P1
beige
arena



H0
beige



P3
sándalo



P4
castaño



P5
champán



P6
gris
plata



P7
gris
grafito



P8
negro
aterciopelado



Q2
verde
eléctrico



Q3
pirata
del caribe



T3
rosa
precioso

¹ IP68 indica que el audífono es resistente al agua y al polvo. Resistió una inmersión continua a 1 metro de profundidad en agua dulce durante 60 minutos y 8 horas en una habitación con polvo conforme a la norma IEC 60529.
² El tiempo de carga real depende de la carga restante de la batería, pero no superará las 3 horas.

Niveles de rendimiento

AutoSense OS™ 5.0	Premium	Advanced	Standard	Essential
Confort en eco	•			
Conversación en el coche	•			
Palabra en ruido fuerte	•			
Música	•	•		
Confort en ruido	•	•	•	
Palabra en ruido	•	•	•	•
Ambiente tranquilo	•	•	•	•
Palabra multimedia + mic.	•	•	•	•
Música multimedia + mic.	•	•	•	•
Programas adicionales				
Programas adicionales máx.	4	4	4	4
Confort en eco	•			
Palabra en ruido fuerte	•	•		
Palabra en 360°	•	•		
Palabra en ruido	•	•	•	•
Ambiente tranquilo	•	•	•	•
Confort en ruido	•	•	•	•
Música	•	•	•	•
Teléfono acústico	•	•	•	•
Programa a medida	•	•	•	•
Programas de transmisión inalámbrica				
RogerDirect + mic.	•	•	•	•
PartnerMic + mic.	•	•	•	•
Llamada telefónica + mic.	•	•	•	•

	Premium	Advanced	Standard	Essential
Funciones				
SpeechSensor	•			
Enfatizador del habla	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Cancelador de ruido dinámico	•	•		
Sensor auditivo de movimiento	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	•
ActiveVent™	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Tap control				
- Siri/Asistente de Google	•	•		
- Pausar/reanudar transmisión	•	•		
- Aceptar/finalizar llamada telefónica	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
Funcionalidades de salud	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Preferencias de ajuste del usuario	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
Auto Aclimatización	•	•	•	•
Equilibrio ambiental	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Canal de ajuste fino	20	20	16	12

Tecnología SmartSpeech


Adaptación

	Audéo L-R Audéo L-R Trial	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial
Phonak Target	8.0 o superior	8.0 o superior	8.0 o superior
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•	•

Acoplador acústico

Longitud	Auricular S	Auricular M	Auricular MAV	Auricular P	Auricular UP
Disponibles en cuatro longitudes diferentes (0, 1, 2 y 3), izquierdo y derecho	•	•	•	•	•
Cápsula					
Cápsula de confort	•	•		•	
Cápsula abierta Disponible en tres tamaños (S, M, L)	•	•		•	
Cápsula ventilada Disponible en tres tamaños (S, M, L)	•	•		•	
Cápsula de potencia Disponible en tres tamaños (S, M, L)	•	•		•	
SlimTip*					
Acrílico	•	•		•	
Silicona	•	•		•	
Titanium AV			•		
Universal AV Disponible en cuatro formas (A, B, C, D)			•		
cShell					
Acrílico	•	•		•	•
Titanio	•	•		•	•
Rangos de adaptación					

* Disponible con opción de longitud de canal adicional

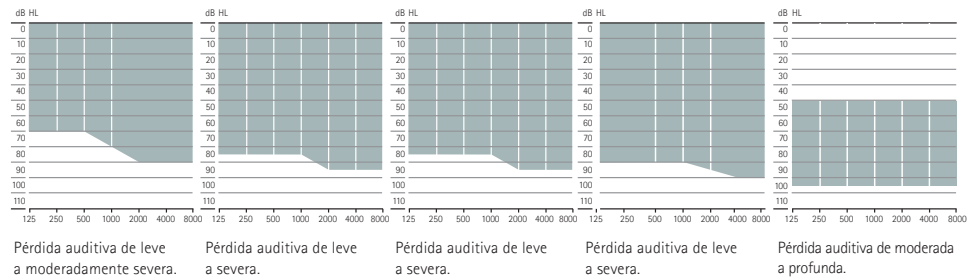

Tecnología Phonak SmartSpeech™

La tecnología SmartSpeech simboliza nuestra dedicación al diseño de funciones que mejoran la comprensión verbal y reducen el esfuerzo auditivo en diversos entornos de audición¹. Nuestro legado incluye funciones como el Enfatizador del habla, el Cancelador de ruido dinámico y el Sensor auditivo de movimiento. Con Phonak Audéo™ Lumity, introducimos dos nuevas funciones: StereoZoom 2.0 y SpeechSensor, además de las ventajas que ya aportan el auricular ActiveVent™ y la tecnología RogerDirect™.

Phonak Audéo L Trial

Los audífonos Phonak Audéo L Trial pueden ajustarse rápidamente al nivel de rendimiento deseado para adaptarse a su recomendación. La posibilidad de disponer de todos los niveles de tecnología en un solo audífono Phonak Audéo L Trial le ofrece muchas opciones para proporcionar la solución auditiva adecuada en la primera cita o acortar el tiempo durante las reparaciones.

¹ Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News. www.phonak.com/evidence

Latzel, M. & Hobi, S. (2022) ActiveVent™ Receiver provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. Phonak Field Study News. www.phonak.com/evidence

Thibodeau L.M. (2020) Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31(6), 404–411

Latzel, M., Lesimple, C., & Woodward, J. (2023) Speech Enhancer significantly reduces listening effort and increases intelligibility for speech from a distance. Phonak Field Study News. www.phonak.com/evidence

Opciones de carga de Phonak Audéo L



Phonak Charger Ease

El Phonak Charger Ease es un cargador compacto que incluye imanes en las ranuras de carga para facilitar la inserción y extracción de los modelos Audéo L-R y RT. Utiliza un puerto de carga USB-C estándar que se ilumina cuando se suministra energía.



Phonak Charger Case Go y Phonak Life Charger

Hay dos opciones disponibles para Audéo L-RL. Phonak Charger Case Go incluye una batería integrada con capacidad para cargar dos audífonos hasta tres veces. Ambos cargadores utilizan un puerto de carga USB-C estándar e incluyen un indicador LED que se ilumina cuando se suministra alimentación.

Versiones de Phonak Audéo L con Bluetooth®

Llamadas directas y transmisión de sonido Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.2 y la mayoría de los teléfonos con Bluetooth más antiguos

La palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Sonova AG está sujeto a la correspondiente licencia.

Portafolio de Comunicación inalámbrica

	Audéo L-R Audéo L-R Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial L90/L70/L50/L30
Accesorio inalámbrico			
TV Connector	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•
Roger			
RogerDirect™	•	•	•
Aplicaciones			
myPhonak	•	•	•
myPhonak Junior	•	•	•

Para obtener más información, visite www.phonak.com/audeo-lumity

Para obtener información sobre los micrófonos Roger, visite www.phonak.com/roger

Para obtener más información sobre myPhonak y myPhonak Junior, visite www.phonak.com/apps

life is on

Desde 1947, Phonak mantiene el firme compromiso de conservar la calidad de vida facilitando el acceso a nuevos mundos acústicos. Ya entonces, en el momento de su fundación, nuestra empresa se movía por una convicción formativa: creemos que oír bien es igual a vivir bien y, por lo tanto, es esencial para vivir la vida al máximo. De hecho, el sentido del oído está vinculado directamente al bienestar social, emocional, cognitivo y físico. Tanto hoy como en el futuro, nos esforzamos por ofrecer la gama más amplia de soluciones auditivas innovadoras. Además, junto con nuestros audioprotesistas, seguimos enfocándonos en lo que más importa: mejorar la comprensión verbal, cambiar la vida de las personas y crear un impacto positivo en toda la sociedad.

www.phonak.com



027-0667-06/V4.00/2023-06/NLG © 2022-2023 Sonova AG All rights reserved