

Phonak Sky™ Marvel



Amor al primer sonido

Para obtener más información, visite www.phonakpro.com

Sky Marvel incorpora la última tecnología de calidad sonora óptima y garantiza confort, seguridad y resistencia en todos los aspectos de la vida de los niños.

Con la nueva gama de Sky Marvel, presentamos una exclusiva combinación de las principales innovaciones tecnológicas del mundo y las funciones esenciales específicas para los niños. Nos esforzamos por ofrecer a los niños las mejores soluciones para el desarrollo del habla y del lenguaje, la inteligibilidad verbal y la facilidad de uso. Desarrollado para maximizar la cantidad y calidad de la entrada sonora, Sky Marvel ayuda al desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños con amor desde el primero sonido.

Sonido claro y variado

El primer sistema operativo del mundo diseñado específicamente para los niños

AutoSense Sky OS 3.0 está diseñado para reconocer los ambientes sonoros complejos que los niños experimentan todos los días y para proporcionar la combinación adecuada de la gestión adaptativa del ruido para un mayor confort y una menor fatiga auditiva.¹ Con Sky Marvel, presentamos AutoSense Sky OS 3.0, que ahora también clasifica la transmisión de señales. Gracias a esto, los niños reciben sonidos claros y ricos al transmitir el habla y calidad sonora optimizada al transmitir música.

Conexión a teléfonos inteligentes, micrófonos Roger™ y más

Transmisión directa desde iOS® y Android™

A diferencia de cualquier otro audífono pediátrico, Sky Marvel se conecta directamente con prácticamente todos los teléfonos inteligentes y dispositivos con tecnología Bluetooth®. Admite emparejamientos dobles y transmite audio en ambos oídos. En un mundo en el que los dispositivos modernos son un elemento central de la vida social y la educación de los niños, Sky Marvel permite acceso intuitivo y transmisión de calidad sonora estéreo para el habla, las aplicaciones, la música, los libros electrónicos y mucho más.



1 Feilner, M., Rich, S., & Jones, C. (2016). Automatic and directional for kids - Scientific background and implementation of pediatric optimized automatic functions. Phonak Insight, extraído de www.phonakpro.com/evidence, consultado el 19 de agosto de 2019.
iOS es una marca comercial de Cisco, Inc./Android es una marca comercial de Google, LLC.



Transmisión directa desde micrófonos Roger

Con RogerDirect™, los niños pueden acceder ahora a la tecnología Roger sin necesidad de acoplar un receptor externo. Los receptores Roger se pueden instalar de forma inalámbrica en los audífonos Sky Marvel, lo que elimina la dificultad de la compatibilidad del receptor. Esta insuperable combinación ahora se ofrece en el tamaño más pequeño posible, lo que proporciona a los niños un acceso más fácil a más palabras y más conversaciones.² Sky con Roger es ahora hasta un 42 % más pequeño y un 32 % más ligero que la generación anterior.*

Recargable

Con una carga completa en tan solo 3 horas, Sky M-PR proporciona un día completo de audición, incluidas 10 horas de Roger o transmisión multimedia.** Los padres, cuidadores, profesores y niños pueden disfrutar de la tranquilidad de saber que los audífonos estarán cargados.

Diseño específico para niños

Resistencia líder en el sector

Con Sky Marvel, los niños pueden explorar y jugar, incluso en entornos húmedos. Los audífonos Marvel tienen carcasas robustas, lo que hace que sean resistentes al agua y herméticos al polvo (clasificación IP68).***

Funciones de seguridad

Los oyentes más pequeños están protegidos gracias al codo de seguridad y al nuevo portapilas de seguridad, que mantiene las pilas en el audífono de forma segura y alejado de las bocas y manos de niños. Con el Sky M-PR, la pila de ion de litio recargable integrada no puede extraerse ni ingerirse.

Nuevo indicador luminoso

Sky Marvel ofrece un diseño novedoso de indicador luminoso intuitivo y discreto que comunica con claridad el estado del audífono.

² Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, vol. 61, 399-409.

* Si se comparan Sky M-M y Sky B-P + Roger 18 (receptor de diseño integrado)

** El tiempo de carga real depende de la vida útil restante de la pila, pero no superará las 3 horas.

*** IP68 indica que el audífono es resistente al agua y al polvo. Ha funcionado después de estar sumergido de forma continua a 1 metro de profundidad de agua durante 60 minutos y durante 8 horas en una cámara de polvo, según la norma IEC 60529.


Descripción del producto



Sky M-M
Sky M-M Trial
M90/M70/M50/M30

Pila	312		
Botón multifunción	•		
Bobina inductiva	•		
Bluetooth®	•		
Nanorrecubrimiento	•		
Índice IP	IP68		
Dimensiones (L. x An. x Prof.)	mm	31,3 x 14,1 x 7,3	
	pulgadas	1,23 x 0,56 x 0,29"	
Peso	g/oz	2,18/0,077	
Tiempos de carga	Del 0 % al 100 %		
	Del 0 % al 80 %		
	30 minutos de adaptación		
Máxima presión de salida (Acoplador de 2 cc)	Tubo fino 4.0	HE11 680	
	dB SPL	122	128
	dB	58	63
Rango de frecuencia	Hz	<100 - 6500	<100 - 8000
Corriente de trabajo (mA)	mA	1,5	1,6

Rangos de adaptación

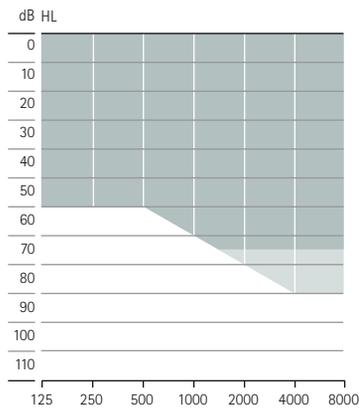


Pérdida auditiva de leve a moderadamente severa, todas las configuraciones audiométricas



Sky M-PR
Sky M-PR Trial
M90/M70/M50/M30

Pila	recargable integrada		
Botón multifunción	•		
Bobina inductiva	•		
Bluetooth®	•		
Nanorrecubrimiento	•		
Índice IP	IP68		
Dimensiones (L. x An. x Prof.)	mm	36,7 x 16,4 x 8,5	
	pulgadas	1,44 x 0,65 x 0,33"	
Peso	g/oz	3,71/0,131	
Tiempos de carga	Del 0 % al 100 %	3 h	
	Del 0 % al 80 %	1,5 h	
	30 minutos de adaptación	10 min	
Máxima presión de salida (Acoplador de 2 cc)	Tubo fino 4.0	HE11 680	
	dB SPL	127	130
	dB	60	66
Rango de frecuencia	Hz	<100 - 7000	<100 - 6800
Corriente de trabajo (mA)	mA	2,1	2,0

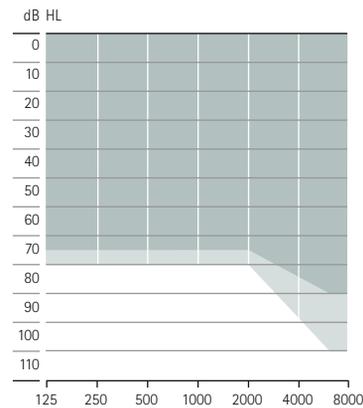


Pérdida auditiva de leve a severa, todas las configuraciones audiométricas



Sky M-SP
Sky M-SP Trial
M90/M70/M50/M30

Pila	13		
Botón multifunción	•		
Bobina inductiva	•		
Bluetooth®	•		
Nanorrecubrimiento	•		
Índice IP	IP68		
Dimensiones (L. x An. x Prof.)	mm	40 x 16,9 x 8,5	
	pulgadas	1,57 x 0,67 x 0,33"	
Peso	g/oz	4,4/0,155	
Tiempos de carga	Del 0 % al 100 %		
	Del 0 % al 80 %		
	30 minutos de adaptación		
Máxima presión de salida (Acoplador de 2 cc)	HE11	HE11 680	
	dB SPL	139	133
	dB	81	75
Rango de frecuencia	Hz	<100 - 5000	<100 - 5000
Corriente de trabajo (mA)	mA	2,1	2,0

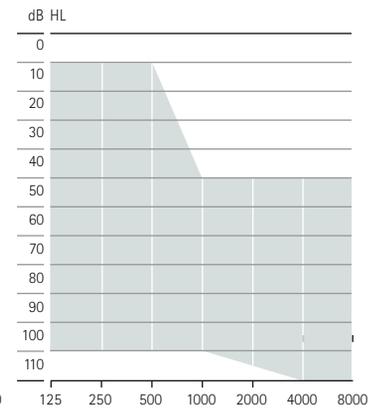

Pérdidas auditivas de leves a profundas, todas las configuraciones audiométricas

Colores del codo y la caja

Caja



H0
Beige



P1
Beige arena



P3*
Sándalo



P4*
Castaño



P5*
Champán



P6
Gris plata



P8
Negro aterciopelado



Q2
Verde eléctrico



Q3
Pirata del Caribe



T3
Rosa precioso



T7
Blanco alpino



M6
Rojo lava



M7
Azul océano



M8
Violeta majestuoso

Codo



R1
Verde



R2
Amarillo



R3
Rosa



Q6
Azul



I3
Transparente



Q7
Violeta



R4
Naranja

* Los colores P3, P4 y P5 no están disponibles para el nivel de rendimiento M30.

Niveles de rendimiento

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
AutoSense Sky OS 3.0				
Ambiente tranquilo	•	•	•	•
Palabra en ruido	•	•	•	•
Confort en ruido	•	•	•	
Música	•	•		
Discurso con ruido elevado ³	•			
Conversación en el coche	•			
Confort en eco	•			
Palabra multimedia + mic.	•	•	•	•
Música multimedia + mic.	•	•	•	•
Programas adicionales				
Programas adicionales máx.	3	3	3	3
Confort en eco	•			
Discurso con ruido elevado	•	•		
Palabra en 360°	•	•		
Palabra en ruido	•	•	•	•
Ambiente tranquilo	•	•	•	•
Confort en ruido	•	•	•	•
Música	•	•	•	•
Teléfono acústico	•	•	•	•
Programa a medida	•	•	•	•
Programas de transmisión				
RogerDirect + mic.	•	•	•	•
PartnerMic + mic.	•	•	•	•
Llamada telefónica + mic	•	•	•	•

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
Funciones				
UltraZoom	•	•	•	•
SNR-Boost	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•
Preferencias de ajuste del usuario	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•	
Canales de ajuste fino	20	16	12	8
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
WindBlock	•	•		
EchoBlock	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync	•	•	•	•
Venting Acústicamente Optimizado	•	•	•	•
auto Aclimatación	•	•	•	•
Equilibrio ambiental	•	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•	•
Configuración Roger y direccional	•	•	•	

Adaptación

	Sky M-M Sky M-M Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-PR Sky M-PR Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-SP Sky M-SP Trial M90/M70/M50/M30
Phonak Target	6.1 o superior	6.1 o superior	6.2 y superior
Noahlink Wireless	•	•	•
Noahlink			•
HI-PRO y HI-PRO 2			•

Acoplamiento acústico

Salida de sonido	Codo estándar	Con amortiguación (HE 11 680), transparente y en 6 colores pediátricos adicionales (consulte la página 4) para Sky M-M y Sky M-PR Sin amortiguación (HE 11), solo en color transparente para Sky M-SP	
	Codo de seguridad	Mini con amortiguación (HE 11 680), transparente y en 6 colores pediátricos adicionales (consulte la página -4) para Sky M-M y Sky M-PR Mini sin amortiguación (HE 11), solo en color transparente para Sky M-SP	
	Tubo fino 4.0	Disponible para la izquierda y derecha y en cinco longitudes distintas (00, 0, 1, 2, 3)	
Auricular para tubo fino	Cápsula	Cápsula cerrada de tapa	
		Cápsula abierta	Disponible en tres tamaños (pequeño, mediano y grande)
		Cápsula de confort	Disponible en tres tamaños (pequeño, mediano y grande)
		Cápsula de potencia	Disponible en tres tamaños (pequeño, mediano y grande)
	SlimTip™	Acrílico Silicona Titanio	
Auricular para codo	Molde del oído		
	Tip de espuma universal		

Phonak Sky Marvel Trial

Los nuevos audífonos Phonak Sky M Trial pueden configurarse rápidamente a los niveles de rendimiento necesarios con el fin de adaptarse a sus recomendaciones. Diversos niveles de tecnología en un audífono Phonak Sky Marvel Trial que le ofrece muchas opciones para proporcionar la solución auditiva en la primera cita o acortar el tiempo durante las reparaciones.

Cargador BTE RIC Phonak

Este cargador es adecuado para todos los audífonos Marvel BTE y RIC recargables. Cuenta con espacio para acomodar moldes de oído grandes, una entrada de alimentación USB-C y un indicador luminoso.



Versiones de Phonak Sky M Bluetooth®

Llamadas directas/transmisión de audio

Tecnología inalámbrica Bluetooth® 4.2 y la mayoría de los teléfonos con Bluetooth más antiguos

Portfolio de Comunicación Inalámbrica

		Sky M-M Sky M-M Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-PR Sky M-PR Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-SP Sky M-SP Trial M90/M70/M50/M30
Accesorio inalámbrico	TV Connector	•	•	•
	Phonak PartnerMic™	•	•	•
	Phonak RemoteControl	•	•	•
Roger™	Micrófonos Roger	•	•	•

Para obtener más información, visite:



www.phonakpro.com/skymarvel



www.phonakpro.com/roger

Life is on

En Phonak, creemos que una buena audición es fundamental para poder disfrutar al máximo de la vida. Durante más de 70 años, hemos permanecido fieles a nuestra misión al desarrollar soluciones auditivas pioneras que cambian la vida de las personas haciendo que prosperen social y emocionalmente. Life is on.

www.phonakpro.es