

Phonak Audéo™ L.

Tuotetiedot

Phonak Audéo L on kattava kuuloke korvakäytävssä koje (RIC) -mallisarja, joka sisältää ratkaisuja lievistä erittäin vaikeaan kuulonalenemaan. Phonak Audéo L -valikoimassa on neljä mallia, neljä suorituskykytasoa ja viisi ulkoista kuuloketta, mukaan lukien ActiveVent™-kuuloke.

Phonak Lumity -alustan innovatiiviseen teknologiaan pohjautuvat Phonak Audéo L -kuulokojeet ovat erinomainen ratkaisu asiakkaille, jotka haluavat käyttää joustavia ja huomaamattomia RIC-ratkaisuja.



Tuotetiedot



Audéo L-R
Audéo L-R Trial
L90/L70/L50/L30



Audéo L-RT
Audéo L-RT Trial
L90/L70/L50/L30



Audéo L-RL
Audéo L-RL Trial
L90/L70/L50/L30



Audéo L-312
Audéo L-312 Trial
L90/L70/L50/L30

		Audéo L-R Audéo L-R Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-312 Audéo L-312 Trial L90/L70/L50/L30
Paristokoko tai akku		sisäänrakennettu, ladattava	sisäänrakennettu, ladattava	sisäänrakennettu, ladattava	312
Monitoimipainike		•	•	•	•
Puhelinkela			•		
Bluetooth®		•	•	•	•
Vettä hylkivä pinnoite		•	•	•	•
IP-luokitus		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Mitat	P x L x S	27,7 x 12 x 8,1 mm	30,3 x 12,6 x 8,1 mm	29,5 x 12,9 x 9 mm	26,8 x 11,2 x 7,1 mm
	Paino	2,2 g	2,6 g	2,8 g	1,1 g
Latausajat ²	0–100 %	3 h	3 h	3 h	
	0–80 %	1,5 h	1,5 h	2,0 h	
	30 min sovitus	15 min	15 min	20 min	
S-kuuloke 4.0					
Maksimi antotaso (MPO) (dB SPL)	2cc-tiedot	111	111	111	111
Maksimivahvistus (dB)	2cc-tiedot	47	47	47	47
Taajuusvaste (Hz)		< 100 – > 8000	< 100 – > 8000	< 100 – > 8000	< 100 – > 8000
M-kuuloke 4.0					
MPO (dB SPL)	2cc-tiedot	114	114	114	114
Maksimivahvistus (dB)	2cc-tiedot	51	51	51	51
Taajuusvaste (Hz)		< 100 – > 8000	< 100 – > 8000	< 100 – > 8000	< 100 – > 8000
MAV-kuuloke					
MPO (dB SPL)	2cc-tiedot	119	119	119	
Maksimivahvistus (dB)	2cc-tiedot	50	50	50	
Taajuusvaste (Hz)		< 100 – > 8000	< 100 – > 8000	< 100 – > 8000	
P-kuuloke 4.0					
MPO (dB SPL)	2cc-tiedot	122	122	122	122
Maksimivahvistus (dB)	2cc-tiedot	59	59	59	59
Taajuusvaste (Hz)		< 100 – 6300	< 100 – 6300	< 100 – 6300	< 100 – 6300
UP-kuuloke					
Maksimi antotaso (MPO) (dB SPL)	2cc-tiedot	132	132	132	132
Maksimivahvistus (dB)	2cc-tiedot	71	71	71	71
Taajuusvaste (Hz)		< 100 – 6100	< 100 – 6100	< 100 – 6100	< 100 – 6100

Kuoren värit



P1
Sand Beige



H0
Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver Gray



P7
Graphite Gray



P8
Velvet Black



Q2
Electric Green



Q3
Caribbean
Pirate



T3
Precious Pink

¹ IP68 tarkoittaa, että kuulokoje on veden- ja pölynpitävä. Sen tiivisy säilyi, kun sitä pidettiin yhtäjaksoisesti vedessä 1 metrin syvyydessä 60 minuuttia ja pölykammiossa 8 tuntia standardin IEC 60529 mukaisesti.

² Toteutunut latausaika riippuu akun jäljellä olevasta käyttöiästä, mutta ei ylitä 3 tuntia.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Sonova AG käyttää näitä merkkejä lisenssillä.

Suorituskykytasot

AutoSense OS™ 5.0	Premium	Advanced	Standard	Essential
Miellyttävä kaikuessa	•			
Puhe autossa	•			
Puhe voimakkaassa hälyssä	•			
Musiikki	•	•		
Miellyttävä hälyssä	•	•	•	
Puhe hälyssä	•	•	•	•
Rauhallinen tilanne	•	•	•	•
Media, puhe + mikrofoni	•	•	•	•
Media, musiikki + mikrofoni	•	•	•	•
Lisäohjelmat				
Lisäohjelmien maksimimäärä	4	4	4	4
Miellyttävä kaikuessa	•			
Puhe voimakkaassa hälyssä	•	•		
Puhe 360°	•	•		
Puhe hälyssä	•	•	•	•
Rauhallinen tilanne	•	•	•	•
Miellyttävä hälyssä	•	•	•	•
Musiikki	•	•	•	•
Akustinen puhelin	•	•	•	•
Mukautettu ohjelma	•	•	•	•
Suoratoisto-ohjelmat				
RogerDirect + mikrofoni	•	•	•	•
PartnerMic + mikrofoni	•	•	•	•
Puhelu + mikrofoni	•	•	•	•

Ominaisuudet	Premium	Advanced	Standard	Essential
SpeechSensor	•			
Hiljaisen puheen lisävahvistus	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Dynaaminen hälynvaimennus	•	•		
Liikkeen tunnistin ¹	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	•
ActiveVent™ ¹	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•
Kaiunesto	•			
Napautusohjaus ¹				
- Siri/Google Assistant	•	•		
- Suoratoiston keskeytys/jatkaminen	•	•		
- Puhelun hyväksyminen/lopettaminen	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound (RES)	•	•	•	
Terveystoiminnot ^{1,2}	•	•	•	•
Tuuliäänten vaimennus	•	•	•	•
Käyttäjäasetusten säätäminen	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
Automaattinen mukautuminen	•	•	•	•
Ympäristöäänien vaimennus	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
Vinkumisen hallinta	•	•	•	•
Hälynvaimennus	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Hienosäätökanava	20	20	16	12

¹ Saatavissa vain ladattaviin malleihin

² Saatavissa myPhonakin yhteydessä


Sovitus

	Audéo L-R Audéo L-R Trial	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial	Audéo L-312 Audéo L-312 Trial
Phonak Target	8.0 tai uudempi	8.0 tai uudempi	8.0 tai uudempi	9.1 tai uudempi
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•	•	•

Akustinen kytkentä

Pituus	S-kuuloke	M-kuuloke	MAV-kuuloke ¹	P-kuuloke	UP-kuuloke
Saatavissa neljä eri pituutta (0, 1, 2, 3), vasen ja oikea	•	•	•	•	•
Sovite					
Cap-sovite	•	•		•	
Avoin sovite Saatavilla kolme eri kokoa (S, M, L)	•	•		•	
Ventiloitu sovite Saatavilla kolme eri kokoa (S, M, L)	•	•		•	
Tehosovite Saatavilla kolme eri kokoa (S, M, L)	•	•		•	
SlimTip-mikrokorvakappale²					
Akryyli	•	•		•	
Silikoni	•	•		•	
Titanium AV			•		
Universal AV Saatavissa neljässä muodossa (A, B, C, D)			•		
Yksilöllinen cShell-kuorikko					
Akryyli	•	•		•	•
Titanium	•	•		•	•
Sovitusalueet					

1 Yhdistelmä ei saatavissa Audéo L-312:n kanssa
2 Saatavissa myös erikoispitekän vaihtoehtona

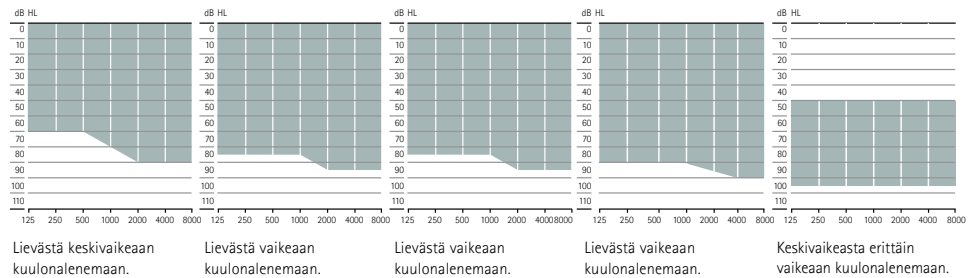

Phonak SmartSpeech™ -teknologia

SmartSpeech-teknologia on esimerkki siitä, kuinka sitoutuneita olemme suunnittelemaan ominaisuuksia, jotka helpottavat puheen ymmärtämistä ja pienentävät kuuntelurasitusta erilaisissa kuunteluympäristöissä³. Kehittämiimme ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa hiljaisen puheen lisävahvistus, dynaaminen hälynvaimennus ja liikkeentunnistin. ActiveVent-kuulokkeen ja RogerDirect-teknologian kaltaisten jo ennestään tutujen toimintojen lisäksi Phonak Audéo Lumity -kuulokojeessa esitellään kaksi uutta ominaisuutta: StereoZoom 2.0 ja SpeechSensor.

Phonak Audéo L Trial

Phonak Audéo L Trial -kuulokojeet voidaan säätää nopeasti vaaditulle suorituskykytasolle käyttäjäkohtaisen suosituksen mukaan. Phonak Audéo L Trial -kuulokojeen monipuolinen teknologia tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja oikean kuuloratkaisun löytämiseen heti ensimmäisellä käynnillä tai kojevaihtoehdoksi huollon ajaksi.

³ Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News. www.phonak.com/evidence

Latzel, M. & Hobi, S. (2022) ActiveVent™ Receiver provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. Phonak Field Study News. www.phonak.com/evidence

Thibodeau L.M. (2020) Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31(6), 404-411

Latzel, M., Lesimple, C., & Woodward, J. (2023) Speech Enhancer significantly reduces listening effort and increases intelligibility for speech from a distance. Phonak Field Study News. www.phonak.com/evidence

Phonak Audéo L:n latausvaihtoehdot



Phonak Charger Ease ja Charger Ease Go

Phonak Charger Ease on kompakti laturi, jonka latausliittimissä olevien magneettien ansiosta Audéo L-R ja RT on helppo asettaa laturiin ja ottaa siitä pois. Phonak Charger Ease Go -laturissa on lisäksi sisäänrakennettu akku, jonka ansiosta sillä voidaan ladata kaksi kuulokojetta kolme kertaa. Molemmissa latureissa on vakiotyyppinen USB-C-latausportti, johon syttyy valo, kun virta kytketään.



Phonak Charger Case Go ja Phonak Life Charger

Audéo L-RL -kuulokojetta varten on saatavissa kaksi laturivaihtoehtoa. Phonak Charger Case Go -laturissa on sisäänrakennettu akku, jonka ansiosta sillä voidaan ladata kaksi kuulokojetta kolme kertaa. Molemmissa latureissa on vakiotyyppinen USB-C-latausportti, johon syttyy valo, kun virta kytketään.

Phonak Audéo L Bluetooth® -versiot

Puhelut / äänen suoratoisto

Langaton Bluetooth 4.2 -teknologia ja useimmat vanhemmat Bluetooth-puhelimet

Langattomat lisälaitteet

	Audéo L-R Audéo L-R Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-312 Audéo L-312 Trial L90/L70/L50/L30
Langaton lisälaitte				
TV Connector	•	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•	•
Roger				
RogerDirect	•	•	•	•
Sovellukset				
myPhonak	•	•	•	•
myPhonak Junior	•	•	•	•

Lisätietoja on osoitteessa www.phonak.com/audeo-lumity

Tietoja Roger-mikrofoneista on osoitteessa www.phonak.com/roger

Lisätietoja myPhonakista ja myPhonak Juniorista on osoitteessa www.phonak.com/apps

life is on

Vuodesta 1947 lähtien Phonak on omistautunut elämänlaadun edistämiseen avaamalla uusia äänimaailmoja. Jo perustamisen aikaan yhtiötämme ohjasi luottamus kehityksen voimaan: me Phonakilla uskomme, että hyvä kuulo tarkoittaa hyvinvointia ja on näin ollen olennainen osa täysipainoista elämää. Itse asiassa kuulo liittyy suoraan sosiaaliseen, emotionaaliseen, kognitiiviseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Tällä hetkellä ja tulevaisuudessa pyrimme tarjoamaan laajimman mahdollisen valikoiman innovatiivisia kuulemisen ratkaisuja. Yhdessä kuuloalan ammattilaisten kanssa keskitymme tärkeimpään: puheen ymmärtämisen helpottamiseen, ihmisten elämän muuttamiseen ja positiiviseen yhteiskuntavaikutukseen kokonaisuudessaan.

www.phonak.com