

Phonak Naída™ L ●

Tuotetiedot

Phonak Naída Lumity on kattava BTE-tuotteiden valikoima, joka sisältää ratkaisuja lievästä erittäin vaikeisiin kuulonalenemiin.

Phonak SmartSpeech™ -teknologiaan perustuvat Naída L -kuulokojeet ovat vaihtoehto asiakkaille, jotka tarvitsevat kehittyneimmän Phonak Lumity -alustamme tehokratkaisun.



Tuotekuvaus



Naída L-UP
Naída L-UP Trial
L90/L70/L50/L30



Naída L-SP
Naída L-SP Trial
L90/L70/L50/L30




Naída L-PR
Naída L-PR Trial
L90/L70/L50/L30

Paristokoko tai akku		675	13	sisäänrakennettu, ladattava	
Puhelinkela		•	•		
CROS L -yhteensopivuus				•	
Bluetooth®		•	•	•	
Vettä hylkivä pinnoite		•	•	•	
IP-luokitus		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	
Mitat	P x L x S	42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34")	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33")	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33")	
	Paino	4,60 g / 0,162 oz	4,40 g / 0,155 oz	3,68 g / 0,130 oz	
Latausajat ²	0–100 %			3 h	
	0–80 %			1,5 h	
	30 min sovitus			10 min	


		HE11	HE11 680	HE11	HE11 680	HE11 680	Ohutputki 4.0
Maksimi antotaso (dB SPL)	2cc-tiedot	141	134	139	133	130	129
Maksimivahvistus (dB)	2cc-tiedot	84	78	81	75	68	69
Taajuusvaste (Hz)		< 100 - > 4700	< 100 - > 4700	< 100 - > 4900	< 100 - > 5700	< 100 - > 5700	< 100 - > 7100
Käyttövirta (mA)		3,3	2,8	2,1	2,2		

Sovitusalue


■ Ohutputki 4.0
■ HE11 680

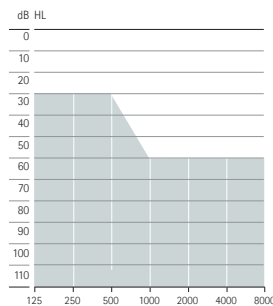

Vaikeasta erittäin vaikeaan kuulonalenemaan, kaikki sovitusmuodot

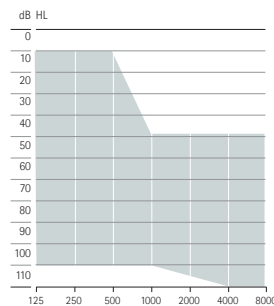

Lievästä vaikeaan kuulonalenemaan, kaikki sovitusmuodot

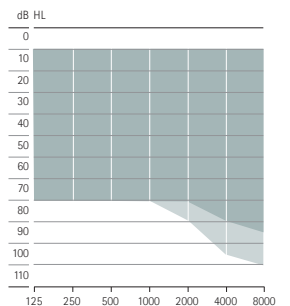

Lievästä keskivaikeaan kuulonalenemaan, kaikki sovitusmuodot

Kuoren värit



H0
Beige



P1
Sand Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver Gray



P7
Graphite Gray



P8
Velvet Black

¹ IP68 tarkoittaa, että kuulokojen on veden- ja pölynkestävä. Sen tiiviys säilyi, kun sitä pidettiin yhtäjaksoisesti vedessä 1 metrin syvyydessä 60 minuuttia ja pölykammiossa 8 tuntia standardin IEC 60529 mukaisesti.
² Toteutunut latausaika riippuu akun jäljellä olevasta käyttöiästä ja ympäristön lämpötilasta voi vaikuttaa aikaan.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Sonova AG käyttää näitä merkkejä lisensseillä.

Suorituskykytasot

	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
AutoSense OS™ 5.0				
Puhe voimakkaassa hälyssä	•			
Puhe autossa	•			
Miellyttävä kaikuessa	•			
Musiikki	•	•		
Miellyttävä hälyssä	•	•	•	
Puhe hälyssä	•	•	•	•
Rauhallinen tilanne	•	•	•	•
Media/puhe + mikrofoni	•	•	•	•
Media/musiikki + mikrofoni	•	•	•	•
Lisäohjelmat				
Lisäohjelmien maksimimäärä	4	4	4	4
Miellyttävä kaikuessa	•			
Puhe voimakkaassa hälyssä	•	•		
Puhe 360°	•	•		
Puhe hälyssä	•	•	•	•
Rauhallinen tilanne	•	•	•	•
Miellyttävä hälyssä	•	•	•	•
Musiikki	•	•	•	•
Akustinen puhelin	•	•	•	•
Mukautettu ohjelma	•	•	•	•
Puhelin T-kela ± mikrofoni ¹	•	•	•	•
Julkinen T-kela ± mikrofoni ¹	•	•	•	•
Suoratoisto-ohjelmat				
RogerDirect + mikrofoni	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + mikrofoni	•	•	•	•
Puhelu + mikrofoni	•	•	•	•

SmartSpeech-tekniologia

	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
Ominaisuudet				
SpeechSensor	•			
Hiljaisen puheen lisävahvistus	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Dynaaminen hälynvaimennus	•	•		
Liikkeen tunnistin ²	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	•
Kaiunesto	•			
Napautusohjaus ²				
- Siri/Google Assistant	•	•		
- Suoratoiston keskeytys/jatkaminen	•	•		
- Puhelun hyväksyminen/ lopettaminen	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound (RES)	•	•	•	
UltraZoom	•	•	•	•
Roger™ ja suuntaava asetus	•	•	•	•
Broadband Booster ³	•	•	•	•
Terveystoiminnot ^{2,4}	•	•	•	•
Tuulilääntien vaimennus	•	•	•	•
Käyttäjäasetusten säätäminen	•	•	•	•
Tinnitus Balance ⁵	•	•	•	•
Automaattinen mukautuminen	•	•	•	•
Ympäristöäänien vaimennus	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
Vinkumisen hallinta	•	•	•	•
Hälynvaimennus	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Hienosäätökanavat	20	20	16	12

1 Ei saatavana Phonak Naída L-PR -kuulokojeissa
 2 Saatavana vain Phonak Naída L-PR -kuulokojeissa
 3 Saatavana vain Phonak Naída L-UP -kuulokojeissa
 4 Saatavana myPhonakin yhteydessä
 5 Ei saatavana Phonak Naída L-UP -kuulokojeissa

Sovitus

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-SP Naída L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.0 tai uudempi	9.1 tai uudempi	9.0 tai uudempi
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•	•	•
NOAHLink	•	•	
HI-PRO, HI-PRO2	•	•	

Akustinen kytkentä

			Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-SP Naída L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Yhteensopivat koukut/ohutputket	Koukku	Filtterillä (HE11 680), Transparent	•	•	•
	Koukku	Ei filtteriä (HE11), Transparent	•	•	
	Ohutputki 4.0	Saatavana vasemmalle ja oikealle sekä viittä eri pituutta (00, 0, 1, 2, 3)		•	•
Korvakappale ohutputkeen	Sovite	Cap-sovite		•	•
		Avoim sovite	Saatavana kolmea kokoa (S, M, L)	•	•
		Ventiloitu sovite	Saatavana kolmea kokoa (S, M, L)	•	•
		Powersovite	Saatavana kolmea kokoa (S, M, L)	•	•
	Mikrokorvakappale	Akryyli		•	•
	Silikoni		•	•	
Korvakappale koukkuun	Korvakappale		•	•	•

Phonak Naída L Trial

Phonak Naída L Trial -kuulokojeet voidaan säätää nopeasti haluttuun laatuluokkaan vastaamaan asiakkaan tarpeita ja suositustasi. Näin voit sovittaa asiakkaallesi optimaalisen kuulemisen ratkaisun jo ensimmäisellä käynnillä tai vaihtaa laitteen, kun asiakkaan kuulokoje on korjattavana. Naída L Trial -laitteisiin on myös valmiiksi asennettu Roger-vastaanotin, joka helpottaa minkä tahansa Roger-mikrofonin esittelyä ja kokeilua.

Phonak Naída L-PR:n latausvaihtoehdot

Phonak Charger Combi BTE / Phonak Charger Combi BTE 2

Naída L-PR sisältää kaikki Lumity-ominaisuudet, joihin ihastut, sekä ladattavuuden edut. Asiakkaat voivat nauttia koko päivän kestävästä kuulemisesta myös suoratoistolla*.

* Odotusten mukainen akun kesto 16 tuntia, mukaan lukien 4 tuntia perinteistä BT-suoratoistoa ja 4 tuntia TV Connectorin suoratoistoa.



Phonak Naída L Bluetooth® -versiot

Puhelut / äänen suoratoisto

Langaton Bluetooth 4.2 -teknologia ja useimmat vanhemmat Bluetooth-puhelimet

Langattomat lisälaitteet

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-SP Naída L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Langattomat lisälaitteet			
TV Connector	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•
Roger			
Roger-mikrofonit	•	•	•
Sovellukset			
myPhonak	•	•	•
myPhonak Junior	•	•	•

Lisätietoja on osoitteessa www.phonak.com/naida-lumity

Tietoja Roger-mikrofoneista on osoitteessa www.phonak.com/roger

Lisätietoja myPhonakista ja myPhonak Juniorista on osoitteessa www.phonak.com/apps

life is on

Vuodesta 1947 lähtien Phonak on omistautunut elämänlaadun edistämiseen avaamalla uusia äänimaailmoja. Jo perustamisen aikaan yhtiötämme ohjasi luottamus kehitykseen: uskomme, että hyvä kuulo tarkoittaa hyvinvointia ja on näin ollen olennainen osa täysipainoista elämää. Itse asiassa kuulo liittyy suoraan sosiaaliseen, emotionaaliseen, kognitiiviseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Tällä hetkellä ja tulevaisuudessa pyrimme tarjoamaan laajimman mahdollisen valikoiman innovatiivisia kuulemisen ratkaisuja. Yhdessä kuuloalan ammattilaisten kanssa keskitymme tärkeimpään: puheen ymmärtämisen helpottamiseen, ihmisten elämän muuttamiseen ja positiiviseen yhteiskuntavaikutukseen kokonaisuudessaan.

www.phonak.com