

# Phonak Sky™ L.

## Tuotetiedot

Phonak Sky Lumity on valikoima lapsille suunniteltuja BTE-tuotteita, jotka kattavat kuulonalenemat lievästä erittäin vaikeaan.

Phonak SmartSpeech™ -teknologiaan perustuvat Sky L -kuulokojeet ovat vaihtoehto lapsiasiakkaille. Heillä on mahdollisuus kokea puheen ymmärtäminen kehittyneimmällä Phonak Lumity -alustallamme.



# Tuotekuvaus



Sky L-M  
Sky L-M Trial  
L90/L70/L50/L30



Sky L-PR  
Sky L-PR Trial  
L90/L70/L50/L30



Sky L-SP  
Sky L-SP Trial  
L90/L70/L50/L30




Sky L-UP  
Sky L-UP Trial  
L90/L70/L50/L30

Paristokoko tai akku		312	sisäänrakennettu, ladattava		13	675			
Merkkivalot lapsille		•	•		•	•			
Puhelinkela		•			•	•			
CROS L -yhteensopivuus			•						
Bluetooth®		•	•		•	•			
Vettä hylkivä pinnoite		•	•		•	•			
IP-luokitus		IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>		IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>			
Mitat	P x L x S	31,3 x 14,1 x 7,3 mm (1,23 x 0,56 x 0,29")	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33")		40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33")	42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34")			
	Paino	2,18 g / 0,077 oz	3,68 g / 0,130 oz		4,40 g / 0,155 oz	4,60 g / 0,162 oz			
Latausajat <sup>2</sup>	0–100 %		3 h						
	0–80 %		1,5 h						
	30 minuutin sovitus		10 min						
		HE11 680	Ohutuputki 4.0	HE11 680	Ohutuputki 4.0	HE11	HE11 680	HE11	HE11 680
Maksimi antotaso (dB SPL)	2cc-tiedot	128	122	130	129	139	133	141	134
Maksimivahvistus (dB)	2cc-tiedot	63	58	68	69	81	75	84	78
Taajuusvaste (Hz)		<100 - >7800	<100 - >8000	<100 - >5700	<100 - >7100	<100 - >4900	<100 - >5700	<100 - > 4700	<100 - >4700
Käyttövirta (mA)		1,6	1,6			2,1	2,2	3,3	2,8


## Sovitusalueet

■ DSL-sovitusalue (lapset)  
■ APD/NAL-sovitusalue


HE11 680

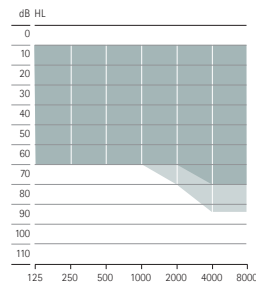


HE11 680

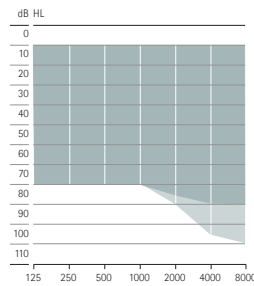


HE11 680

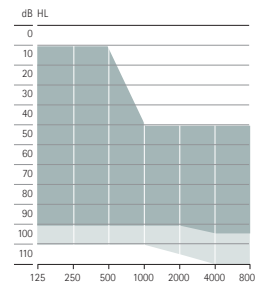


HE11 680

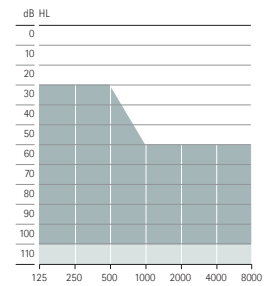


Ohutuputki 4.0

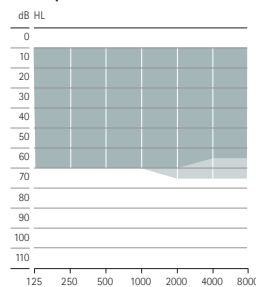

Ohutuputki 4.0

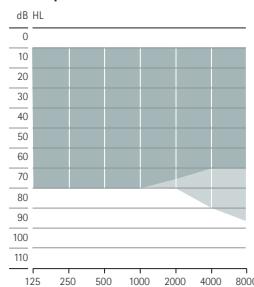

Ohutuputki 4.0

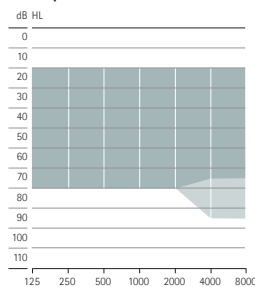

Vaikeasta erittäin vaikeaan kuulonalenemaan<sup>3</sup>

Lievästä kohtalaiseen kuulonalenemaan<sup>3</sup>

Lievästä keskivaikeaan kuulonalenemaan<sup>3</sup>

Lievästä vaikeaan kuulonalenemaan<sup>3</sup>

1 IP68 tarkoittaa, että kuulokoje on veden- ja pölynpitävä. Sen tiivisy säilyi, kun sitä pidettiin yhtäjaksoisesti vedessä 1 metrin syvyydessä 60 minuuttia ja pölykammiossa 8 tuntia standardin IEC 60529 mukaisesti.

2 Toteutunut latausaika riippuu akun jäljellä olevasta käyttöiästä ja ympäristön lämpötila voi vaikuttaa aikaan.

3 Käytettäessä DSL-sovitussyhtälöä

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Sonova AG käyttää näitä merkkejä lisenssillä.

# Suorituskykytasot

	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
<b>AutoSense Sky OS 5.0</b>				
Puhe voimakkaassa hälyssä	•			
Puhe autossa	•			
Miellyttävä kaikuessa	•			
Musiikki	•	•		
Miellyttävä hälyssä	•	•	•	
Puhe hälyssä	•	•	•	•
Rauhallinen tilanne	•	•	•	•
Media, puhe + mikrofoni	•	•	•	•
Media, musiikki + mikrofoni	•	•	•	•
<b>Lisäohjelmat</b>				
Lisäohjelmien maksimimäärä	4	4	4	4
Miellyttävä kaikuessa	•			
Puhe voimakkaassa hälyssä	•	•		
Puhe 360°	•	•		
Puhe hälyssä	•	•	•	•
Rauhallinen tilanne	•	•	•	•
Miellyttävä hälyssä	•	•	•	•
Musiikki	•	•	•	•
Akustinen puhelin	•	•	•	•
Mukautettu ohjelma	•	•	•	•
Puhelin T-kela ± mikrofoni <sup>1</sup>	•	•	•	•
Julkinen T-kela ± mikrofoni <sup>1</sup>	•	•	•	•
<b>Suoratoisto-ohjelmat</b>				
RogerDirect™ + mikrofoni	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + mikrofoni	•	•	•	•
Puhelu + mikrofoni	•	•	•	•

SmartSpeech-tekniologia

	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
<b>Ominaisuudet</b>				
SpeechSensor	•			
Hiljaisen puheen lisävahvistus	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Dynaaminen hälynvaimennus	•	•		
Liikkeentunnistin <sup>2</sup>	•	•	•	
RogerDirect	•	•	•	•
Kaiunesto	•			
Napautusohjaus <sup>2</sup>				
- Siri/Google Assistant	•	•		
- Keskeytä/jatka suoratoistoa	•	•		
- Hyväksy/lopetä puhelu	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound (RES)	•	•	•	
Roger™ ja suuntaava asetus	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•
Broadband Booster <sup>3</sup>	•	•	•	•
Tuuliäänten vaimennus	•	•	•	•
Käyttäjäasetusten säätäminen	•	•	•	•
Automaattinen mukautuminen	•	•	•	•
Ympäristöäänien vaimennus	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
Vinkumisen hallinta	•	•	•	•
Hälynvaimennus	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Hienosäätökanavat	20	20	16	12

<sup>1</sup> Ei saatavana Phonak Sky L-PR -tuotteeseen

<sup>2</sup> Saatavana vain Phonak Sky L-PR -tuotteeseen

<sup>3</sup> Saatavana vain Phonak Sky L-UP -tuotteeseen

## Sovitus

	Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.1 tai uudempi	9.0 tai uudempi	9.1 tai uudempi	9.0 tai uudempi
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•	•	•	•
NOAHLink			•	•
HI-PRO, HI-PRO2			•	•

# Akustinen kytkentä

		Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
<b>Yhteensopivat koukut/ohutputket</b>					
Standard-koukku	Filterillä (HE11 680), Transparent ja 6 muuta lapsille tarkoitettua väri vaihtoehtoa	•	•	•	•
	Ilman filtteriä (HE 11) vain Transparent-värisenä			•	•
Lukittava koukku (mini)	Filterillä (HE11 680), Transparent ja 6 muuta lapsille tarkoitettua väri vaihtoehtoa	•	•	•	•
	Ilman filtteriä (HE 11) vain Transparent-värisenä			•	•
Ohutputki 4.0	Saatavana vasemmalle ja oikealle sekä viittä eri pituutta (00, 0, 1, 2, 3)	•	•	•	
<b>Korvakappale ohutputkeen</b>					
Sovite	Cap-sovite	•	•	•	
	Avoim sovite	Saatavana kolmea kokoa (S, M, L)	•	•	•
	Ventiloitu sovite	Saatavana kolmea kokoa (S, M, L)	•	•	•
	Power-sovite	Saatavana kolmea kokoa (S, M, L)	•	•	•
Mikrokorvakappale	Akryyli	•	•	•	
	Silikoni	•	•	•	
<b>Korvakappale koukkuun</b>					
Korvakappale		•	•	•	•

## Kuorien ja koukkujen värit

### Kuoret



H0  
Beige



P1  
Sand Beige



P3  
Sandalwood



P4  
Chestnut



P5  
Champagne



P6  
Silver Gray



P7  
Graphite Gray



P8  
Velvet Black



M6  
Lava Red



M7  
Blue Ocean



M8  
Majesty Purple



Q2  
Electric Green



Q3  
Caribbean Pirate



T3  
Precious Pink

### Koukku



R1  
Green



R2  
Yellow



R3  
Pink



R4  
Orange



Q6  
Blue



Q7  
Purple



13  
Transparent

# Phonak Sky L-PR:n latausvaihtoehdot

## Phonak Charger Combi BTE / Phonak Charger Combi BTE 2

Sky L-PR sisältää kaikki Lumity-ominaisuudet, joihin ihastut, sekä ladattavuuden edut. Asiakkaat voivat nauttia koko päivän kestävästä kuulemisesta myös suoratoistolla\*.

\* Odotusten mukainen akun kesto 16 tuntia, mukaan lukien 10 tuntia Roger-kuuntelua tai äänen suoratoistoa.



## Phonak Sky L Trial

Phonak Sky L Trial -kuulokojeet voidaan säätää nopeasti valittuun laatuluokkaan asiakkaan tarpeiden ja suosituksesi mukaisesti. Näin voit sovittaa asiakkaallesi optimaalisen kuulemisen ratkaisun jo ensimmäisellä käynnillä tai vaihtaa laitteen, kun asiakkaan kuulokoje on korjattavana. Sky L Trial -laitteisiin on myös valmiiksi asennettu Roger-vastaanotin, joka helpottaa minkä tahansa Roger-mikrofonin esittelyä ja kokeilua.

## Phonak Sky L:n Bluetooth® -versiot

Puhelut / äänen suoratoisto

Langaton Bluetooth 4.2 -teknologia ja useimmat vanhemmat Bluetooth-puhelimet

## Langattomat lisälaitteet

	Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
<b>Langattomat lisälaitteet</b>				
TV Connector	•	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•	•
<b>Roger</b>				
Roger-mikrofonit	•	•	•	•
<b>Sovellus</b>				
myPhonak Junior	•	•	•	•

Lisätietoja on osoitteessa [www.phonak.com/sky-lumity](http://www.phonak.com/sky-lumity)

Lisätietoja Roger-mikrofoneista on osoitteessa [www.phonak.com/roger-for-education](http://www.phonak.com/roger-for-education)

Lisätietoja myPhonak Juniorista on osoitteessa [www.phonak.com/myphonak-junior](http://www.phonak.com/myphonak-junior)

# life is on

Vuodesta 1947 lähtien Phonak on omistautunut elämänlaadun edistämiseen avaamalla uusia äänimaailmoja. Jo perustamisestamme lähtien yritystämme on ajanut eteenpäin vakaumus siitä, että hyvä kuulo tarkoittaa hyvinvointia ja on näin ollen olennainen osa täysipainoista elämää. Kuuleminen liittyykin suoraan sosiaaliseen, emotionaaliseen, kognitiiviseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Siksi pyrimme, nyt ja tulevaisuudessa, tarjoamaan laajimman valikoiman innovatiivisia kuulemisen ratkaisuja. Yhdessä kuuloalan ammattilaisten kanssa keskitymme tärkeimpään: puheen ymmärtämisen helpottamiseen, ihmisten elämän muuttamiseen ja positiiviseen vaikuttamiseen yhteiskuntaan kokonaisuudessaan.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



027-0697-11V1.00/2024-02/ILG © 2024 Sonova AG All rights reserved