

Phonak Sky™ L.

Informations sur le produit

Phonak Sky Lumity est un portefeuille de BTE pédiatrique complet pour les pertes auditives légères à profondes.

Bénéficiant de la technologie Phonak SmartSpeech™ Technology, les aides auditives Sky L sont destinées aux patients pédiatriques qui souhaitent faire l'expérience de la compréhension vocale sur notre plateforme la plus avancée, Phonak Lumity.



Description des produits



Sky L-PR
Sky L-PR Trial
L90 / L70 / L50 / L30




Sky L-UP
Sky L-UP Trial
L90 / L70 / L50 / L30


Taille de la pile		Batterie rechargeable intégrée		675	
Témoins lumineux pédiatriques		•		•	
Bobine d'induction		•		•	
Compatibilité avec CROS L		•		•	
Bluetooth® ¹		•		•	
Revêtement hydrophobe		•		•	
Indice de protection		IP68 ²		IP68 ²	
Dimensions	L x l x P	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33 po)		42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34 po)	
	Poids	3,68 g / 0,130 oz		4,60 g / 0,162 oz	
Durées de charge ³	0 % à 100 %	3 h			
	0 % à 80 %	1,5 h			
	30 min d'appareillage	10 min			
		HE11 680 Tube fin 4.0		HE11 HE11 680	
Niveau de sortie max. (dB SPL)	Coupleur 2 cm ³	130	129	141	134
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm ³	68	69	84	78
Bande passante (Hz)		< 100 - > 5 700		< 100 - > 4 700	
Courant de fonctionnement (mA)				3,3	2,8

Plages d'application

- Plage d'application DSL pédiatrique
- Plage d'application APD/NAL

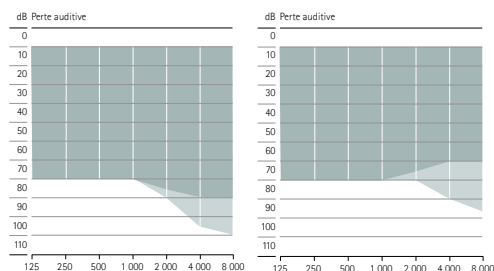

Pertes auditives légères à moyennement sévères, toutes configurations audiométriques

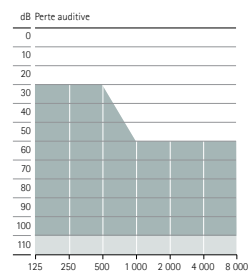

Pertes auditives sévères à profondes, toutes configurations audiométriques

¹ Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de telles marques par Sonova AG est faite sous licence.

² L'indice IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau fraîche et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI60529.

³ Le temps de charge réel dépend de l'autonomie restante de la batterie et peut être affecté par les conditions de température.

Niveaux de performances

	Premium L90	Avancé L70	Standard L50	Essentiel L30
AutoSense Sky OS 5.0				
Parole dans le bruit intense	•			
Parole en voiture	•			
Situation réverbérante	•			
Musique	•	•		
Confort dans le bruit	•	•	•	
Parole dans le bruit	•	•	•	•
Situation calme	•	•	•	•
Parole média + micro	•	•	•	•
Musique média + micro	•	•	•	•
Programmes supplémentaires				
Programmes supplémentaires max.	4	4	4	4
Situation réverbérante	•			
Parole dans le bruit intense	•	•		
Parole à 360°	•	•		
Parole dans le bruit	•	•	•	•
Situation calme	•	•	•	•
Confort dans le bruit	•	•	•	•
Musique	•	•	•	•
Téléphone acoustique	•	•	•	•
Programme personnalisé	•	•	•	•
Téléphone via capteur-T ± mic¹	•	•	•	•
Boucle publique-T ± mic¹	•	•	•	•
Programmes de diffusion				
RogerDirect™ + mic	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + mic	•	•	•	•
Appel téléphonique + mic	•	•	•	•

	Premium L90	Avancé L70	Standard L50	Essentiel L30
Fonctions				
SpeechSensor	•			
Renforcement de la parole	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Suppression dynamique du bruit	•	•		
Directivité avec capteur de mouvements²	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	•
EchoBloc	•			
Contrôle tactile²				
- Siri / Assistant Google	•	•		
- Mettre en pause / reprendre la diffusion	•	•		
- Accepter/terminer un appel téléphonique	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
Réglage Roger™ et directivité	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•
Booster large bande¹	•	•	•	•
WindBloc	•	•	•	•
Correction de sonie	•	•	•	•
Auto Acclimatation	•	•	•	•
Balance environnementale	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
LarsenBloc	•	•	•	•
NoiseBloc	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Canaux d'adaptation fine	20	20	16	12

¹ Disponible pour Phonak Sky L-UP uniquement

² Disponible pour Phonak Sky L-PR uniquement

Appareillage

	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90 / L70 / L50 / L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90 / L70 / L50 / L30
Phonak Target	9.0 ou version ultérieure	9.0 ou version ultérieure
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•	•
NOAHLink		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

Couplage acoustique

			Sky L-PR Sky L-PR Trial L90 / L70 / L50 / L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90 / L70 / L50 / L30
Signal acoustique de sortie	Coude standard	Amorti (HE11 680), transparent et 6 couleurs pédiatriques supplémentaires	•	•
		Non amorti (HE 11), transparent uniquement		•
	Coude avec sécurité enfant (mini)	Amorti (HE11 680), transparent et 6 couleurs pédiatriques supplémentaires	•	•
		Non amorti (HE 11), transparent uniquement		•
	Tube fin 4.0	Disponible en version gauche et droite, dans cinq longueurs différentes (00, 0, 1, 2 et 3)	•	
Adaptation tube fin	Dôme	Dôme cap	•	
		Dôme ouvert Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	
		Dôme obturant Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	
		Dôme puissant Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	
	SlimTip	Acrylique	•	
		Silicone	•	
Adaptation coude	Embout		•	•

Couleurs du boîtier et du coude

Boîtier



H0
Beige



P1
Dune de sable



P3
Santal



P4
Noisette



P5
Champagne



P6
Gris argenté



P7
Gris carbone



P8
Velours noir



M6
Rouge Volcan



M7
Bleu Océan



M8
Violet Pourpre



Q2
Vert Électrique



Q3
Bleu Caraïbes



T3
Rose Poudré

Coude



R1
Vert



R2
Jaune



R3
Rose



R4
Orange



Q6
Bleu



Q7
Violet



13
Transparent

Phonak Sky L Trial

Les aides auditives Phonak Sky L Trial peuvent être configurées rapidement pour offrir le niveau de performances recommandé. Cela vous permet de proposer à votre patient la meilleure solution auditive dès le premier rendez-vous, ou de fournir une aide auditive à titre de remplacement lorsque celle du patient est en réparation. Les appareils Sky L Trial comprennent également un récepteur Roger préinstallé pour faciliter la présentation et l'essai de tout microphone Roger.

Options de charge de Phonak Sky L-PR

Phonak Charger Combi BTE / Phonak Charger Combi BTE 2

Sky L-PR est doté de toutes les fonctions Lumity que vous adorez, ainsi que de l'avantage d'être rechargeable. Les patients peuvent profiter d'une journée complète d'audition incluant la diffusion sans fil*.

* L'autonomie prévue de la batterie s'élève à 16 heures, dont 10 heures de diffusion Roger ou audio.



Versions Bluetooth® pour Phonak Sky L

Diffusion sans fil d'appels directs/audio

Technologie sans fil Bluetooth 4.2 et la plupart des téléphones Bluetooth plus anciens

Gamme de communication sans fil

	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90 / L70 / L50 / L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90 / L70 / L50 / L30
Accessoires sans fil		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
Roger		
Microphones Roger	•	•
Application		
myPhonak Junior	•	•

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.phonak.com/sky-lumity.

Pour plus d'informations à propos des microphones Roger, rendez-vous sur www.phonak.com/roger-for-education.

Pour plus d'informations à propos de myPhonak Junior, rendez-vous sur www.phonak.com/myphonak-junior.

life is on*

Depuis 1947, Phonak a à cœur de préserver la qualité de vie en ouvrant la voie à de nouveaux mondes acoustiques. Déjà à l'époque de notre fondation, une conviction fondamentale animait notre entreprise : bien entendre est synonyme de bien vivre, un point essentiel pour vivre pleinement sa vie. En effet, le sens de l'audition est directement lié au bien-être social, émotionnel, cognitif et physique. Aujourd'hui comme demain, nous nous efforçons de proposer le plus large portefeuille de solutions auditives innovantes. En collaboration avec nos audioprothésistes, nous continuons à nous concentrer sur l'essentiel : améliorer la compréhension vocale, changer la vie des personnes et avoir un effet positif sur la société dans son ensemble. *la vie s'exprime.

www.phonak.com



027-0697-04/V1.00/2023-06/NLG © 2023 Sonova AG Tous droits réservés