

Phonak Terra™ + Phonak Terra™

Informations produit

Phonak Terra+ et Phonak Terra proposent un ensemble équilibré de fonctions visant à garantir une expérience auditive personnalisée avec RIC et BTE.



Description des produits



		Terra+ RIC-R	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Taille de la pile		Batterie rechargeable intégrée	312	312	13	675
Capteur-T				•	•	•
Bluetooth®		•	•	•	•	•
Revêtement hydrophobe		•	•	•	•	•
Indice de protection		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Dimensions	L x l x P	27,7 x 12 x 8,1 mm (1,09 x 0,47 x 0,32 po)	26,8 x 11,2 x 7,1 mm (1,05 x 0,44 x 0,28 po)	31,3 x 14,16 x 7,3 mm (1,23 x 0,56 x 0,29 po)	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33 po)	42,2 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34 po)
	Poids	2,2 g (0,08 oz)	1,1 g (0,04 oz)	2,2 g (0,08 oz)	4,4 g (0,16 oz)	4,6 g (0,16 oz)
Temps de charge ²	0 % à 100 %	3 h				
	0 % à 80 %	1,5 h				
	30 min d'appareillage	15 min				

Couleurs des boîtiers

Terra+



H0
Beige



P1
Dune de Sable



P3
Santal



P6
Gris Argenté



P8
Velours Noir

Terra



H0
Beige



P3
Santal



P6
Gris Argenté



P8
Velours Noir

¹ L'indice IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau fraîche et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI60529.


² La durée de charge réelle dépend de l'autonomie restante de la batterie, mais n'excédera pas 3 heures.

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Sonova AG est faite sous licence.

Couplage acoustique – Aides auditives RIC

	Écouteur S	Écouteur M	Écouteur P	Écouteur UP
Longueur				
Disponibles dans quatre longueurs différentes (0, 1, 2, 3), en version gauche et droite	•	•	•	•
Dôme				
Dôme cap	•	•	•	
Dôme ouvert Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	•	•	
Dôme obturant Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	•	•	
Dôme puissant Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	•	•	
SlimTip*				
Acrylique	•	•	•	
Silicone	•	•	•	
cShell				
Acrylique	•	•	•	•
Titanium	•	•	•	•
Données du coupleur 2 cm³				
Niveau de sortie max. (dB SPL)	111	114	122	132
Gain max. (dB)	47	51	59	71
Bande passante (Hz)	< 100 – > 8 000	< 100 – > 8 000	< 100 – 6 300	< 100 – 6 100

Plages d'application

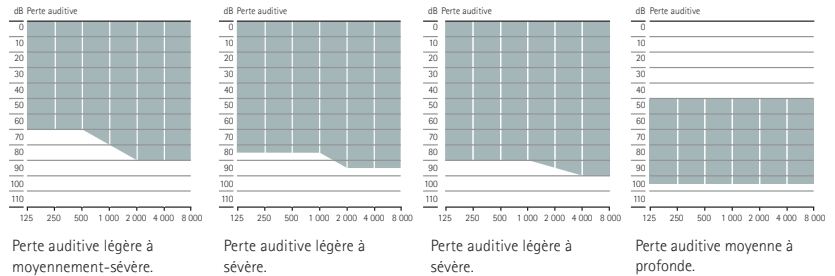

*Disponible avec conduit extra long en option

Option de charge Phonak Terra+ RIC-R



Phonak Charger Ease

Couplage acoustique – Aides auditives BTE

Signal acoustique de sortie

		Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Coude acoustique standard	Amorti (HE11 680), transparent	•	•	•
	Non amorti (HE11), transparent		•	•
Tube fin 4.0	Disponible en version gauche et droite, dans cinq longueurs différentes (00, 0, 1, 2 et 3)	•	•	

Embout pour tube fin

Dôme	Dôme cap	•	•	
	Dôme ouvert	Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	•
	Dôme obturant	Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	•
	Dôme puissant	Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	•
SlimTip	Acrylique	•	•	
	Silicone	•	•	

Embout pour coude


Embout		•	•	•
--------	--	---	---	---

Données du coupleur 2 cm³


		HE11 680	Tube fin 4.0	HE11 680	HE11	HE11 680	HE11
Niveau de sortie max. (dB SPL)	Coupleur 2 cm ³	128	122	133	139	134	141
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm ³	63	58	75	81	78	84
Bande passante (Hz)		< 100 - > 7 800	< 100 - > 8 000	< 100 - > 5 700	< 100 - > 4 900	< 100 - > 4 700	< 100 - > 4 700
Courant de fonctionnement (mA)		1,6	1,6	2,2	2,1	2,8	3,3

Plages d'application


■ Tube fin 4.0
■ HE11 680

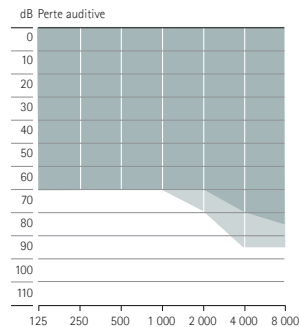

Pertes auditives légères à moyennes, toutes configurations audiométriques

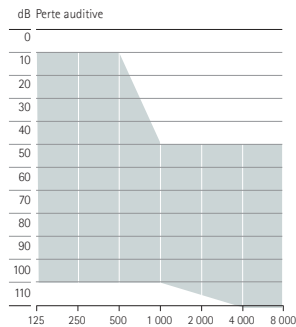

Pertes auditives légères à sévères, toutes configurations audiométriques

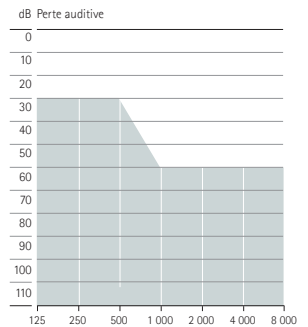

Pertes auditives sévères à profondes, toutes configurations audiométriques

Niveaux de performances

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M		Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
AutoSense OS™ 5.0			Fonctions		
Parole dans le bruit	•	•	UltraZoom	•	•
Situation calme	•	•	Booster large bande ¹	•	•
AutoSense OS 5.0 (diffusion)			Correction de sonie	•	•
Parole média + micro	•	•	Auto Acclimatation	•	•
Musique média + micro	•	•	Balance environnementale	•	•
Programmes supplémentaires			SoundRecover2	•	
Programmes supplémentaires max.	4	4	SoundRecover	•	•
Parole dans le bruit	•	•	LarsenBloc	•	•
Situation calme	•	•	NoiseBloc	•	•
Confort dans le bruit	•	•	QuickSync	•	•
Musique	•	•	AOV	•	•
Téléphone acoustique	•	•	Conduit d'adaptation fine	10	8
Programme personnalisé	•	•			
Téléphone par le biais du capteur-T ± micro ²	•	•			
Capteur-T public ± micro ²	•	•			
Programmes de diffusion					
PartnerMic + micro	•				
Appel téléphonique + micro	•	•			

¹ Disponible pour Phonak Terra+ BTE-UP et Phonak Terra BTE-UP uniquement
² Disponible pour les produits BTE uniquement

Gamme de communication sans fil

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
Accessoire sans fil		
TV Connector	•	
Phonak PartnerMic™	•	
Phonak RemoteControl	•	
Applications		
myPhonak	•	

Appareillage

	Terra+ RIC-R	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Phonak Target	10.1 ou ultérieure	9.1 ou ultérieure	9.1 ou ultérieure	9.1 ou ultérieure	9.1 ou ultérieure
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•	•	•	•
NOAHLINK				•	•
HI-PRO, HI-PRO2				•	•

Pour en savoir plus, veuillez consulter www.phonak.com/terra

Pour en savoir plus sur myPhonak, veuillez consulter www.phonak.com/apps

life is on*

Depuis 1947, Phonak a à cœur de préserver la qualité de vie en ouvrant la voie à de nouveaux mondes acoustiques. Déjà à l'époque de notre fondation, une conviction formative animait notre entreprise : bien entendre est synonyme de bien vivre, un point essentiel pour vivre pleinement sa vie. En effet, le sens de l'audition est directement lié au bien-être social, émotionnel, cognitif et physique. Aujourd'hui comme demain, nous nous efforçons de proposer le plus large portefeuille de solutions auditives innovantes. En collaboration avec nos audioprothésistes, nous continuons à nous concentrer sur l'essentiel : améliorer la compréhension vocale, changer la vie des personnes et avoir un effet positif sur la société dans son ensemble. *la vie s'exprime

www.phonak.com



027-0706-04/N3.00/2024-10/NLG © 2024 Sonova AG Tous droits réservés