

Phonak Naída™ L ●

Termékinformációk

A Phonak Naída Lumity a fül mögötti készülékek átfogó termékcsaládja az közepes fokútól a hallásmaradványig terjedő hallásvesztés esetére.

A Phonak SmartSpeech™ Technológiával felszerelt Naída L hallókészülékek remek választást jelentenek azoknak az ügyfeleknek, akiknek erőteljes teljesítményű megoldásokra van szüksége a legkorszerűbb Phonak Lumity platformunkon.



Termékleírás



Naída L-UP
Naída L-UP Trial
L90/L70/L50/L30




Naída L-PR
Naída L-PR Trial
L90/L70/L50/L30


Elemméret		675	beépített, újratölthető akkumulátor
Telefontekercs		•	
CROS L-kompatibilitás			•
Bluetooth®		•	•
Vízszigetítő bevonat		•	•
IP-besorolás		IP68 ¹	IP68 ¹
Méretek	H x Sz x M	42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34")	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33")
	Tömeg	4,60 g / 0,162 oz	3,68 g / 0,130 oz
Töltési idő ²	0%-ról 100%-ra		3 óra
	0%-ról 80%-ra		1,5 óra
	30 perces illesztés		10 perc

		HE11	HE11 680	HE11 680	SlimTube 4.0
Max. kimeneti teljesítmény (dB SPL)	2 cm ³ csatló	141	134	130	129
Max. erősítés (dB)	2 cm ³ csatló	84	78	68	69
Frekvenciatartomány (Hz)		< 100 és > 4700 között	< 100 és > 4700 között	< 100 és > 5700 között	< 100 és > 7100 között
Működés közbeni fogyasztás (mA)		3,3	2,8		

Illesztési tartomány

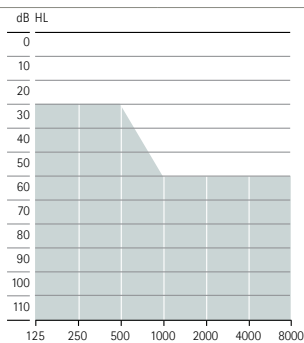

Hallásmaradvány hallásvesztés esetén, minden audiometriai konfiguráció

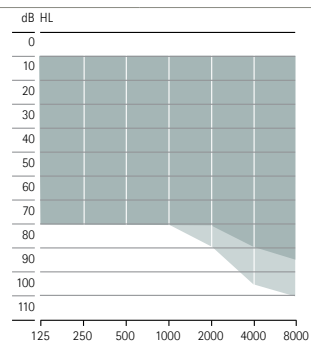

Közepes fókutól a nagyfokú- súlyos halláscsökkenésre terjedő hallásvesztés esetén, minden audiometriai konfiguráció

■ SlimTube 4.0
■ HE11 680

A burkolat színei



H0
Bézis



P1
Homokbézis



P3
Szantálfa



P4
Gesztenye



P5
Pezsgő



P6
Ezüstsürke



P7
Grafitsürke



P8
Bársonyfekete

¹ Az IP68-as besorolás azt jelzi, hogy a hallókészülék víz- és porálló. Az IEC60529 szabvánnyal összhangban a tesztek során 60 percig vizsgáltuk 1 méteres édesvízben folyamatos alámerítéssel, valamint 8 óráig porkamrában.

² A tényleges töltési idő az akkumulátor hátralévő élettartamától függ, és a hőmérsékleti viszonyok is befolyásolhatják.

Teljesítményszintek

AutoSense OS™ 5.0	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
Beszéd hangos környezetben	•			
Beszéd autóban	•			
Komfort visszhangos környezetben	•			
Zene	•	•		
Komfort zajban	•	•	•	
Beszéd zajban	•	•	•	•
Csendes környezet	•	•	•	•
Beszéd média streaming + mikrofon	•	•	•	•
Zene média streaming + mikrofon	•	•	•	•
További programok				
További programok maximális száma	4	4	4	4
Komfort visszhangos környezetben	•			
Beszéd hangos környezetben	•	•		
Beszéd 360°-ban	•	•		
Beszéd zajban	•	•	•	•
Csendes környezet	•	•	•	•
Komfort zajban	•	•	•	•
Zene	•	•	•	•
Akusztkus telefon	•	•	•	•
Egyéni program	•	•	•	•
Telefon telefontekercssel ± mikrofon ¹	•	•	•	•
Nyilvános telefontekercs ± mikrofon ¹	•	•	•	•
Hangtovábbító programok				
RogerDirect + mikrofon	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + mikrofon	•	•	•	•
Telefonhívás + mikrofon	•	•	•	•

Jellemzők	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
SpeechSensor	•			
beszédírány érzékelő				
Speech Enhancer	•			
beszédkiemelő				
StereoZoom 2.0	•	•		
Dinamikuszajsűrés	•	•		
Mozgásérzékelő hallás ²	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	•
EchoBlock	•			
visszhangcsökkentő				
Érintésvezérlés ²				
- Siri/Google Assistant	•	•		
- Hangtovábbítás	•	•		
szüneteltetése/újraindítása				
- Telefonhívás fogadása/ befejezése	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
UltraZoom	•	•	•	•
Roger™ és direkcionális beállítás	•	•	•	•
Broadband Booster szélessáv-erősítő ¹	•	•	•	•
Egészséggel kapcsolatos funkciók ^{2,3}	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Felhasználói szokások naplózása	•	•	•	•
Tinnitus egyensúly ²	•	•	•	•
Automatikus akklimatizáció	•	•	•	•
Környezeti egyensúly	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Finomhangolható csatornák	20	20	16	12

SmartSpeech technológia

¹ Csak a Phonak Naída L-UP készülékhez elérhető

² Csak a Phonak Naída L-PR only készülékhez elérhető

³ A myPhonak alkalmazással együtt elérhető

Illesztés

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.0 vagy újabb	9.0 vagy újabb
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•	•
NOAHLink	•	
HI-PRO, HI-PRO2	•	

Akusztikus csatoló

		Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30	
Hangkimenet	Könyök	Csillapított (HE11 680), átlátszó	•	
	Könyök	Csillapítás nélkül (HE11), átlátszó	•	
	SlimTube 4.0	Bal- és jobb oldali változatban, öt különböző méretben (00,0,1,2,3)	•	
Fülilleszték SlimTube vékony csőhöz	Dóm	Kupak dóm	•	
		Nyitott dóm	Három méretben kapható (S, M, L)	•
		Zárt dóm furattal	Három méretben kapható (S, M, L)	•
		Power dóm	Három méretben kapható (S, M, L)	•
	SlimTip	Akril	•	
		Szilikon	•	
Fülilleszték a könyökhöz	Fülilleszték	•	•	

Phonak Naída L Trial

A Phonak Naída L Trial hallókészülékek a javaslatoknak megfelelően gyorsan beállíthatók a kívánt teljesítményszintre. Ennek segítségével az első alkalommal elláthatja ügyfelét az optimális hallási megoldással vagy cserét biztosíthat, ha a hallókészülék szerviz alatt áll. A Naída L Trial készülékekben beépített Roger vevő is található, így bármilyen Roger mikrofon bemutatására és kipróbálására alkalmas.

Phonak Naída L-PR töltési lehetőségek

Phonak Charger Combi BTE / Phonak Charger Combi BTE 2

A Naída L-PR az összes népszerű Lumity funkcióval rendelkezik, és emellett még újratölthető is. Az ügyfelek így egész nap élvezhetik a hallásélményt beleértve a streaming zenehallgatást.*

* Az akkumulátor egy feltöltéssel várhatóan 16 órán át használható, amiből 4 óra klasszikus Bluetooth-hangadatátvitel és 4 óra TV Connector használat.



Phonak Naída L Bluetooth® változatok

Közvetlen hívások / hangadatátvitel

Bluetooth 4.2 vezeték nélküli technológiát támogató telefonok, illetve a legtöbb korábbi Bluetooth technológiával rendelkező telefon

Vezeték nélküli kiegészítők portfóliója

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Vezeték nélküli kiegészítők		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic	•	•
Phonak Remote Control	•	•
Roger		
Roger mikrofonok	•	•
Alkalmazások		
myPhonak	•	•
myPhonak Junior	•	•

További információ a www.phonak.com/naida-lumity oldalon található

A Roger mikrofonokkal kapcsolatban a www.phonak.com/roger oldalon olvashat bővebben

A myPhonak és a myPhonak Junior alkalmazásokkal kapcsolatban a www.phonak.com/apps oldalon olvashat bővebben

life is on

A Phonak küldetése 1947 óta az emberek életminőségének megőrzése a hangok új világának megnyitásával. Már akkor, cégünk alapítása idején is az hajtott minket, hogy pozitív változást vigyünk a világba: hisszük, hogy a jó hallás egyenértékű a jobb étellel, így elengedhetetlen a teljes élethez. A hallás valóban közvetlen összefüggésben áll a szociális, érzelmi, kognitív és fizikai jóléttel egyaránt. A jelenben és a jövőben is arra törekszünk, hogy az innovatív hallási megoldások legszélesebb portfólióját kínáljuk. Hallásgondozó szakembereinkkel a legfontosabb célunk, hogy javítsuk a beszédértést, pozitív változást hozva az emberek életébe és a társadalom egészébe.

www.phonak.com



027-0699-13|V1.00|2023-06|NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved