



Gyerekbarát kialakítás

A leginkább strapabíró

A Sky Marvel készülék kiváló társa a játékban elmerülő gyermekeknek, és még az sem baj, ha a készülék kissé vizes lesz. A Marvel hallókészülékek masszív burkolata ellenáll a behatoló víznek és pornak (IP68-as besorolás).***

Gyerekszárás kialakítás

A gyerekszárás könyök és az új, gyerekszárás elemajtó miatt a gyermekek nagyobb biztonságban használhatják a hallókészüléket, hiszen a kis kezek és szájuk nem férhetnek hozzá az elemekhez. A Sky M-PR beépített lítiumion-akkumulátora nem távolítható el a készülékből, így lenyelni sem lehet.

Új jelzőfény

A Sky Marvel újonnan tervezett jelzőfénye intuitív, mégis diszkrét módon tájékoztat a hallókészülék állapotáról.

Life is on

Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás elengedhetetlen a teljes élethez. Több mint 70 éve hűek vagyunk küldetésünkhöz, hiszen olyan úttörő hallási megoldásokat fejlesztünk ki, melyek megváltoztatják az emberek mindennapjait, hogy társadalmilag és érzelmileg teljes életet élhessenek. Life is on.

www.phonakpro.hu

Közvetlen streamelés Roger mikrofonokról

A RogerDirect™ funkcióval most már a gyermekek is élvezhetik a Roger technológia előnyeit, anélkül, hogy a készülékhez külső vevőt kellene csatlakoztatniuk. A Roger vevők vezeték nélkül telepíthetők bármely Sky Marvel hallókészülékbe, kiküszöbölve ezáltal a vevők kompatibilitásából adódó nehézségeket. Ez a verhetetlen kombináció most minden eddiginél kisebb méretben kapható, könnyebb hozzáférést biztosítva a gyermekek számára még több szóhoz és beszélgetéshez.² A Roger funkcióval ellátott Sky készülék akár 42%-kal kisebb és 32%-kal könnyebb, mint a korábbi változatok.*

Újratölthető

A mindössze 3 óra alatt teljesen feltölthető Sky M-PR egész nap kitart, sőt 10 órányi használatot biztosít a Roger funkció és a multimédiás streamelés használata esetén is.** A szülők, gondozók, tanárok és gyermekek számára egyaránt megnyugtató az a tudat, hogy a hallókészülék nem fog lemerülni.

Phonak Sky™ Marvel



Szerelem első hallásra

További információ: www.phonakpro.hu

A Sky Marvel a korszerű technológia révén optimális hangminőséget biztosít; a készülék a gyermekek számára minden élethelyzetben megfelelő, kényelmes, strapabíró és biztonságos megoldást kínál.



Az új Sky Marvel termékcsaládban megtalálhatók a világ nemzetközi élvonalába tartozó technológiai újításokat és gyermekbarát funkciókat felvonultató hallókészülékek és kiegészítők. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a gyermekek számára a hallást, a beszédet és a beszédérthetőséget javító, könnyen használható megoldásokat fejlesszünk ki. A Sky Marvel tervezésekor a hangszínyt a bemenő jel minőségére és intenzitására helyeztük, aminek köszönhetően a készülék az első szavaktól kezdve kimagasló teljesítménnyel és minőségben kíséri végig a gyermek érzelmi és kognitív fejlődését.

Tiszta, gazdag hangzás

A világ első, kifejezetten gyermekek számára tervezett operációs rendszere

Az AutoSense Sky OS 3.0 fejlesztésénél az volt a cél, hogy a gyermekek által nap mint nap tapasztalt, a hallás terén jelentős kihívásokkal járó hangkörnyezeteket felismerje, és az adaptív zajkezelés megfelelő kombinációja révén javítsa a hallást és csökkentse a hallásra fordított figyelemből adódó fáradtságot.¹ A Sky Marvel készülékkel bemutatkozott az AutoSense Sky OS 3.0 operációs rendszer is, ami már a streamelt jeleket is osztályozza. Az új rendszernek köszönhetően a gyermekek tiszta, részletgazdag hangminőségben élvezhetik a streamelt beszédet, valamint zenére optimalizálva, a legjobb zenehallgatás élményét nyújtja.

Csatlakozik okostelefonhoz, Roger™ mikrofonhoz stb.

Közvetlen streamelés iOS® és Android™ készülékekről

A gyermekek számára készült többi hallókészülékkel szemben a Sky Marvel lényegében az összes okostelefonhoz és Bluetooth® funkció kezelésére alkalmas készülékhez közvetlenül csatlakoztatható. A A Sky Marvel-hez két Bluetooth® eszközhöz is csatlakoztatható, és a hangot mindkét fülbe streameli. Egy olyan világban, ahol a modern eszközök a gyermekek társadalmi életének és oktatásának szerves részét alkotják, a Sky Marvel beszédhez, alkalmazásokhoz, zenéhez, e-könyvekhez stb. történő intuitív hozzáférést és sztereó hangminőségű streamelést biztosít.

PHONAK
life is on

¹ Feliner, M., Rich, S., & Jones, C. (2016). Automatic and directional for kids - Scientific background and implementation of pediatric optimized automatic functions. Phonak Insight, a www.phonakpro.com/evidence oldalról elérve.
hozzáférés időpontja: 2019. augusztus 19.
Az iOS a Cisco Technology, Inc. védjegye | Az Android a Google, LLC védjegye.

² Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409.
* A Sky M-M és a Sky B-P + Roger 18 összehasonlítása (létesítményintegrált vevő)
** A tényleges töltési idő az akkumulátor hátralévő töltöttségének függvényében változik, azonban a 3 órát nem haladja meg.
*** Az IP68-as besorolás azt jelzi, hogy a hallókészülék víz- és porálló. Az IEC 60529 szabvánnyal összhangban a tesztek során 60 percig vizsgáltuk 1 méteres vízben, valamint 8 óráig porkamrában.

sonova
HEAR THE WORLD




Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svájc

CE
0459


A Sonova brand

027-8979-131/1.0002019-11/MLG © 2019 Sonova AG All rights reserved

Termékleírás

			
Elemtípus	312	beépített, újratölthető	13
Multifunkciós nyomógomb	•	•	•
Telefontekercs	•	•	•
Bluetooth®	•	•	•
Nanovevonat	•	•	•
IP-besorolás	IP68	IP68	IP68
Méret (H x Sz x M)	mm 31,3 x 14,1 x 7,3	36,7 x 16,4 x 8,5	40 x 16,9 x 8,5
hüvelyk	1,23 x 0,56 x 0,29	1,44 x 0,65 x 0,33	1,57 x 0,67 x 0,33
Tömeg	g/uncia	2,18/0,077	3,71/0,131
Töltési idő	0–100%	3 óra	4,4/0,155
	0–80%	1,5 óra	
	30perces illesztés	10 perc	
Max. kimeneti hangnyomás (2 cm ³ csatló adatok)	dB SPL	122	128
	dB	58	63
Frekvenciataromány	Hz	<100 – 6500	<100 – 8000
Működés közbeni fogyasztás	mA	1,5	1,6

Illesztési tartományok

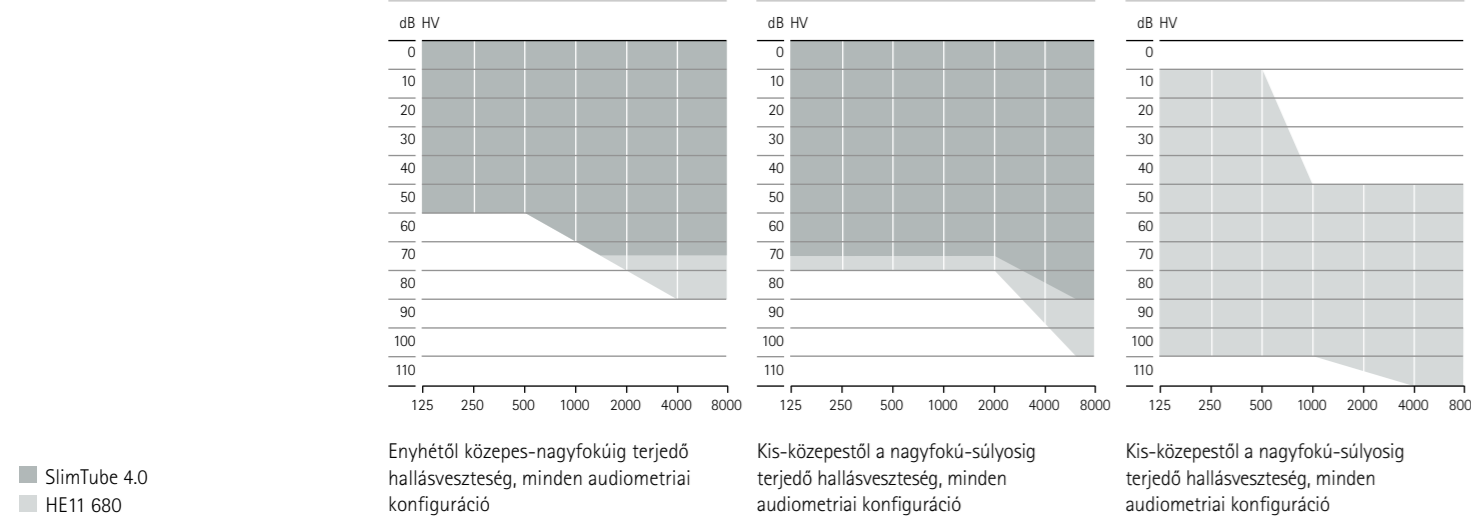


A ház és a könyök színei

Ház



Könyök

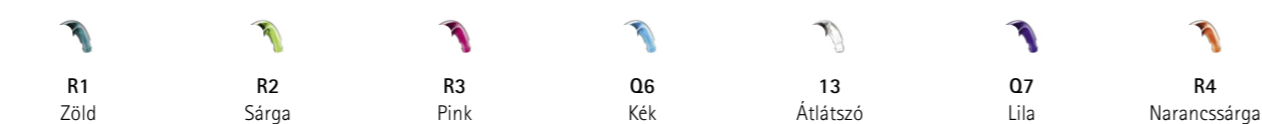

* A P3, P4 és P5 szín M30-as teljesítményszinten nem áll rendelkezésre.

Teljesítményszintek

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
AutoSense Sky OS 3.0								
Csendes szituáció	•	•	•	•	•	•	•	•
Beszéd zajban	•	•	•	•	•	•	•	•
Komfort zajban	•	•	•	•	•	•	•	•
Zene	•	•	•	•	•	•	•	•
Beszéd hangos környezetben ³	•	•	•	•	•	•	•	•
Beszélgetés autóban	•	•	•	•	•	•	•	•
Komfort visszhangos környezetben	•	•	•	•	•	•	•	•
Beszéd streaming + mik	•	•	•	•	•	•	•	•
Zene média streaming + mik	•	•	•	•	•	•	•	•
További programok								
További programok maximális száma	3	3	3	3	3	3	3	3
Komfort visszhangos környezetben	•	•	•	•	•	•	•	•
Beszéd hangos környezetben	•	•	•	•	•	•	•	•
Beszéd 360°-ban	•	•	•	•	•	•	•	•
Beszéd zajban	•	•	•	•	•	•	•	•
Csendes szituáció	•	•	•	•	•	•	•	•
Komfort zajban	•	•	•	•	•	•	•	•
Zene	•	•	•	•	•	•	•	•
Akusztikus telefon	•	•	•	•	•	•	•	•
Egyéni program	•	•	•	•	•	•	•	•
Adatfolyam programok								
RogerDirect + mik	•	•	•	•	•	•	•	•
PartnerMic + mik	•	•	•	•	•	•	•	•
Telefonhívás + mikrofon	•	•	•	•	•	•	•	•

Illesztés

	Sky M-M Sky M-M Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-PR Sky M-PR Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-SP Sky M-SP Trial M90/M70/M50/M30
Phonak Target	6.1 vagy újabb	6.1 vagy újabb	6.2 vagy újabb
Noahlink Wireless	•	•	•
Noahlink			•
HI-PRO és HI-PRO 2			•

Akusztikus csatló

Hangátvitel	Normál könyök	Csillapítással rendelkező (HE 11 680) átlátszó, és 6 további színben kapható, gyermekeknek való kivitel (lásd a 4. oldalt) a Sky M-M és Sky M-PR típus esetében
		Csillapítással nem rendelkező (HE 11), kizárólag átlátszó kivitel a Sky M-SP típus esetében
Gyerekszáras könyök		Csillapítással rendelkező (HE 11 680) mini átlátszó, és 6 további színben kapható, gyermekeknek való kivitel (lásd a 4. oldalt) a Sky M-M és Sky M-PR típus esetében
		Csillapítással nem rendelkező (HE 11) mini, kizárólag átlátszó kivitel a Sky M-SP típus esetében
SlimTube 4.0		Bal és jobb oldalon hordható, illetve öt különféle hosszban készülő változatban kapható (00, 0, 1, 2, 3)
Akusztikai csatlók vékony csöves rendszerhez	Dóm	Zárt dóm Nyitott dóm Zárt dóm furattal Power dóm
		három méretben kapható (S, M, L) három méretben kapható (S, M, L) három méretben kapható (S, M, L)
	SlimTip™	Akril Szilikon Titanium
Akusztikai csatlók könyökhöz	Fülilleszték	
	Univerzális fülilleszték	

Phonak Sky Marvel Trial

Az új Phonak Sky M Trial hallókészülékek az igényeknek megfelelően gyorsan beállíthatók a kívánt teljesítményszintre. A Phonak Sky M Trial hallókészülékben megtalálható különböző szintű technológiák számos lehetőséget biztosítanak arra, hogy már az első találkozó alkalmával illeszthessük a megfelelő készüléket az ügyfél számára, vagy a javítások közötti időszak áthidalására.

Phonak töltő fül mögötti (BTE) és RIC hallókészülékhez

A töltő minden tölthető Marvel fül mögötti (BTE) és kihelyezett hangszórós (RIC) hallókészülék töltéséhez alkalmas. A töltő USB-C tápbemenet és jelzőfény mellett nagy méretű fülillesztékek számára kialakított helyet is tartalmaz.



Phonak Sky M Bluetooth® verziók

Közvetlen hívások/audió streaming

Bluetooth® 4.2 vezeték nélküli technológiát támogató, illetve a legtöbb korábbi Bluetooth technológiával rendelkező telefonok

Vezeték nélküli kiegészítők portfóliója

	Sky M-M Sky M-M Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-PR Sky M-PR Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-SP Sky M-SP Trial M90/M70/M50/M30
Vezeték nélküli tartozékok	TV Connector	•	•
	Phonak PartnerMic™	•	•
	Phonak RemoteControl	•	•
Roger™	Roger mikrofonok	•	•

További információkért látogasson el a következő honlapra:



www.phonakpro.com/skymarvel



www.phonakpro.com/roger