

Phonak Audeo Fit™

Termékinformációk



A Paradise termékcsoport legújabb innovációja, az Audeo Fit pulzusérzékelő funkcióval rendelkezik, nyomon követi a szervezet egészségügyi adatait, melyek a myPhonak app alkalmazásban tekinthetők meg. A pulzus, a lépésszám és az tevékenységi szintek követésével ez a hallókészülék elősegíti az egészséges szokásokat és a jóllét érzetét. A Phonak Paradise platform innovatív technológiájára épülő Phonak Audeo Fit hallókészülékek alkalmasak az enyhétől a súlyosig terjedő hallásvesztéssel élők számára, megoldást nyújtva azoknak az ügyfeleknek, akik szeretnék figyelemmel követni egészségügyi adataikat.

További információkért látogasson el ide: www.phonakpro.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Termékleírás



Audéo P-R Fit
Audéo P-R Fit Trial
P90/P70

| | | |
|--|--------------------------|---|
| Többfunkciós gomb | | • |
| Bluetooth® | | • |
| Vízszigetítő bevonat | | • |
| IP-besorolás | | IP68 ¹ |
| Méretetek | H x Sz x M | 30,6 x 12,3 x 8,1 mm (1,21 x 0,49 x 0,32") |
| | Súly | 2,23 g (0,078 oz) |
| Töltési idő ² | 0–100% | 3 óra |
| | 0–80% | 1,5 óra |
| | 30 perces | 10 perc |
| M vevő | illesztés | |
| Maximális kimeneti teljesítmény (MPO) (dB SPL) | | 114 |
| Max. erősítés (dB) | 2 cm ³ csatló | 51 |
| Frekvenciatartomány (Hz) | 2 cm ³ csatló | <100 – >8000 |
| P vevő | | |
| Maximális kimeneti teljesítmény (MPO) (dB SPL) | | 122 |
| Max. erősítés (dB) | 2 cm ³ csatló | 59 |
| Frekvenciatartomány (Hz) | 2 cm ³ csatló | < 100 – 6300 |

A burkolat színei



P1

Homokbézs



P4

Gesztenye



P6

Ezüstszürke

¹ Az IP68-as besorolás azt jelzi, hogy a hallókészülék víz- és porálló. Az IEC60529 szabvánnyal összhangban a tesztek során 60 percig vizsgáltuk 1 méteres vízben folyamatos alámerítéssel, valamint 8 óráig porkamrában.
² A tényleges töltési idő az elem hátralévő töltöttségének függvényében változik, azonban a 3 órát nem haladja meg.

Teljesítményszintek

| | Premium | Advanced | Funkciók | Premium | Advanced |
|-----------------------------------|---------|----------|--|---------|----------|
| AutoSense OS™ 4.0 | Premium | Advanced | UltraZoom | • | • |
| Komfort visszhangos környezetben | • | | Dinamikus zajsűrés | • | |
| Beszélgetés autóban | • | | Beszédkiemelő | • | |
| Beszéd hangos környezetben | • | | EchoBlock visszhangcsökkentő | • | |
| Zene | • | • | Tap control | | |
| Komfort zajban | • | • | - Siri/Google Asszisztens | • | • |
| Beszéd zajban | • | • | - Hangtovábbítás szüneteltetése/ újraindítása | • | • |
| Csendes környezet | • | • | - Hívás fogadása/befejezése | • | • |
| Média (beszéd) + mikrofon | • | • | StereoZoom | • | • |
| Média (zene) + mikrofon | • | • | WindBlock | • | • |
| További programok | | | SoundRelax | • | • |
| További programok maximális száma | 4 | 4 | Beszédirány érzékelő szenzor | • | • |
| Komfort visszhangos környezetben | • | | DuoPhone | • | • |
| Beszéd hangos környezetben | • | • | Real Ear Sound | • | • |
| Beszéd 360°-ban | • | • | Roger és direkcionalitás beállítások | • | • |
| Beszéd zajban | • | • | SoundRecover2 | • | • |
| Csendes környezet | • | • | WhistleBlock | • | • |
| Komfort zajban | • | • | NoiseBlock | • | • |
| Zene | • | • | RogerDirect™ | • | • |
| Akusztkus telefon | • | • | Felhasználói szokások naplózása | • | • |
| Egyéni program | • | • | QuickSync | • | • |
| Hangtovábbító programok | | | AOV | • | • |
| RogerDirect + mikrofon | • | • | Tinnitus Balance | • | • |
| PartnerMic + mikrofon | • | • | auto Acclimatization | • | • |
| Telefonhívás + mikrofon | • | • | Környezeti egyensúly | • | • |
| | | | Finomhangolható csatornák | 20 | 20 |

Egészségügyi funkciók

| | Audéo Fit | Paradise újratölthető, kihelyezett hangszórós hallókészülékek |
|---|-----------|---|
| Minden hallókészülék esetén egyedi viselési idő | • | • |
| Átlagos összevont viselési idő kétoldali hallókészülékek esetén | • | • |
| Átlagos viselési idő különböző hangkörnyezetekben | • | • |
| Lépések | • | • |
| Tevékenységi szintek | • | • |
| Séta vagy futás távolsága | • | |
| Pulzusérzékelő | • | |
| Választható célmeghatározás a viselési időre | • | • |
| Választható célmeghatározás a lépésszáma | • | • |

A Bluetooth® szövegdjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei.
Az iOS a Cisco, Inc. védjegye.
Az Android a Google, Inc. védjegye.

Illesztés

Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial

| | |
|-------------------|-------------------|
| Phonak Target | 7.3-as vagy újabb |
| Noahlink Wireless | • |

Akusztikus csatoló*

Hosszúság

Négy méretben kapható (0, 1, 2, 3), bal és jobb

Dóm

Kupak dóm

Nyitott harang Három méretben kapható (S, M, L)

Zárt dóm furattal Három méretben kapható (S, M, L)

cShell

Akril


Illesztési tartományok

M Sensor Receiver

P Sensor Receiver

| | | |
|--|---|---|
| | • | • |
| | • | |
| | • | |
| | • | |
| | • | • |

* Csak a 8 tús Sensor Receiver és a Sensor cShell működik az Audeo Fit készülékkel.

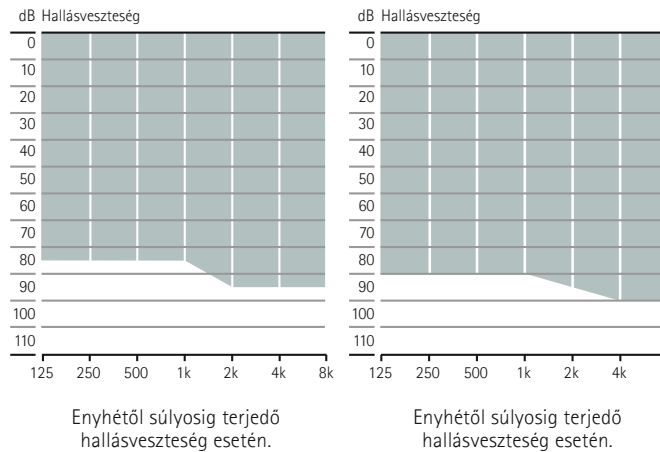

Phonak Audéo Fit Trial™

Az új Phonak Audéo P Fit Trial hallókészülékek a javaslatoknak megfelelően gyorsan beállíthatók a kívánt teljesítményszintre. A Phonak Audéo P Fit Trial hallókészülékben megtalálható mindkét technológia számos lehetőséget biztosít arra, hogy már az első találkozó alkalmával illeszthessük a megfelelő készüléket az ügyfél számára, vagy a javítások közötti időszak áthidalására.

Phonak Audéo Fit töltési lehetőségek



Phonak Charger Case Combi

A Phonak Charger Case Combi töltő, szárítótégely és kemény fedelű tartó egyben. A strapabíró és fröccsenésbiztos burkolat mellett egy tisztítóeszközt is tartalmaz.



Phonak Power Pack

A Phonak Power Pack egyszerűen csatlakoztatható a Phonak Charger Case Combi alsó részéhez, így akár útközben is feltölthetőek az újratölthető hallókészülékek.

Phonak Audéo Fit Bluetooth® verziók

Közvetlen hívások/hangadatátvitel

Bluetooth® 4.2 vezeték nélküli technológiát támogató, illetve a legtöbb korábbi Bluetooth technológiával rendelkező telefon

A Bluetooth® szövegdjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei.

Vezeték nélküli kiegészítők portfóliója

| | Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial P90/P70 |
|-----------------------------------|---|
| Vezeték nélküli kiegészítő | |
| TV Connector | • |
| Phonak PartnerMic | • |
| Phonak RemoteControl | • |
| Roger | |
| RogerDirect™ | • |
| Alkalmazások | |
| myPhonak | • |

További információkért látogasson el ide: www.phonakpro.com/audeoparadise

A Roger mikrofonokkal kapcsolatban a www.phonakpro.com/roger oldalon olvashat bővebben

További információkért látogasson el ide: www.phonakpro.com/smartapps

life is on


Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás egyenértékű a jobb étellel, és elengedhetetlen a teljes élethez. Több mint 70 éve elkötelezetten és szenvedéllyel dolgozunk egy olyan világ megteremtésén, ahol mindenki számára felhangzik az élet – „life is on”. Olyan innovatív hallási megoldásokat fejlesztünk, amelyek életkortól és a hallásvesztés mértékétől függetlenül támogatnak mindenkit szociális kapcsolataik kialakításában, valamint mentális és érzelmi fejlődésükben.

www.phonak.com



027-0656-13|V1.00|2022-01|NLG © 2022 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28.
CH-8712 Stäfa · Svájc

