

Phonak CROS P

Termékinformációk



A Phonak CROS P olyan megoldás az egyoldalú hallásvesztésre, amely célja, hogy segítsen viselőjének követni* a beszélgetéseket, bárhol is érkezenek**¹. A CROS P a hallásvesztéssel érintett fülön viselve veszi fel a hangokat, és vezeték nélkül továbbítja azokat a jobban halló fülön viselt Phonak Audéo™ P hallókészülékbe. A CROS P nem rendelkezik akusztikus kimenettel.

A CROS P két modellt foglal magában, valamint minden teljesítményszinten kompatibilis az Audéo P-13T, Audéo P-R és Audéo P-RT hallókészülékekkel. További információkért látogasson el ide: www.phonakpro.com

* Nyomon követés – azt jelenti, hogy a hallókészülék viselője követni tudja a beszélgetést.

** a CROS rendszer használatakor a hallókészülék nélküli esethez képest

¹ Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review of CROS/BiCROS Literature. The Hearing Review, 28(8), 22-25. 2021.08.09-i megtekintés, <https://www.hearingreview.com/inside-hearing/research/hea>

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Termékleírás



CROS P-R



CROS P-13

Akkumulátor/ elem		újratölthető	13-as méretű
Többfunkciós gomb		•	•
CROS balance		•	•
IP-besorolás		IP68 ¹	IP68 ¹
Méreték	H x Sz x M	28,0 x 11,9 x 8,0 mm (1,11 x 0,47 x 0,32")	29,0 x 11,9 x 8,1 mm (1,13 x 0,47 x 0,32")
	Súly	2,1 g (0,07 oz)	1,4 g (0,05 oz)
Töltési idő ²	0-100%	3 óra	
	0-80%	1,5 óra	
	30 perces illesztés	10 perc	
Kompatibilitás hallókészülékkel		Audéo P-R, Audéo P-RT	Audéo P-13T

A ház színei



P1

Homokbézs



HO

Bézs



P3

Szantálfa



P4

Gesztenye



P5

Pezsgő



P6

Ezüstszürke



P7

Grafitzürke



P8

Bársonyfekete

Fülillesztékek

Standard dóm (CROS Tube)

- A standard dóm három méretben érhető el (S, M, L)
- A CROS Tube bal/jobb oldali változatban és négy különböző hosszúságban (0, 1, 2, 3) érhető el.

SlimTip (CROS Tube)

- Egyéni fülilleszték
- A CROS Tube bal/jobb oldali változatban és négy különböző hosszúságban (0, 1, 2, 3) érhető el.

CROS Tip

- Teljesen egyéni fülilleszték a CROS-hoz, négy különböző kábelhosszal (0, 1, 2, 3)

Phonak CROS P-R töltők

A CROS P-R a párosított Audéo P-R vagy Audéo P-RT készülékkel együtt tölthető a Phonak Charger Case Combi vagy a Phonak Mini Charger Case segítségével.

További információkért, kérjük, olvassa el a Phonak Audéo P termékinformációit.

¹ Az IP68-as besorolás azt jelzi, hogy a hallókészülék víz- és porálló. Az IEC60529 szabvánnyal összhangban a tesztek során 60 percig vizsgáltuk 1 méteres édesvízben folyamatos alámerítéssel, valamint 8 óráig porkamrában.

² A tényleges töltési idő az akkumulátor hátralévő töltöttségének függvényében változik, azonban a 3 órát nem haladja meg.

Illesztés

	CROS P-R	CROS P-13
Phonak Target	7.1.9-es vagy újabb	7.1.9-es vagy újabb
Noahlink Wireless	•	•
NOAHLink		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

Vezeték nélküli kiegészítők portfóliója

Vezeték nélküli kiegészítők használata esetén azok a jobban halló fülön lévő hallókészülékhez csatlakoznak. Amikor kiegészítő által kiadott jelet érzékel, a CROS jele szünetel, majd folytatódik, amint a kiegészítő jele megszűnik.

A kompatibilis tartozékok teljes listáját a Phonak Audéo P termékinformációjában találja.

Fő tulajdonságok

A CROS P-hez bármilyen teljesítményszintű Audéo P illeszthető. Ezért a CROS P rendszert viselő ügyfél által megtapasztalható funkciók elsősorban az Audéo P hallókészülék teljesítményszintjétől függenek. További információkért, kérjük, olvassa el a Phonak Audéo P termékinformációit.

StereoZoom

A StereoZoom segíthet fokozni a beszédérthetőséget kihívást jelentő, zajos környezetben¹. A StereoZoom a Premium és Advanced teljesítményszintű hallókészülékekhez érhető el.

CROS balance

A CROS balance beállítja a CROS készülék és a hallókészülék közötti hangerő arányát.

AutoSense OS™ 4.0

Az AutoSense OS 4.0 automatikusan, valós időben érzékeli az ügyfél hangkörnyezetét. Több funkcióból válogat, és precízen keveri őket, hogy zökkenőmentes hallásélményt nyújtson.

¹ Stewart, E., Rakita, L. & Drexler, J. (2019). StereoZoom Part 1: The benefit of wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech intelligibility. Phonak Compendium, a www.phonakpro.com/bizonyitek oldalról elérve, a hozzáférés időpontja: 2021. augusztus

A CROS P teljesítménye

A CROS P esetén a „Beszéd hangos környezetben” program elérhető StereoZoommal. Premium és Advanced teljesítményszintű hallókészülékekkel kombinálva érhető el. A Standard és Essential teljesítményszintek esetében a CROS P Real Ear Sound és omnidirekcionális mikrofon üzemmódot biztosít. A jobban halló fül esetében a CROS P-t használó ügyfelek teljes mértékben élvezhetik a Paradise összes funkcióját.

A hallókészülék teljesítményszintje	A CROS P-hez elérhető mikrofonüzemmódok		
	StereoZoom	Real Ear Sound	Omnidirekcionális
Premium	•	•	•
Advanced	•	•	•
Standard		•	•
Essential			•


További információkért látogasson el ide: www.phonakpro.com/cros-p

Ha többet szeretne megtudni az Audéo P hallókészülékekről, látogasson el ide: www.phonakpro.com/audeoparadise

life is on

Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás egyenértékű a jobb étellel és elengedhetetlen a teljes élethez. Több mint 70 éve elkötelezetten és szenvedéllyel dolgozunk egy olyan világ megteremtésén, ahol mindenki számára felhangzik az élet – „life is on”. Olyan innovatív hallási megoldásokat fejlesztünk, amelyek életkortól és a hallásvesztés mértékétől függetlenül támogatnak mindenkit szociális kapcsolataik kialakításában, valamint mentális és érzelmi fejlődésükben.

www.phonakpro.com

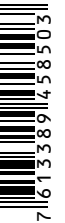

027-0622-13|V2.00|2021-09|NLG © 2021 Sonova AG All rights reserved