

Phonak Naída™ L ●

Informazioni sul prodotto

Phonak Naída Lumity rappresenta l'offerta completa di apparecchi BTE per ipoacusie da lievi a profonde.

Dotati della Phonak SmartSpeech™ Technology, gli apparecchi acustici Naída L sono l'ideale per i clienti che necessitano di soluzioni potenti sulla nostra piattaforma più avanzata Phonak Lumity.



Descrizione del prodotto



Naída L-UP
Naída L-UP Trial
L90/L70/L50/L30



Naída L-SP
Naída L-SP Trial
L90/L70/L50/L30




Naída L-PR
Naída L-PR Trial
L90/L70/L50/L30

Formato batteria		675	13	Integrato ricaricabile
Bobina telefonica		•	•	
Compatibilità con CROS L				•
Bluetooth®		•	•	•
Rivestimento idrofobico		•	•	•
Classe di protezione IP		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Dimensioni	Lunghezza x larghezza x profondità	42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34")	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33")	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33")
	Peso	4,60 g / 0,162 oz	4,40 g / 0,155 oz	3,68 g / 0,130 oz
Tempi di ricarica ²	0% - 100%			3 h
	0% - 80%			1,5 h
	Per una sessione di fitting di 30 min			10 min.

		HE11	HE11 680	HE11	HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680	SlimTube 4.0
Max. Potenza in uscita (dB SPL)	accoppiatore 2 cc	141	134	139	133	135	130	129
Guadagno massimo (dB)	accoppiatore 2 cc	84	78	81	75	70	68	69
Range di frequenza (Hz)		< 100 - > 4700	< 100 - > 4700	< 100 - > 4900	< 100 - > 5700	< 100 - > 7100	< 100 - > 5700	< 100 - > 7100

Range di fitting

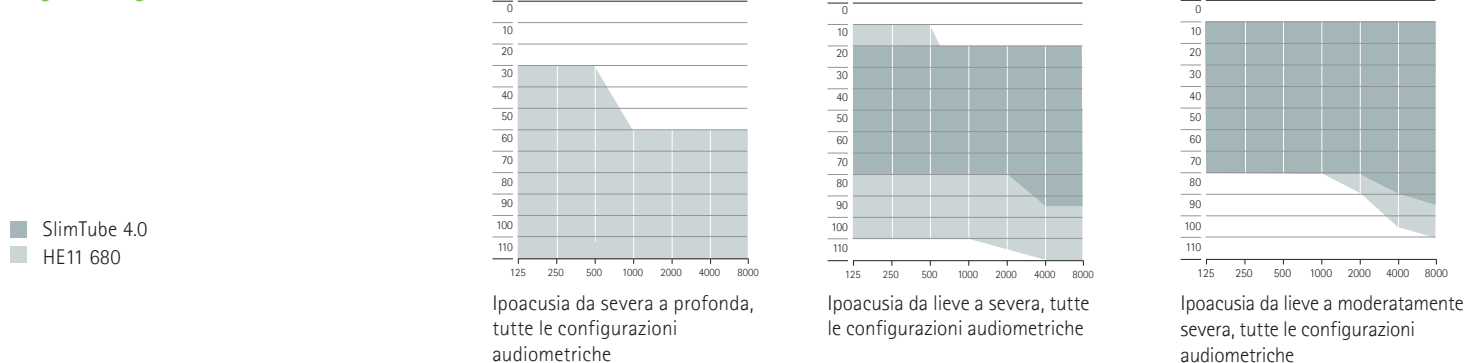

Colori involucro



H0
Beige



P1
Beige Sabbia



P3
Sandalo



P4
Castano



P5
Champagne



P6
Grigio Argento



P7
Grigio grafite



P8
Nero Velluto

¹ IP68 indica che l'apparecchio acustico è resistente all'acqua e alla polvere. È in grado di resistere all'immersione in acqua dolce fino a 1 metro di profondità per 60 minuti continuativi e fino a 8 ore di esposizione alla polvere, come indicato dallo standard IEC60529.

² Il tempo effettivo di carica dipende dalla carica residua della batteria e può essere influenzato dalle condizioni di temperatura.

L'identità grafica e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Sonova AG è coperto da licenza.

Livelli di performance

AutoSense OS™ 5.0	Premium L90	Avanzata L70	Standard L50	Essenziale L30
Parlato con rumore di fondo elevato	•			
Parlato in auto	•			
Comfort in ambienti riverberanti	•			
Musica	•	•		
Comfort nel rumore	•	•	•	
Parlato nel rumore	•	•	•	•
Situazione di quiete	•	•	•	•
Parlato da dispositivi multimediali + microfono	•	•	•	•
Musica da dispositivi multimediali + microfono	•	•	•	•
Programmi aggiuntivi				
Max. programmi aggiuntivi	4	4	4	4
Comfort in ambienti riverberanti	•			
Parlato con rumore di fondo elevato	•	•		
Parlato a 360°	•	•		
Parlato nel rumore	•	•	•	•
Situazione di quiete	•	•	•	•
Comfort nel rumore	•	•	•	•
Musica	•	•	•	•
Telefono acustico	•	•	•	•
Programma personalizzato	•	•	•	•
Telefono tramite bobina telefonica ± microfono ¹	•	•	•	•
Bobina telefonica pubblica ± microfono ¹	•	•	•	•
Programmi in streaming				
RogerDirect + microfono	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + microfono	•	•	•	•
Telefonata + microfono	•	•	•	•

Funzioni	Premium L90	Avanzata L70	Standard L50	Essenziale L30
SpeechSensor	•			
Ottimizzazione del Parlato	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Cancellazione Dinamica del Rumore	•	•		
Sensore Uditivo Dinamico ²	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Tap Control - Controllo a tocco ²				
- Siri/Assistente Google	•	•		
- Mettere in pausa/riprendere lo streaming	•	•		
- Accettare/terminare una chiamata	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
UltraZoom	•	•	•	•
Impostazione Roger™ e direzionalità	•	•	•	•
Broadband Booster ³	•	•	•	•
Funzionalità di salute ^{2,4}	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Regolazioni Preferite dall'Utente	•	•	•	•
Tinnitus Balance ⁵	•	•	•	•
Auto Adattamento	•	•	•	•
Bilanciamento ambientale	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Canali Regolazione Fine	20	20	16	12

SmartSpeech Technology

1 Non disponibile per Phonak Naída L-PR
 2 Disponibile solo per Phonak Naída L-PR
 3 Disponibile solo per Phonak Naída L-UP
 4 Disponibile in combinazione con myPhonak
 5 Non disponibile per Phonak Naída L-UP

Fitting

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-SP Naída L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.0 o versioni successive	9.1 o versioni successive	9.0 o versioni successive
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•	•	•
NOAHLink	•	•	
HI-PRO, HI-PRO2	•	•	

Accoppiamento acustico

			Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-SP Naída L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Uscita del suono	Curvetta	Con attenuazione (HE11 680), trasparente	•	•	•
	Curvetta	Senza attenuazione (HE11), trasparente	•	•	
	SlimTube 4.0	Disponibile per lato sinistro e destro in cinque lunghezze diverse (00, 0, 1, 2, 3)		•	•
Auricolare per SlimTube	Cupola	Cupola Cap		•	•
		Cupola aperta	Disponibile in tre misure (S, M, L)	•	•
		Cupola Ventilata	Disponibile in tre misure (S, M, L)	•	•
		Power Dome	Disponibile in tre misure (S, M, L)	•	•
	SlimTip	Acrilico		•	•
	Silicone		•	•	
Auricolare per curvetta	Auricolare		•	•	•

Phonak Naída L Trial

Gli apparecchi acustici Phonak Naída L Trial possono essere rapidamente impostati ai livelli di performance necessari per adattarsi a quanto da voi consigliato. Questo vi dà la possibilità di applicare al cliente la soluzione uditiva ottimale già al primo appuntamento o di fornire un apparecchio acustico sostitutivo quando quello del cliente è in riparazione. I dispositivi Naída L Trial includono anche un ricevitore Roger preinstallato per effettuare una facile dimostrazione e prova di qualsiasi microfono Roger.

Opzioni di ricarica per Phonak Naída L-PR

Phonak Charger Combi BTE / Phonak Charger Combi BTE 2

Naída L-PR ha tutte le caratteristiche che amate di Lumity, oltre al vantaggio della ricaricabilità. I clienti potranno godersi un'intera giornata di ascolto compreso lo streaming*.

* La durata prevista della batteria è di 16 ore e include 4 ore di streaming con BT classico e 4 ore di streaming con TV Connector.



Versioni Bluetooth® di Phonak Naída L

Chiamate dirette/streaming audio

Tecnologia wireless Bluetooth 4.2 e la maggior parte dei precedenti telefoni Bluetooth

Portfolio Accessori Wireless

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-SP Naída L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Accessori wireless			
TV Connector	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•
Roger			
Microfoni Roger	•	•	•
App			
myPhonak	•	•	•
myPhonak Junior	•	•	•

Per maggiori informazioni visitate il sito www.phonak.com/naida-lumity

Per informazioni sui microfoni Roger visitate il sito www.phonak.com/roger

Per maggiori informazioni su myPhonak e myPhonak Junior visitate il sito www.phonak.com/apps

life is on

Dal 1947, Phonak si dedica a preservare la qualità della vita aprendo nuovi mondi acustici. Già all'epoca della nostra fondazione, la nostra azienda era animata da una convinzione fondamentale: un buon udito equivale al benessere ed è quindi essenziale per vivere al meglio la vita. Infatti, il senso dell'udito è direttamente collegato al benessere sociale, emotivo, cognitivo e fisico. Oggi come in futuro, ci impegniamo a offrire il più ampio portafoglio di soluzioni uditive innovative. Insieme ai nostri Audioprotesisti, continuiamo a concentrarci su ciò che conta di più: migliorare la comprensione del parlato, cambiare la vita delle persone e avere un effetto positivo sulla società nel suo complesso.

www.phonak.com



027-0699-05/V3.00/2024-02/NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved
Pubblicazione riservata agli operatori di settore.