

Phonak Sky™ L.

Informazioni sul prodotto

Phonak Sky Lumity rappresenta la gamma completa di apparecchi BTE pediatrici per ipoacusie da lievi a profonde.

Dotati della Phonak SmartSpeech™ Technology, gli apparecchi Sky L rappresentano la scelta migliore per i pazienti pediatrici che desiderano una migliore comprensione del parlato con la nostra piattaforma più avanzata, Phonak Lumity.



Descrizione del prodotto



Sky L-M
Sky L-M Trial
L90/L70/L50/L30



Sky L-PR
Sky L-PR Trial
L90/L70/L50/L30



Sky L-SP
Sky L-SP Trial
L90/L70/L50/L30




Sky L-UP
Sky L-UP Trial
L90/L70/L50/L30

Formato batteria		312	Integrato ricaricabile		13	675			
Modelli LED pediatrici		•	•		•	•			
Bobina telefonica		•	•		•	•			
Compatibilità con CROS L			•						
Bluetooth®		•	•		•	•			
Rivestimento idrofobico		•	•		•	•			
Classe di protezione IP		IP68 ¹	IP68 ¹		IP68 ¹	IP68 ¹			
Dimensioni	Lunghezza x larghezza x profondità	31,3 x 14,1 x 7,3 mm (1,23 x 0,56 x 0,29")	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33")		40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33")	42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34")			
	Peso	2,18 g / 0,077 oz	3,68 g / 0,130 oz		4,40 g / 0,155 oz	4,60 g / 0,162 oz			
Tempi di ricarica ²	0% - 100%	3 h							
	0% - 80%	1,5 h							
	Per una sessione di fitting di 30 min	10 min							
		HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680	SlimTube 4.0	HE11	HE11 680	HE11	HE11 680
Max. Potenza in uscita (dB SPL)	accoppiatore 2 cc	128	122	130	129	139	133	141	134
Guadagno massimo (dB)	accoppiatore 2 cc	63	58	68	69	81	75	84	78
Range di frequenza (Hz)		<100 - >7800	<100 - >8000	<100 - >5700	<100 - >7100	<100 - >4900	<100 - >5700	<100 - > 4700	<100 - >4700
Corrente di funzionamento (mA)		1,6	1,6			2,1	2,2	3,3	2,8


Range di fitting

- Range di fitting DSL pediatrico
- Range di fitting APD/NAL


HE11 680

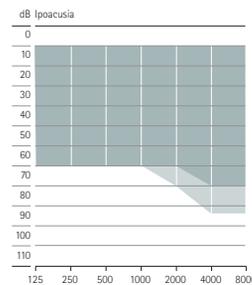


HE11 680

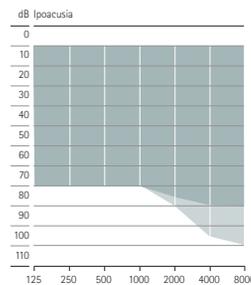

HE11 680

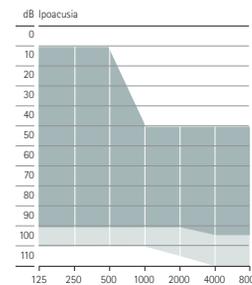


HE11 680

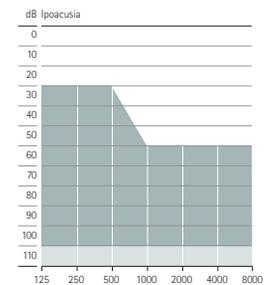


Ipoacusia da severa a profonda³


SlimTube 4.0

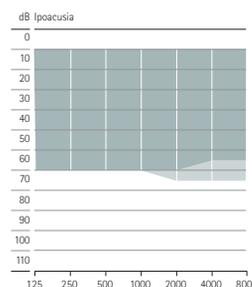

SlimTube 4.0

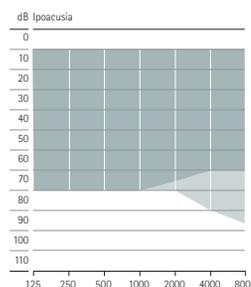

SlimTube 4.0

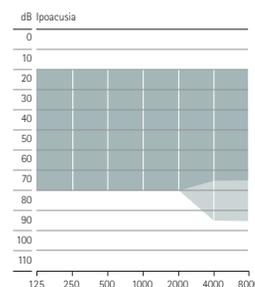

Ipoacusia da lieve a media³

Ipoacusia da lieve a moderatamente severa³

Ipoacusia da lieve a severa³

¹ IP68 indica che l'apparecchio acustico è resistente all'acqua e alla polvere. È in grado di resistere all'immersione in acqua dolce fino a 1 metro di profondità per 60 minuti continuativi e fino a 8 ore di esposizione alla polvere, come indicato dallo standard IEC60529.

² Il tempo effettivo di carica dipende dalla carica residua della batteria e può essere influenzato dalle condizioni di temperatura.

³ Quando si usa una formula prescrittiva DSL.

L'identità grafica e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Sonova AG è coperto da licenza.

Livelli di performance

AutoSense Sky OS 5.0	Premium L90	Avanzata L70	Standard L50	Essenziale L30
Parlato con rumore di fondo elevato	•			
Parlato in auto	•			
Comfort in ambienti riverberanti	•			
Musica	•	•		
Comfort nel rumore	•	•	•	
Parlato nel rumore	•	•	•	•
Situazione di quiete	•	•	•	•
Parlato da dispositivi multimediali + microfono	•	•	•	•
Musica da dispositivi multimediali + microfono	•	•	•	•
Programmi aggiuntivi				
Max. programmi aggiuntivi	4	4	4	4
Comfort in ambienti riverberanti	•			
Parlato con rumore di fondo elevato	•	•		
Parlato a 360°	•	•		
Parlato nel rumore	•	•	•	•
Situazione di quiete	•	•	•	•
Comfort nel rumore	•	•	•	•
Musica	•	•	•	•
Telefono acustico	•	•	•	•
Programma personalizzato	•	•	•	•
Telefono tramite bobina telefonica ± microfono ¹	•	•	•	•
Bobina telefonica pubblica ± microfono ¹	•	•	•	•
Programmi in streaming				
RogerDirect™ + microfono	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + microfono	•	•	•	•
Telefonata + microfono	•	•	•	•

Funzioni	Premium L90	Avanzata L70	Standard L50	Essenziale L30
SpeechSensor	•			
Ottimizzazione del Parlato	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Cancellazione Dinamica del Rumore	•	•		
Sensore Uditivo Dinamico ²	•	•	•	
RogerDirect	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Tap Control - Controllo a tocco ²				
- Siri/Assistente Google	•	•		
- Mettere in pausa/riprendere lo streaming	•	•		
- Accettare/terminare una chiamata	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
Roger™ e direzionalità	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•
Broadband Booster ³	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Regolazioni Preferite dall'Utente	•	•	•	•
Auto Adattamento	•	•	•	•
Bilanciamento ambientale	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Canali Regolazione Fine	20	20	16	12

SmartSpeech Technology

¹ Non disponibile per Phonak Sky L-PR
² Disponibile solo per Phonak Sky L-PR
³ Disponibile solo per Phonak Sky L-UP

Fitting

	Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.1 o versioni successive	9.0 o versioni successive	9.1 o versioni successive	9.0 o versioni successive
Noahlink Wireless/Noahlink Wireless 2	•	•	•	•
NOAHLink			•	•
HI-PRO, HI-PRO2			•	•

Accoppiamento acustico

		Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Uscita del suono					
Curvetta standard	Con attenuazione (HE11 680), trasparente e in altri 6 colori pediatrici	•	•	•	•
	Senza attenuazione (HE 11) solo nel colore trasparente			•	•
Curvetta con blocco pediatrico (mini)	Con attenuazione (HE11 680), trasparente e in altri 6 colori pediatrici	•	•	•	•
	Senza attenuazione (HE 11) solo nel colore trasparente			•	•
SlimTube 4.0	Disponibile per lato sinistro e destro in cinque lunghezze diverse (00, 0, 1, 2, 3)	•	•	•	
Auricolare per SlimTube					
Cupola	Cupola Cap	•	•	•	
	Cupola aperta	Disponibile in tre misure (S, M, L)	•	•	•
	Cupola Ventilata	Disponibile in tre misure (S, M, L)	•	•	•
	Power Dome	Disponibile in tre misure (S, M, L)	•	•	•
SlimTip	Acrilico	•	•	•	
	Silicone	•	•	•	
Auricolare per curvetta					
Auricolare		•	•	•	•

Colori dell'involucro e della curvetta

Involucro



H0
Beige



P1
Beige Sabbia



P3
Sandalo



P4
Castano



P5
Champagne



P6
Grigio Argento



P7
Grigio Grafite



P8
Nero Velluto



M6
Rosso Lava



M7
Blu Oceano



M8
Viola Maestà



Q2
Verde Elettrico



Q3
Pirata dei Caraibi



T3
Rosa Prezioso

Curvetta



R1
Verde



R2
Giallo



R3
Rosa



R4
Arancione



Q6
Blu



Q7
Viola



13
Trasparente

Opzioni di carica Phonak Sky L-PR

Phonak Charger Combi BTE / Phonak Charger Combi BTE 2

Sky L-PR ha tutte le caratteristiche che amate di Lumity, oltre al vantaggio della ricaricabilità. I giovani utenti potranno godersi un'intera giornata di ascolto compreso lo streaming*.

* Durata prevista della batteria di 16 ore, incluse 10 ore di streaming con Roger o audio.



Phonak Sky L Trial

I nuovi apparecchi acustici Phonak Sky L Trial possono essere rapidamente impostati ai livelli di performance necessari per adattarsi a quanto da voi consigliato. Questo vi dà la possibilità di applicare al cliente la soluzione uditiva ottimale già al primo appuntamento o di fornire un apparecchio acustico sostitutivo quando quello del cliente è in riparazione. I dispositivi Sky L Trial includono anche un ricevitore Roger preinstallato per effettuare una facile dimostrazione e prova di qualsiasi microfono Roger.

Versioni Phonak Sky L Bluetooth®

Chiamate dirette/streaming audio

Tecnologia wireless Bluetooth 4.2 e la maggior parte dei precedenti telefoni Bluetooth

Portfolio Accessori Wireless

	Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Accessori wireless				
TV Connector	•	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•	•
Roger				
Microfoni Roger	•	•	•	•
App				
myPhonak Junior	•	•	•	•

Per maggiori informazioni visitare www.phonak.com/sky-lumity

Per maggiori informazioni sui microfoni Roger visitare www.phonak.com/roger-for-education

Per maggiori informazioni su myPhonak Junior visitare www.phonak.com/myphonak-junior

life is on

Dal 1947, Phonak si dedica a preservare la qualità della vita aprendo nuovi mondi acustici. Già all'epoca della nostra fondazione, la nostra azienda era animata da una convinzione fondamentale: un buon udito equivale al benessere ed è quindi essenziale per vivere al meglio la vita. Infatti, il senso dell'udito è direttamente collegato al benessere sociale, emotivo, cognitivo e fisico. Oggi come in futuro, ci impegniamo a offrire il più ampio portafoglio di soluzioni uditive innovative. Insieme ai nostri Audioprotesisti, continuiamo a concentrarci su ciò che conta di più: migliorare la comprensione del parlato, cambiare la vita delle persone e avere un effetto positivo sulla società nel suo complesso.

www.phonak.com



027-0697-05/V1.00/2024-02/NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved
Pubblicazione riservata agli operatori di settore.