

Phonak Virto™ Paradise







Phonak Virto P è il portfolio completo di ITE per l'ipoacusia da lieve a profonda. Virto P include quattro modelli, quattro livelli di potenza e quattro livelli di performance, incluso un generatore di rumore per la gestione dell'acufene. Gestiti dalla tecnologia innovativa della piattaforma Phonak Paradise, gli apparecchi acustici Virto P sono la soluzione ideale per quei clienti che preferiscono una soluzione personalizzata con le migliori performance uditive.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.phonakpro.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Descrizione dei prodotti

	 Virto P-Titanium P90/P70	 Virto P-10 NW O P90/P70/P50/P30	 Virto P-312 NW O P90/P70/P50/P30	 Virto P-312 P90/P70/P50/P30
Livello di potenza				
M	•	•	•	•
P	•	•	•	•
SP	•	•	•	•
UP **				•
Configurazione hardware/opzioni/tecnologia				
Formato batteria	10	10	312	312
Pulsantino (Programma/Volume)	Opzionale	Opzionale	Opzionale	•
EasyPhone (per telefono acustico)	Opzionale	•	•	
MiniControl (per cambiare programma o regolare il volume)	•	•		
Controllo volume (rotellina)		Opzionale	Opzionale	Opzionale
Bobina telefonica	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
Tecnologia del microfono	Omnidirezionale	Omnidirezionale	Omnidirezionale	Direzionale
Indice di protezione IP (senza controllo volume)	IP68 ¹	IP68 ¹		
Bluetooth®				•
Tecnologia Binaural VoiceStream				•

Colori

Colori faceplate



26
Rosa



22
Cacao



28
Marrone



06
Nero



26
Rosa



22
Cacao



06
Nero

Solo titanio:

Colore guscio grigio titanio e colori faceplate

Colori guscio acrilico



21
Trasparente



26
Rosa



22
Cacao



28
Marrone



06
Nero







R
Rosso trasparente



B
Blu trasparente

Tipi di guscio

	 Virto P-Titanium	 Virto P-10 NW O	 Virto P-312 NW O	 Virto P-312
IIC	•	•		
CIC	•	•		
MC		•	•	
ITC		•	•	
HS		•	•	•
FS		•	•	•

Livelli di performance

	Premium P90	Avanzata P70	Standard P50	Essenziale P30		Premium P90	Avanzata P70	Standard P50	Essenziale P30
AutoSense OS[™] 4.0					Funzioni				
Parlato con rumore di fondo elevato*	•				UltraZoom	Premium	Avanzata	Standard	Essenziale
Parlato in auto	•				Cancellazione Dinamica del Rumore	•			
Comfort in ambienti con eco	•				Ottimizzazione del Parlato	•			
Musica	•	•			EchoBlock	•			
Comfort nel rumore	•	•	•		WindBlock	•	•		
Parlato nel rumore	•	•	•	•	SoundRelax	•	•		
Situazione di quiete	•	•	•	•	DuoPhone	•	•	•	
Parlato da dispositivi multimediali					Impostazione Roger e direzionalità*	•	•	•	
+ mic*	•	•	•	•	SoundRecover2	•	•	•	•
Musica da dispositivi multimediali					Regolazioni Preferite dall'Utente	•	•	•	•
+ mic*	•	•	•	•	WhistleBlock	•	•	•	•
Programmi aggiuntivi					QuickSync*	•	•	•	•
Max. programmi aggiuntivi	4	4	4	4	Ventilazione acustica ottimizzata	•	•	•	•
Comfort in ambienti con eco	•				Bilanciamento acufene	•	•	•	•
Parlato con rumore di fondo elevato*	•	•			auto Adattamento	•	•	•	•
Parlato a 360° *	•	•			Bilanciamento ambientale	•	•	•	•
Parlato nel rumore	•	•	•	•	RogerDirect*	•	•	•	•
Situazione di quiete	•	•	•	•	Canali Regolazione Fine	20	20	16	12
Comfort nel rumore	•	•	•	•					
Musica	•	•	•	•					
Telefono acustico	•	•	•	•					
Programma personalizzato	•	•	•	•					
Programmi in streaming									
RogerDirect + mic*	•	•	•	•					
PartnerMic + mic*	•	•	•	•					
Chiamata telefonica + mic*	•	•	•	•					

Fitting

Software	Phonak Target 7.3 o versioni successive
Interfacce	Noahlink Wireless, cavo di programmazione, HI-PRO, HI-PRO2

* Solo per Virto P-312

** Disponibile solo in alcuni Paesi

1. IP68 indica che l'apparecchio acustico è resistente all'acqua ed alla polvere. È in grado di resistere all'immersione in acqua fino a 1 metro di profondità per 60 minuti continuativi e fino a 8 ore di esposizione alla polvere, come indicato dallo standard IEC60529.


L'identità grafica ed i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.
IOS è un marchio commerciale di Cisco, Inc.
Android è un marchio commerciale di Google, Inc.

Accoppiamento acustico


Livello di potenza

		M	P	SP	UP**
Livello massimo di Uscita (dB SPL)	Accoppiatore 2 cc	109	115	119	127
Guadagno massimo (dB)	Accoppiatore 2 cc	40	50	60	70
Range di frequenza (Hz)	Accoppiatore 2 cc	<100 - 7000	<100 - 6700	<100 - 7000	<100 - 5200
Corrente di funzionamento (mA)	Non wireless	1.1	1.2	1.1	
	Wireless	1.7	1.8	1.7	1.7


Range di fitting

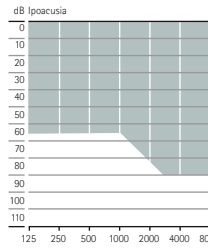


Per ipoacusia da lieve a media, tutte le configurazioni audiometriche

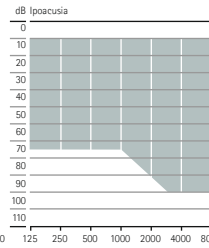

Per ipoacusia da lieve a moderatamente severa, tutte le configurazioni audiometriche

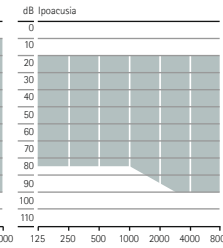

Per ipoacusia da moderata a grave, tutte le configurazioni audiometriche

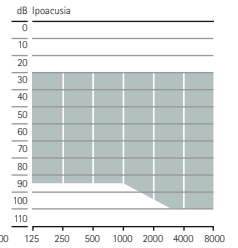

Per ipoacusia da moderata a profonda, tutte le configurazioni audiometriche

Portfolio Accessori Wireless

	Virto P-Titanium P90/P70	Virto P-10 NW O P90/P70/P50/P30	Virto P-312 NW O P90/P70/P50/P30	Virto P-312 P90/P70/P50/P30
Accessorio wireless				
TV Connector				•
Phonak PartnerMic				•
Phonak RemoteControl				•
Roger				
RogerDirect™				•
App				
myPhonak				•

Per maggiori informazioni su Virto Paradise, visitate il sito www.phonakpro.com/virtoparadise

Per informazioni sui microfoni Roger, visitate il sito www.phonakpro.com/roger

Per maggiori informazioni sulle app Phonak, visitate il sito www.phonakpro.com/smartapps


life is on

Noi di Phonak crediamo che un buon udito sia essenziale per il proprio benessere e per vivere la vita al meglio. Da più di 70 anni siamo fedeli alla missione di un mondo dove "Life is on" valga per tutti. Le nostre innovative soluzioni uditive sono progettate per persone di tutte le età e con ogni grado di ipoacusia, per promuovere le relazioni sociali in modo attivo ed emozionale.

www.phonakpro.com

027-0648-05/V2.00/2022-01/NLG © 2022 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svizzera

 **CE**
0459