

Phonak Terra™ + Phonak Terra™

Informazioni sui prodotti

Phonak Terra+ e Phonak Terra offrono un insieme equilibrato di funzioni per un'esperienza uditiva personalizzata con RIC e BTE.



Descrizione dei prodotti



		Terra+ RIC-R	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Formato batteria		Integrato ricaricabile	312	312	13	675
Bobina telefonica				•	•	•
Bluetooth®		•	•	•	•	•
Rivestimento idrorepellente		•	•	•	•	•
Classe di protezione IP		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Dimensioni	Lunghezza x larghezza x profondità	27,7 x 12 x 8,1 mm (1,09 x 0,47 x 0,32")	26,8 x 11,2 x 7,1 mm (1,05 x 0,44 x 0,28")	31,3 x 14,16 x 7,3 mm (1,23 x 0,56 x 0,29")	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33")	42,2 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34")
	Peso	2,2 g (0,08 oz)	1,1 g (0,04 oz)	2,2 g (0,08 oz)	4,4 g (0,16 oz)	4,6 g (0,16 oz)
Tempi di carica ²	da 0% a 100%	3 h				
	da 0% a 80%	1,5 h				
	Per una sessione di fitting di 30 min.	15 min.				

Colori involucri

Terra+



H0
Beige



P1
Beige Sabbia



P3
Sandalo



P6
Grigio Argento



P8
Nero Velluto

Terra



H0
Beige



P3
Sandalo



P6
Grigio Argento



P8
Nero Velluto

¹ IP68 indica che l'apparecchio acustico è resistente all'acqua e alla polvere. È in grado di resistere all'immersione in acqua dolce fino a 1 metro di profondità per 60 minuti continuativi e fino a 8 ore di esposizione alla polvere, come indicato dallo standard IEC60529.


² Il tempo di carica effettivo dipende dalla carica residua della batteria, ma non supera le 3 ore.

L'identità grafica e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Sonova AG è coperto da licenza.


Accoppiamento acustico - Apparecchi acustici RIC

Lunghezza	Ricevitore S	Ricevitore M	Ricevitore P	Ricevitore UP
Disponibile in quattro lunghezze diverse (0, 1, 2, 3), sinistra e destra	•	•	•	•
Cupola				
Cupola Cap	•	•	•	
Cupola aperta Disponibile in tre taglie (S, M, L)	•	•	•	
Cupola Ventilata Disponibile in tre taglie (S, M, L)	•	•	•	
Power Dome Disponibile in tre taglie (S, M, L)	•	•	•	
SlimTip*				
Acrilico	•	•	•	
Silicone	•	•	•	
cShell				
Acrilico	•	•	•	•
Titanium	•	•	•	•
Dati accoppiatore 2 cc				
Livello massimo di uscita (dB SPL)	111	114	122	132
Guadagno massimo (dB)	47	51	59	71
Range di frequenza (Hz)	<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - 6300	<100 - 6100


Range di fitting

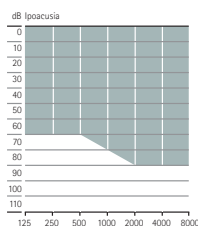


Ipoacusia da lieve a moderatamente severa.

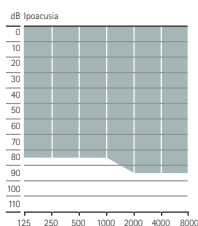

Ipoacusia da lieve a severa.

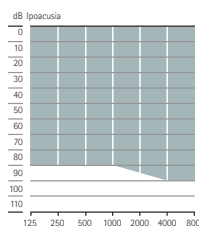

Ipoacusia da lieve a severa.

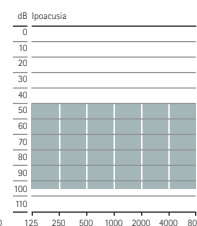

Ipoacusia da moderata a profonda.

* Disponibile con opzione extra lunghezza canale

Opzione di carica Phonak Terra+ RIC-R



Phonak Charger Ease

Accoppiamento acustico - Apparecchi acustici BTE

Uscita del suono

	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Curvetta standard Con filtro (HE11 680), trasparente	•	•	•
Senza filtro (HE11), trasparente		•	•
SlimTube 4.0 Disponibile per lato sinistro e destro in cinque lunghezze diverse (00, 0, 1, 2, 3)	•	•	

Auricolare per SlimTube

	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Cupola Cupola Cap	•	•	
Cupola aperta Disponibile in tre taglie (S, M, L)	•	•	
Cupola ventilata Disponibile in tre taglie (S, M, L)	•	•	
Power Dome Disponibile in tre taglie (S, M, L)	•	•	
SlimTip Acrilico	•	•	
Silicone	•	•	


Auricolare per curvetta

	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Auricolare	•	•	•

Dati accoppiatore 2 cc

	HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680	HE11	HE11 680	HE11
Livello massimo di uscita (dB SPL) accoppiatore 2 cc	128	122	133	139	134	141
Guadagno massimo (dB) accoppiatore 2 cc	63	58	75	81	78	84
Range di frequenza (Hz)	<100 - >7800	<100 - >8000	<100 - >5700	<100 - >4900	<100 - >4700	<100 - >4700
Corrente di funzionamento (mA)	1,6	1,6	2,2	2,1	2,8	3,3

Range di fitting

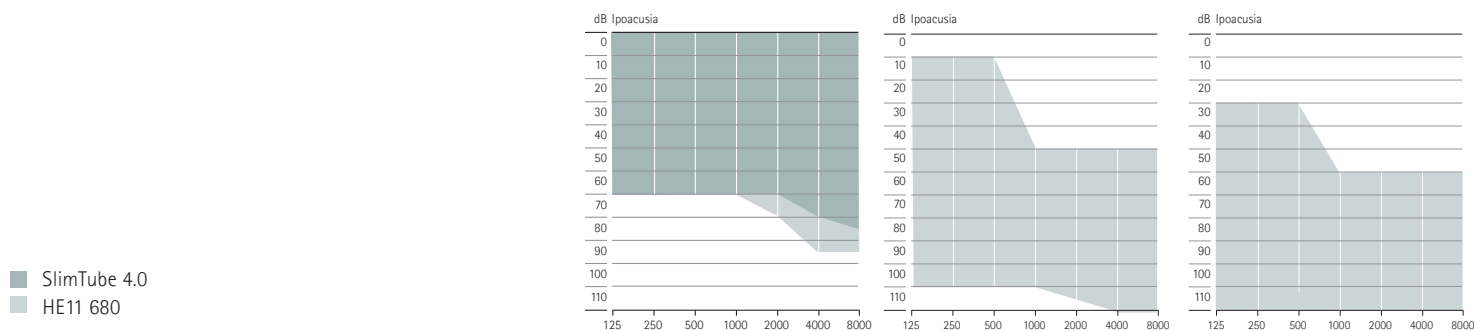

Ipoacusia da lieve a moderata, tutte le configurazioni audiometriche

Ipoacusia da lieve a severa, tutte le configurazioni audiometriche

Ipoacusia da media a profonda, tutte le configurazioni audiometriche

Livelli di performance

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Funzioni	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
AutoSense OS™ 5.0			UltraZoom		
Parlato nel rumore	•	•	Broadband Booster ¹	•	•
Situazione di quiete	•	•	Regolazioni Preferite dall'Utente	•	•
AutoSense OS 5.0 (streaming)			Auto Adattamento	•	•
Parlato da dispositivi multimediali + microfono	•	•	Bilanciamento ambientale	•	•
Musica da dispositivi multimediali + microfono	•		SoundRecover2	•	
Programmi aggiuntivi			SoundRecover	•	•
Max. programmi aggiuntivi	4	4	WhistleBlock	•	•
Parlato nel rumore	•	•	NoiseBlock	•	•
Situazione di quiete	•	•	QuickSync	•	•
Comfort nel rumore	•		AOV	•	•
Musica	•		Canale Regolazione Fine	10	8
Telefono acustico	•	•			
Programma personalizzato	•	•			
Telefono tramite bobina telefonica ± mic ²	•	•			
Bobina telefonica pubblica ± mic ²	•	•			
Programmi in streaming					
PartnerMic + microfono	•				
Telefonata + microfono	•	•			

¹ Disponibile solo per Phonak Terra+ BTE-UP e Phonak Terra BTE-UP
² Disponibile solo per i prodotti BTE

Portfolio Accessori Wireless

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
Accessorio wireless		
TV Connector	•	
Phonak PartnerMic™	•	
Phonak RemoteControl	•	
App		
myPhonak	•	

Fitting

	Terra+ RIC-R	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Phonak Target	10.1 o superiore	9.1 o superiore	9.1 o superiore	9.1 o superiore	9.1 o superiore
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•	•	•	•
NOAHLINK				•	•
HI-PRO, HI-PRO2				•	•

Per maggiori informazioni visitare il sito www.phonak.com/terra

Per maggiori informazioni su myPhonak visitare il sito www.phonak.com/apps

life is on

Dal 1947, Phonak si dedica a preservare la qualità della vita aprendo nuovi mondi acustici. Già allora, ai tempi della fondazione, la nostra azienda era spinta da una convinzione formativa: noi crediamo che sentire bene equivalga a vivere bene e pertanto sia essenziale per vivere appieno la vita. Di fatto, il senso dell'udito è direttamente collegato al benessere sociale, emotivo, cognitivo e fisico. Oggi come in futuro, ci impegniamo per offrire il più ampio portafoglio di soluzioni acustiche innovative. E, assieme ai nostri audioprotesisti, continuiamo a focalizzarci sulle cose più importanti: migliorare la comprensione del parlato, cambiare la vita delle persone e avere un effetto positivo sulla società nel suo insieme.

www.phonak.com



7 16133891724066

Publicazione riservata agli operatori di settore.
027-0706-05/M3.00/2024-10/MLG © 2024 Sonova AG All rights reserved