

Roger Select™ 3


Technical data.

roger

ロジャー セレクト3 は、雑音が存在する音環境に適した多目的マイクです。テーブルに置くと、話している人を自動的に選択し、ある話し手から別の話し手へシームレスに切り替えます。複数の会話が行われる場合は、聞き手が誰の話聞くか手動で選択することができます。また、テレビなどのマルチメディア機器の音声を送信することもできます。

テクニカルデータ

タイプ	ロジャー マイクロホン
本体外寸 (Ø x H)	55 x 12 mm
重さ	28 g
カラー	シャンパン、グラファイトグレー
付属品	ACアダプタ、USBケーブル、ドッキングステーション デジタル音声用ケーブル、アナログ音声用ケーブル、 クリップ、ストラップ、ポーチ
動作環境条件	温度：0°C～40°C／相対湿度90%未満 (ただし結露無きこと)
保管・輸送環境条件	温度：-20°C～60°C／相対湿度90%未満 (ただし結露無きこと)

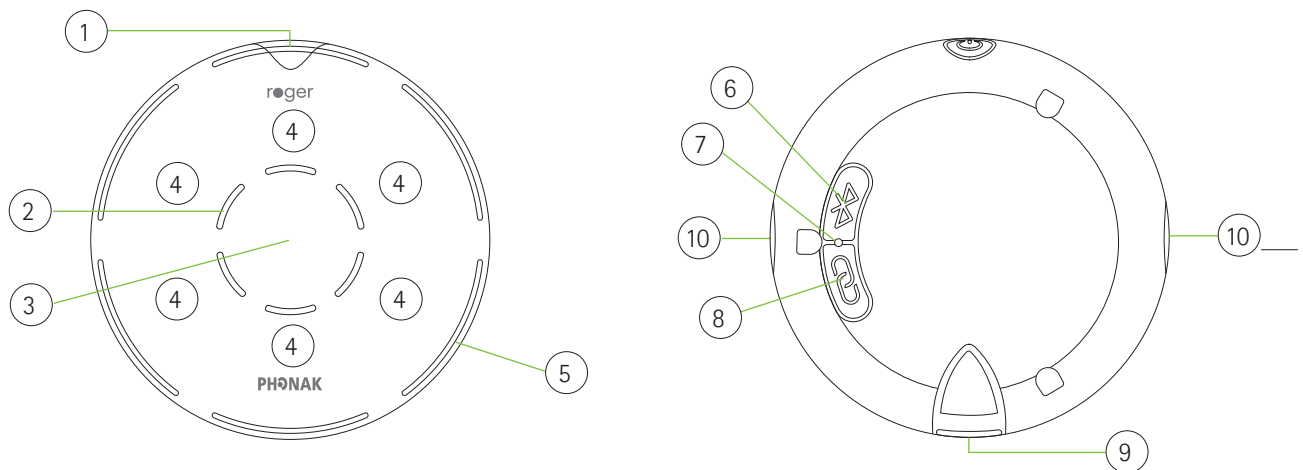

各部説明

1	電源ボタン (バッテリーステータスインジケータ)	6	Bluetooth®ボタン
2	マイクロホン/センターインジケータ	7	接続/ペアリングインジケータ
3	センターキー	8	接続ボタン
4	セレクトキー	9	マイクロUSBソケット
5	マイクロホンモードインジケータ	10	ネックストラップ/クリップ用スロット

特徴

ロジャー セレクト 3はロジャーダイレクト機能搭載補聴器に対して無制限にロジャー受信機をセットアップすることができます。

- 騒音下での聞き取り向上¹
- マルチビームテクノロジー
- 首かけモード、卓上モード、セレクトモード
- マルチメディア機器からの音声入力可能
- マルチトーカーネットワークを利用して複数のマイクロホンの使用が可能
- Bluetooth®による携帯電話のハンズフリー通話
※ ロジャーダイレクトを備えた補聴器ではBluetoothは使用できません。

マイクロホン仕様

マイクロホン個数	3
マイクロモード	首かけモード、セレクトモード、卓上モード

無線仕様

ストリーミングテクノロジー	ロジャーテクノロジー
周波数および伝搬技術	2.4 GHz (ISM帯域) 自動適応型周波数 ホッピング方式を含む
電波出力	100 mW
使用可能距離 (障害物がない自由音場)	最大50メートル (ロジャーダイレクト 搭載補聴器まで) 最大25メートル(従来の ロジャー受信機まで)

音声信号

音声入力	マイクロUSB (アナログ)
音声帯域幅	100 Hz - 7.3 kHz

電源仕様

タイプ	直流 (安定している状態)
主要電圧	100-240 V
二次電圧	5 VDC
最大電流	1.0 A
端子	マイクロUSB
重要事項	充電する際は付属のACアダプタとUSBケーブルをご使用ください。(5 VDC, >500 mA)

電池仕様

タイプ	リチウムポリマー
容量	400 mAh
電圧	3.7 V
使用時間	約 8 時間

受信機の互換性


互換性のある ロジャー受信機	すべてのロジャー受信機 (ロジャーデジマスターを除く)
最大接続可能 ロジャー 受信機台数	無制限

ロジャー マイクロホンとの互換性 (マルチトーカーネットワーク)


マルチトーカーネットワーク中、ロジャー セレクトは首かけモードでのみ機能します。

互換性のある ロジャーマイクロホン	ロジャー オン 3 ロジャー セレクト 3 ロジャー テーブルマイク 3 ロジャー オン ロジャー セレクト ロジャー テーブルマイク II ロジャー クリップオン マイク ロジャー オン iN ロジャー セレクト iN ロジャー オン V2 ロジャー オン iN V2
最大接続可能 マイクロホン台数	最大 10 台

基準認証

電波法	 T D 18-0001 202 R 202-LSG002
Europe	EN 300 328, EN 301 489, EN 62368-1, IEC/EN 62311
Canada	RSS-247, RSS-102
Japan	ARIB-T66
USA	CFR 47, part 15.247, FCC OET Bulletin No.65

ドッキングステーション

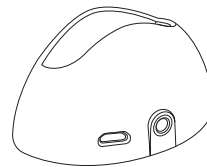

オーディオ入力 (3.5 mm ソケット)	-アナログ -デジタル(Toslink)
--------------------------	-------------------------

Bluetooth®およびそのロゴはBluetooth SIG, Inc.が所し、Sonova AGはライセンスに基づいてこれらの商標を使用しています。