

聞いた瞬間、心が躍る

フォナック ナイーダ リンク M
フォナック スカイ リンク M



フォナック (ナイーダ / スカイ) リンク M

「聞いた瞬間、心が躍る」聞こえをお届けします

● バイモーダル装用に対応

フォナック リンク Mはアドバンスト・バイオニクス マーベル CI/ スカイ マーベル CI※1のサウンドプロセッサと互換性があります。補聴器だけで使用することはもちろん、人工内耳が必要になった場合でも、バイモーダル装用に対応しているため、人工内耳と補聴器間の両耳間通信 (BVST)、両耳フィッティング、両耳ストリーミング、アプリでの同時操作※3などが行えます。



● 広がるコネクティビティ

スマートフォンなどBluetooth対応機器からのストリーミングはもちろん、テレビや音楽プレイヤーから音声をストリーミングできるフォナック独自のAirStream™テクノロジーが搭載されています。簡単に利用できるテレビコネクタD (オプション) で、多様な電子機器と接続し、テレビ番組や映画を楽しむことができます。ワイヤレス ヘッドフォンと似ていますが、より優れた点として、ストリーミングされる信号を言葉と音楽で区別し、自動的に適した音質に調整します。



ポイント: 日常使用の多様な電子機器と接続

● ロジャーの音声を補聴器で直接受信

デジタルワイヤレス補聴援助システム ロジャーとも接続でき、騒音下や距離が離れた状況でことばの理解をサポート、聴覚パフォーマンスが向上します。ロジャーダイレクトが搭載されているため、外付けの受信機を取り付けることなく補聴器に直接ストリーミングすることができます※2。



ポイント: 騒がしい環境や距離がある中でより聞こえやすく

● アプリで、もっと素晴らしく！マイフォナック アプリ

マイフォナック アプリを介して補聴器専門家の調整を遠隔で受けられるリモートサポートが使用可能です。他にも、アプリのリモコン機能で、装用者ご自身で設定を個人のニーズに合わせて調整できます※3。

- ・ 専門家によるリモートサポート
- ・ リアルタイムでの音質調整とパーソナライズ

※1 「マーベル CI/スカイ マーベル CI」*人工内耳とのペアリングが可能
*販売名: Naida CI M90 サウンドプロセッサ
承認番号: 30600BZX00283000
製造販売業者: 株式会社日本バイオニクス

※2 ロジャーを使用するには受信機機能をセットアップする必要があります。

※3 マイフォナック アプリは、リンク Mを1台だけ片耳で使用する場合、またはもう一方もリンク Mとペアリングされている場合のみ対応しています。バイモーダル装用時はアドバンスト・バイオニクスのABリモートアプリを使用してください。リモートサポートをバイモーダル装用で使用する場合は、アドバンスト・バイオニクスのABリモートサポートを使用してください。



フォナック リンク M + マーベル CI / スカイ マーベル CI で より快適に、より便利に

フォナック リンク Mとアドバンスト・バイオニクス マーベル CI / スカイ マーベル CI のバイモーダル装用では、補聴器と人工内耳が連携して動的に機能します。周囲の音環境を自動で分析し、その場に最適と思われる音声処理を自動で行います。さらに、フォナック リンク Mで利用可能な接続オプションは、アドバンスト・バイオニクスのサウンドプロセッサとシームレスに連携します。

より力強い聞こえの体験

- ・補聴器側と人工内耳側が同じオートセンス OSを搭載
- ・周囲の音環境を分析し最適なプログラムに自動的に調整

ユニバーサルな接続性

- ・ロジャーダイレクト
- ・Bluetooth LE
- ・Bluetooth Classic (iOS, Android, パソコンなどあらゆる Bluetooth 機器)
- ・テレビコネクターD
- ・フォナック パートナーマイク

進化したバイモーダル機能

- ・補聴器と人工内耳間での両耳間音声通信技術 (BVST) 機能搭載

かんたん操作で毎日をもっと快適に

- ・片側の操作で両側をコントロール
- ・両耳に同時ストリーミング
- ・ひとつのアプリで両耳操作


フォナック リンク M

+

アドバンスト・バイオニクス
マーベル CI/スカイ マーベル CI

製品概要

使用電池		PR48(13)	
多機能ボタン		●	
Tコイル		●	
Bluetooth®		●	
ナノコーティング		●	
IP等級		IP68	
本体サイズ	長さ×幅×奥行	40.0 x 16.9 x 8.5	
	重さ	4.4 g	
		HE11	HE11 680
最大OSPL90	2 cc coupler	139+3dB以下	133+3dB以下
最大音響利得(ピーク値)	2 cc coupler	81+3dB以下	75+3dB以下
帯域幅(Hz)		f1<200, f2>5000	f1<200, f2>5000
動作電流(mA)		2.1+20% 以下	2.1+20% 以下

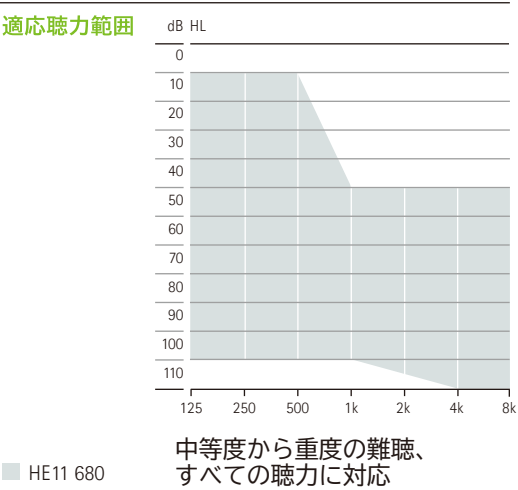

機能一覧

オートセンス OS 3.0 オートセンス スカイ OS 3.0		機能	
静かな環境	●	ウルトラズーム	●
騒音下でのことば	●	SN比ブースト	●
騒音下での快適性	●	デュオフォン	●
音楽	●	サウンドリカバー2	●
非常に騒がしい中でのことば	●	ユーザー志向のチューニング	●
車の中でのことば	●	リアルイヤーサウンド	●
反響する環境での快適性	●	微調整チャンネル	20
メディア ことば + マイク	●	ホイッスルブロック	●
メディア 音楽 + マイク	●	ノイズブロック	●
追加のプログラム		ウインドブロック	●
追加できる最大プログラム数	4※1	エコーブロック	●
反響する環境での快適性	●	サウンドリラックス	●
非常に騒がしい中でのことば	●	クイックシンク	●
全方向(360°)からのことば	●	AOV	●
騒音下でのことば	●	自動順応マネージャ	●
静かな環境	●	環境音バランス	●
騒音下での快適性	●	ロジャーダイレクト	●
オフィヤー互換※2	●	ロジャーと指向性	●
音楽	●		
通常の電話	●		
カスタムプログラム	●		
ストーリーミング プログラム			
ロジャーダイレクト + マイク	●		
パートナーマイク + マイク	●		
通話 + マイク			

カラーバリエーション

フォナック ナイダ リンク M



フォナック スカイ リンク M



イヤフック



※1 マーベルCI/スカイマーベルCIとペアリングすると追加プログラム最大4。ペアリングせず補聴器として独立して使用する場合は最大3
※2 バイモータル装着でのみ使用

価格

製品	価格(非課税)
フォナック ナイダー リンク M	170,000円
フォナック スカイ リンク M	150,000円

ワイヤレス コミュニケーション ポートフォリオ

		フォナック ナイダー リンク M フォナック スカイ リンク M
ワイヤレスアクセサリ	テレビコネクターD	•
	フォナック パートナーマイク	•
	フォナック リモートコントロール	•
ロジャー	ロジャー マイクロホン	•
アプリ	マイフォナック*	•

Bluetooth® 4.2のワイヤレス テクノロジーと、ほぼすべての旧型 Bluetooth 電話に対応

接続状況や携帯電話のBluetooth®のバージョンによって接続できない場合がございます。

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。

※マイフォナック アプリは、ナイダー リンク Mを1台だけ片耳で使用する場合、またはもう一方もナイダー リンク Mとペアリングされている場合のみ対応しています

保証期間

<国内保証> 3年間無償保証

【販売名】

フォナック ナイダー リンク M

フォナック スカイ リンク M

【管理医療機器認証番号】

フォナック ナイダー リンク M:307ALBZX00001000

フォナック スカイ リンク M :307ALBZX00003000

life is on ●

フォナックは1947年以来、新しい音響の世界を切り開き、人々の人生を豊かにする取り組みに情熱を傾けてきました。私たちは「良い聞こえは、健康で充実したしあわせな毎日に欠かせないものである」と考えています。現在もそしてこれからも、聴覚専門家とともに「ことばの理解を高めること」、「人々の暮らしを豊かにすること」そして「社会全体により良い効果をもたらすこと」を大切にし、革新的な聞こえのソリューションを幅広くご提供できるよう力を注いでまいります。

製造販売業:ソノヴァ・ジャパン株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8

天王洲パークサイドビル

フォナック カスタマーサービス

法人のお客様窓口 TEL:0120-04-4079

個人のお客様窓口 TEL:0120-06-4079

(受付時間:月~金 9:00~17:30 土日祝休み)

FAX:0120-23-4080

許可番号 13B2X10021