

Phonak Audéo FitTM

(フォナック オーデオ フィット)

製品情報



当社のパラダイス ポートフォリオの最新イノベーション、オーデオ フィットには心拍数センサーが備わっており、身体ヘルスデータを追跡し、myPhonak app で表示できます。心拍数、歩数や活動レベルを追跡することで、健康的な生活習慣を促進し、幸福感を高めます。フォナック オーデオ フィット補聴器は、フォナック パラダイス プラットフォームの革新的なテクノロジーを駆使し、軽度から高度難聴者のニーズに応えます。ヘルス データとの関りを求めているお客様のためのソリューションです。

詳細については、www.phonakpro.com を参照してください

A Sonova brand

PHONAK
life is on

製品概要



オーディオ P-R フィット
オーディオ P-R フィット トライアル
P90/P70

多機能ボタン		●
Bluetooth®		●
疎水性コーティング		●
国際保護等級 IP		IP68 ¹
サイズ	縦 x 幅 x 奥行き	30.6 x 12.3 x 8.1 mm (1.21 x 0.49 x 0.32")
	重量	2.23 g (0.078 oz)
充電時間 ²	0%～100%	3時間
	0%～80%	1.5時間
	30分のフィッティング	10分
M レシーバ	オーディオ P-R フィット トライアル	
最大出力音圧(dB SPL)		114
最大利得(dB)		51
周波数帯(Hz)	2cc カブラデータ	<100 - >8000
P レシーバ	オーディオ P-R フィット トライアル	
最大出力音圧(dB SPL)		122
最大利得(dB)		59
周波数帯(Hz)	2cc カブラデータ	<100 - 6300

ハウジング カラー



P1

サンドベージュ



P4

チェストナット



P6

シルバークレー

¹ IP68は、補聴器が防水および防塵であることを示します。水深1mに長時間(60分)入れた後や、粉塵試験装置に8時間入れた後でも、修理が必要なダメージが発生しないことを示します(IEC60529規格による)。
² 実際の充電時間は、電池残量によって変わりますが、3時間を超えることはありません。

パフォーマンス レベル

	プレミア ムクラス	アドバン スクラス	機能	プレミア ムクラス	アドバン スクラス
AutoSense OS™ 4.0	プレミア	アドバン	ウルトラズーム	●	●
(オートセンス OS 4.0)	ムクラス	スクラス	ダイナミック ノイズ キャンセル	●	
反響する環境での快適性	●		スピーチ エンハンサー	●	
車の中でのことば	●		エコーブロック	●	
非常に騒がしい中でのことば	●		タップコントロール		
音楽	●	●	-Siri/Google アシスタント	●	●
騒音下での快適性	●	●	-ストリーミングの一時停止/再開	●	●
騒がしい中でのことば	●	●	-通話の受信/終了	●	●
静かな環境	●	●	ステレオズーム	●	●
メディア ことば + マイク	●	●	ウインドブロック	●	●
メディア 音楽 + マイク	●	●	サウンドリラックス	●	●
追加プログラム			モーションセンサー ヒアリング	●	●
最大追加プログラム数	4	4	デュオフォン	●	●
反響する環境での快適性	●		リアル イヤー サウンド	●	●
非常に騒がしい中でのことば	●	●	ロジャーと指向性設定	●	●
全方向(360°)からのことば	●	●	サウンドリカバー2	●	●
騒がしい中でのことば	●	●	ホイッスルブロック	●	●
静かな環境	●	●	ノイズブロック	●	●
騒音下での快適性	●	●	RogerDirect™(ロジャー ダイレクト)	●	●
音楽	●	●	ユーザー志向のチューニング	●	●
通常の電話	●	●	クイックシンク	●	●
カスタム プログラム	●	●	AOV	●	●
ストリーミング プログラム			耳鳴りバランス	●	●
ロジャー ダイレクト + マイク	●	●	自動順応マネージャ	●	●
パートナーマイク + マイク	●	●	環境バランス	●	●
通話 + マイク	●	●	微調整チャンネル	20	20

ヘルス機能

	オーディオ フィット	パラダイス RIC タイプ充電式
左右各々の補聴器装用時間	●	●
両耳装用補聴器の左右合計平均装用時間	●	●
さまざまな音環境での平均装用時間	●	●
歩数	●	●
活動レベル	●	●
歩行距離・走行距離	●	
心拍数	●	
装用時間の追加目標設定	●	●
歩数の追加目標設定	●	●

Bluetooth® のワード マークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
 iOS は Cisco, Inc. の商標です。
 Android は Google, Inc. の商標です。

フィッティング

オーディオ P-R フィット オーディオ P-R フィット トライアル	
フォナック ターゲット	7.3以上
ノアリンク ワイヤレス	●

音響カプリング

長さ

左右の異なる4つの長さで利用可(0、1、2、3)

耳せん

キャップ型耳せん

オープン型耳せん 3種類のサイズ(S, M, L)で入手可能

ベント付き耳せん(クリア) 3種類のサイズ(S, M, L)で入手可能

SP シェル

アクリル


フィッティング レンジ

M センサー レシーバ

P センサー レシーバ

●	●
●	
●	
●	
●	●

* オーデオ フィットに対応しているのは、8ピンのセンサー レシーバとセンサーSPシェルに限定されます。

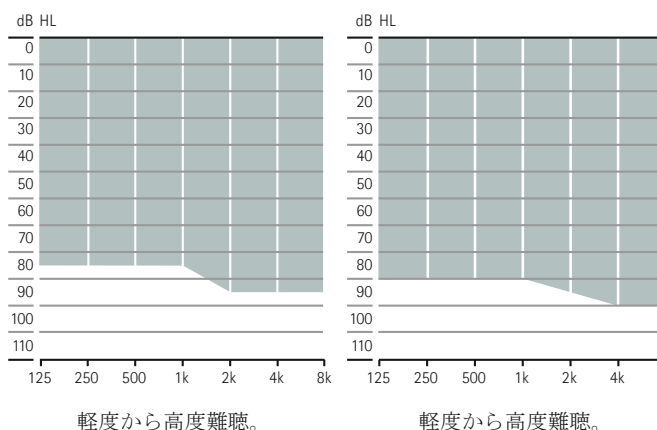

Phonak Audéo Fit Trial™ (フォナック オーデオ フィット トライアル)

新しいフォナック オーデオ P フィット トライアル補聴器は、専門家の推奨するパフォーマンスレベルに適合するよう、目的のクラスに速やかに設定できるようになっています。フォナック オーデオ P フィット トライアル補聴器1つに両クラスの技術が搭載されているので、初回診断時または補聴器修理中の代替品として聞こえのソリューションを提供する際、専門家は多くの選択肢を得られます。

フォナック オーデオ フィット 充電オプション



Phonak Charger Case Combi

Phonak Charger Case Combi は、充電器、乾燥キット、および保管ケースが1つにまとまった製品です。さらに、頑丈で防滴のハウジングにクリーニングツールが備わっています。

フォナック パワーパック

フォナック パワーパックは、充電式補聴器をいつでもどこでも充電するために、Phonak Charger Case Combi の底面に簡単に装着可能です。

フォナック オーデオ フィット Bluetooth® バージョン

ダイレクト コール/音声ストリーミング

Bluetooth® 4.2のワイヤレステクノロジーと、多くの旧式 Bluetooth 電話に対応

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。

ワイヤレス コミュニケーション ポートフォリオ

オーディオ P-R フィット オーディオ P-R フィット トライアル P90/P70

ワイヤレス アクセサリー	
テレビ コネクター	•
フォナック パートナーマイク	•
フォナック リモートコントロール	•
ロジャー	
RogerDirect™(ロジャー ダイレクト)	•
アプリ	
マイフォナック	•

詳細に関しては、www.phonakpro.com/audeoparadise をご覧ください。
ロジャー マイクロホンの詳細については、www.phonakpro.com/roger をご覧ください。
詳細に関しては、www.phonakpro.com/smartapps をご覧ください。

life is on

フォナックは、より良い聞こえが人々の健康に深くつながり、人生を豊かにするために欠かせないものと考えています。そのため、私たちは70年以上にわたり、補聴器やワイヤレス通信機器などの研究開発に情熱を傾けてきました。これからも、難聴に悩むすべての人々のアクティブで健康的な毎日を支え、心と豊かな感性を育むために、革新的な聞こえのソリューションをお届けします。

www.phonak.com



027-0656-17/V1.00/2022-01/NLG © 2022 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland



CE
0459