

포낙 오데오™ L.

제품 정보

포낙 오데오 L은 경도부터 심도 난청을 가진 사람을 위한 포괄적인 RIC 포트폴리오입니다. 포낙 오데오 L에는 3가지 디자인, 5가지 성능 수준, 5가지 외부 리시버(액티브벤트™ 리시버 포함)가 적용되어 있습니다.

포낙 루미티 플랫폼의 혁신적인 기술을 바탕으로 한 포낙 오데오 L 보청기는 유연하고 눈에 잘 띄지 않는 RIC 하우징을 선호하는 고객을 위한 솔루션입니다.



제품 설명



오데오 L-R
오데오 L-R
트라이얼
L90/L70/L50/L30/L20



오데오 L-RT
오데오 L-RT
트라이얼
L90/L70/L50/L30



오데오 L-RL
오데오 L-RL
트라이얼
L90/L70/L50/L30

멀티-기능 버튼		•	•	•
텔레코일			•	
블루투스®		•	•	•
방수 코팅		•	•	•
IP 등급		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
크기	길이(L) x 너비(W) x 높이(D)	27.7 x 12 x 8.1mm (1.09 x 0.47 x 0.32인치)	30.3 x 12.6 x 8.1mm (1.19 x 0.5 x 0.32인치)	29.5 x 12.9 x 9mm (1.16 x 0.51 x 0.35인치)
	무게	2.2g(0.08온스)	2.6g(0.09온스)	2.8g(0.1온스)
충전 시간 ²	0% ~ 100%	3시간	3시간	3시간
	0% ~ 80%	1.5시간	1.5시간	2시간
	30분 피팅	15분	15분	20분
S 리시버				
최대 출력(dB SPL)	2 cc 커플러	111	111	111
최대 이득(dB)	2 cc 커플러	47	47	47
주파수 범위(Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000
M 리시버				
최대 출력(dB SPL)	2 cc 커플러	114	114	114
최대 이득(dB)	2 cc 커플러	51	51	51
주파수 범위(Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000
MAV 리시버				
최대 출력(dB SPL)	2 cc 커플러	119	119	119
최대 이득(dB)	2 cc 커플러	50	50	50
주파수 범위(Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000
P 리시버				
최대 출력(dB SPL)	2 cc 커플러	122	122	122
최대 이득(dB)	2 cc 커플러	59	59	59
주파수 범위(Hz)		<100 - 6300	<100 - 6300	<100 - 6300
UP 리시버				
최대 출력(dB SPL)	2 cc 커플러	132	132	132
최대 이득(dB)	2 cc 커플러	71	71	71
주파수 범위(Hz)		<100 - 6100	<100 - 6100	<100 - 6100

하우징 색상



P1
샌드 베이지



H0
베이지



P3
샌달우드



P4
체스트넛



P5
삼페인



P6
실버 그레이



P7
그래파이트
그레이



P8
벨벳 블랙

¹ IP68은 보청기에 내수성과 방진성이 있음을 나타냅니다. IEC6052 표준에 정의된 대로 테스트 챔버에서 8시간, 수심 1미터의 물 속에 60분 동안 담근 후에도 손상되지 않았음을 나타냅니다.
² 실제 충전 시간은 배터리 잔량에 따라 다르지만 3시간을 초과하지 않습니다.



성능 수준

	Premium	Advanced	Standard	Essential	Low Essential
오토센스 OS™ 5.0					
반향음 환경	•				
차안에서의 어음 환경	•				
큰 소음 속 어음 환경	•				
음악 환경	•	•			
소음 환경	•	•	•		
소음 속 어음 환경	•	•	•	•	•
조용한 환경	•	•	•	•	•
미디어 스피치 + mic	•	•	•	•	•
미디어 음악 + mic	•	•	•	•	
추가 프로그램					
추가가능 최대 프로그램 수	4	4	4	4	4
에코 환경	•				
큰 소음 속 어음 환경	•	•			
스피치 인 360°	•	•			
소음 속 어음 환경	•	•	•	•	•
조용한 환경	•	•	•	•	•
소음 환경	•	•	•	•	
음악 환경	•	•	•	•	
음향 전화	•	•	•	•	•
사용자 설정 프로그램	•	•	•	•	•
스트리밍 프로그램					
로저다이렉트 + 마이크	•	•	•	•	
파트너마이크 + 마이크	•	•	•	•	
전화 통화 + 마이크	•	•	•	•	•

	Premium	Advanced	Standard	Essential	Low Essential
기능					
스피치센서	•				
스피치 인핸서	•				
스테레오줌 2.0	•	•			
다이나믹 노이즈 캔슬링	•	•			
모션 센서 히어링	•	•	•		
로저 다이렉트™	•	•	•	•	
로저 및 방향성 스트리밍	•	•	•	•	
울트라줌	•	•	•	•	•
에코블럭	•				
탭 컨트롤					
- 시리/구글 어시스턴트	•	•			
- 스트리밍 일시 중지/다시 시작	•	•			
- 전화 수락/종료	•	•			
사운드릴렉스	•	•			
듀오폰	•	•	•		
리얼 이어 사운드	•	•	•		
건강 기능	•	•	•	•	
원드블럭	•	•	•	•	
사용자 기본 설정 조절	•	•	•	•	
이명 밸런스	•	•	•	•	
자동 적응	•	•	•	•	
환경음 밸런스	•	•	•	•	
사운드리커버2	•	•	•	•	•
휘슬블럭	•	•	•	•	•
노이즈블럭	•	•	•	•	•
퀵싱크	•	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•	•
미세 조정 채널	20	20	16	12	8

스마트스피치™ 기술

피팅

	오데오 L-R 오데오 L-R 트라이얼	오데오 L-RT 오데오 L-RT 트라이얼	오데오 L-RL 오데오 L-RL 트라이얼
포낙 타겟	8.0 이상	8.0 이상	8.0 이상
Noahlink Wireless	•	•	•

Bluetooth® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표로, Sonova AG는 라이선스 계약에 따라 이러한 마크를 계속 사용합니다.



음향 결합

길이

좌,우 4가지 길이(0, 1, 2, 3) 제공

돔

캡 돔

오픈 돔 세 가지 크기(S, M, L)로 사용 가능

벤티드 돔 세 가지 크기(S, M, L)로 사용 가능

파워 돔 세 가지 크기(S, M, L)로 사용 가능

슬림팁*

아크릴

실리콘

티타늄 AV

범용 AV 4가지 형태(A, B, C, D)로 사용 가능


c셀

아크릴

티타늄

피팅 범위

*외에도 길이 추가 옵션 사용 가능

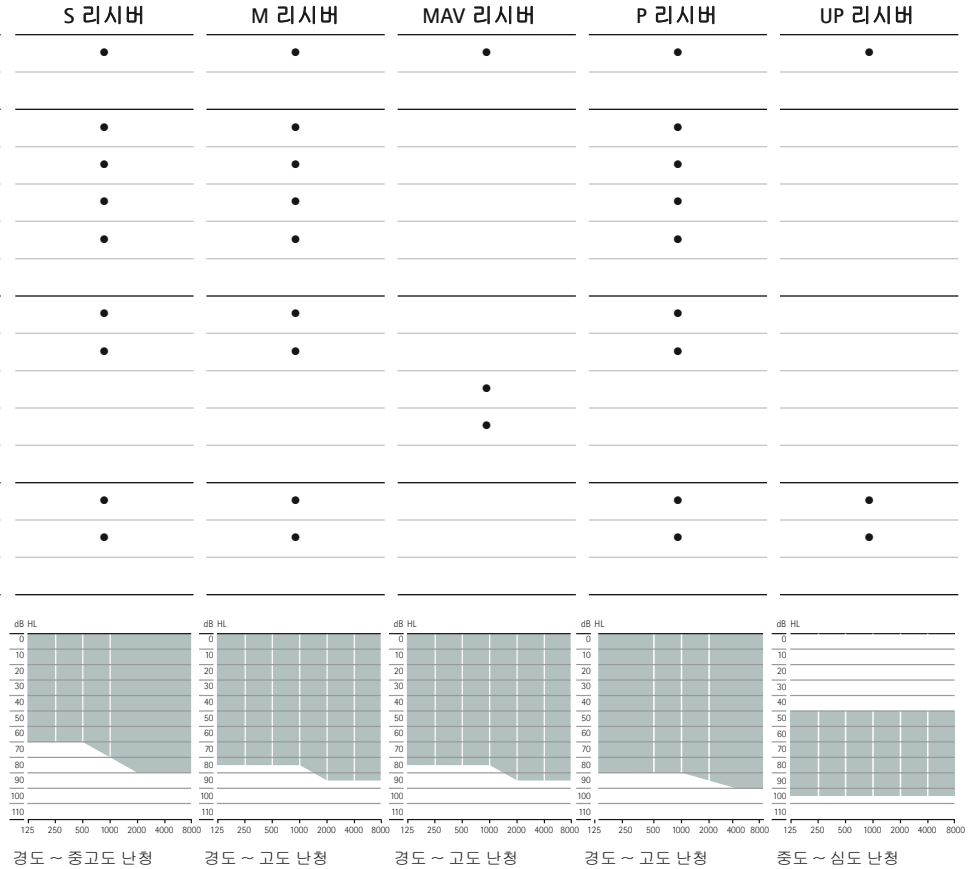

스마트스피치™ 기술

스마트스피치 기술은 다양한 청취 환경¹에서 어음 이해도를 개선하고 청취 노력을 줄여주는 기능을 설계하기 위해 포낙에서 헌신해 온 결과입니다. 포낙은 스피치 인핸서(어음 강화), 다이내믹 노이즈 캔슬링(동적 소음 제거), 모션 센서 히어링 등의 기술을 가지고 있습니다. 포낙 오데오™ 루미티에서 액티브벤트™ 리시버와 로저다이렉트™ 기술의 기존 이점 외에 소개할 두 가지 새로운 기능은 스테레오줌 2.0과 스피치센서입니다.

포낙 오데오 L 트라이얼™

포낙 오데오 L 트라이얼 보청기는 고객의 권장사항에 맞추기 위해 원하는 성능 수준으로 빠르게 설정할 수 있습니다. 포낙 오데오 L 트라이얼 보청기는 모든 레벨의 보청기 기술을 보유하고 있으며, 이를 통해 첫 예약에서 청취 솔루션을 제공하거나 수리 기간에 재공할 수 있는 다양한 옵션을 이용할 수 있습니다.

¹ Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News, www.phonakpro.com/evidence 에서 검색, 2022년 2월 액세스.

Latzel, M. & Hobi, S. (2022) Receiver with mechanical vent provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. Phonak Field Study News, 준비 중. 2022년 중반으로 예상됨.

Thibodeau L. M. (2020) Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31(6), 404-411.

포낙 오데오 L 충전 옵션



포낙 충전기 이즈(Ease)
 포낙 충전기 이즈(Ease)는 충전 슬롯에 자석이 있어 오데오 L-R과 RT를 쉽게 삽입하고 제거할 수 있게 해주는 소형 충전기입니다. 표준 USB-C 충전 포트를 사용하며, 전원이 공급되면 표시등이 켜집니다.



포낙 충전기 케이스 고(Go)와 포낙 라이프 충전기
 오데오 L-RL을 위한 옵션은 두 가지입니다. 포낙 충전기 케이스 고(Go)에는 양쪽 보청기를 최대 3회 충전할 수 있는 내장형 배터리가 있습니다. 두 충전기 모두 표준 USB-C 충전 포트를 사용하며, 전원이 공급되면 후면의 LED가 켜집니다.

포낙 오데오 L 블루투스® 버전

다이렉트 통화/오디오 스트리밍	블루투스® 4.2 무선 기술 및 대부분의 구형 블루투스 휴대폰
------------------	------------------------------------

Bluetooth® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표로, Sonova AG는 라이선스 계약에 따라 이러한 마크를 계속 사용합니다.

무선 통신 포트폴리오

	오데오 L-R 오데오 L-R 트라이얼 L90/L70/L50/L30	오데오 L-RT 오데오 L-RT 트라이얼 L90/L70/L50/L30	오데오 L-RL 오데오 L-RL 트라이얼 L90/L70/L50/L30	오데오 L-R 오데오 L-R 트라이얼 L20
무선 액세스리				
TV 커넥터	•	•	•	•
포낙 파트너마이크	•	•	•	
포낙 리모트 컨트롤	•	•	•	
로저				
로저 다이렉트™	•	•	•	
앱				
마이포낙	•	•	•	•

자세한 내용은 www.phonakpro.com/audeolumity에서 확인하십시오.
 로저 마이크에 대한 자세한 내용은 www.phonakpro.com/roger에서 확인하십시오.
 e솔루션에 대한 자세한 내용은 www.phonakpro.com/smartapps에서 확인하십시오.



life is on

1947년부터 포낙은 새로운 음향 세계를 열어 삶의 질을 높게 유지하는 데 전념하고 있습니다. 초창기 포낙의 설립 이념은 “잘 듣는 것이 행복이며 삶을 최대한 즐길 수 있는 필수 요소”라는 것이었습니다. 실제로 청각은 사회적, 정서적, 인지적, 신체적 건강과 직접적으로 연결되어 있습니다. 지금도, 앞으로도 포낙은 계속 성장하여 혁신적인 청각 솔루션의 가장 광범위한 포트폴리오를 제공할 것입니다. 그리고 청각 전문가들과 함께 포낙은 가장 중요한 것, 즉 어음 이해도 개선, 삶의 변화, 사회 전체에 미치는 긍정적인 영향에 계속 초점을 맞추고 있습니다.

www.phonak.com



027-0667-19(V3.00/2022-08/NLG © 2022 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · 스위스



0459