

Phonak Marvel™ draadloze accessoires

Productinformatie



Phonak TV Connector is een gebruiksvriendelijke plug-and-play-oplossing voor Phonak Marvel-hoortoestellen. De Marvel-hoortoestellen maken gebruik van de bedrijfseigen Phonak AirStream™ Technology, waardoor ze de beste geluidskwaliteit bieden bij het streamen van tv- en stereogeluid. Bovendien kunnen gebruikers dankzij de directe verbinding met iOS- en Android-telefoons nu nog meer uit hun Marvel-hoortoestellen halen met de gebruiksvriendelijke Phonak Remote app.

TV Connector: het gebruiksvriendelijke streaming-apparaat voor tv en muziek



De **TV Connector** is de plug-and-play-interface voor tv en andere audio-bronnen en ondersteunt de directe verbinding met de Phonak Marvel-hoortoestellen. Deze is ontwikkeld om de installatie en het gebruik te vereenvoudigen en biedt een uitstekende geluidskwaliteit, door gebruik te maken van AirStream™ Technology. De TV Connector kan audiosignalen over een afstand van maximaal 15 meter naar een onbeperkt aantal verbonden luisteraars tegelijkertijd streamen.


Funcieoverzicht

- Naar beide hoortoestellen streamen in stereogeluid
- AirStream-technologie voor een verbeterde geluidskwaliteit, de laagste latentie en een makkelijkere manier om verbinding te maken
- Alle compatibele hoortoestellen binnen bereik in 'één klik' verbinden, zonder dat er instellingen op het hoortoestel moeten worden aangepast
- Tegelijkertijd streamen naar een onbeperkt aantal gebruikers
- Voor meer discretie kan deze achter de tv worden geplaatst

Compatibiliteit

- De TV Connector is compatibel met alle draadloze Phonak-hoortoestellen met directe connectiviteit.

Hoe te gebruiken

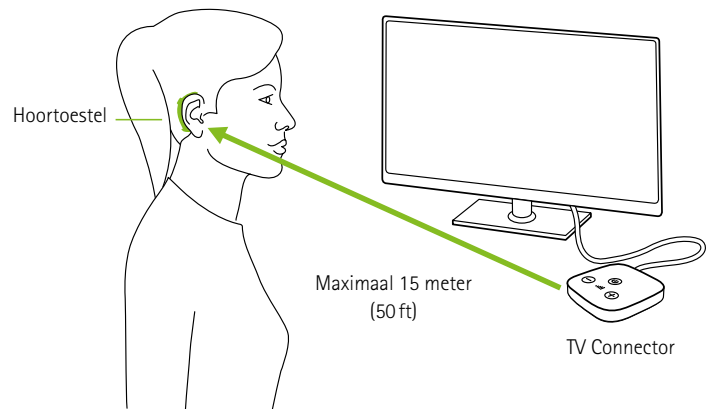

Ga naar www.phonakpro.com/tvconnector voor video's over hoe u de TV Connector installeert en gebruikt

Technische gegevens



- 1 Verbindingsknop
- 2 Indicatorlampje (LED)
- 3 microUSB-voedingspoort
- 4 Audio-aansluiting voor optische (Toslink) of analoge (3,5 mm) kabel
- 5 Aan/uit-knop
- 6 Volume omhoog- en omlaag-knoppen (kalibratie)

Afmetingen kleine behuizing (L: 63 mm x B: 63 mm x H: 12 mm)

Phonak Remote: de vereenvoudigde afstandsbediening-app




De **Phonak Remote** app is ontwikkeld om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren voor meer gemak wanneer een afstandsbediening wordt gebruikt. Met de afstandsbediening kunt u de functies van uw hoortoestel gemakkelijk bedienen. Deze worden weergegeven op de smartphone en u heeft er geen extra apparatuur voor nodig die u constant bij u moet dragen.


Functieoverzicht

- Volume-aanpassingen van de hoortoestellen voor beide zijden of voor elke zijde afzonderlijk
- Programmalijs met directe selectie van de beschikbare hoortoestelprogramma's
- De mogelijkheid om de naam van de beschikbare hoortoestelprogramma's aan te passen in de app
- Selectie van beschikbare audiobronnen die zijn verbonden met de hoortoestellen
- Eenvoudige aanpassing van de Streaming/Mic. balans van het hoortoestel tijdens het streamen vanuit een audiobron
- Afzonderlijke aanpassing van het volume van de Tinnitus Noiser, indien beschikbaar op het hoortoestel
- Controle van de gemiddelde draagtijd van de aangesloten hoortoestellen via de app
- Accu-laadstatus (oplaadbare hoortoestellen)
- Configuratie voor automatisch aan wanneer het hoortoestel uit de oplader wordt gehaald (oplaadbare hoortoestellen)


Ga naar www.phonakpro.com/remoteapp voor video's over hoe u de Phonak Remote app op uw telefoon installeert en gebruikt

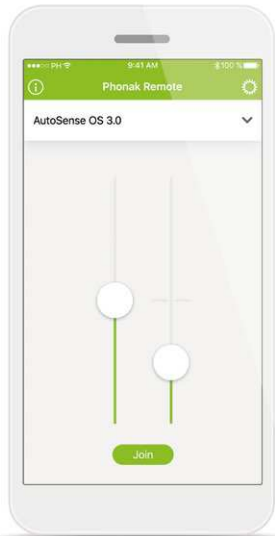


Volume-aanpassingen voor elke zijde

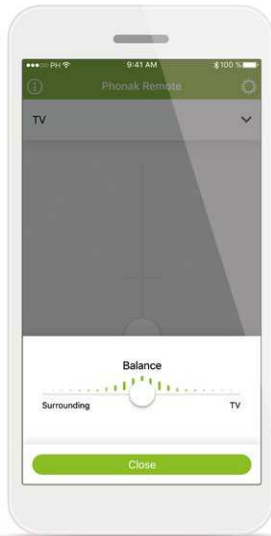

Streaming/Mic. balans van een audiosignaal

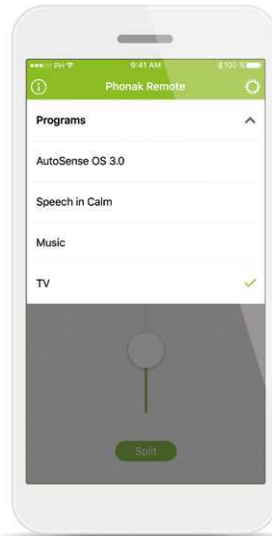

Programmasselectie en -aanpassing

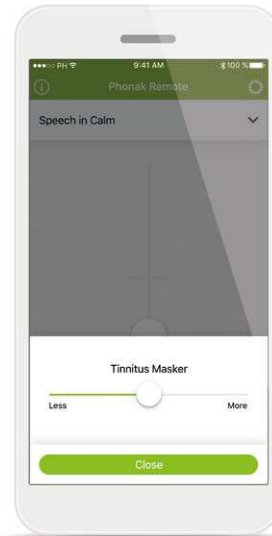

Volume Tinnitus ruismaskering

Compatibiliteit

- De Phonak Remote app is compatibel met Phonak-hoortoestellen met Bluetooth®.
- Phonak Remote kan worden gebruikt met telefoons met Bluetooth® Low-Energy (BT-LE) en is compatibel met iPhone 5s en nieuwer met iOS versie 10.2 of nieuwer.
- Phonak Remote kan worden gebruikt op Android-apparaten die GMS-gecertificeerd (Google Mobile Services) zijn, waarop Bluetooth 4.2 en Android OS 6.0 en nieuwer worden ondersteund.

Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen. Life is on.

www.phonak.com