

# Phonak Naída™ Marvel



## Liefde op het eerste geluid

Ga voor meer informatie naar [www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com)

# Met Phonak Naída Marvel introduceren we multifunctionele hoortoestellen die een 'liefde op het eerste geluid'-ervaring bieden

Wanneer we het hebben over liefde op het eerste geluid, bedoelen we niet alleen de eerste keer dat uw cliënten Phonak Naída Marvel uitproberen, maar elke keer dat ze de hoortoestellen dragen. Vanaf het moment dat u voor het eerst hoortoestellen aanpast, kunnen ze ongeëvenaarde hoorprestaties verwachten.

Deze nieuwe generatie Phonak-technologie herkent en past zich automatisch aan om precies aan te sluiten bij meer luistersituaties dan ooit tevoren<sup>1</sup>. Met AutoSense OS™ 3.0 en Binaural VoiceStream Technology™ kunnen uw cliënten genieten van een verbeterd geheugengebruik en minder luisterinspanning in rumoer.<sup>2</sup>

## Belangrijkste kenmerken:

- Betere spraakverstaanbaarheid in rumoer met Roger<sup>3</sup>
- Minder luisterinspanning in rumoer\*<sup>2</sup>
- Verbeterd geheugengebruik in lawaai\*<sup>2</sup>
- Het eerste Super Power-hoortoestel met classificatie van gestreamde audiosignalen<sup>1</sup>

## Betrouwbaar

Naída is het meestvertrouwde Power-hoortoestel.<sup>4</sup> Dankzij de uitstekende techniek en het uitmuntende ontwerp levert de Naída Marvel het vermogen dat nodig is om ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies te beheersen. Sinds we ons eerste Power-hoortoestel in 1978 hebben uitgebracht, hebben we continu hooroplossingen ontwikkeld om de levens van mensen te verbeteren. De nieuwe Naída M-SP, die is gebaseerd op bewezen Marvel technologie, omvat een hoogwaardig Power-hoortoestel met speciale, kwalitatief hoogstaande technologieën die altijd het benodigde vermogen bieden om uw cliënten te laten omgaan met hun gehoorverlies.

Mensen met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies zijn afhankelijk van hun hoortoestel en hebben een oplossing nodig die de noodzakelijke prestaties biedt. Dankzij de robuuste behuizing kunnen uw cliënten hun dagelijkse activiteiten blijven uitvoeren in de wetenschap dat de hoortoestellen betrouwbaar blijven functioneren en bestand zijn tegen de lastigste luistersituaties.




# Productbeschrijving



Naída M-SP  
Naída M-SP Trial  
M90/M70/M50/M30

Batterijmaat		13	
Multifunctieknop		•	
Luisterspoel		•	
Bluetooth®		•	
Nano-coating		•	
IP-certificering		IP68 <sup>5</sup>	
Afmetingen	L x B x D	40,0 x 16,9 x 8,5	
	Gewicht	4,4 g	
		HE11	HE11 680
Max. uitgangsvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	139	133
Max. gain (dB)	2 cc coupler	81	75
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - > 5000	< 100 - > 5000
Stroomverbruik (mA)		2,1	2,0

## Aanpasbereik

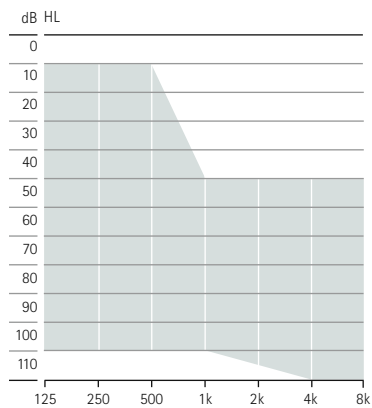

Matig tot zeer ernstig gehoorverlies,  
alle audiometrische configuraties

■ HE11 680

# Kleuren behuizing



P1  
Sand Beige



P3  
Sandalwood



P4  
Chestnut



P5  
Champagne



P6  
Silver Gray



P7  
Graphite Gray



P8  
Velvet Black



T7  
Alpine White



HO  
Beige

## Prestatieniveaus

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
<b>AutoSense OS 3.0</b>				
Rustige situatie	•	•	•	•
Spraak in lawaai	•	•	•	•
Comfort in lawaai	•	•	•	
Muziek	•	•		
Spraak in veel lawaai	•			
Spraak in de auto	•			
Comfort in echo	•			
Media spraak + mic	•	•	•	•
Media muziek + mic	•	•	•	•
<b>Bijkomende programma's</b>				
Max. aantal bijkomende programma's	3	3	3	3
Comfort in echo	•			
Spraak in veel lawaai	•	•		
Spraak in 360°	•	•		
Spraak in lawaai	•	•	•	•
Rustige situatie	•	•	•	•
Comfort in lawaai	•	•	•	•
Muziek	•	•	•	•
Akoestische telefoon	•	•	•	•
Op maat gemaakt programma	•	•	•	•
<b>Streamingprogramma's</b>				
RogerDirect + mic	•	•	•	•
PartnerMic + mic	•	•	•	•
Telefoonoproep + mic	•	•	•	•

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
<b>Functies</b>				
UltraZoom	•	•	•	•
SNR-boost	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•
Luidheidsvoorkeurregeling	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•	
Kanalen voor fijnafstelling	20	16	12	8
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
WindBlock	•	•		
EchoBlock	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync	•	•	•	•
Acoustically Optimized Venting	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
auto Acclimatization	•	•	•	•
Streaming/Mic. balans	•	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•	•
Roger en directioneel-instelling	•	•	•	

## Aanpassing

Naída M-SP  
Naída M-SP Trial  
M90/M70/M50/M30

Phonak Target	6.2 of hoger
Noahlink Wireless	•
Noahlink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

# Akoestische koppeling

Geluidsuitgang	Oorhaak	Gedempt (HE11 680) of ongedempt (HE11), transparant	
	SlimTube 4.0	Beschikbaar in links en rechts en vijf verschillende lengtes (00,0,1,2,3)	
Oorstukje voor SlimTube	Eartip	Cap dome	
		Open dome	beschikbaar in drie formaten (S, M, L)
		Vented dome	beschikbaar in drie formaten (S, M, L)
		Power dome	beschikbaar in drie formaten (S, M, L)
	SlimTip	Acryl	
		Siliconen	
Titanium			
Oorstukje voor oorhaak	Oorstukje		
	Universele eartip		

## Phonak Trial™

De nieuwe Phonak Naída M Trial hoortoestellen kunnen snel worden ingesteld op het vereiste prestatieniveau dat aansluit bij uw aanbevelingen. Dit biedt de mogelijkheid om uw cliënt al bij het eerste gesprek te voorzien van een optimale hooroplossing of een vervanger te bieden als het hoortoestel van de cliënt gerepareerd wordt.

- 1 Rodrigues, T., & Liebe, S. (2018). AutoSense OS™ 3.0. The new & enhanced automatic operating system. Phonak Insight, afkomstig van [www.phonakpro.com/evidence](http://www.phonakpro.com/evidence), bekeken op 19 februari 2020.
- 2 Winneke, A., Schulte, M. & Latzel, M. (2019). The effect of spatial noise processing in hearing aids on neural correlates of listening and memory effort: an EEG study. Manuscript in voorbereiding. Wordt begin 2020 verwacht.
- 3 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210
- 4 Taphuntsang, D. (2017) Market Research ID 924. Neem contact op met [marketinsight@phonak.com](mailto:marketinsight@phonak.com) als u meer informatie wilt. Gebaseerd op het klanttevredenheidsonderzoek 2017.
- 5 IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van onophoudelijke onderdompeling in 1 meter water gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de norm IEC60529.

# Phonak Naída Marvel Bluetooth®-versies

---

## Rechtstreekse telefoongesprekken/audiostreaming

---

Draadloze Bluetooth® 4.2-technologie en de meeste oudere telefoons.

---

Het Bluetooth®-merk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

## Draadloze Communicatie Portfolio

		Naída M-SP Naída M-SP Trial M90/M70/M50/M30
Draadloos accessoire	TV Connector	•
	Phonak PartnerMic	•
	Phonak RemoteControl	•
Roger	Roger microfoons	•
App	myPhonak	•
	Phonak Guide	•


Ga naar [www.phonakpro.com/naidamarvel](http://www.phonakpro.com/naidamarvel) voor meer informatie over Naída Marvel

Ga naar [www.phonakpro.com/roger](http://www.phonakpro.com/roger) voor meer informatie over Roger microfoons

Ga naar [www.phonakpro.com/smartapps](http://www.phonakpro.com/smartapps) voor meer informatie over Phonak apps

## Wat maakt Marvel nog wonderbaarlijker?

Naída Marvel is de eerste Super Power AHO met handsfree functionaliteit die geluid direct streamt vanuit iOS, Android of andere apparaten met Bluetooth. Uw cliënten kunnen genieten van handsfree telefoongesprekken via ingebouwde microfoons. Daarnaast kunnen telefoonsignalen ook via de hoortoestellen worden afgespeeld. Naída biedt stereo-geluidskwaliteit voor het streamen van muziek, video's, e-books, podcasts en veel meer.

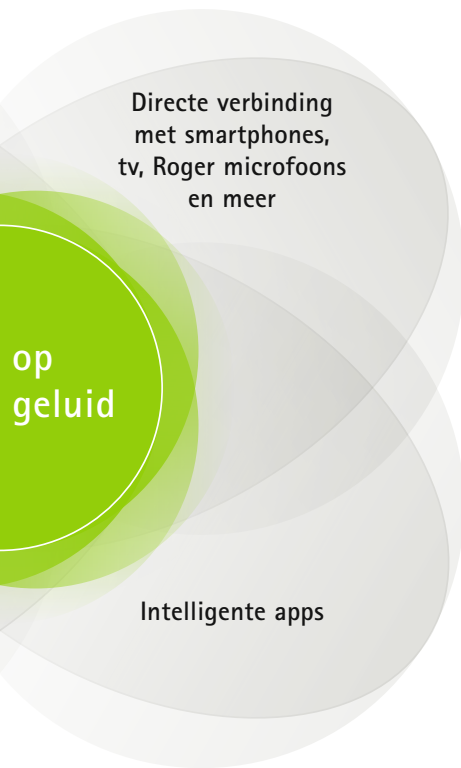

Naída bevat bedrijfseigen AirStream™ Technology waarmee geluid vanuit elke tv en elk stereosysteem kan worden gestreamd. Uw cliënten kunnen genieten van tv-programma's en films met behulp van de TV Connector: een eenvoudige plug-and-play oplossing. Het lijkt op het gebruik van draadloze hoofdtelefoons, maar is misschien nog wel beter omdat de Marvel hoortoestellen nu onderscheid maken tussen gestreamde spraak- en muzieksignalen en zichzelf automatisch aanpassen voor een optimale geluidskwaliteit.

### Belangrijkste kenmerken:

- Verbinding met smartphones - iOS en Android
- Verbinding met veel dagelijks gebruikte elektronica
- Hoortoestellen die gebruikt worden als draadloze stereoheadset
- Extra lange streamingtijd dankzij AirStreamTechnology

Roger™ technologie verbetert de hoorprestaties in lawaai en op afstand.<sup>3</sup> Phonak Naída Marvel beschikt over RogerDirect™, waarmee Roger technologie rechtstreeks naar Marvel hoortoestellen kan streamen zonder dat er een externe ontvanger bevestigd hoeft te worden.

### Belangrijkste kenmerken:

- Marvel en Roger: de optimale oplossing voor uitdagende luistersituaties
- Ontworpen om spraakverstaan te verbeteren in lawaai en over afstand
- Discrete en aantrekkelijke oplossingen

## Apps-oloot fantastisch!

Het nieuwe digitale serviceplatform van Phonak is bedoeld om beter in de persoonlijke luisterbehoeften van de cliënten te kunnen voorzien. Dankzij de **myPhonak-app** kunnen uw cliënten ervoor kiezen om informatie met u te delen, u kunt hun luisterervaring in realtime aanpassen, en met de geavanceerde afstandsbedieningsfuncties kunnen uw cliënten hun hoortoestellen aanpassen aan hun persoonlijke behoeften.

### Belangrijkste kenmerken:

- Realtime geluidsaanpassing en personalisatie
- Realtime ondersteuning op afstand via video

# Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen. Life is on.

[www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com)