

Phonak Sky™ Marvel



Liefde op het eerste geluid

Ga voor meer informatie naar www.phonakpro.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Sky Marvel bevat geavanceerde technologie voor optimale geluidsprestaties en zorgt bij alle aspecten van een kinderleven voor comfort, veiligheid en robuustheid.

Met het nieuwe portfolio van Sky Marvel introduceren we een unieke combinatie van de eerste technologische innovaties en essentiële functies voor kinderen ter wereld. Wij streven ernaar om kinderen alleen de allerbeste oplossingen voor spraak- en taalontwikkeling, spraakverstaanbaarheid en gebruiksgemak te bieden. Sky Marvel is ontwikkeld om de hoeveelheid en kwaliteit van hoorbare input te verhogen, en ondersteunt de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind met liefde vanaf het allereerste geluid.

Helder, rijk geluid

Het eerste besturingssysteem ter wereld dat specifiek ontworpen is voor kinderen.

AutoSense Sky OS 3.0 is ontwikkeld om de uitdagende luistersituaties te herkennen waarin kinderen elke dag worden blootgesteld en om de juiste combinatie van adaptief lawaai management te bieden voor meer comfort en minder luisterinspanning.¹ Met Sky Marvel introduceren we AutoSense Sky OS 3.0 die nu ook gestreamde signalen classificeert. Dankzij dit, ontvangen kinderen helder, rijk geluid wanneer spraak gestreamd wordt en optimale geluidskwaliteit wanneer muziek gestreamd wordt.

Verbinding met smartphones, Roger™ microfoons en meer

Streamt rechtstreeks vanuit zowel iOS® als Android™

In tegenstelling tot andere hoortoestellen voor kinderen, maakt Sky Marvel rechtstreeks verbinding met elk soort smartphone en apparaat met Bluetooth®. Het hoortoestel ondersteunt dubbele koppelingen en streamt audio naar beide oren. In een wereld waar moderne apparaten een centrale rol spelen in het sociale leven en de educatie van een kind, maakt Sky Marvel intuïtief toegang en stereo-geluidskwaliteit mogelijk voor het streamen van spraak, apps, muziek, e-books en nog veel meer.




Productbeschrijving



Sky M-M
Sky M-M Trial
M90/M70/M50/M30

Accu	312		
Multifunctieknop	•		
Luisterspoel	•		
Bluetooth®	•		
Nano-coating	•		
IP-certificering	IP68		
Afmetingen (L x B x D) mm	31,3 x 14,1 x 7,3		
inch	1,23 x 0,56 x 0,29 inch		
Gewicht g/oz	2,18 / 0,077		
Oplaadtijd	0% tot 100%		
	0% tot 80%		
	30min. aanpassing		
Max. uitgangsvermogen (2 cc coupler)	SlimTube 4.0	HE11 680	
	dB SPL	122	128
	dB	58	63
Frequentiebereik Hz	< 100 - 6500	< 100 - 8000	
Stroomverbruik mA	1,5	1,6	

Aanpasbereik

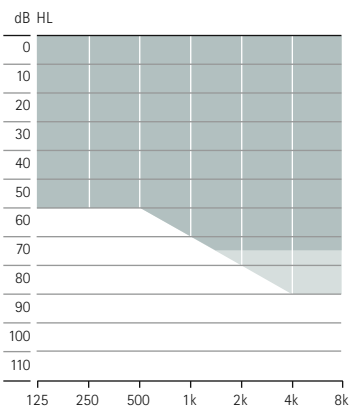


Mild tot gemiddeld gehoorverlies,
alle audiometrische configuraties



Sky M-PR
Sky M-PR Trial
M90/M70/M50/M30

Accu	geïntegreerde accu		
Multifunctieknop	•		
Luisterspoel	•		
Bluetooth®	•		
Nano-coating	•		
IP-certificering	IP68		
Afmetingen (L x B x D) mm	36,7 x 16,4 x 8,5		
inch	1,44 x 0,65 x 0,33 inch		
Gewicht g/oz	3,71 / 0,131		
Oplaadtijd	3 uur		
	1,5 uur		
	10 min.		
Max. uitgangsvermogen (2 cc coupler)	SlimTube 4.0	HE11 680	
	dB SPL	127	130
	dB	60	66
Frequentiebereik Hz	< 100 - 7000	< 100 - 6800	
Stroomverbruik mA	2,1	2,0	

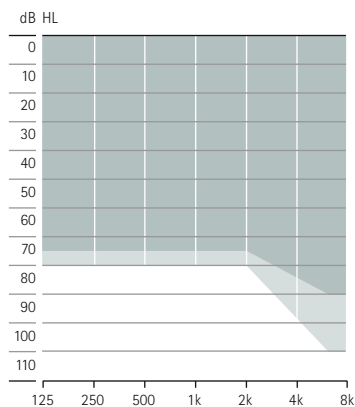


Mild tot ernstig gehoorverlies,
alle audiometrische configuraties



Sky M-SP
Sky M-SP Trial
M90/M70/M50/M30

Accu	13		
Multifunctieknop	•		
Luisterspoel	•		
Bluetooth®	•		
Nano-coating	•		
IP-certificering	IP68		
Afmetingen (L x B x D) mm	40 x 16,9 x 8,5		
inch	1,57 x 0,67 x 0,33 inch		
Gewicht g/oz	4,4 / 0,155		
Oplaadtijd	0% tot 100%		
	0% tot 80%		
	30min. aanpassing		
Max. uitgangsvermogen (2 cc coupler)	HE11	HE11 680	
	dB SPL	139	133
	dB	81	75
Frequentiebereik Hz	< 100 - 5000	< 100 - 5000	
Stroomverbruik mA	2,1	2,0	

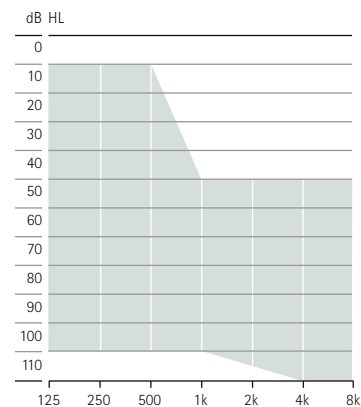

Mild tot zeer ernstig gehoorverlies,
alle audiometrische configuraties

■ SlimTube 4.0
■ HE11 680

Behuizing- en toonbochtkleuren

Behuizing



H0
Beige



P1
Sand Beige



P3*
Sandalwood



P4*
Chestnut



P5*
Champagne



P6
Silver Gray



P8
Velvet Black



Q2
Electric Green



Q3
Caribbean Pirate



T3
Precious Pink



T7
Alpine White



M6
Lava Red



M7
Blue Ocean



M8
Majesty Purple

Toonbocht



R1
Groen



R2
Geel



R3
Pink



Q6
Blauw



I3
Transparant



Q7
Paars



R4
Oranje

* De kleuren P3, P4 en P5 zijn niet beschikbaar voor het prestatieniveau M30.

Prestatieniveaus

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
AutoSense Sky OS 3.0				
Rustige situatie	•	•	•	•
Spraak in lawaai	•	•	•	•
Comfort in lawaai	•	•	•	
Muziek	•	•		
Spraak in veel lawaai ³	•			
Spraak in de auto	•			
Comfort in echo	•			
Media spraak + mic	•	•	•	•
Media muziek + mic	•	•	•	•
Bijkomende programma's				
Max. aantal bijkomende programma's	3	3	3	3
Comfort in echo	•			
Spraak in veel lawaai	•	•		
Spraak in 360°	•	•		
Spraak in lawaai	•	•	•	•
Rustige situatie	•	•	•	•
Comfort in lawaai	•	•	•	•
Muziek	•	•	•	•
Akoestische telefoon	•	•	•	•
Op maat gemaakt programma	•	•	•	•
Streamingprogramma's				
RogerDirect + mic	•	•	•	•
PartnerMic + mic	•	•	•	•
Telefoonoproep + mic	•	•	•	•

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
Functies				
UltraZoom	•	•	•	•
SNR-boost	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•
Luidheidsvoorkeurregeling	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•	
Kanalen voor fijnafstelling	20	16	12	8
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
WindBlock	•	•		
EchoBlock	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync	•	•	•	•
Acoustically Optimized Venting	•	•	•	•
auto Acclimatization	•	•	•	•
Streaming/Mic. balans	•	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•	•
Roger en directioneel-instelling	•	•	•	

Aanpassing

	Sky M-M Sky M-M Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-PR Sky M-PR Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-SP Sky M-SP Trial M90/M70/M50/M30
Phonak Target	6.1 of hoger	6.1 of hoger	6.2 en hoger
Noahlink Wireless	•	•	•
Noahlink			•
HI-PRO en HI-PRO 2			•

Akoestische koppeling

Geluidsuitgang	Standaard toonbocht	Gedempt (HE 11 680) transparant en 6 aanvullende kleuren voor kinderen (zie pagina 4) voor Sky M-M en Sky M-PR Ongedempt (HE 11) alleen in transparante kleur voor Sky M-SP	
	Kindveilige toonbocht	Mini gedempt (HE 11 680) transparant en 6 aanvullende kleuren voor kinderen (zie pagina 4) voor Sky M-M en Sky M-PR Mini ongedempt (HE 11) alleen in transparante kleur voor Sky M-SP	
	SlimTube 4.0	Beschikbaar in links en rechts en vijf verschillende lengtes (00, 0, 1, 2, 3)	
Oorstukje voor SlimTube	Eartip	Cap dome	
		Open dome	beschikbaar in drie formaten (S, M, L)
		Vented dome	beschikbaar in drie formaten (S, M, L)
		Power dome	beschikbaar in drie formaten (S, M, L)
	SlimTip™	Acryl	
		Siliconen	
		Titanium	
Oorstukje voor toonbocht	Oorstukje		
	Universele eartip		

Phonak Sky Marvel Trial

De nieuwe Phonak Sky M Trial hoortoestellen kunnen snel worden ingesteld op het vereiste prestatieniveau dat aansluit bij uw aanbevelingen. De verschillende niveaus in technologie die beschikbaar zijn in één Phonak Sky M Trial-hoortoestel bieden u een scala aan opties om al bij de eerste afspraak de juiste hooroplossing aan te bieden of te verbeteren tijdens reparaties.

Phonak Charger BTE RIC

Deze oplader is geschikt voor alle oplaadbare Marvel AHO- en RIC-hoortoestellen. De oplader bevat een ruimte voor grote oorstukjes, een oplaadopening voor USB-C en een indicatielicht



Phonak Sky M Bluetooth®-versies

Rechtstreekse telefoongesprekken/audiostreaming

Draadloze Bluetooth® 4.2-technologie en de meeste oudere telefoons.

Draadloze Communicatie Portfolio

		Sky M-M Sky M-M Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-PR Sky M-PR Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-SP Sky M-SP Trial M90/M70/M50/M30
Draadloos accessoire	TV Connector	•	•	•
	Phonak PartnerMic™	•	•	•
	Phonak RemoteControl	•	•	•
Roger™	Roger microfoons	•	•	•

Kijk voor meer informatie op:



www.phonakpro.com/skymarvel



www.phonakpro.com/roger



Streamt rechtstreeks vanaf Roger microfoons

Met RogerDirect™ hebben kinderen nu toegang tot Roger technologie zonder een externe ontvanger nodig te hebben. Roger ontvangers kunnen draadloos geïnstalleerd worden op de Sky Marvel-hoortoestellen. Hierdoor worden alle complicaties met ontvanger-compatibiliteit geëlimineerd. Deze ongeëvenaarde combinatie wordt nu aangeboden in het kleinste hoortoestel ooit, dat kinderen gemakkelijker toegang biedt tot meer woorden en gesprekken*.² Sky met Roger is nu tot 42% kleiner en 32% lichter dan de vorige generatie.*

Oplaadbaar

Nadat de Sky M-PR slechts 3 uur is opgeladen, kan uw kind de hele dag horen en wel 10 uur luisteren via Roger of media streamen.** Ouders, zorgverleners, docenten en kinderen kunnen gerust zijn, omdat ze weten dat de hoortoestellen de hele dag door gebruikt kunnen worden.

Specifiek ontwerp voor kinderen

Toonaangevende robuustheid

Met Sky Marvel, hebben kinderen de vrijheid om te ontdekken en te spelen, zelfs als het leven een beetje nat wordt. De Marvel hoortoestellen zijn gemaakt met een robuuste behuizing die bestand is tegen water en stof (IP68-certificering).***

Kindveilige functies

Jonge luisteraars zijn beschermd dankzij de kindveilige toonbocht en de nieuwe kindveilige batterijlade, die batterijen veilig in het hoortoestel houdt en uit kleine handen en monden. Met de Sky M-PR, kan de geïntegreerde oplaadbare lithium-ion-accu niet verwijderd en ingeslikt worden.

Nieuw indicatorlampje

Sky Marvel biedt een nieuw ontworpen indicatorlampje dat intuïtief, discreet en duidelijk de status van het hoortoestel aangeeft.

² Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. *Journal of Speech, Language and Hearing Research*, vol. 61, 399-409.

* Sky M-M in vergelijking met Sky B-P + Roger 18 (design-geïntegreerde ontvanger)

** De daadwerkelijke oplaadtijd is afhankelijk van de resterende levensduur van de accu, maar is maximaal 3 uur.

*** IP68 betekent dat het hoortoestel vocht- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van onophoudelijke onderdompeling in 1 meter water gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de norm IEC 60529.

Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen. Life is on.

www.phonakpro.com