

Phonak CROS P

Productinformatie



Phonak CROS P is een oplossing voor eenzijdig gehoorverlies waarmee de gebruiker gesprekken kan volgen*, ongeacht uit welke richting deze komen**¹. CROS P wordt gedragen op het dove oor om geluid op te vangen en het draadloos door te sturen naar een Phonak Audéo™ P-hoortoestel gedragen op het oor met beter gehoor. CROS P beschikt niet over akoestische output.

Er zijn twee modellen van CROS P. Daarnaast is deze oplossing compatibel met Audéo P-13T-, Audéo P-R- en Audéo P-RT-hoortoestellen op alle prestatieniveaus. Ga voor meer informatie naar www.phonakpro.com

* 'Volgen' houdt in dat de gebruiker bewust is van het gesprek en het kan meekrijgen.

** bij gebruik van een CROS-systeem t.o.v. zonder hoortoestel

¹ Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review of CROS/BiCROS Literature.

The Hearing Review, 28(8), 22-25. Afkomstig van <https://www.hearingreview.com/inside-hearing/research/head>, bekeken op 9 augustus 2021.

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Productbeschrijving



CROS P-R



CROS P-13

Accu		Oplaadbaar:	type 13
Multifunctieknop		•	•
CROS-balans		•	•
IP-certificering		IP68 ¹	IP68 ¹
Afmetingen	L x B x D	28,0 x 11,9 x 8,0 mm (1,11 x 0,47 x 0,32 inch)	29,0 x 11,9 x 8,1 mm (1,13 x 0,47 x 0,32 inch)
	Gewicht	2,1 g	1,4 g
Oplaadtijd ²	0% tot 100%	3 uur	
	0% tot 80%	1,5 uur	
	30 min. aanpassing	10 min.	
Compatibiliteit met hoortoestel		Audéo P-R, Audéo P-RT	Audéo P-13T

Kleuren behuizing



P1

Sand Beige



HO

Beige



P3

Sandalwood



P4

Chestnut



P5

Champagne



P6

Silver Gray



P7

Graphite Gray*



P8

Velvet Black

Opties voor oorstukjes

Standaard dome (CROS-slimtube)	<ul style="list-style-type: none">• Standaard dome verkrijgbaar in drie formaten (S, M, L)• CROS-slimtube is verkrijgbaar voor links/rechts en in vier verschillende lengtes (0, 1, 2, 3)
SlimTip (CROS-slimtube)	<ul style="list-style-type: none">• Op maat gemaakt oorstukje• CROS-slimtube is verkrijgbaar voor links/rechts en in vier verschillende lengtes (0, 1, 2, 3)
CROS Tip	<ul style="list-style-type: none">• Volledig op maat gemaakt oorstukje voor CROS, verkrijgbaar met vier verschillende kabellengtes (0, 1, 2, 3)

Oplaadmogelijkheden voor Phonak CROS P-R

De CROS P-R kan samen worden opgeladen met de gekoppelde Audéo P-R of Audéo P-RT middels een Phonak Charger Case Combi of een Phonak Mini Charger Case.

Zie voor meer informatie de productinformatie van Phonak Audéo P.

¹ IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van continue onderdompeling in 1 meter zoetwater gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de norm IEC60529.

² De daadwerkelijke oplaadtijd is afhankelijk van de resterende levensduur van de accu, maar is maximaal 3 uur.

Aanpassing

	CROS P-R	CROS P-13
Phonak Target	7.1.9 of hoger	7.1.9 of hoger
Noahlink Wireless	•	•
NOAHLink		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

Draadloze Communicatie Portfolio

Bij gebruik van draadloze accessoires wordt verbinding gemaakt met het hoortoestel op het betere oor. Wanneer er een signaal van een accessoire komt, wordt het CROS-signaal onderbroken tot het signaal van de accessoire stopt. Hierna wordt het CROS-signaal weer hervat. Raadpleeg de productinformatie van de Phonak Audéo P voor een complete lijst van compatibele accessoires.

Belangrijkste eigenschappen

CROS P kan worden aangepast met een Audéo P van welk prestatieniveau dan ook. De functionaliteit waarover een cliënt beschikking heeft met een CROS-P-systeem, hangt zodoende met name af van het prestatieniveau van het Audéo P-hoortoestel. Zie de productinformatie van de Phonak Audéo P voor extra informatie.

StereoZoom

StereoZoom kan u helpen spraak in lastige, rumoerige omgevingen beter te verstaan¹. StereoZoom is beschikbaar voor hoortoestellen van prestatieniveaus Premium of Advanced.

CROS-balans

CROS-balans past de volumeverhouding aan tussen het CROS-apparaat en het hoortoestel.

AutoSense OS™ 4.0

AutoSense OS 4.0 herkent automatisch de luisteromgeving van uw cliënt in realtime. Deze herkenning is gebaseerd op verschillende functies, waarbij deze samen worden gebracht voor een naadloze luisterervaring.

¹ Stewart, E., Rakita, L. & Drexler, J. (2019). StereoZoom Part 1: The benefit of wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech intelligibility. Phonak Compendium, afkomstig van www.phonakpro.com/evidence, bekeken op August 2021

Prestaties CROS P

CROS P biedt u het programma 'Spraak in veel lawaai' met StereoZoom. Het is beschikbaar in combinatie met hoortoestellen van prestatieniveaus Premium of Advanced. Voor de prestatieniveaus Standard en Essential biedt CROS P 'Real Ear Sound'- en omnidirectionele microfoonmodi. Gebruikers van CROS P zullen op het betere oor optimaal kunnen profiteren van alle Paradise-functies.

Het prestatieniveau van het hoortoestel	Beschikbare microfoonopties voor CROS P		
	StereoZoom	Real Ear Sound	Omnidirectioneel
Premium	•	•	•
Advanced	•	•	•
Standard		•	•
Essential			•


Ga voor meer informatie naar www.phonakpro.com/cros-p

Ga voor meer informatie over Audéo P-hoortoestellen naar www.phonakpro.com/audeoparadise

life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen gelijkstaat aan je goed voelen en van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Al meer dan 70 jaar creëren we met veel passie een wereld waarin 'life is on' voor iedereen geldt. Onze innovatieve hooroplossingen zijn er voor mensen van alle leeftijden en alle gradaties gehoorverliezen om hen sociaal te verbinden en mentaal en emotioneel te laten groeien.

www.phonakpro.com

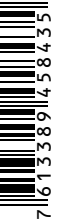

027-0622-07/N2.00/2021-09/NLG © 2021 Sonova AG All rights reserved