

Ontdek het wonder
van krachtig geluid



Phonak Naída™ Paradise

Niets klinkt als het geluid van Paradise

Phonak Naída Paradise

Phonak Naída Paradise biedt een ongeëvenaard krachtige hoorervaring.

Naída heeft een lange geschiedenis van baanbrekende innovatie, waarvan cliënten met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies kunnen profiteren. In zijn nieuwste generatie, Naída Paradise, wordt next level, krachtig geluid gecombineerd met universele connectiviteit en digitale oplossingen op maat. Het resultaat is een ongeëvenaard krachtige hoorervaring, die cliënten in staat stelt om contacten te leggen en zich emotioneel te ontwikkelen, wat cruciaal is voor het algeheel welzijn.¹



¹ Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J-P., Goy, H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. Hearing Review, 27(3):18-22. Bekeken op 1 juni 2020.

Next level, krachtig geluid

Naída P biedt meer dan vermogen om de geluidskwaliteit sterk te verbeteren voor elke persoon, waarbij bij elk aspect aandacht is besteed aan details. Met nieuwe hardware en verbeterde software reageert Naída op de gehoorbehoeften van power-gebruikers in tal van verschillende luistersituaties. Het toestel is ook ontwikkeld om het eenvoudiger te maken om nauwkeurigere aanpassingen uit te voeren.

Nieuwe hardware

- **PRISM™:** Maakt een hoogwaardige geluidskwaliteit mogelijk
- **Krachtige dubbele-receiver:** Biedt een MPO van 141 dB in Naída P-UP en 130 dB in de Naída P-PR
- **Bewegingssensor:** Ondersteunt Motion Sensor Hearing en Tap Control*

Nieuwe software



Adaptive Phonak Digital 2.0:

Het nieuwe versterking-
verwerkingsalgoritme met de voordelen
van adaptive compressie

- Meer aanpasflexibiliteit voor nauwkeurige aanpassing
- Ontwikkeld om hoorbaarheid, luidheid en geluidskwaliteit in evenwicht te brengen
- Ontwikkeld om een natuurlijke geluidservaring te bieden



AutoSense OS™ 4.0:

Perfecte combinatie van functies voor de
optimale gepersonaliseerde instelling

- **Speech Enhancer** – Ontwikkeld om de pieken van een spraaksignaal in rustige situaties te versterken.
- **Dynamic Noise Cancellation** – Werkt in combinatie met een directionele beamformer om de signaal/ruis-verhouding te verbeteren in uitdagende situaties
- **Motion Sensor Hearing*** – Stuurt de instellingen van de microfoonmodus en Dynamic Noise Cancellation naadloos aan onderweg

* Alleen Naída P-PR is uitgerust met bewegingssensortechnologie, waaronder Tap Control.

Universele connectiviteit

Phonak Naída Paradise doorbreekt technologische barrières voor power-gebruikers. Dit toestel biedt directe connectiviteit met meerdere Bluetooth®-apparaten.

In de moderne wereld is in verbinding staan met anderen belangrijker dan ooit. Phonak Naída Paradise helpt cliënten volledig verbonden te blijven tijdens hun hele dag, aangezien ze hiermee direct kunnen streamen vanaf vrijwel elk Bluetooth-apparaat.

- Verbindt met smartphone, TV en meer
- Made For All
- Handsfree telefoneren
- RogerDirect™*
- Meerdere Bluetooth-verbindingen
- Tap Control**

Universele connectiviteit voor iedereen

Naída Paradise maakt rechtstreeks verbinding met het iOS®- en Android™-apparaat of ander apparaat met Bluetooth van uw cliënten, zodat zij audio direct met uitstekende kwaliteit naar hun hoortoestellen kunnen streamen. De hoortoestellen kunnen worden gebruikt voor handsfree telefoneren, luisteren naar tv, muziek, e-books, podcasts en meer.

Naadloos overschakelen tussen apparaten

De multifunctionaliteit van Naída Paradise maken het mogelijk om tot wel acht apparaten via Bluetooth te koppelen, terwijl er twee tegelijk kunnen worden verbonden. Dit verbetert de luisterervaring omdat de cliënt eenvoudig kan overschakelen van het luisteren naar muziek naar het opnemen van de telefoon.

Bluetooth-verbinding met één tik!

Dankzij de nieuwe bewegingssensor in Naída P-PR is het nu mogelijk om de Bluetooth-functies te bedienen door tweemaal op de oorschelp te tikken. Cliënten kunnen telefoongesprekken aannemen/beëindigen, streaming pauzeren/hervatten en toegang krijgen tot stemhulp-apps via Bluetooth.

*Voor RogerDirect™ is de installatie van Roger ontvangers in het Phonak-hoortoestel vereist, middels een Roger X ontvanger of een Roger iN microfoon.

**Alleen beschikbaar in Naída P-PR 70/90.

iOS is een handelsmerk van Cisco Technology, Inc.

Android is een handelsmerk van Google LLC.

Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.; deze merken worden door Sonova AG onder licentie gebruikt.


Digitale oplossingen op maat

Met de myPhonak 5.0-app kunnen cliënten van een nog betere gepersonaliseerde hoorervaring genieten.

Phonak heeft een slimme app ontwikkeld om het volledige potentieel van Paradise te kunnen aanbieden. Voor de audicien kan digitale betrokkenheid helpen bij het opbouwen van een nog sterkere relatie met cliënten.

Remote Control met myPhonak Memory

Cliënten kunnen eenvoudig geavanceerde geluids-aanpassingen aan Naïda Paradise aanbrengen, zodat ze zijn afgestemd op de persoonlijke voorkeuren voor verschillende luistersituaties. Dankzij myPhonak Memory kan het laatstgebruikte aangepaste programma opgeslagen worden op het hoortoestel en bovendien met de drukknop geopend worden. Andere aangepaste programma's worden geopend via de app.

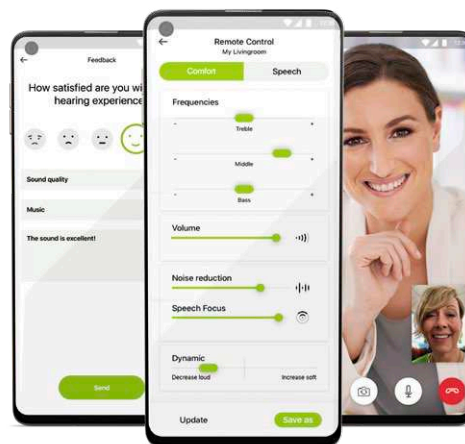

Toonaangevende Remote Support²

Remote Support is een service die veel waarde toevoegt aan uw praktijk en die u de mogelijkheid biedt om aanpassingen in real time op afstand door te voeren en de hoortoestelinstellingen van uw cliënten te optimaliseren wanneer een kliniekbezoek niet mogelijk is. U kunt geavanceerde fijnafstelling met snelle synchronisatie doorvoeren, en er zijn geen aanvullende accessoires of apps nodig.

Hearing Diary 2.0 en Client Dashboard 2.0

Door het Client Dashboard te gebruiken, kunt u het gebruik en dataloggings-informatie van de cliënt visualiseren via de myPhonak-app. Hearing Diary 2.0 biedt u ook de mogelijkheid om taken en doelen op te stellen voor uw cliënten.

² Emery, S. (2020). Market Research ID #4371. Neem contact op met marketinsight@phonak.com als u meer informatie wilt.

Roger™ technologie

Phonak Naída Paradise en Roger bieden het beste van twee werelden voor luisteren in lawaai en op afstand

Verder dan StereoZoom: oplossingen voor veraf

Met Naída Paradise kunnen cliënten profiteren van zowel StereoZoom als Dynamic Noise Cancellation voor het luisteren in situaties met veel lawaai. Er zullen echter altijd speciale omstandigheden zijn waarin cliënten nog altijd moeite zullen ondervinden. Met name als de omgeving niet alleen rumoerig is, maar u ook iemand op een afstand wilt verstaan. Een ander voorbeeld is wanneer de spreker een mondkapje draagt, waardoor visuele signalen ontbreken.³ Roger kan hierbij helpen.

Naída Paradise met Roger: een krachtig duo

Van Roger technologie is wetenschappelijk bewezen dat deze hoortoestelgebruikers* helpt om meer spraak te verstaan in lawaai en op afstand dan goedgehoordenen.⁴ RogerDirect stelt Roger microfoons in staat om rechtstreeks naar Naída-hoortoestellen te streamen. Er hoeven geen externe receivers te worden aangesloten of gedragen; er kan rechtstreeks en moeiteloos verbinding worden gemaakt. Veel cliënten kunnen dankzij de combinatie van hoortoestellen en Roger weer een sociaal actief leven leiden en goed presteren op het werk.



* Op basis van studies van mensen met matig tot ernstig gehoorverlies.

³ Taylor, D., & Seitz-Paquette, K. (2020). The masking dilemma: Helping clients communicate during Covid-19. Phonak Field Study News. Afkomstig van www.phonakpro.com/evidence. Bekeken op 19 november 2020.

⁴ Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. *American Journal of Audiology*, 23(2), 201-210

Maak kennis met Roger On™

Roger On is een externe microfoon die speciaal is ontwikkeld voor alle gesprekken waarbij sprake is van achtergrondlawaai en wanneer de spreker zich op een afstandje bevindt.

Met de nieuwste innovatie in Roger microfoons kunnen cliënten zich concentreren op wat van belang is op het werk, op school en tijdens sociale aangelegenheden.



Funcities

- MultiBeam-technologie 2.0*
- Interviewmodus 2.0
- Oriëntatie-onafhankelijk in presentatormodus
- Premium ontwerp in een draagbaar formaat
- Nieuw display
- myRogerMic app
- IP54; beschermd tegen spatwater

- **Hoorprestaties:** Met MultiBeam-technologie 2.0 maakt Roger On onderscheid tussen de richting van binnenkomende spraak, terwijl Interviewmodus 2.0 cliënten in staat stelt om zich op een specifieke spreker te richten.
- **Ontwikkeld voor veelzijdigheid:** Ongeacht of de Roger On op tafel wordt geplaatst of wordt gedragen als microfoon voor de presentator, schakelt deze over op tafel-, interview- en presentatormodus, en past deze zich aan elke omgeving aan.
- **Eenvoudig te gebruiken met de myRogerMic app:** Cliënten kunnen de microfooninstellingen aanpassen op basis van de omgeving en de situatie waarin ze zich bevinden. Ze kunnen ook de microfoonmodus handmatig wijzigen, de beam-richting aanpassen en de microfoon op afstand dempen of de demping opheffen.

*Voor MultiBeam-technologie 2.0 is RogerDirect in het hoortoestel vereist.

Onze Power
AHO-hoortoestellen
naar een hoger
niveau tillen.

Welkom bij Phonak
Naída Paradise.



Technologieën en functies van Phonak Naída

Gebaseerd op vertrouwde audiologische expertise en bewezen multifunctionaliteit.

	Naída P-PR Paradise	Naída M-SP Naída Link M Marvel	Naída P-UP Paradise
Chip geluidsprocessor		Marvel sound processor	
Connectiviteitchip met meerdere protocollen	PRISM	Sonova Wireless One Radio Digital 3.0	PRISM
Dubbele-receiver	•	•	•
Luisterspoel		•	•
Bewegingssensor	•		
Adaptive Phonak Digital	2.0	•	2.0
Adaptive Phonak Digital Contrast	2.0	•	2.0
AutoSense OS	4.0	3.0	4.0
– Binaural VoiceStream Technology™	•	•	•
– Speech Enhancer	P90		P90
– Dynamic Noise Cancellation	P90		P90
– SNR-Boost*		M90, M70, M50	
– Motion Sensor Hearing	P90, P70, P50		
BroadbandBooster		•	•
Maximumaantal bijkomende programma's	4	3	4

* Vervangen door Dynamic Noise Cancellation in Paradise

	Naída P-PR Paradise	Naída M-SP Naída Link M Marvel	Naída P-UP Paradise
RogerDirect	•	•	•
Directe verbinding met iOS- en Android-smartphones voor handsfree telefoneren	•	•	•
Directe verbinding met televisies, Apparaten met Bluetooth- functionaliteit	•	•	•
Directe Bluetooth-koppeling	met maximaal 8 apparaten	met maximaal 2 apparaten	met maximaal 8 apparaten
Directe gelijktijdige Bluetooth- verbinding met twee apparaten	•		•
TV Connector	•	•	•
Tap Control	P90, P70		
myPhonak-app	5.0 of hoger	M-SP: 3.0.4 of hoger Link M: 5.0 of hoger	5.0 of hoger
- Remote Control	2.0 of hoger	1.0 of hoger	2.0 of hoger
- myPhonak Memory	•		•
- Remote Support	met inbegrip van AudiogramDirect	met inbegrip van AudiogramDirect	met inbegrip van AudiogramDirect
- Hearing Diary	•	•	•
Client Dashboard	•	•	•
Phonak Target	7.1 of hoger	Naída M-SP: 6.2 of hoger Naída Link M: 7.1 of hoger	7.1 of hoger
Bimodale functionaliteit		Naída Link M	

Productbeschrijving




Naída P-PR
Naída P-PR Trial




Naída P-UP
Naída P-UP Trial

Batterijtype		675			
Multifunctieknop		•			
Luisterspoel		•			
Draadloze Bluetooth® 4.2-technologie		•			
Nano-coating		•			
IP-certificering		IP68 ⁵		IP68 ⁵	
Afmetingen	L x B x D	36,7 x 16,4 x 8,5 (1,44 x 0,64 x 0,33 inch)		42,6 x 18,8 x 8,6 (1,68 x 0,74 x 0,34 inch)	
	Gewicht	3,68 g/0,130 oz		4,60 g/0,162 oz	
Oplaatijd ⁶	0% tot 100%	3 uur			
	0% tot 80%	1,5 uur			
	30 min. aanpassing	10 min.			
		SlimTube 4.0	HE11 680	HE11	HE11 680
Max. uitgangsvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	129	130	141	134
Max. gain (dB)	2 cc coupler	69	68	84	78
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - > 7100	< 100 - > 5700	< 100 - > 4700	< 100 - > 4700
Stroomverbruik (mA)				3,3	2,8

Aanpasbereik

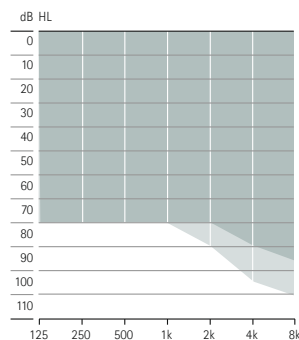

Mild tot matig-ernstig gehoorverlies,
alle audiometrische configuraties

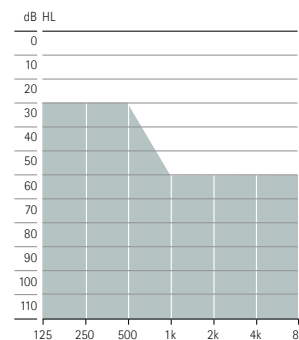

Ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies,
alle audiometrische configuraties

■ SlimTube 4.0
■ HE11 680

Kleuren behuizing



P1
Sand Beige



H0
Beige



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver Gray



P7
Graphite Gray



P8
Velvet Black

⁵ IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van onophoudelijke onderdompeling in 1 meter zoetwater gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de norm IEC60529.

⁶ De daadwerkelijke oplaadtijd is afhankelijk van de resterende levensduur van de accu, maar is maximaal 3 uur.

Prestatieniveaus

	Premium P90	Advanced P70	Standard P50	Essential P30
AutoSense OS 4.0	Premium	Advanced	Standard	Essential
Comfort in echo	•			
Spraak in de auto	•			
Spraak in veel lawaai	•			
Muziek	•	•		
Comfort in lawaai	•	•	•	
Spraak in lawaai	•	•	•	•
Rustige situatie	•	•	•	•
Media spraak + mic	•	•	•	•
Media muziek + mic	•	•	•	•
Bijkomende programma's				
Max. aantal bijkomende programma's	4	4	4	4
Comfort in echo	•			
Spraak in veel lawaai	•	•		
Spraak in 360°	•	•		
Spraak in lawaai	•	•	•	•
Rustige situatie	•	•	•	•
Comfort in lawaai	•	•	•	•
Muziek	•	•	•	•
Akoestische telefoon	•	•	•	•
Op maat gemaakt programma	•	•	•	•
Streamingprogramma's				
RogerDirect + mic	•	•	•	•
PartnerMic + mic	•	•	•	•
Telefoonoproep + mic	•	•	•	•

	Premium P90	Advanced P70	Standard P50	Essential P30
Funcities				
UltraZoom	•	•	•	•
Dynamic Noise Cancellation	•			
Speech Enhancer	•			
EchoBlock	•			
Tap Control*				
- Siri/Google Assistant	•	•		
- Streaming pauzeren/hervatten	•	•		
- Oproep aannemen/beëindigen	•	•		
StereoZoom	•	•		
WindBlock	•	•		
SoundRelax	•	•		
Motion Sensor Hearing*	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
Roger Et directioneel-instelling	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
RogerDirect	•	•	•	•
Luidheidsvoorkeurregeling	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
Acoustically Optimized Venting	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
auto Acclimatization	•	•	•	•
Streaming/Mic. balans	•	•	•	•
Kanalen voor fijnafstelling	20	20	16	12

* Alleen beschikbaar voor Phonak Naída P-PR

Aanpassing

	Naída P-PR Naída P-PR Trial P90/P70/P50/P30	Naída P-UP Naída P-UP Trial P90/P70/P50/P30
Phonak Target	7.1 of hoger	7.1 of hoger
Noahlink Wireless	•	•
NOAHLINK		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

Draadloze Communicatie Portfolio

	Naída P-PR Naída P-PR Trial P90/P70/P50/P30	Naída P-UP Naída P-UP Trial P90/P70/P50/P30
Draadloos accessoire		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic™	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
Roger		
Roger microfoons	•	•
Apps		
myPhonak	•	•

Akoestische opties



Naída P-PR
Naída P-PR Trial

Naída P-UP
Naída P-UP Trial

Geluidsuitgang				
	Oorhaak	Gedempt (HE11 680) of ongedempt (HE11), transparant	•	•
	SlimTube 4.0	Beschikbaar in links en rechts in vijf verschillende lengtes (00,0,1,2,3)	•	
Oorstukje voor SlimTube				
Eartip	Cap dome		•	
	Open eartip	Beschikbaar in drie formaten (S, M, L)	•	
	Vented dome	Beschikbaar in drie formaten (S, M, L)	•	
	Power eartip	Beschikbaar in drie formaten (S, M, L)	•	
SlimTip	Acryl		•	
	Siliconen		•	
Oorstukje voor oorhaak				
	Oorstukje		•	•

Phonak Naída P Trial™

De Phonak Naída P Trial-hoortoestellen kunnen snel worden ingesteld op het vereiste prestatieniveau dat aansluit bij uw aanbevelingen. Dit biedt de mogelijkheid om uw cliënt al bij het eerste gesprek te voorzien van een optimale hooroplossing of een vervanger te bieden als het hoortoestel van de cliënt gerepareerd wordt. De Naída P Trial-hoortoestellen bevatten ook een vooraf geïnstalleerde Roger (O2) ontvanger voor eenvoudige demonstratie van elke Roger microfoon.

Handige oplaadbare technologie

Naída P-PR heeft alle Paradise-functies waar u dol op bent, inclusief de mogelijkheid om deze op te laden. Cliënten kunnen de hele dag genieten van hun gehoor, zelfs als ze streamen*.

Phonak Charger BTE RIC: Bevat een ruimte voor grote oorstukjes, een oplaadopening voor USB-C en een indicatorlampje.



* De verwachte accuduur is 16 uur bij 4 uur streamen via BT classic en 4 uur streamen via de TV Connector.

Phonak Goed horen is je goed voelen™

Goed horen gaat verder dan het vermogen om geluiden eenvoudig duidelijk te horen. Het is gekoppeld aan een grotere staat van sociaal-emotioneel, cognitief en fysiek welzijn. Dit grotere plaatje, met maatregelen om gehoorverlies te behandelen als een katalysator voor welzijn, is wat we noemen **'Goed horen is je goed voelen'**.



Sociaal-emotioneel welzijn

Goed horen bevordert betrokkenheid, sterkere verbindingen en een positiever vooruitzicht.



Cognitief welzijn

Goed horen ondersteunt cognitieve fitheid.⁷



Fysiek welzijn

Goed horen stelt mensen in staat om een actievere en gezondere levensstijl aan te nemen.



Neem de volgende stap om uw cliënten te helpen zich sociaal te ontplooiën, zich mentaal te ontwikkelen en emotioneel te groeien met Phonak Paradise.

Ga naar phonakpro.com/well-hearing om 'Goed horen is je goed voelen' te implementeren in uw dagelijkse werkzaamheden.

De inhoud van deze pagina is, tenzij anders vermeld, gebaseerd op:

Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S. E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J.-P., Goy, H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. *Hearing Review*, 27(3):18-22. Bekeken op 1 juni 2020.

⁷ Karawani, H., Jenkins, K., & Anderson, S. (2018). Restoration of sensory input may improve cognitive and neural function. *Neuropsychologia*, 114, 203–213. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2018.04.041>

life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen gelijkstaat aan je goed voelen en van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Al meer dan 70 jaar creëren we met veel passie een wereld waarin 'life is on' voor iedereen geldt. Onze innovatieve hooroplossingen zijn er voor mensen van alle leeftijden en alle gradaties gehoorverliezen om hen sociaal te verbinden en mentaal en emotioneel te laten groeien.

www.phonakpro.com



027-0623-07/V1.00/2020-11/ING © 2020 Sonova AG - All rights reserved.

