

# Phonak Audéo™ 1.

## Produktinformasjon

Infinio Ultra er neste generasjon Receiver-In-Canal (RIC)-portefølje, utviklet for lett til svært stort hørselstap. Med Infinio Ultra flytter vi nok en gang grensene for hva KI kan oppnå i høreapparater – med nye fremskritt innen taleoppfattelse og lyd kvalitet.



# Produktbeskrivelse



Audéo I-Sphere  
Audéo I-Sphere Trial  
I90/I70



Audéo I-R  
Audéo I-R Trial  
I90/I70/I50/I30

		Audéo I-Sphere Audéo I-Sphere Trial I90/I70	Audéo I-R Audéo I-R Trial I90/I70/I50/I30
Batteri		innebygd, oppladbart	innebygd, oppladbart
Flerfunksjonsknapp		•	•
Bluetooth®		•	•
Vannavstøtende belegg		•	•
IP-rangering		IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>
Mål	L x B x D	31,9 x 14,0 x 9,5 mm	28,8 x 12,4 x 8,7 mm
	Vekt	3,0 g	2,4 g
Ladetid <sup>2</sup>	0 % til 100 %	3,5 t	3 t
	0 til 70 %	2 t	2 t
	0 til 40 %	1 t	1 t
	30 min. tilpasning	15 min	15 min
<b>S Receiver 6.0</b>			
Maks. utgangseffekt (dB SPL)	2 cc coupler	112	112
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	47	47
Frekvensområde (Hz)		<100-10 000	<100-10 000
<b>M Receiver 6.0</b>			
Maks. utgangseffekt (dB SPL)	2 cc coupler	114	114
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	51	51
Frekvensområde (Hz)		<100-10 000	<100-10 000
<b>MAV Receiver 6.0</b>			
Maks. utgangseffekt (dB SPL)	2 cc coupler	119	119
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	50	50
Frekvensområde (Hz)		<100-9000	<100-9000
<b>P Receiver 6.0</b>			
Maks. utgangseffekt (dB SPL)	2 cc coupler	122	122
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	59	59
Frekvensområde (Hz)		<100-7500	<100-7500
<b>UP Receiver 6.0</b>			
Maks. utgangseffekt (dB SPL)	2 cc coupler	132	132
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	71	71
Frekvensområde (Hz)		<100-8000	<100-8000

## Kassefarger



**P1**  
Sand  
Beige



**P3**  
Sandalwood



**P4**  
Chestnut



**P5**  
Champagne



**P6**  
Silver  
Gray



**P7**  
Graphite  
Gray



**P8**  
Velvet  
Black

<sup>1</sup> IP68 indikerer at høreapparatet er vannavstøtende og støvtett. Det tålte å være nedsenket i ferskvann på 1 meters dybde i 60 minutter og ligge 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

<sup>2</sup> Faktisk ladetid avhenger av gjenværende batterilevetid.

Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse varemerkene av Sonova AG er lisensiert.

# Funksjonsnivåer

	Audéo I-Sphere		Audéo I-R			
	Premium	Advanced	Premium	Advanced	Standard	Essential
<b>AutoSense OS™ 7.0</b>						
Sfærisk tale i høy støy	•	•				
Tale i høy støy			•			
Musikk	•	•	•	•		
Tale i bil	•	•	•	•	•	
Komfort i støy	•	•	•	•	•	
Tale i støy	•	•	•	•	•	•
Stille situasjoner	•	•	•	•	•	•
Media tale + M	•	•	•	•	•	•
Media musikk + M	•	•	•	•	•	•
<b>Tilleggsprogrammer</b>						
Maks. tilleggsprogrammer	4	4	4	4	4	4
Sfærisk tale i høy støy	•	•				
Tale i høy støy	•	•	•	•		
Tale i 360°	•	•	•	•		
Tale i bil	•	•	•	•	•	
Tale i støy	•	•	•	•	•	•
Stille situasjoner	•	•	•	•	•	•
Komfort i støy	•	•	•	•	•	•
Musikk	•	•	•	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•	•	•	•
Tilpasset program	•	•	•	•	•	•
<b>Streamingprogrammer</b>						
RogerDirect + mikrofon	•	•	•	•	•	•
PartnerMic + mikrofon	•	•	•	•	•	•
Telefonsamtale + mikrofon	•	•	•	•	•	•
<b>Funksjoner</b>						
Spheric Speech Clarity 2.0	•	•				
Speech Enhancer	•		•			
SpeechSensor	•	•	•			
StereoZoom 2.0	•	•	•	•		
Dynamic Noise Cancellation	•	•	•	•		
Motion Sensor Hearing	•	•	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	•	•	•
ActiveVent™	•	•	•	•	•	•
Deaktiver hands-free samtaler <sup>1</sup>	•	•	•	•	•	•
Tap Control						
– Siri/Google Assistant	•	•	•	•		
– Pause/gjenoppta streaming	•	•	•	•		
– Ta imot /avslutte telefonanrop	•	•	•	•		
SoundRelax	•	•	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•	•	•
Helsefunksjoner <sup>2</sup>	•	•	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•	•	•
Brukerbasert fininnstilling	•	•	•	•	•	•
Tinnitusbalanse	•	•	•	•	•	•
Auto Acclimatization	•	•	•	•	•	•
Environmental Balance	•	•	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•	•	•
Fininnstillingskanal	20	20	20	20	16	12

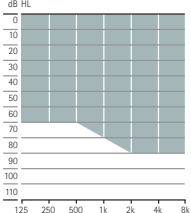
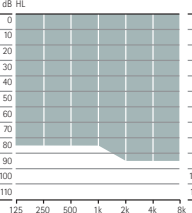
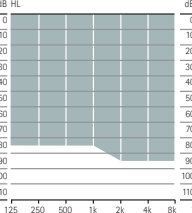
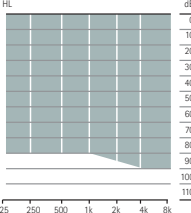
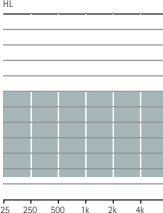
# CROS-kompatibilitet

	Audéo I-Sphere Audéo I-Sphere Trial	Audéo I-R Audéo I-R Trial
Phonak CROS I-R og Phonak CROS I-R Trial		•

## Tilpasning

	Audéo I-Sphere Audéo I-Sphere Trial	Audéo I-R Audéo I-R Trial
Phonak Target	11.1 eller høyere	11.1 eller høyere
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•

## Akustisk sammenkobling

Lengde	S Receiver	M Receiver	MAV Receiver	P Receiver	UP Receiver
Tilgjengelig i fem ulike lengder (00, 0, 1, 2, 3), L og R	•	•	• <sup>1</sup>	•	• <sup>1</sup>
<b>Dome</b>					
EasyGuard™ Tilgjengelig i tre ulike størrelser (S, M, L)	•	•		•	
Ventilert					
Cap dome	•	•		•	
Open dome Finnes i tre størrelser (S, M, L)	•	•		•	
Vented dome Finnes i tre størrelser (S, M, L)	•	•		•	
Power dome Finnes i tre størrelser (S, M, L)	•	•		•	
<b>SlimTip</b>					
Akryl	•	•		•	
Silikon	•	•		•	
Titanium AV			• <sup>1</sup>		
Universal AV Finnes i fire fasonger (A, B, C, D)			• <sup>1</sup>		
<b>cShell</b>					
Akryl	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>		• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>
Titan	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>		• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>
<b>Tilpasningsområder</b>					
	Lett til moderat-stort hørselstap	Lett til stort hørselstap	Lett til stort hørselstap	Lett til stort hørselstap	Moderat til svært stort hørselstap.

<sup>1</sup> Lengdealternativ 00 ikke tilgjengelig

# Ladealternativer for Phonak Audéo I



Phonak Charger RIC I



Phonak ChargerGo RIC I



Phonak ChargerGo RIC Sphere I

Kompatibel med Audéo I-R og Audéo I-R Trial	•	•	
Kompatibel med Audéo I-Sphere og Audéo I-Sphere Trial			•
Lader med integrert batteri		•	•

## Phonak Audéo I trådløs teknologi

Direktesamtaler / streaming av lyd

Bluetooth® Classic Audio

## Trådløst kommunikasjonsportefølje

	Audéo I-Sphere Audéo I-Sphere Trial 190/170	Audéo I-R Audéo I-R Trial 190/170/150/130
<b>Trådløst tilbehør</b>		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
<b>Roger</b>		
Roger-portefølje	•	•
<b>Apper</b>		
myPhonak	•	•
myPhonak Junior	•	•

Du finner mer informasjon på [www.phonak.com/audeo-infinio](http://www.phonak.com/audeo-infinio)

Du finner informasjon om Roger-mikrofoner på [www.phonak.com/no-no/hoereapparater/mikrofoner](http://www.phonak.com/no-no/hoereapparater/mikrofoner)

Du finner mer informasjon om myPhonak og myPhonak Junior på [www.phonak.com/no-no/hoereapparater/apper](http://www.phonak.com/no-no/hoereapparater/apper)



# life is on

Siden 1947 har Phonak jobbet for å skape en verden hvor "life is on" for alle. Allerede da selskapet ble grunnlagt, var vi drevet av en urokkelig overbevisning: Vi mener at god hørsel er ensbetydende med velvære og dermed avgjørende for å leve livet fullt ut. Hørsel er faktisk direkte knyttet til sosialt, følelsesmessig, kognitivt og fysisk velvære. Både nå og i fremtiden jobber vi for å tilby den bredeste porteføljen av innovative hørselsløsninger. Og sammen med audiografene våre fortsetter vi å fokusere på det som betyr mest: å forbedre taleoppfattelsen, forandre folks liv og ha en positiv innvirkning på samfunnet som helhet.

[phonak.com](https://phonak.com)



027-0712-10(V2.00)2025-03/INLG © 2024 - 2025 Sonova AG All rights reserved