

Phonak Naída™ L ●

Produktinformasjon

Phonak Naída Lumity er den omfattende BTE-porteføljen for lett til svært stort hørselstap.

Høreapparatene Naída L med Phonak SmartSpeech™ Technology er et naturlig valg for brukere som trenger kraftige løsninger på vår mest avanserte plattform, Phonak Lumity.



Produktbeskrivelse



Naída L-UP
Naída L-UP Trial
L90/L70/L50/L30



Naída L-SP
Naída L-SP Trial
L90/L70/L50/L30




Naída L-PR
Naída L-PR Trial
L90/L70/L50/L30

Batteristørrelse		675	13	innebygd, oppladbart
Telespole		•	•	
Kompatibilitet med CROS L				•
Bluetooth®		•	•	•
Vannavstøtende belegg		•	•	•
IP-rangering		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Mål	L x B x D	42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34")	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33")	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33")
	Vekt	4,60 g	4,40 g	3,68 g
Ladetids ²	0 % til 100 %			3 t
	0 % til 80 %			1,5 t
	30 min tilpasning			10 min


		HE11	HE11 680	HE11	HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680	SlimTube 4.0
Maks. utgangseffekt (dB SPL)	2 cc coupler	141	134	139	133	135	130	129
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	84	78	81	75	70	68	69
Frekvensområde (Hz)		< 100 – > 4700	< 100 – > 4700	< 100 – > 4900	< 100 – > 5700	< 100 – > 7100	< 100 – > 5700	< 100 – > 7100

Tilpasningsområde


■ SlimTube 4.0
■ HE11 680

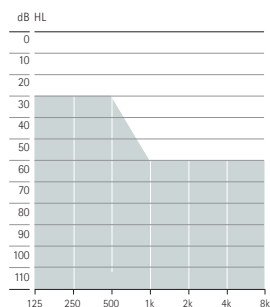

Stort til svært stort hørselstap

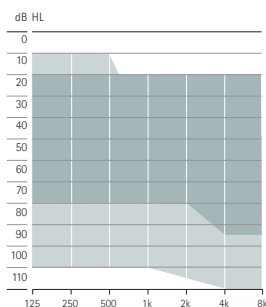

Lett til stort hørselstap

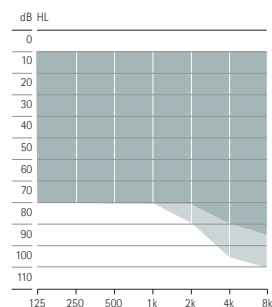

Lett til moderat til stort hørselstap

Kassefarger



H0
Beige



P1
Sand Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver Gray



P7
Graphite Gray



P8
Velvet Black

¹ IP68 indikerer at høreapparatet er vannavstøtende og støvtett. Det tålte å være nedsenket i ferskvann på 1 meters dybde i 60 minutter og ligge 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

² Faktisk ladetid avhenger av gjennværende batterilevetid og kan påvirkes av temperaturforholdene.

Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse varemerkene av Sonova AG er lisensiert.

Funksjonsnivåer

AutoSense OS™ 5.0	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
Tale i høy støy	•			
Tale i bil	•			
Komfort i ekko	•			
Musikk	•	•		
Komfort i støy	•	•	•	
Tale i støy	•	•	•	•
Stille situasjoner	•	•	•	•
Media tale + M	•	•	•	•
Media musikk + M	•	•	•	•
Tilleggsprogrammer				
Maks. tilleggsprogrammer	4	4	4	4
Komfort i ekko	•			
Tale i høy støy	•	•		
Tale i 360°	•	•		
Tale i støy	•	•	•	•
Stille situasjoner	•	•	•	•
Komfort i støy	•	•	•	•
Musikk	•	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•	•
Tilpasset program	•	•	•	•
Telefon via telespole ± M ¹	•	•	•	•
Offentlig telespole ± M ¹	•	•	•	•
Streamingprogrammer				
RogerDirect + mikrofon	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + M	•	•	•	•
Telefonsamtale + M	•	•	•	•

Funksjoner	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
SpeechSensor	•			
Speech Enhancer	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Dynamic Noise Cancellation	•	•		
Motion Sensor Hearing ²	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Tap control ²				
- Siri/Google Assistant	•	•		
- Sett streaming på pause / gjenoppta streaming	•	•		
- Ta imot / avslutte telefonsamtale	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
UltraZoom	•	•	•	•
Roger™ og Directional-streaming	•	•	•	•
Bredbåndsförsterkning ³	•	•	•	•
Helsefunksjoner ^{2,4}	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Brukerbasert fininnstilling	•	•	•	•
Tinnituskontroll ⁵	•	•	•	•
Auto Acclimatization	•	•	•	•
Environmental balance	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Fininnstillingskanal	20	20	16	12

1 Ikke tilgjengelig for Phonak Naída L-PR

2 Kun tilgjengelig for Phonak Naída L-PR

3 Kun tilgjengelig for Phonak Naída L-UP

4 Tilgjengelig i kombinasjon med myPhonak

5 Ikke tilgjengelig for Phonak Naída L-UP

Tilpasning

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-SP Naída L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.0 eller nyere	9.1 eller nyere	9.0 eller nyere
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•	•	•
NOAHLINK	•	•	
HI-PRO, HI-PRO2	•	•	

Akustisk sammenkobling

			Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-SP Naída L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Lyduttak	Hook	Dempet (HE11 680), transparent	•	•	•
	Hook	Udempet (HE11), transparent	•	•	
	SlimTube 4.0	Fås i venstre- og høyreutgave i fem forskjellige lengder (00,0,1,2,3)		•	•
Ørepropp for SlimTube	Dome	Cap dome		•	•
		Open dome Fås i tre størrelser (S, M, L)		•	•
		Vented dome Fås i tre størrelser (S, M, L)		•	•
		Power dome Fås i tre størrelser (S, M, L)		•	•
	SlimTip	Akryl		•	•
		Silikon		•	•
Ørepropp for hook	Ørepropp		•	•	•

Phonak Naída L Trial

Phonak Naída L Trial-høreapparatene kan raskt settes til det funksjonsnivået som passer din anbefaling. Det gir deg mulighet til å tilpasse den optimale hørselsløsningen til brukeren allerede ved første konsultasjon, eller til å erstatte høreapparatet når det er inne til reparasjon. Naída L Trial-apparatene omfatter også en forhåndsinstallert Roger-mottaker for enkel demonstrasjon og prøveversjon av en Roger-mikrofon.

Lademuligheter for Phonak Naída L-PR

Phonak Charger Combi BTE / Phonak Charger Combi BTE 2

Naída L-PR har alle Lumity-funksjonene du setter pris på, i tillegg til fordelene med oppladbarhet. Brukere kan få en hel dag med hørsel, inkludert streaming*.

* Forventet batterilevetid på 16 timer, inkludert 4 timer klassisk BT-streaming og 4 timer TV Connector-streaming.



Phonak Naída L Bluetooth®-versjoner

Direktesamtaler / streaming av lyd

Trådløs Bluetooth 4.2-teknologi og de fleste eldre Bluetooth-telefoner

Trådløs kommunikasjonsportefølje

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-SP Naída L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Trådløst tilbehør			
TV Connector	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•
Roger			
Roger-mikrofoner	•	•	•
Apper			
myPhonak	•	•	•
myPhonak Junior	•	•	•

Du finner mer informasjon på www.phonak.com/naida-lumity

Du finner mer informasjon om Roger-mikrofonene på www.phonak.com/roger

Du finner mer informasjon om myPhonak og myPhonak Junior på www.phonak.com/apps

life is on

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å ha det godt og kunne leve livet fullt ut. Siden 1947 har vi jobbet for å skape en verden hvor "Life is on" for alle. Våre innovative hørselsløsninger er designet for mennesker i alle aldre og for alle grader av hørselstap, slik at alle kan bygge sosiale relasjoner, trives mentalt og oppleve velvære.

www.phonak.no



7 16 13 38 9 17 02 23 1

027-0699-10(V3.00)/2024-02/NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved